



REAL® 9000 PLUS



INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD REAL 9000 PLUS/ELECTRIC/ADULT/CHILD/ MINI/COXIT


Art.nr. 805216
Laatste
wijziging 06-09-19
Geldig vanaf 01-06-07

REAL 9000 PLUS is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het heeft de CE-markering in overeenstemming met de statutencode van de Zweedse Medical Products Agency voor medische hulpmiddelen LVFS 2003:11 en het is getest en goedgekeurd in overeenstemming met EN 1335, IEC 60601 en EN 12182. Alle in de stoel gebruikte textiel is getest en goedgekeurd volgens zowel EN 1021-1 als EN 1021-2. Mercado Medica AB is gecertificeerd conform ISO 9001 en 14001 en voldoet aan de geldende arbeids- en milieuwetgeving.


Als u vragen heeft over uw product of als er iets onverwachts gebeurt, neem dan eerst contact op met degene die het product heeft voorgeschreven. In andere gevallen kunt u gerust contact opnemen met Mercado Medic AB.

Op onze website www.mercado.se vindt u pdf-versies van onze bedienings- en onderhoudsinstructies, waarin u kunt inzoomen. Op de website wordt ook informatie verstrekt over accessoires die kunnen worden gemonteerd op de stoelen van Mercado Medic, samen met eventuele veiligheidskennisgevingen, het voorschrijven van ondersteuning of terugroepingen van producten en accessoires.


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding en de inhoud ervan.

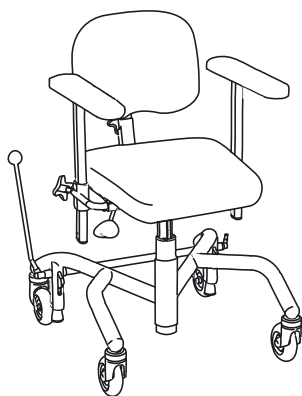


☐ REAL PLUS

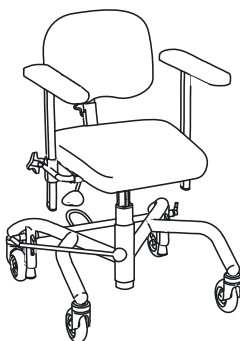


☐ REAL PLUS CHILD/MINI

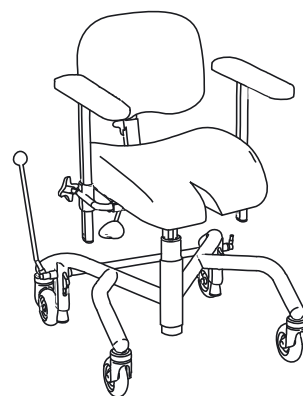


☐ REAL PLUS COXIT

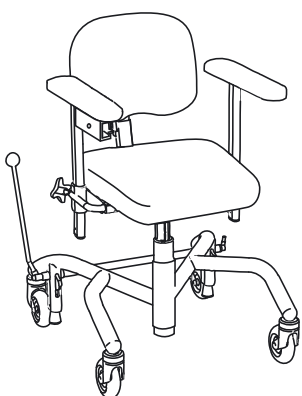

☐ REAL PLUS ELECTRIC

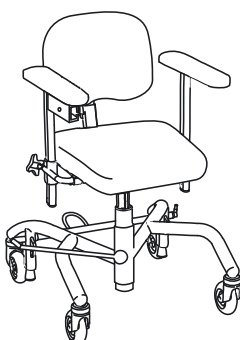

☐ REAL PLUS CHILD/
MINI ELECTRIC

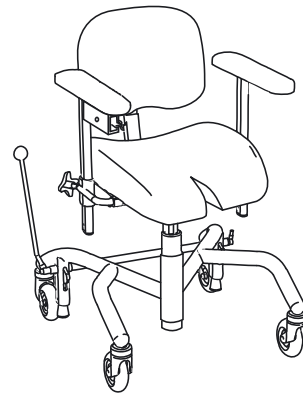

☐ REAL PLUS COXIT
ELECTRIC

Lees deze gebruiks- en onderhoudsinstructies zorgvuldig door voordat u de stoel gebruikt. Zo verkrijgt u voldoende bekwaamheid om dit product veilig te gebruiken.

INHOUD

BELANGRIJKE INFORMATIE EN KLASSE	PAGINA 2
INSTRUCTIES VOOR Vernietiging	PAGINA 2
VERTROUWD RAKEN MET UW REAL 9000 PLUS	PAGINA 2
INDIVIDUELE AANPASSING	PAGINA 3
GEbruikersHANDLEIDING	PAGINA 4
REINIGING, ONDERHOUD EN OPLADEN	PAGINA 6
RECONDITIONERING	PAGINA 7

BELANGRIJKE INFORMATIE EN KLASSE

De REAL-stoel heeft vervangbare onderdelen, accessoires en functies met opties voor persoonlijke aanpassing. De stoel mag alleen worden gebruikt door de persoon voor wie de stoel is voorgeschreven en voor het doel waarvoor deze is bestemd. De stoel is bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan water, andere vloeistoffen of chemicaliën. Noch mag deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen, langdurig en intens zonlicht of andere vormen van straling. De stoel mag alleen worden uitgerust met accessoires of onderdelen die zijn goedgekeurd door Mercado Medic AB. Wijzigingen of aanpassingen mogen alleen worden uitgevoerd met de goedkeuring van Mercado Medic AB, zodat de CE-markering behouden blijft. Reparaties en andere technische maatregelen mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat is gemachtigd door Mercado Medic AB. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de stoel voor de eerste keer gebruikt.

- REAL PLUS ELECTRIC voldoet aan de beschermingsklasse II, interne batterij.
- REAL PLUS ELECTRIC voldoet aan het beschermingstype B.
- REAL PLUS ELECTRIC is EMC getest volgens EN 60601-1-1 en EN 60601-1-2 en moet daarom worden gehanteerd in overeenstemming met onze gebruiks- en onderhoudsinstructies.
- De EMC-bijlage is te downloaden via mercado.se/dokument
- REAL PLUS ELECTRIC kan worden beïnvloed door interferentie van mobiele telefoons of andere RF-communicatieapparatuur.
- Maximaal gewicht van gebruiker: REAL PLUS 140 kg. REAL PLUS ELECTRIC 150 kg.
- De stoel moet in de daarvoor bedoelde kartonnen doos op een pallet worden vervoerd. De stoel moet binnenshuis worden bewaard bij een temperatuur van ten minste + 10 °C.
- Alleen elektrische apparatuur van Mercado Medic AB mag worden gebruikt op de REAL PLUS ELECTRIC.
- OPMERKING! De elektrische functies op REAL PLUS ELECTRIC-stoelen kunnen max. 10% van de tijd worden gebruikt (max. 6 min/u). Overschrijding van deze grenswaarde kan leiden tot beschadiging van de stoel.
- Als REAL PLUS ELECTRIC is voorzien van beensteunen, moeten de voeten van de gebruiker op de voetplaat blijven bij het gebruik van de elektrische functies.
- Waarschuwingssymbolen die op de stoel kunnen voorkomen: Risico op bekneld raken (1), heet oppervlak (2)



①



②

INSTRUCTIES VOOR Vernietiging

Brandbaar:

- Zitting
- Rugsteun
- Armleuning
- Hoofdsteun
- Andere gevoerde onderdelen verkocht door Mercado Medic AB

Elektronisch afval:

- Motoren
- Kabels
- Besturingssysteem

Metaal:

- Basis
- Elektrisch hefmechanisme
- Gaszuigers
- Gasveren
- Stoelframe
- Rugsteun
- U-stangen en armleuningmechanisme
- Andere metalen onderdelen in producten verkocht door Mercado Medic AB

OPMERKING! De batterij moet apart worden gesorteerd.

CONTROLEPUNTEN VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

1. Stel de armleuningen in op een geschikte hoogte en vergrendel de knop voor hoogteverstelling.
2. Monteer de rugstang in de beoogde beugel en vergrendel de knop voor hoogteverstelling van de rugleuning.
3. Monteer de remhendel in de beoogde beugel (linker-of rechterzijde). Niet van toepassing op elektrische remmen.
4. Alle wielen en knoppen moeten worden aangedraaid voordat iemand in de stoel plaatsneemt.
5. De rem op de stoel moet altijd worden ingedrukt bij het in- en uit de stoel stappen.
6. Laad de stoel op volgens de bijgevoegde instructies voordat u deze voor de eerste keer gebruikt (geldt voor elektrische stoelen).

RICHTLIJNEN VOOR INDIVIDUELE AANPASSING VAN DE PRODUCTEN VAN MERCADO MEDIC AB

Aanpassingen mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat de training van Mercado Medic AB over onderhoud en reconditionering heeft gevolgd. Onderdelen op de lijst met huidige combinatieovereenkomsten op www.mercado.se/mercado-dokument kunnen worden gemonteerd met behoud van de CE-markering van Mercado Medic AB. Voordat een onderdeel te monteren dat niet op de lijst met huidige combinatieovereenkomsten staat, moet het bevoegde personeel van de klant contact opnemen met Mercado Medic AB voor schriftelijke goedkeuring.

De te beoordelen onderdelen moeten fysiek naar Mercado Medic AB worden gestuurd, hetzij door de klant of door de leverancier van het betreffende onderdeel. Mercado Medic AB zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van het betreffende onderdeel; als een combinatieovereenkomst wordt geacht van belang te zijn, voert Mercado Medic AB een risicoanalyse van het onderdeel uit. Wanneer de risicobeoordeling is voltooid, ontvangt de klant een schriftelijk advies.

Stoelen die zijn gewijzigd zoals hieronder beschreven, moeten door Mercado Medic AB worden geverifieerd om de productaansprakelijkheid van Mercado Medic AB te behouden.

- Gevoerde onderdelen zoals stoelen, rugleuningen, armleuningen, zijsteunen, rompsteunen en hoofdsteunen kunnen worden aangepast zolang u de bestaande buitenafmetingen van het product niet overschrijdt.
- Het zwaartepunt boven de hefinrichtingen moet worden gehandhaafd/gecentreerd voor optimale werking.
- Gevoerde onderdelen moeten bestand zijn tegen de toepasselijke ontvlambaarheidseisen en andere milieu-eisen.
- Oppervlakken die zijn belast met aanzienlijke verticale krachten mogen niet buiten het gebied (de basis) vallen dat wordt gevormd door de punten van de wielkernen.

Als aan deze richtlijnen wordt voldaan, behoudt Mercado Medic AB de productaansprakelijkheid voor het product.

Producten die speciaal zijn aangepast door gezondheidszorgdiensten buiten de richtlijn van Mercado Medic AB om, waarbij de gezondheidszorgdiensten ook de productaansprakelijkheid overnemen, kunnen naar hun oorspronkelijke staat worden hersteld. Dit moet worden uitgevoerd door een bevoegde technicus die is goedgekeurd door Mercado Medic AB. Mercado Medic AB neemt vervolgens de productaansprakelijkheid terug volgens CE-markering 93/42 EEG, richtlijn betreffende medische hulpmiddelen.

Als u vragen hebt over aanpassingen/speciale aanpassingen, neem dan contact op met Ronny Fogelqvist:

Tel. +46 (0)708 27 96 14

E-mail ronny.fogelqvist@mercado.se

REM


OPMERKING! De rem op de stoel moet altijd worden ingedrukt bij het in- en uit de stoel stappen. De rem moet regelmatig worden gecontroleerd. In geval van slijtage, vervangt u het remrubber. De remfunctie kan verminderd zijn op ongelijke oppervlakken.

ER ZIJN DRIE SOORTEN REMMEN:


Remhendel, voetrem en elektrische rem.

BESTURINGSELEMENTEN

1. Rem, PLUS basis 48 Beweeg hendel naar voren.
2. Rem, PLUS basis 43 Beweeg hendel naar achteren, druk pedaal in.
3. Elektrische rem, druk op de knop.
4. Elektrische rem, druk op de knop.
5. Handrem op transportbasis, rem volledig en druk op de rode hendel. Om los te laten, duwt u de hendel omhoog totdat de hendel vrijkomt.
6. Remhendelbeugel: om te remmen, zelfs wanneer de armleuning in de breedte is verlengd. Draai de schroef van de beugel van de remhendel los met een inbussleutel van 6 mm, trek de beugel uit, bevestig de schroef in het volgende gat en draai de schroef goed aan met de inbussleutel.

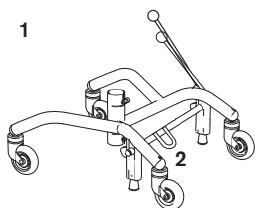


Handrem en voetrem

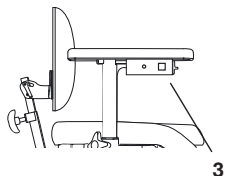


Elektrische rem (optie)



Elektrische rembediening in aparte doos (optie)

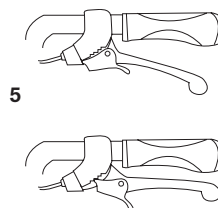

Handrem

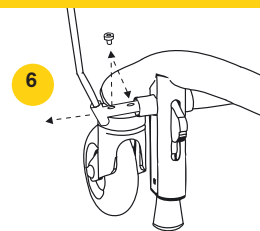

Beugel voor remhendel


ZITHOOGTE-/HEFMECHANISMEN

ER ZIJN TWEE TYPEN HEFMECHANISMEN:


Gasveer en elektrisch. Er zijn standaard en lage zithoogten. Bedieningselementen voor de gasveer kunnen onder de stoel of armleuning worden geplaatst. De elektrische bediening is standaard onder de armleuning gemonteerd. **OPMERKING!** Lichte mensen kunnen hulp nodig hebben bij het verhogen en verlagen van zittingen die worden bestuurd door een gasveer.

BESTURINGSELEMENTEN


1. Zithoogte. Gasveer – Beweeg hendel omhoog.
2. Zithoogte. Elektrisch – Beweeg de schakelaar omhoog/omlaag.
3. Zithoogte. Elektrisch – besturingselementen in aparte doos. Linker knop = omhoog. Rechter knop = omlaag.

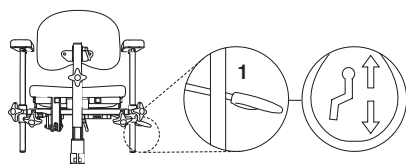


Gasveerhendel onder de zitting

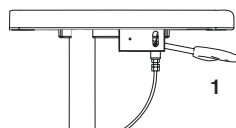

Gasveerhendel onder de armsteun (optie)

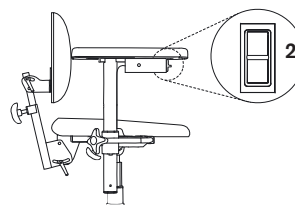

Elektrische bediening

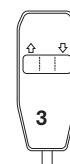

Elektrische bedieningselementen in afzonderlijke doos/joystick/afstandsbediening zijn beschikbaar als opties. De afbeelding toont de optie in een aparte doos.


ZITTING KANTELEN (OPTIE)

ER ZIJN DRIE TYPEN ZITTINGKANTELING:


Krukas, gasveer en elektrisch. De bedieningselementen voor de gasveer kunnen dicht bij de linker achterrand van de zitting of onder de armsteun worden geplaatst. De elektrische bediening is standaard onder de armleuning gemonteerd. Het kantelingsbereik van de standaard stoel is + 15°/-8°.

BESTURINGSELEMENTEN


1. Kanteling van de zitting. Bediening met krukas – draai de knop.
2. Kanteling van de zitting. Gasveer – beweeg hendel naar achteren.
3. Kanteling van de zitting. Gasveer – Beweeg hendel omhoog.
4. Kanteling van de zitting. Elektrisch – Beweeg de schakelaar omhoog/omlaag.
5. Kanteling van de zitting. Elektrisch – besturingselementen in aparte doos. Linker knop = vooruit. Rechter knop = achteruit.

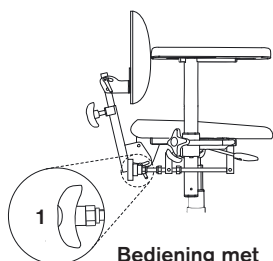


Bediening met krukas

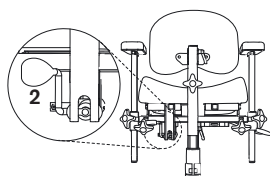


Gasveerhendel onder de zitting

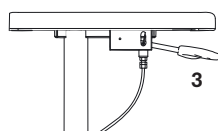

Gasveerhendel onder de armsteun

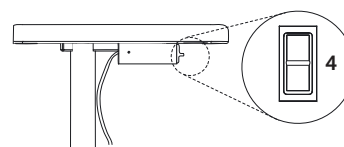


Elektrische bediening

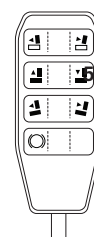

Elektrische bediening in aparte doos

ZITTINGSKANTELING ACHTERUIT OF KANTELING VAN HELE STOEL ACHTERUIT (OPTIE)

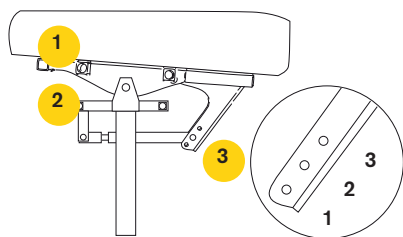

BESTURINGSELEMENTEN

1. Als de armleuning hier wordt geplaatst, volgt deze de kanteling van de stoel.
2. Als de armleuning hier wordt geplaatst, volgt deze de kanteling van de stoel niet.
3. Er zijn 3 standen. **Bij gebruik van stand 3 moet de stoel zijn uitgerust met een basisverlengstuk.**
 1. Vooruit 15°, achteruit 8° - standaardzittingkanteling
 2. Vooruit 8°, achteruit 15° - omgekeerde zittingkanteling
 3. Vooruit 0°, achteruit 23° - hele zitting kantelt achteruit

RUGMECHANISME


ER ZIJN VIER TYPEN RUGMECHANISMEN:

Standard, Medic, Comfort en Electric. Deze zijn allemaal beschikbaar in een laag en hoog ontwerp (stoelen in de illustratie hebben allemaal een lage rug). Alle rugmechanismen hebben aparte bedieningselementen voor hoogte, diepte en hoek. Het model Medic heeft een aanpassing voor grotere diepte.


BESTURINGSELEMENTEN

1. Hoogte.
 2. Hoek rugmechanisme.
 3. Hoek rugsteun.
 4. Diepte.
 5. Hoek rug. Elektrische bediening in aparte doos.
- Linker knop = vooruit
Rechter knop = achteruit.


OPMERKING! Zorg ervoor dat de Medic-stoel in de beugel is afgesteld, zodat de clip van de veerknop vergrendelt en de rugsteun niet kan worden uitgetrokken.

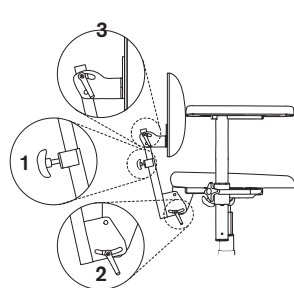


Standaard

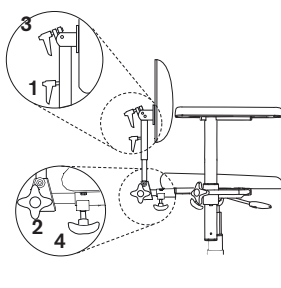


Medic (optie)

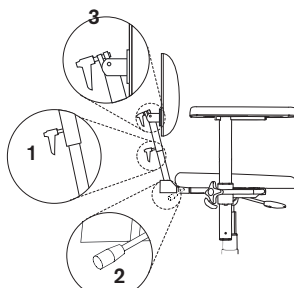

Comfort (optie)

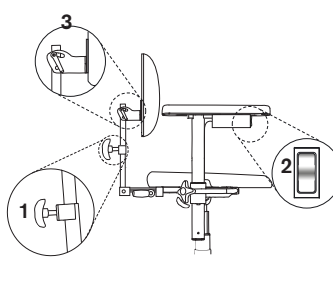

Elektrische bediening (optie)

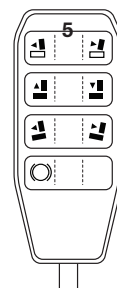


Elektrische bediening in aparte doos (optie)

ARMSTEUN

BESTURINGSELEMENTEN

1. Hoogteverstelling.
2. Breedteverstelling.
3. Inklappen.

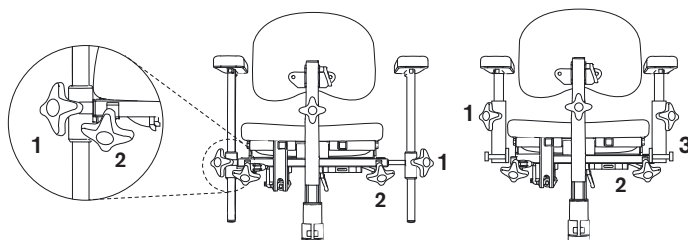

Standaard


Inklapbare armleuning (optie)

ROTATIEVRIJGAVE (OPTIE)

OPMERKING! De rotatie moet in de positie worden vergrendeld bij het gaan zitten en opstaan uit de stoel. Controleer of de vergrendeling is 'ingeklikt'.

BESTURINGSELEMENTEN

1. Draai rechtsom om te ontkoppelen en linksom om te vergrendelen.

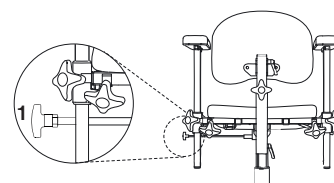


DE COXIT-FLAPPEN INSTELLEN

REAL PLUS COXIT/ELECTRIC

Er zijn twee manieren om de coxit-flappen aan te passen. Op stoelen zonder zittingkanteling bevinden de knoppen zich onder de voorkant van de zitting. Op stoelen met zittingkanteling bevinden de knoppen zich onder de achterkant van de zitting.

BESTURINGSELEMENTEN

1. Losdraaien, de gewenste hoek instellen en vastdraaien.
2. Draai de knop om de flap te verlagen/omhoog te trekken.

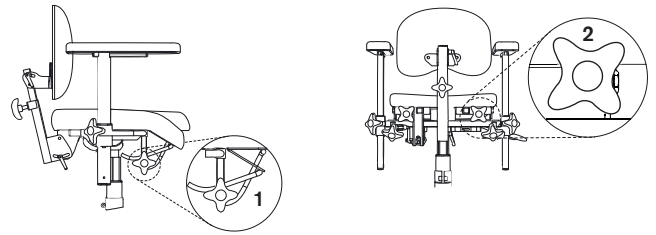

RECONDITIONERING, REINIGING, ONDERHOUD EN OPLADEN

De stoel moet worden afgenomen en vrij worden gehouden van stof en vuil. Wij keuren het gebruik van reinigingsmiddelen met een pH variërend van 7 tot maximaal 12 (geconcentreerd) goed.

Pluche bekleding moet gewassen worden met een schuimreinigingsmiddel:

1. Verwijder los vuil, kruimels en dergelijke.
2. Breng een dun laagje schuim aan, wrijf het schuim gelijkmatig in met een vochtige doek.
3. Veeg af met een schone en licht bevochtigde doek.
4. Na opdrogen verder reinigen met stofzuiger.

Kunstleer moet met zeepwater worden gewassen of eventueel met een alcoholoplossing worden afgenomen, bijvoorbeeld een desinfectiemiddel.

Zittingen, rugleuningen en andere gevoerde onderdelen worden om functionele redenen niet in afgesloten materialen vervaardigd.

Gevoerde onderdelen moeten om hygiënische redenen worden vervangen tijdens reconditionering.

Het elektrische hefmechanisme moet regelmatig worden gecontroleerd op stof, vuil en stabiliteit. Hef de zitting naar de hoogste stand. Reinig met een doek. Gebruik geen water of oplosmiddelen. Smeer de cilinder vervolgens met een dun laagje teflon of op silicium gebaseerd vet.

Wij raden aan dat de batterijlader REAL 9000 type 2240-12V, met artikelnummer 802289, wordt gebruikt om de stoel op te laden. Als u een andere batterijlader wilt gebruiken, neem dan contact op met Mercado Medic AB voor schriftelijke toestemming. De batterij moet regelmatig worden opgeladen; eenmaal per dag, indien mogelijk. Het is belangrijk dat de batterij nooit volledig ontladen wordt, omdat dit de levensduur van de batterij verlengt.

OPLADEN (GELDT VOOR ELEKTRISCHE STOELN)


Sluit de oplaadstekker van de lader aan op de oplaadaansluiting (1) op de doos met de tuimelschakelaar voor het heffen en het verlagen van de stoel. Steek de lader vervolgens in een stopcontact. De LED op de lader geeft aan dat de lader bezig is met opladen. Wanneer de LED van oranje naar groen verandert, is de batterij volledig opgeladen. De stoel kan worden verhoogd en verlaagd tijdens het opladen. Dit geldt voor ELECTRIC-stoelen geleverd vanaf versie 11 2013 of eerder geleverde bijgewerkte stoelen.

OPMERKING!

Het is vooral belangrijk om de batterij op te laden op stoelen met elektrische remmen, elektrische kantelmechanismen en elektrische rugsteunen, omdat deze functies een hoge batterijcapaciteit vereisen om te kunnen werken. Garandeer deze functies door de batterij eenmaal per dag opnieuw op te laden. Bij het vervangen van de batterij (typeaanduiding: HP7-12 12V 7.2 AH) moet u ervoor zorgen dat de rode batterijkabel aan de positieve terminal op de batterij wordt bevestigd en de negatieve kabel aan de negatieve terminal. Als de elektrische functies van de stoel niet meer werken, is dit waarschijnlijk te wijten aan een doorgebrande zekering. Controleer de zekeringen. Ze bevinden zich onder de zitting op de kabel tussen de batterij en de startmotor. Vervang de defecte zekering door een nieuwe 25A zekering.

HOUD BIJ HET HANTEREN VAN BATTERIJEN REKENING MET HET VOLGENDE:

- De batterij nooit kortsluiten.
- Stel de batterij niet bloot aan overmatige schokken of open vuur.
- In geval van contact met batterijzuur, spoelen met water gedurende ongeveer 30 minuten en deskundig medisch advies inwinnen.
- Batterijen moeten worden afgevoerd naar geschikte recyclinginrichtingen.

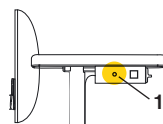

Lader artikelnr. 802289

1. Hefmechanisme repareren

- ☐ 1. functie/reiniging
- ☐ 2. rotatievergrendeling/functie
- ☐ 3. bevestiging/aandraaiing

2. Elektrisch hefmechanisme

- ☐ 1. geluid/glijkoppeling
- ☐ 2. rotatievergrendeling/smering
- ☐ 3. bevestiging/aandraaiing
- ☐ 4. batterij/opladen/conditie
- ☐ 5. bedrading/slijtage

3. Chassis

- ☐ 1. laspunten
- ☐ 2. boutverbindingen
- ☐ 3. basisverlengstuk/bevesting/functie

4. Wielen

- ☐ 1. functie/rollen/draaien
- ☐ 2. lagers/wielsporen
- ☐ 3. bevestiging/aandraaiing

5. Rem

- ☐ 1. functie/hefhoogte
- ☐ 2. functie/lagers
- ☐ 3. slijtage remrubber
- ☐ 4. remhendel

6. Stoelframe

- ☐ 1. mechanisch/laspunten
- ☐ 2. boutverbindingen/aandraaien
- ☐ 3. kunststof pluggen/bussen
- ☐ 4. zitting/reiniging/vervanging
- ☐ 5. coxit mechanisme/bediening

7. Kanteling van de zitting

- ☐ 1. slijtage van bewegende delen
- ☐ 2. gasveer/functie
- ☐ 3. kanteling met kruk/slijtage
- ☐ 4. handmatig kantelen/vergrendelen
- ☐ 5. bediening/smering

8. Rugmechanisme

- ☐ 1. functie/slijtage
- ☐ 2. bevestiging/aandraaiing
- ☐ 3. kunststof pluggen/bussen
- ☐ 4. rugsteun/reiniging/vervanging
- ☐ 5. gasveer/functie

9. Armsteun

- ☐ 1. functie/slijtage
- ☐ 2. kunststof pluggen/bussen
- ☐ 3. armsteunen/reiniging/vervanging
- ☐ 4. bedieningselementen onder armsteun/functie
- ☐ 5. bedieningskast/joystick/laadaansluiting

10. Gevoerde accessoires

- ☐ 1. hoofdsteen
- ☐ 2. rompsteen
- ☐ 3. zijsteen
- ☐ 4. amputatiekussen
- ☐ 5. stoelbekleding
- ☐ 6. beenspreider/buiksteen

11. Mechanische accessoires

- ☐ 1. hoofdsteen
- ☐ 2. rompsteen
- ☐ 3. zijsteen
- ☐ 4. amputatiesteun
- ☐ 5. duwhandvaten
- ☐ 6. beenspreider/buiksteen

12. Elektrische accessoires

- ☐ 1. batterijlader/functie
- ☐ 2. elektrische rem/functie
- ☐ 3. elektrisch kantelen/functie
- ☐ 4. elektrische rugsteun/functie

13. Reiniging

- ☐ 1. wielen
- ☐ 2. basis
- ☐ 3. gevoerde onderdelen
- ☐ 4. andere mechanismen

- Voor de veiligheid van de gebruiker raden wij aan om de stoel, de onderdelen en de functies ervan regelmatig te inspecteren. Als er storingen of beschadigingen worden ontdekt, vermijd dan het gebruik van de stoel totdat deze is geïnspecteerd en goedgekeurd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- **OPMERKING!** De gebruiker mag niet in de stoel zitten terwijl deze wordt gereconditioneerd, of tijdens service of onderhoud aan de stoel.
- **OPMERKING!** Om de integriteit/sterkte/duurzaamheid van deze onderdelen te waarborgen, moeten zorgvuldige controles worden uitgevoerd op het stoelframe en de rugsteun tijdens onderhoud en reconditionering.
- Om veiligheidsredenen moeten het stoelframe en de rugsteun worden vervangen voordat een gebruikte stoel aan een nieuwe gebruiker wordt voorgeschreven.
- Geen hogedrukreiniger gebruiken bij het schoonmaken van de stoel.

Notities

[illegible]

CONTACT OPNEMEN MET MERCADO

Hoofdkantoor

Bezoekadres
Tryffelslingan 14, SE-181 57 Lidingö, Zweden

Postadres
Postbus 1074, SE-181 22 Lidingö, Zweden

Openingsuren telefooncentrale: Ma-vr 08.00-16.30 uur
Tel.: +46 (0)8-555 143 00
Fax: +46 (0)8-555 143 99
E-mail: info@mercado.se

Service en technische ondersteuning

Telefonische uren ma-vr
08.00-12.00 en 13.00-16.00 uur.

Tel.: +46 (0)8-555 143 08
Fax: +46 (0)8-555 143 99
Mobiele telefoon: + 46 (0) 70-550 63 98,
+ 46 (0) 70-894 63 68
E-mail: service@mercado.se

