




SE

BATTERIBYTE F REAL 9000 PLUS 24V

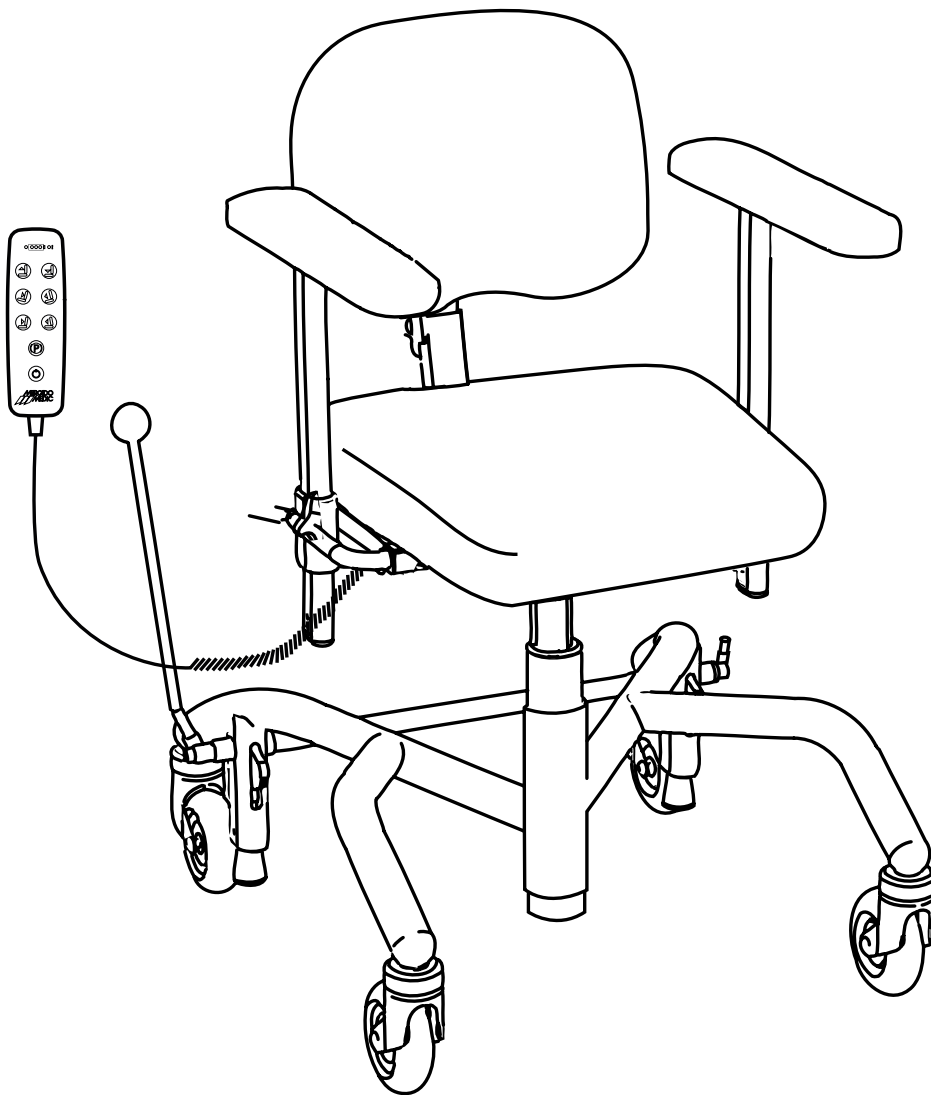

1. Viktig information

Tänk på följande när du handskas med batterier:

- Kortslut aldrig batteriet.
- Utsätt aldrig batteriet för kraftiga stötar.
- Kasserade batterier ska alltid lämnas på miljöstationer.

Första hjälpen

Om batteriet är defekt och hantering resulterar i direktkontakt med batteriets innehåll, elektrolyt (svavelsyra), gäller följande:

Händelse	Åtgärd
Hudkontakt	Skölj med vatten. Rengör med tvål och vatten. Avlägsna och tvätta berörda kläder.
Inhalation av syradimma	Inandas frisk luft. Kontakta läkare omedelbart!
Kontakt med ögon	Skölj med rinnande vatten under minst 15 minuter. Kontakta läkare omedelbart!
Vid förtäring	Drick omedelbart mycket vatten, framkalla ej kräkning. Kontakta läkare omedelbart!

2. Artikellista

805288 Elsystem styrlåda 24V RCB10+L

805320 Batteripack 2,6Ah 24V f RCB10+L

3. Nödvändiga verktyg

- Torxmejsel (TX15)
- Skyddsglasögon
- Flackstång eller motsvarande kan krävas


4. Monteringsinstruktion

4.1. Förberedelser

- Montera av ryggstödet enligt bruksanvisning
- Vänd stolen upp och ned så att den vilar på armstödsplattorna
- Demontera styrlådan enligt monteringsanvisning "Fäste för styrsystem 24V"

4.2. Ta bort gamla batterier


- (A) Lossa på skruvarna som håller samman styrlådan.
- (B) Öppna styrlådan och koppla loss plus- och minuskablarna, flackttång kan behövas för detta steg. Avlägsna de gamla batterierna.

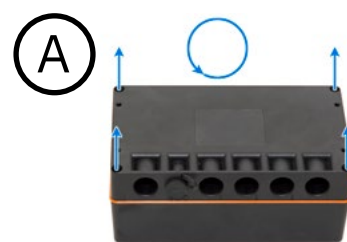

4.3. Sätt in nya batterier

! Gnista kan uppstå vid inkoppling, använd skyddsglasögon.

Placera de nya batterierna i styrlådan och koppla fast plus- och minuskablarna. Återförslut styrlådan och skruva i skruvarna som håller den samman.

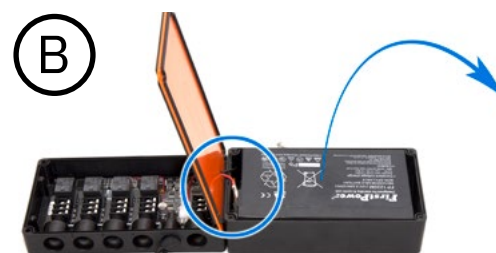

4.4. Slutmontering

- Montera styrlådan enligt monteringsanvisning "Fäste för styrsystem 24V"
- Vänd stolen till upprätt läge
- Montera ryggstödet enligt bruksanvisning