



REAL® 9000 PLUS



**GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZING
REAL 9000 PLUS/ELEKTRISCH/VOLWASSENE/
KIND/MINI/COXIT**


Doc. 20-07313-NL-03
Artikelnr 803410
Gewijzigd op 04-12-2020
Geldig vanaf 01-06-2007

REAL 9000 PLUS is een medisch hulpmiddel, klasse I. Het is CE-gemarkeerd in overeenstemming met de voorschriften van de Zweedse Geneesmiddelenraad voor medische hulpmiddelen LVFS 2003:11 en is getest en goedgekeurd volgens EN 1335, IEC 60601 en EN 12182. Alle textiel van de stoel is getest en goedgekeurd volgens EN 1021-1 en EN 1021-2. Mercado Medic AB is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 13485 en voldoet aan de geldende arbeids- en milieuwetgeving.


Als u vragen heeft over uw product of als er iets onverwachts heeft plaatsgevonden, neem dan eerst contact op met uw voorschrijver, vervolgens bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen bij Mercado Medic AB.

PDF-versies van onze gebruiks- en onderhoudshandleidingen met vergrotingsmogelijkheden zijn te vinden op onze website, www.mercado.se. U vindt hier ook informatie over accessoires die op de stoelen van Mercado Medic kunnen worden gemonteerd, evenals eventuele veiligheidsberichten voor de markt, ondersteuning voor voorschrijven of terugroepacties van producten en accessoires.


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze handleiding en de inhoud ervan.

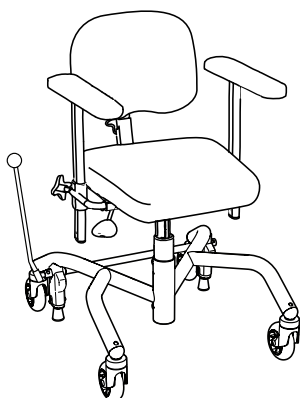


☐ REAL PLUS

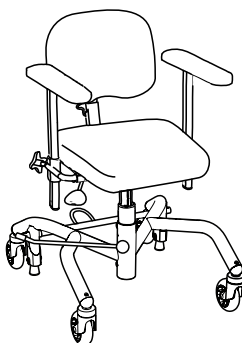


☐ REAL PLUS KINDEREN/
MINI

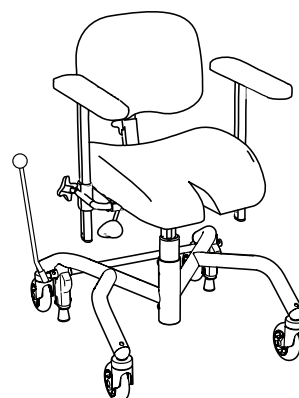


☐ REAL PLUS COXIT

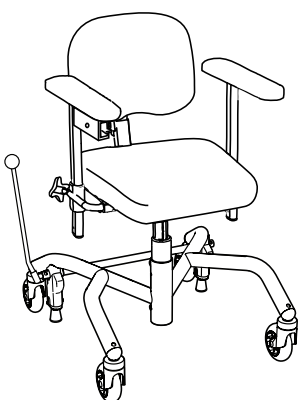

☐ REAL PLUS
ELEKTRISCH

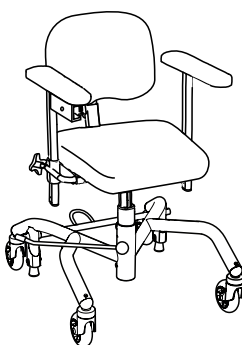

☐ REAL PLUS KINDEREN/
MINI ELEKTRISCH

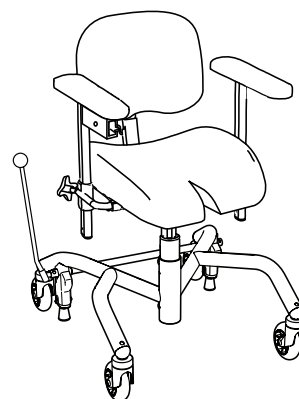

☐ REAL PLUS COXIT
ELEKTRISCH

U krijgt voldoende competentie om dit product veilig te kunnen gebruiken wanneer u deze gebruiks- en onderhoudshandleiding zorgvuldig doorleest voordat u de stoel in gebruik neemt.



INHOUD

BELANGRIJKE INFORMATIE EN KLASSE	BLZ. 4
VERWACHTE LEVENSDUUR	BLZ. 4
INSTRUCTIES VOOR AFVOEREN	BLZ. 5
MAAK KENNIS MET UW REAL 9000 PLUS	BLZ. 5
INDIVIDUELE AANPASSING	BLZ. 5
GEBRUIKSAANWIJZING	BLZ. 6
SCHOONMAKEN, ONDERHOUD EN OPLADEN	BLZ. 8
REVISIE EN SERVICE	BLZ. 9

BELANGRIJKE INFORMATIE EN KLASSE

De REAL-stoel heeft verwisselbare onderdelen, accessoires en functies met afstel mogelijkheden voor individuele aanpassingen. De stoel mag alleen worden gebruikt door de persoon voor wie deze bestemd is en alleen voor het bedoelde gebruik. De stoel is bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan water, andere vloeistoffen of chemicaliën. Ook te hoge warmte of langdurige en intensieve zonneschijn of andere straling is niet goed. De stoel mag alleen worden uitgerust met accessoires of onderdelen die zijn goedgekeurd door Mercado Medic AB. Om de CE-markering te behouden, mogen er zonder toestemming van Mercado Medic AB geen aanpassingen of wijzigingen worden doorgevoerd. Reparaties en andere technische maatregelen mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat daartoe door Mercado Medic AB bevoegd is. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de stoel gaat gebruiken.

- REAL PLUS ELEKTRISCH behoort tot beschermingsklasse II, interne accu.
- REAL PLUS ELEKTRISCH behoort tot beschermtyp B.
- REAL PLUS ELEKTRISCH is EMC-getest en getest volgens EN 60601-1-1 en EN 60601-1-2 en moet daarom worden behandeld volgens onze gebruiks- en onderhoudshandleiding.
- De EMC-bijlage kunt u downloaden op mercado.se/dokument
- Max. gebruikersgewicht: REAL PLUS 140 kg. REAL PLUS ELEKTRISCH 150 kg.
- De stoel moet in de beoogde doos op een pallet worden vervoerd. Moet binnen worden opgeslagen op ten minste +10°C.
- Alleen elektrische apparatuur van Mercado Medic AB mag worden gebruikt op de REAL PLUS EL.
- LET OP! De elektrische functies van de REAL PLUS EL-stoelen mogen maximaal 10% van de tijd worden gebruikt (max. 6 min/uur). Als deze limiet wordt overschreden, kan er schade aan de stoel optreden.
- Als de REAL PLUS ELEKTRISCH is uitgerust met beensteunen, moeten de voeten van de patiënt op de voetplaat blijven bij het gebruik van elektrische functies.
- Waarschuwingssymbolen die op de stoel kunnen worden weergegeven: Risico op beknelling(1), Heet oppervlak(2)



①



②

VERWACHTE LEVENSDUUR

De verwachte levensduur van het product is 10 jaar wanneer het wordt gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. De productiedatum van het product is samen met het serienummer te vinden op een van de zilverkleurige etiketten op het onderstel van het product, dat is gemarkeerd met Lev/Del. Het wordt weergegeven in het formaat JJWW (jaar- en weeknummer).

Als gebruiker van het product dient u contact op te nemen met uw voorschrijver, thuiszorgwinkel of distributeur als het product slechtere of gewijzigde prestaties vertoont.

Na de verwachte levensduur is het belangrijk dat een algemene beoordeling van het product wordt gemaakt voordat het gebruik wordt voortgezet. Na de verwachte levensduur kan Mercado Medic AB de geschiktheid en veiligheid van het product niet garanderen, omdat Mercado Medic AB geen controle heeft over hoe het product is gebruikt en of het versleten is. De algemene beoordeling van het product moet door de zorgorganisatie worden uitgevoerd als het product is voorgeschreven, en moet in ieder geval rekening houden met de manier waarop het product is gebruikt, in welke staat het product en de componenten verkeren, of het product is gereviseerd en service heeft ondergaan, wanneer dit is gedaan, wat op die momenten is hersteld en de reden voor de maatregelen.

Op die markten buiten Zweden en Noorwegen waar het product in voorkomende gevallen rechtstreeks door de distributeur aan de gebruiker wordt verkocht en waar men dus niet over een verantwoordelijke voorschrijver beschikt, wordt periodiek onderhoud uitgevoerd volgens de instructies in het hoofdstuk Revisie en Service, naast de hierboven genoemde algemene beoordeling.

Na de verwachte levensduur kan Mercado Medic AB niet garanderen dat reserveonderdelen kunnen worden geleverd. De CE-markering wordt niet beïnvloed door de verwachte levensduur.

INSTRUCTIES VOOR AFVOEREN

Brandbaar:

- Zitting
- Rug
- Armsteunen
- Neksteun
- Overige gevulde onderdelen verkocht door Mercado Medic AB

Elektrisch afval:

- Motoren
- Kabels
- Besturingssysteem

Metalen:

- Frame
- Elektrische automatische liften
- Gaszuigers
- Gasveren
- Stoelkruis
- Rugkantelmechanisme
- Breedteverstelling en armsteunmechanisme
- Overige metaaldelen van producten verkocht door Mercado Medic AB

LET OP! Accu's moeten separaat worden aangeboden.

MAAK KENNIS MET UW REAL 9000 PLUS

CONTROLEPUNTEN VOOR GEBRUIK

1. Stel de armleuningen op de juiste hoogte af en vergrendel de knop voor de hoogte-instelling.
2. Plaats de rugkolom in de beoogde beugel en vergrendel de knop die bedoeld is voor de hoogteverstelling van de rugleuning.
3. Monteer de remhendel in de beoogde beugel (rechter- of linkerkant). Is niet van toepassing op de elektrische rem.
4. Alle knoppen en draaiknoppen moeten worden aangedraaid voordat u in de stoel gaat zitten.
5. De stoel moet altijd geremd zijn als u gaat zitten of opstaat.
6. Laad de accu's van de stoel op volgens de instructies voordat u de stoel voor de eerste keer gaat gebruiken (voor elektrische stoel).

RICHTLIJN VOOR INDIVIDUELE AANPASSINGEN VAN DE PRODUCTEN VAN MERCADO MEDIC AB

Aanpassingen mogen alleen uitgevoerd worden door personeel dat opgeleid is door Mercado Medic AB voor onderhoud en revisie. Artikelen op de lijst met actuele combinatieovereenkomsten op www.mercado.se/mercado-dokument mogen gemonteerd worden met behoud van de CE-markering van Mercado Medic AB. Indien een artikel gewenst is dat niet op de lijst met actuele combinatieovereenkomsten staat, neemt daartoe geautoriseerd personeel van de klant contact op met Mercado Medic AB voor schriftelijke goedkeuring.

Artikelen die beoordeeld moeten worden, moeten fysiek opgestuurd worden naar Mercado Medic AB door de klant of de leverancier van het artikel in kwestie. Mercado Medic AB neemt vervolgens contact op met de leverancier van het artikel in kwestie om te vragen of er mogelijk een combinatieovereenkomst is, dan voert Mercado Medic AB een risicoanalyse uit van het gewenste artikel. Wanneer de risicoanalyse uitgevoerd is, ontvangt de klant een schriftelijk rapport.

Stoelen die in overeenstemming met onderstaande punten aangepast zijn, moeten door Mercado Medic AB geverifieerd worden zodat Mercado Medic AB de productaansprakelijkheid blijft houden.

- Gevulde onderdelen, zoals zittingen, rugsteunen, armsteunen, zijsteunen, rompsteunen en neksteunen mogen aangepast worden indien de bestaande buitenmaten van het product niet overschreden worden.
- Het zwaartepunt van het hefmechanisme moet behouden blijven/gecentreerd worden voor de best mogelijke werking.
- Gevulde onderdelen moeten voldoen aan geldende ontvlambaarheidseisen en andere milieunormen.
- Oppervlakken die worden belast met aanzienlijke verticale krachten mogen niet buiten het oppervlak (basis) komen dat wordt gevormd door de wielcentrumpunten.

Wanneer deze richtlijnen worden gevolgd, behoudt Mercado Medic AB de productaansprakelijkheid voor het product.

Producten die door de zorg speciaal worden aangepast buiten de richtlijnen van Mercado Medic AB waarbij de zorg ook de productaansprakelijkheid overneemt, kunnen worden hersteld naar de oorspronkelijke staat. Dit moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde monteur, erkend door Mercado Medic AB. Mercado Medic AB neemt de productaansprakelijkheid dan weer over conform CE-markering 93/42 EEG; de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen MDD.

Neem bij vragen over (speciale) aanpassingen contact op met Ronny Fogelqvist:

Tel +46 (0)708 27 96 14

E-mail ronny.fogelqvist@mercado.se

REM


LET OP! De stoel moet altijd geremd zijn als u gaat zitten of opstaat. De rem moet regelmatig worden gecontroleerd. Bij slijtage moet het rubberen remblokje worden vervangen. De remfunctie kan op oneffen oppervlakken minder goed functioneren.

ER ZIJN DRIE SOORTEN REMMEN:


Remhendel, voetrem en elektrische rem.

BEDIENING


1. Rem, PLUS-frame 48 beweeg hendel vooruit.
2. Rem, PLUS-frame 43 beweeg hendel achteruit, pedaal omlaag.
3. Elektrisch - rem, druk op knop.
4. Elektrisch - rem, druk op knop.
5. Handrem op transportstandaard, rem maximaal en druk de rode wig naar beneden. Ontgrendelen – duw de handgreep omhoog totdat de wig loskomt.
6. Remhendelbevestiging – Om de stoel te kunnen remmen, zelfs wanneer de armsteunen zijn afgesteld in de breedte; maakt u de schroef op de remhendel los met een 6 mm inbussleutel. Trek de beugel eruit, bevestig de schroef in het volgende gat en draai de schroef weer stevig vast met de inbussleutel.

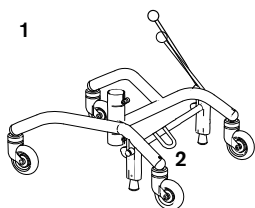


Handrem en voetrem

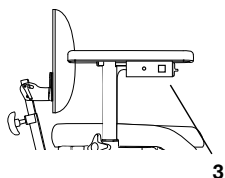


Elektrische rem
(optioneel)

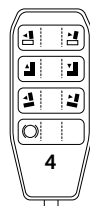

Elektrische rembediening
in los kastje (optioneel)

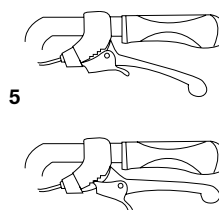

Handrem

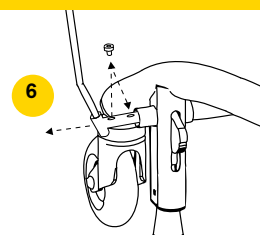


Remhendelbeugel


ZITHOOGTE/AUTOMATISCHE LIFTEN

ER ZIJN TWEE SOORTEN AUTOMATISCHE LIFTEN:


Gasveerd en Elektrisch. Er zijn een standaard en een lage zithoogte. De hendel voor de gasveer kan onder de zitting of armsteun worden geplaatst. De elektrische bediening wordt standaard onder de armsteun gemonteerd. LET OP! Personen met een laag gewicht kunnen hulp nodig hebben bij het verhogen en verlagen van de zitunit die met een gasveer wordt bediend.

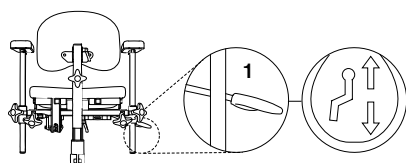


Gasveerhendel onder zitting

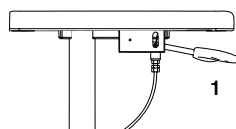

Gasveerhendel onder
armsteun (optioneel)

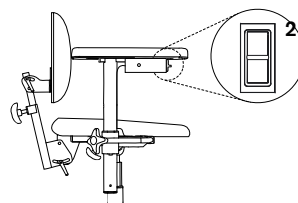

Elektrisch bediend

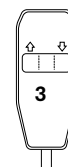

Elektrische bediening in losse
door/joystick/afstandsbediening
zijn optioneel verkrijgbaar.
Op de afbeelding ziet u een los
kastje.


ZITTINGKANTELING (OPTIONEEL)

ER ZIJN DRIE TYPES ZITTINGKANTELING:


Slinger, gasveer en elektrisch. De hendel voor de gasveer kan aan de linker achterkant van de zitting of onder de armsteun worden geplaatst. De elektrische bediening wordt standaard onder de armsteun gemonteerd. Het standaard bereik van de zittingkanteling is +15°/-8°.

BEDIENING


1. Zittingkanteling. Slinger –draai de slinger.
2. Zittingkanteling. Gasveer – breng de hendel naar achteren.
2. Zittingkanteling. Gasveer – breng de hendel omhoog.
4. Zittingkanteling. Elektrisch – breng de hendel omhoog/omlaag.
5. Zittingkanteling. Elektrisch – regeling in los kastje.
Linkerknop = vooruit
Rechterknop = achteruit.

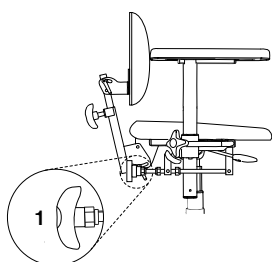


Met slinger

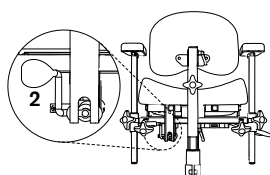


Gasveerhendel onder zitting

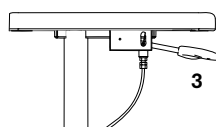

Gasveerhendel onder armsteun

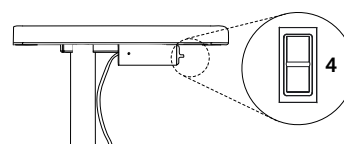


Elektrisch bediend

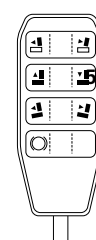

Elektrisch
bediend
in los kastje

BEDIENING

1. Hier geplaatste armsteun volgt de hoek van de zitting.
2. Hier geplaatste armsteun volgt de hoek van de zitting niet.
3. Er zijn 3 standen. **In stand 3 moet de stoel worden uitgerust met een frameverlenger.**
 1. Voorover 15°, achterover 8° – Standaard zittingkanteling
 2. Voorover 8°, achterover 15° – Omgekeerde zittingkanteling
 3. Voorover 0°, achterover 23° – Geheel achterover gekanteld

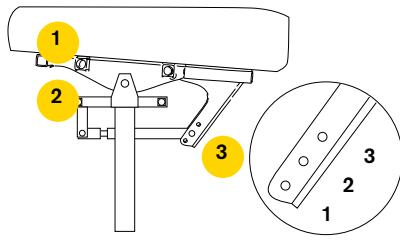

RUGSTEUNMECHANISME


ER ZIJN VIER TYPES MECHANISMEN VOOR DE RUGSTEUN:

Standaard, Medic, Comfort en Elektrisch. Ze zijn allemaal verkrijgbaar in lage of hoge uitvoering (de afgebeelde stoelen hebben allemaal een lage rugleuning). Alle rugsteunmechanismen hebben een aparte bediening voor hoogte, diepte en hoek. Het model Medic heeft een grotere diepte-instelling.

BEDIENING

1. Hoogte.
2. Hoek van het rugsteunmechanisme.
3. Hoek van de rugplaat.
4. Diepte.
5. Hoek rugsteun. Elektrisch - regeling in los kastje.
Linkerknop = vooruit
Rechterknop = achteruit.


LET OPI! Zorg dat het rugkantelmechanisme Medic zo in de beugel wordt gezet, dat de veerbelaste vergrendeling niet kan worden verwijderd.

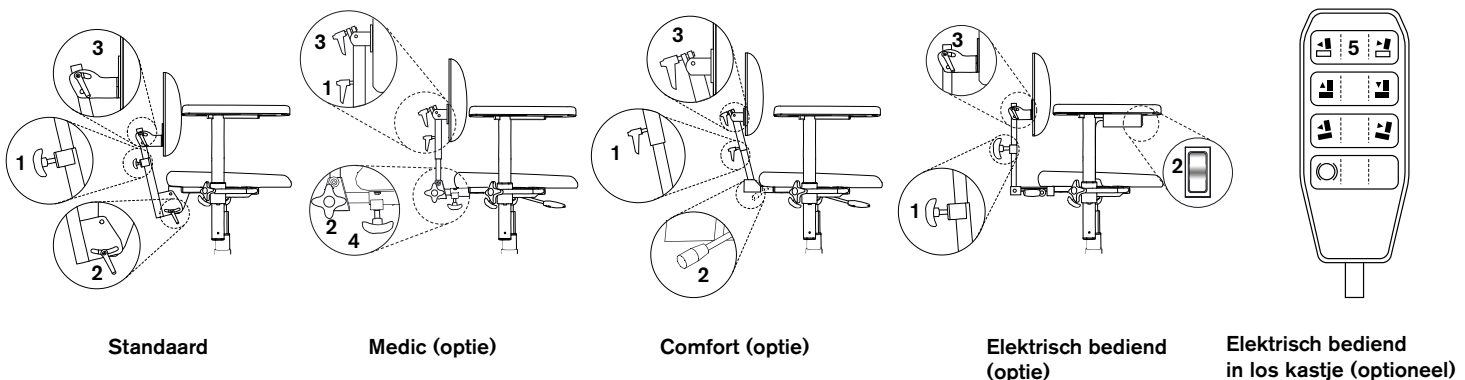

ARMSTEUNEN

BEDIENING

1. Hoogteverstelling.
2. Breedteverstelling.
3. Inklappen.

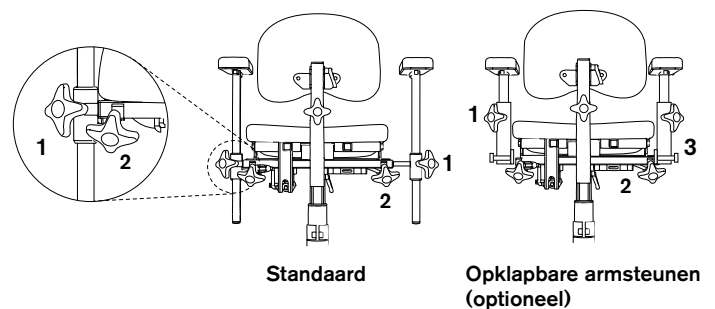


ROTATIERELEASE (OPTIONEEL)

LET OP! De rotatie moet vergrendeld zijn wanneer u zit en opstaat. Zorg dat de vergrendeling heeft "geklikt".

BEDIENING

1. Draai met de klok mee om los te koppelen, tegen de klok in om te vergrendelen.

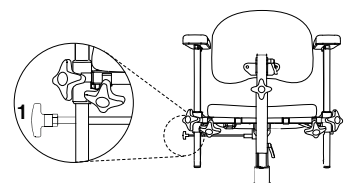


REAL PLUS COXIT/ELEKTRISCH

Er zijn twee manieren voor het aanpassen van de coxit-kleppen. Op een stoel zonder zittingkanteling zit de bediening onder de voorrand van de zitting. Op een stoel met zittingkanteling zit de bediening onder de achterrand van de zitting.

BEDIENING

1. Maak los, stel de gewenste hoek in en draai weer aan.
2. Draai aan de knop om de klep te laten zakken/verhogen.

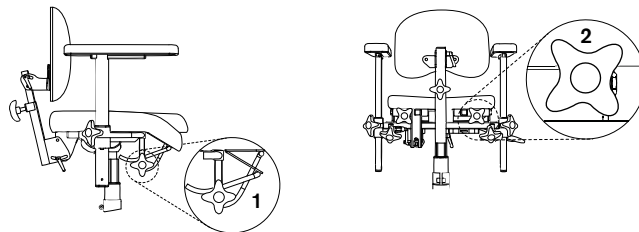

SCHOONMAKEN, ONDERHOUD EN OPLADEN

Neem de stoel regelmatig af om deze vrij te houden van stof en vuil. U mag reinigingsmiddelen met een pH-waarde van 7 tot 12 gebruiken (geconcentreerd).

De pluche bekleding kan gewassen worden met een schuimreiniger:

1. Verwijder vuil, kruimels en dergelijke.
2. Breng een dunne laag schuim aan, wrijf het schuim gelijkmatig uit met een vochtige doek.
3. Wrijf na met een schone en licht vochtige doek.
4. Stofzuig grondig als alles is opgedroogd.

Kunstleer kan worden gewassen met een zeepoplossing of worden afgenomen met een alcoholoplossing, zoals een ontsmettingsmiddel.

De zitting, rugleuning en andere onderdelen met vulling zijn uit functionele overwegingen niet gemaakt van gesloten materiaal. Vervang bij hergebruik de gevulde onderdelen omwille van de hygiëne.

Het elektrische liftsysteem moet regelmatig worden gecontroleerd op stof, vuil en stabiliteit. Zet de zitting in de hoogste stand. Maak schoon met een doek.

Gebruik geen water of oplosmiddel. Smeer de cilinder vervolgens met een dunne laag smeervet op basis van teflon of silicone.

Het wordt aanbevolen om acculader REAL 9000 Type 2240-12V met art.nr 802289 wordt gebruikt voor het opladen van de stoel. Als u andere acculader wenst, neem dan contact op met Mercado Medic AB voor een schriftelijke goedkeuring. Het opladen van de accu moet regelmatig gebeuren, indien mogelijk één keer per dag. Het is belangrijk voor de levensduur van de accu dat hij nooit helemaal leeg raakt.

OPLADEN (GELDT VOOR ELEKTRISCHE STOEL)



Sluit de oplaadstekker op de lader aan op de oplaadaansluiting (1) op de box waar de tuimelschakelaar voor het verhogen en verlagen van de stoel zich bevindt. Steek vervolgens de stekker van de lader in een stopcontact. De LED op de lader geeft aan dat er wordt opgeladen. Wanneer de LED van kleur verandert van oranje naar groen, is de accu volledig opgeladen. Het is mogelijk de stoel te verhogen en verlagen, terwijl hij wordt opgeladen. Dit geldt voor elektrische stoelen vanaf w. 11-2013 of eerder geleverde en bijgewerkte stoelen.

LET OP!

Het opladen van de accu is vooral belangrijk op die stoelen die een elektrische rem, zittingkanteling en elektrische rugsteun hebben. Voor een goede werking is een hoge accucapaciteit nodig. Zorg dat de functies blijven werken door de accu één keer per dag op te laden. Bij het vervangen van de accu (typeaanduiding: HP7-12 12V 7.2Ah) dient u er goed op te letten dat de roodgemarkeerde accukabel op de pluspool op de accu en de minuskabel op de minpool worden bevestigd. Als de elektrische functie van de stoel niet meer werkt, is er waarschijnlijk een zekering gesprongen. Controleer de zekeringen. Ze zitten onder de zitting op het snoer tussen de accu en de actuator. Vervang een defecte zekering door een nieuwe 25 A zekering.

DENK AAN HET VOLGENDE BIJ HET HANTEREN VAN ACCU'S:

- Sluit de accu nooit kort.
- Stel de batterij niet bloot aan sterke schokken of open vuur.
- In geval van contact met accuzuur, spoel met water gedurende ongeveer 30 min. en raadpleeg uw arts.
- Afgedankte accu's moeten naar een milieustation worden gebracht.

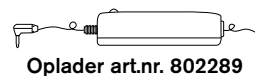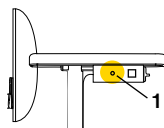

Oplader art.nr. 802289

! Belangrijke informatie voor revisie en service van de REAL 9000 PLUS (hierna "product" genoemd):

- Het product heeft geen periodiek onderhoud nodig in gevallen waarin er een verantwoordelijke voorschrijver in de gezondheidszorg is. Op die markten buiten Zweden en Noorwegen waar het product in voorkomende gevallen rechtstreeks door de distributeur aan de gebruiker wordt verkocht en waar men dus niet over een verantwoordelijke voorschrijver beschikt, dient het periodieke onderhoud om de twee jaar te worden uitgevoerd volgens de punten 1-10 in dit hoofdstuk gedurende de gehele levensduur van het product.
- Tijdens service en revisie moet een grondige visuele inspectie worden uitgevoerd op de belangrijkste onderdelen van het product om de veiligheid van de gebruiker te garanderen. Deze omvatten frame, liften, stoelkruis, rugkantelmechanisme en breedteverstelling voor armsteunen. De controle moet lasnaden, afsluitbare functies en instellingen omvatten.
- Het is verboden voor de gebruiker om in het product te zitten tijdens revisie-, service- of onderhoudswerkzaamheden.
- Gebruik geen hogedrukreiniger om het product schoon te maken.
- Bij het controleren van het frame moet de las tussen de voor- en achterpoten van het frame worden gecontroleerd. Elke begin van scheuren in materiaal of verf in dit gebied moet worden gezien als reden om het frame of het product te vervangen.
- Als het product slechte remprestaties heeft, moet behalve de conditie van de remvoeten ook de balans van het frame worden gecontroleerd. Als het product in ongeremde positie niet op alle vier de wielen staat, moet het product onmiddellijk buiten gebruik worden genomen. Controleer onbalans op verschillende plaatsen en richtingen om uit te sluiten dat de onbalans niet te wijten is aan de vloer.

REVISIE-AANWIJZINGEN CONTROLEPUNTEN

1. Elektronica-eenheid

☐ 1.1. Elektronica / functie / schoonmaken

Controleer de elektronica en kijk welke elektrische functies zijn aangesloten. Test de elektrische functies, als de stoel niet werkt. Controleer printplaten, bedieningselementen en bedrading op beschadigingen.

☐ 1.2. Bedieningskastje / werking / reiniging

Controleer de functies van de bedieningen, controleer of de behuizing volledig compleet is en of alle knoppen werken. Neem de bedieningen af met een licht vochtige doek met ontsmettingsmiddel, om een evt. besmetting niet door te geven. Gebruik geen oplosmiddelen, bleekmiddelen, poetsmiddelen, synthetische wasmiddelen, poetswas of sprays op de stoel.

☐ 1.3. Contacten; bevestiging

Controleer of kabels en contacten heel zijn en goed vast zitten. Zorg dat er geen risico bestaat op bekneld raken van kabels en contacten.

☐ 1.4. Accu's / acculader / werking

Zorg dat de lader werkt en dat de behuizing of snoeren niet beschadigd zijn.

Meet de accu's en controleer of er geen te lage waarden zijn. Dat zou

erop kunnen duiden dat de accu niet is opgeladen of dat een cel in de accu kapot is.

☐ 1.5. Kanteling elektrische stoel / werking

Controleer of het kastje niet zichtbaar beschadigd is. Controleer de functie van de bewegende delen. Zorg dat alle borgbouten aangedraaid zijn zodat er geen speling in de eindpositie ontstaat.

☐ 1.6. Elektrische rugsteun / werking

Controleer of het kastje niet zichtbaar beschadigd is. Controleer de functie van de bewegende delen. Zorg dat alle borgbouten aangedraaid zijn zodat er geen speling in de eindpositie ontstaat.

☐ 1.7. Elektrische rem / werking

Controleer of het kastje niet zichtbaar beschadigd is. Controleer de functie van de bewegende delen. Zorg dat alle borgbouten aangedraaid zijn zodat er geen speling in de eindpositie ontstaat.

Controleer alle verbindingen en of de klem op de remas en framebuis stevig vastzitten.

2. Elektrische lift

☐ 2.1. Vreemd geluid / slippende koppeling

Luister naar vreemde geluiden van de lagers in de overbrenging, vervang de elektrische lift als een lager slecht is. De elektrische

lift kan worden verzonden naar Mercado Medic AB voor reparatie / revisie.

Belast de stoel en controleer of de elektrische lift niet slipt in de onderste positie. Pas dit anders aan, zodat de slippende koppeling de juiste weerstand heeft.

☐ 2.2. Draaivergrendeling / smering

Controleer of de elektrische lift geen speling heeft in de richting van de rotatie, vervang de elektrische lift als dit wel het geval is. De elektrische lift kan worden verzonden naar Mercado Medic AB voor reparatie / revisie.

☐ 2.3. Bevestiging / natrekken
Zorg ervoor dat de bevestigingen aan zitkruis en frame stevig zijn aangedraaid.

☐ 2.4. Bekabeling / slijtage
Controleer op slijtage en beknellingschade van kabels.

3. Onderstel

☐ 3.1. Lasnaden
Controleer alle lasnaden zorgvuldig op tekenen van scheuren, corrosie, beweging enz.

☐ 3.2. Schroefverbindingen
Controleer en draai alle schroefverbindingen aan. Vervang schroeven met een beschadigde sleutelgrip of schroefdraad.

4. Remmen

☐ 4.1. Functie / slijtage

Vervang de remvoeten en controleer of de rem naar tevredenheid werkt.

☐ 4.2. Plastic pluggen / geleidebussen

Zorg dat de geleidebussen en plastic pluggen stevig op hun plaats zitten, vervang versleten of beschadigde onderdelen.

5. Zwenkwielen

☐ 5.1. Werking / rijden / zwenken

Verwijder haar en stof van de zwenkwielen en controleer de zwenkwielen en beugels op slijtage en speling, wat kan duiden op slechte lagers. Controleer of de zwenkwielen draaien en of de beugels naar behoren draaien. Vervang indien nodig de zwenkwielen.

☐ 5.2. Bevestiging / natrekken

Controleer of de schroeven van de zwenkwielen heel zijn en goed vastzitten.

6. Zitkruis

☐ 6.1. Mechaniek / lasnaden

Controleer zorgvuldig alle gelaste onderdelen (Vooral bij het ophangen van kantelmechanismen omdat deze onderdelen de meeste belasting te verduren krijgen)

☐ 6.2. Schroefverbindingen / nadraaien

Controleer en draai alle schroefverbindingen aan. Vervang schroeven met een beschadigde sleutelgrip of schroefdraad.

☐ 6.3. Plastic pluggen / geleidebussen

Zorg dat de geleidebussen en plastic pluggen stevig op hun plaats zitten, vervang versleten of beschadigde onderdelen.

☐ 6.4. Zitplaat / vervanging / reiniging

Vervang de zitplaat door een nieuwe en was of vervang eventuele overtrekken

☐ 6.5. Bediening / smeren

Zorg dat de knoppen en draaiknoppen van het zitkruis goed werken en vergrendelen.

☐ 6.6. Gasveer kantelen / werking

Als de stoel is uitgerust met

een kantelmechanisme met een gasveer, controleer dan of deze goed vergrendelt en niet langzaam van kanteelhoek verandert gedurende belasting. Controleer en vervang beschadigde kabels en kabelmantels.

☐ 6.7. Slinger / slijtage

Als de stoel is uitgerust met een slinger, controleer dan of deze niet losraakt en of alle schroeven zijn aangedraaid.

☐ 6.8. Coxitmechanisme / bediening

Controleer of de knoppen voor de kleppen soepel werken en goed vergrendeld zijn met de contramoer.

7. Rugsteunmechanisme

☐ 7.1. Functie / slijtage

Controleer en vervang eventueel versleten onderdelen, zorg ervoor dat de functie van bewegende onderdelen goed werkt.

☐ 7.2. Bevestiging / natrekken

Zorg ervoor dat alle schroeven, knoppen en draaiknoppen goed vergrendelen, zorg dat de geveerde vergrendeling foutvrij werkt.

☐ 7.3. Plastic pluggen / geleidebussen

Zorg dat de geleidebussen en plastic pluggen stevig op hun plaats zitten, vervang versleten of beschadigde onderdelen.

☐ 7.4. Rugplaat / vervanging / reiniging

Vervang de rugplaat door een nieuwe en was of vervang eventuele overtrekken

☐ 7.5. Gasveerhendel / werking

Controleer de gasdruk en stabiliteit van de gasveer, zorg ervoor dat hij goed vergrendelt en dat de rugsteun niet langzaam van hoek verandert wanneer deze wordt belast. Controleer en vervang beschadigde kabels en kabelmantels.

8. Armsteunen

☐ 8.1. Functie / slijtage

Controleer en vervang eventueel versleten onderdelen, zorg ervoor dat de functie en vergrendeling van bewegende onderdelen goed werkt.

☐ 8.2. Plastic pluggen / geleidebussen

Zorg dat de geleidebussen en

plastic pluggen stevig op hun plaats zitten, vervang versleten of beschadigde onderdelen.

☐ 8.3. Armsteunplaten / vervanging / reiniging

Vervang de armsteunplaten door nieuwe.

☐ 8.4. Armsteunmechanica / werking

Controleer alle lassen en of er geen schade aan het buizensysteem zit, die de constructie kan aantasten of verzwakken.

9. Accessoires

☐ 9.1. Herstel

Verwijder de accessoires die normaal gesproken niet op de stoel zitten en controleer ze zoals hieronder weergegeven voordat u ze eventueel terugstuurt naar het magazijn.

☐ 9.2. Mechaniek

Controleer alle lassen en of er geen schade aan het mechaniek is, die de constructie kan aantasten of verzwakken.

☐ 9.3. Functie / slijtage

Controleer en vervang eventueel versleten onderdelen, zorg ervoor dat de functie en vergrendeling van bewegende onderdelen goed werkt.

☐ 9.4. Gevulde onderdelen

Gooi gevulde onderdelen weg om besmetting te voorkomen, gooi bekleding weg of was deze volgens de wasinstructies.

10. Eindcontrole

☐ 10.1. Proefrit

Test de functies van de stoel en controleren of alle functies, elektrische functies en remmen naar behoren werken. Als de stoel moet worden opgeslagen, wordt deze in ruststand gezet met de beoogde 9V-adapter om de accu's te sparen.

NEEM CONTACT OP MET MERCADO

Hoofdkantoor

Bezoekadres
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö, Zweden

Postadres
Box 1074, 181 22 Lidingö, Zweden

Kantoortijden: Ma-vr 08.00-16.30 uur

Tel: +46 (0)8-555 143 00

Fax: +46 (0)8-555 143 99

E-mail: info@mercado.se

Service en technische ondersteuning

Telefoontijd ma-vr
08.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.

Tel: +46 (0)8-555 143 08

Fax: +46 (0)8-555 143 99

Mobiel: +46 (0)70-550 63 98, +46 (0)70-894 63 68

E-mail: service@mercado.se

[Plaats voor productetiket met serienummer.]