





ELBROMS REAL 9000 PLUS

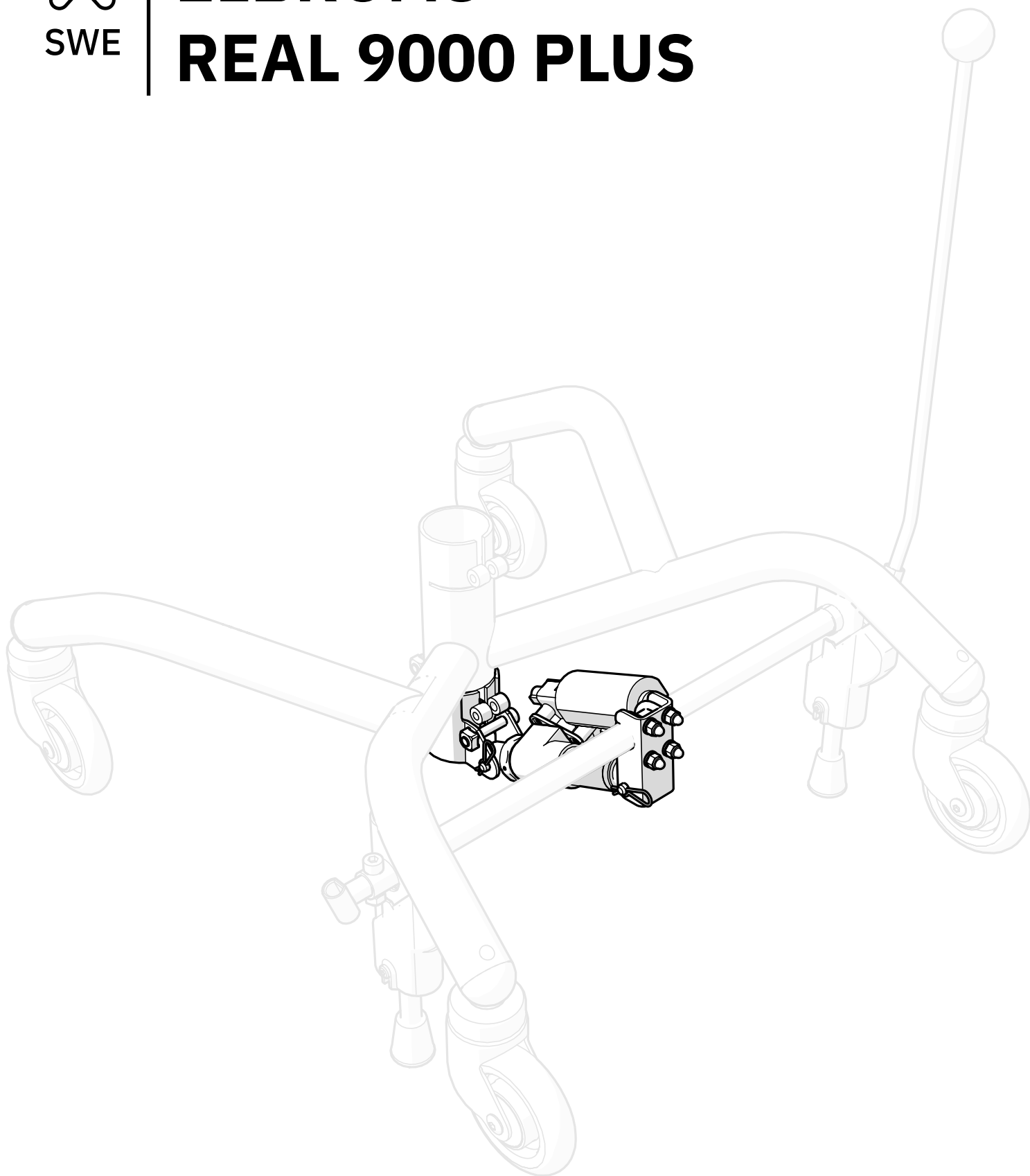

Innehållsförteckning

1. Artikellista	3
2. Varningar	3
3. Monteringsinstruktion	4
3.1. Klämskydd	4
3.2. Bromsa stativet	4
3.3. Montera fästena	5
3.4. Montera motorn	6
3.5. Koppla in elektroniken	6
3.6. Kontrollera och eventuellt justera	7
3.7. Ställ in motorn	8
3.8. Positionering av bromskam	9
4. Skötselråd	10
5. Destruktion och återvinning	10

1. Artikellista

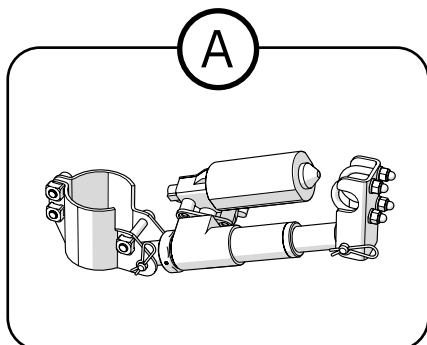

- Ⓐ 803037 Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
Electric kit for seat electric brake for PLUS
- 803067 Reläkortssats broms+upp/ner kpl inkl. Eldonsats elbr. Plus
Relaycardkit brake + up/down compl. incl.el.kit elbr.Plus
- 803077 Eldonskit f elbroms f manuell 9000 stol PLUS inkl batteri
Electric kit for el.brake for manual 9000P incl battery
- 803273 Eldon+Reläsats f broms f 9000 Plus exkl laddbox
Electric kit + relaycard for el.brake excl.chargerbox
- 803276 Eldon+Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus tunga
Electric kit + relaycard for brake incl.maneuverbox
- 803899 Eldon+Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus slät
Electric kit+Relay f 9000P f brake incl device flat
- 804482 Eldonssats broms Inkl Manbox utan tunga 24V 1G
Actuator for el.brake incl.maneuverbox flat 24V 1G
- 804498 Eldonssats broms 24V 1G
Actuator for el.brake 24V 1G
- 804521 Eldon+Reläsats f 9000 Plus bromsknapp fram inkl manbox
Electric kit + relaycard f 9000 PLUS brake button front
incl. maneuverbox
- 804548 Elbromskit kpl f manuell stol m manöverbox u tunga 24V 1G
El.brake kit for man.chair incl.maneuverbox flat 24V 1G
- 804621 Eldonssats broms Inkl manbox med tunga 24V 1G
Actuator for el.brake incl. maneuverbox ext button 24V 1G
- 804627 Elbromskit kpl f manuell stol m manöverbox med tunga 24V 1G
El.brake kit man.chair incl. maneuverbox ext button 24V 1G

2. Varningar

**Varning!**

1. Klämrisk mellan bromskam och stativ om klämskydd saknas.
2. Klämrisk mellan ställdon och bromsaxel under montering.

3. Monteringsinstruktion

Större delen av instruktionen kommer visas för bakåtbromsat stativ, men instruktionen gäller även för framåtbromsade stativ.



i Monteringsinstruktionen kompletteras med *Kopplingsguide 24V1G* alternativt *Kopplingsguide f REAL 9000 PLUS 12V* som går att hitta på [mercado.se](https://www.mercado.se).

3.1. Klämskydd


Kontrollera att klämskydd finns monterat. Saknas det så går det att beställa i vår webshop. Artikelnummer 805192.



Elbroms får inte användas utan klämskydd monterat!

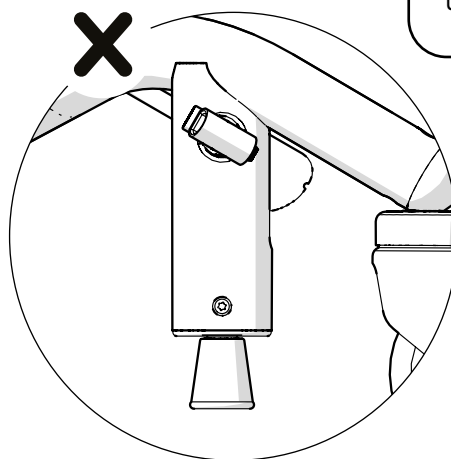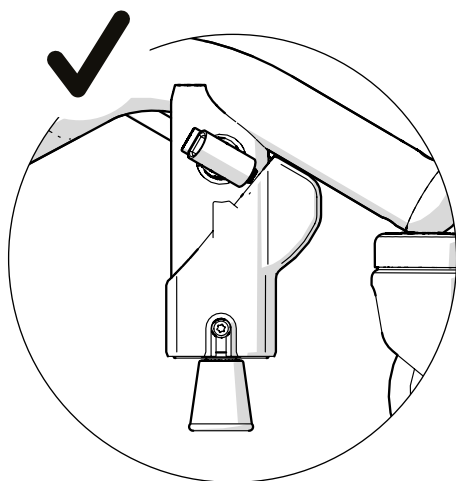


3.2. Bromsa stativet

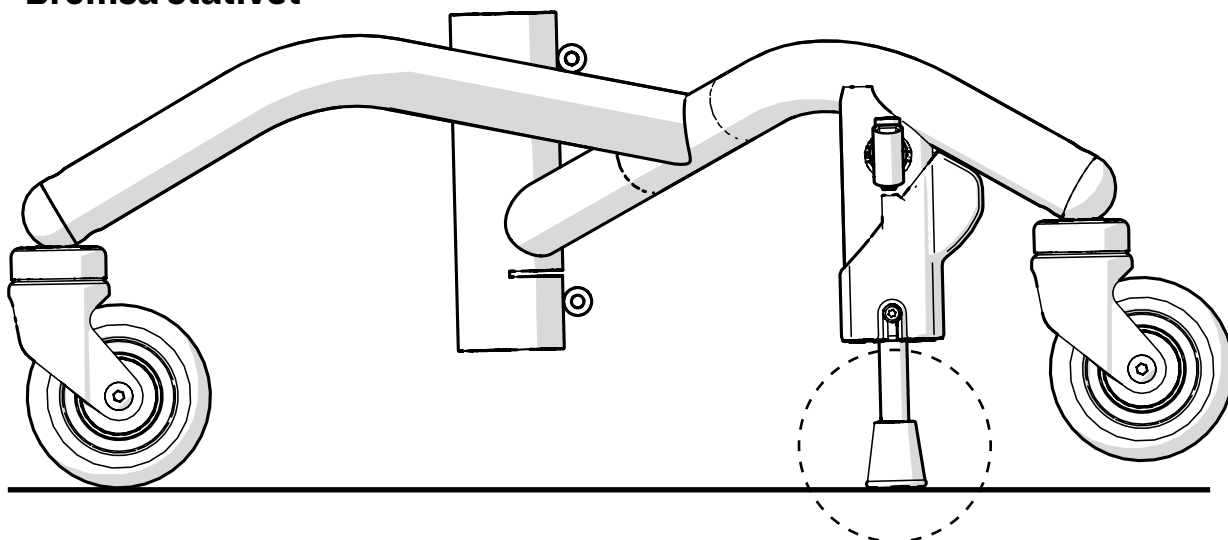

3.3. Montera fästena

Montera respektive fäste på centrumröret och bromsaxeln.
Skruva in skruvarna för hand utan att dra åt hårt.

- i** Båda fästena ska gå att justera. De dras åt och säkras i senare monteringssteg.

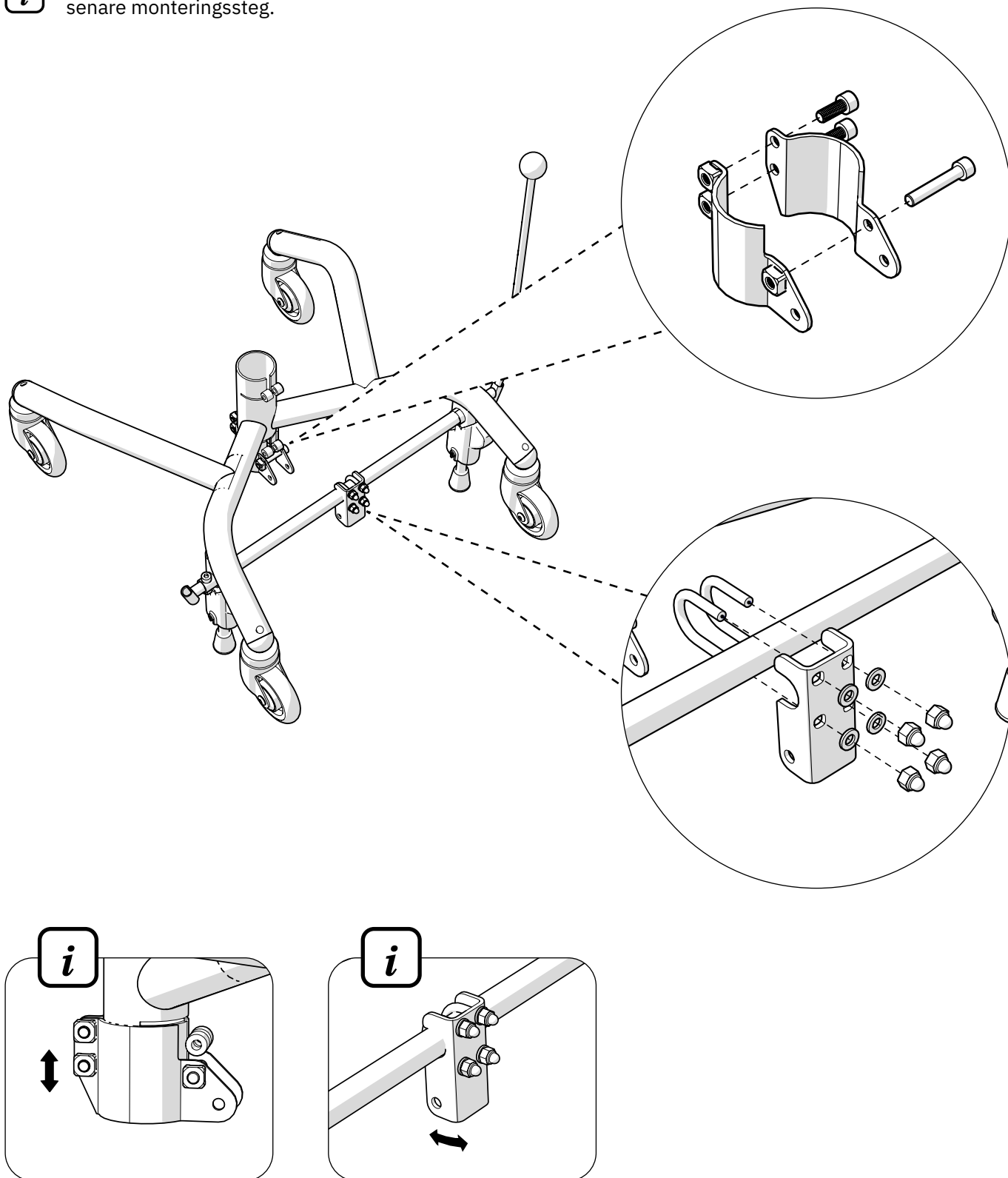


3.4. Montera motorn

Montera motorn i båda fästen med hjälp av cylinderbultarna. Lås cylinderbultarna med hjälp av låssprintarna.


3.5. Koppla in elektroniken

För information kring hur elektroniken ska kopplas in se dokumentet *Kopplingsguide 24V1G* alternativt *Kopplingsguide f REAL 9000 PLUS 12V* som går att hitta på [mercado.se](https://www.mercado.se).


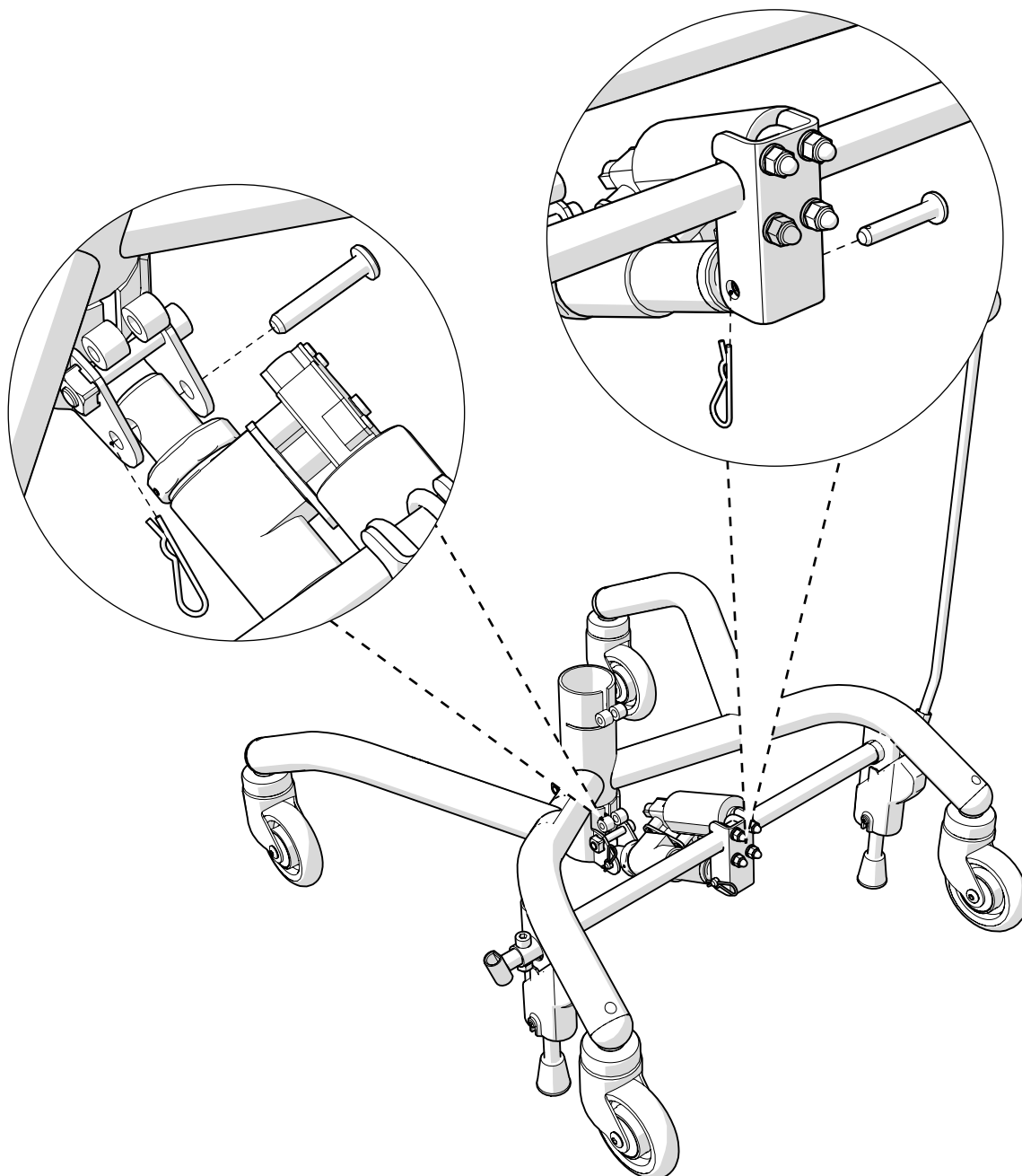


3.6. Kontrollera och eventuellt justera

Kontrollera att ställdonets axel inte kolliderar med bromsaxelfästet eller bromsaxeln. Vid risk för kollision, justera centrumfästets position i höjled. När det inte finns kollisionsrisk eller klämrisk, dra åt skruvarna.

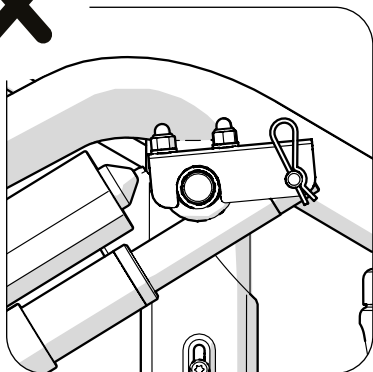

Notera klämrisk mellan
ställdon och bromsaxel.

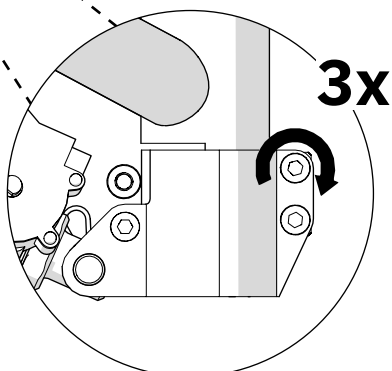
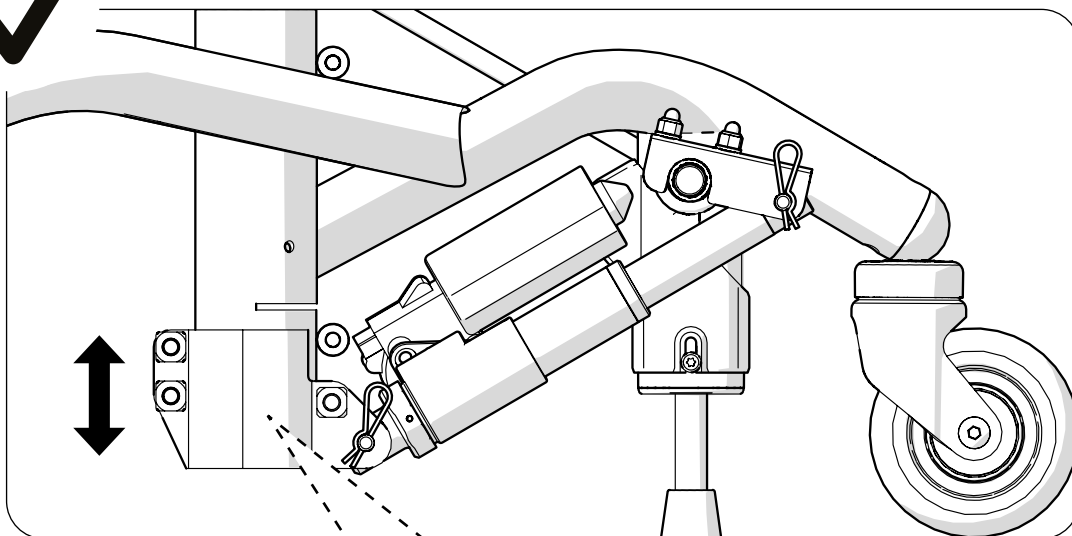


3.7. Ställ in motorn



Börja med att ta reda på vilken typ av stativ bromsen monteras på. Undersök detta genom att kolla åt vilket håll bromskammen och bromsskyddet på bromsbenet pekar åt (se illustrationerna nedan). Pekar de bakåt är stativet bakåtbromsat och pekar de framåt är stativet framåtbromsat.

Aktivera bromsfunktionen så att ställdonet hamnar i dess ändläge enligt bild nedan.

Bakåtbromsat

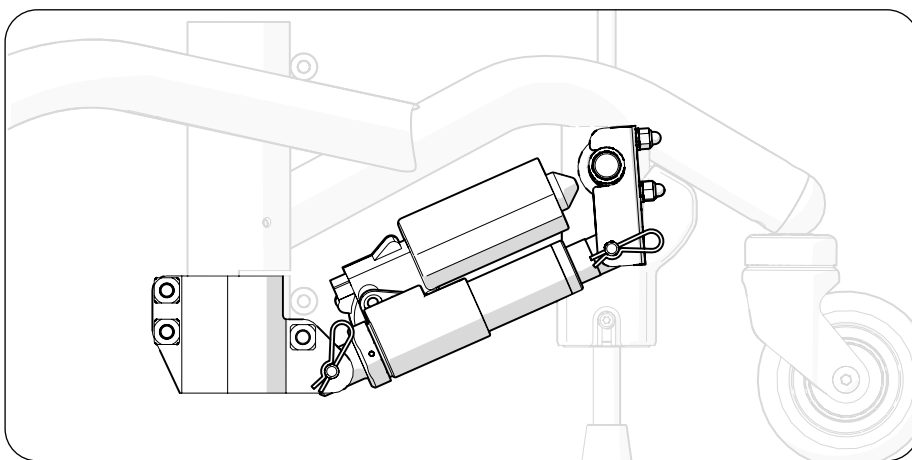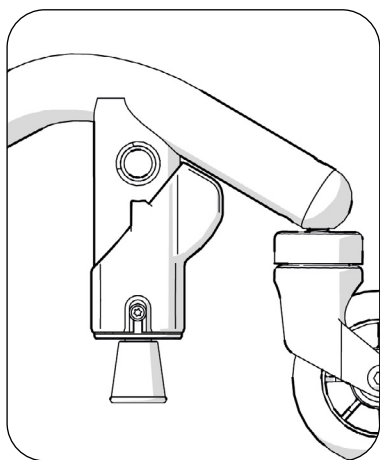


Framåtbromsat

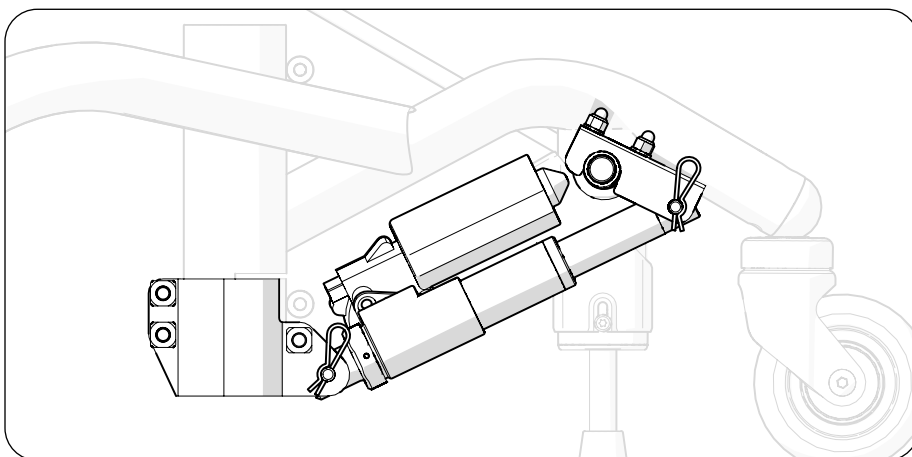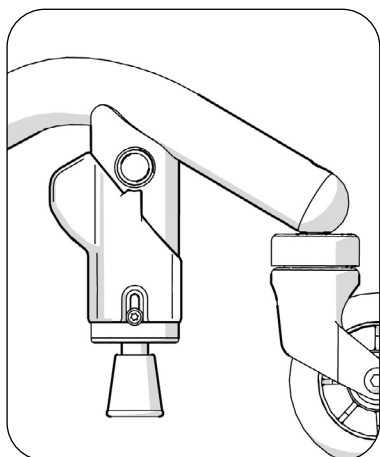

3.8. Positionering av bromskam

Säkerställ att stativet är bromsat.



Från bromsat läge, vinkla bromsspaken ca 5 grader framåt (illustrationen nedan visar bakåtbromsat stativ). Håll kvar bromsspaken och dra samtidigt åt de 4 kupolmuttrarna på axelfästet. Alla muttrar ska dras åt jämnt och med samma kraft.

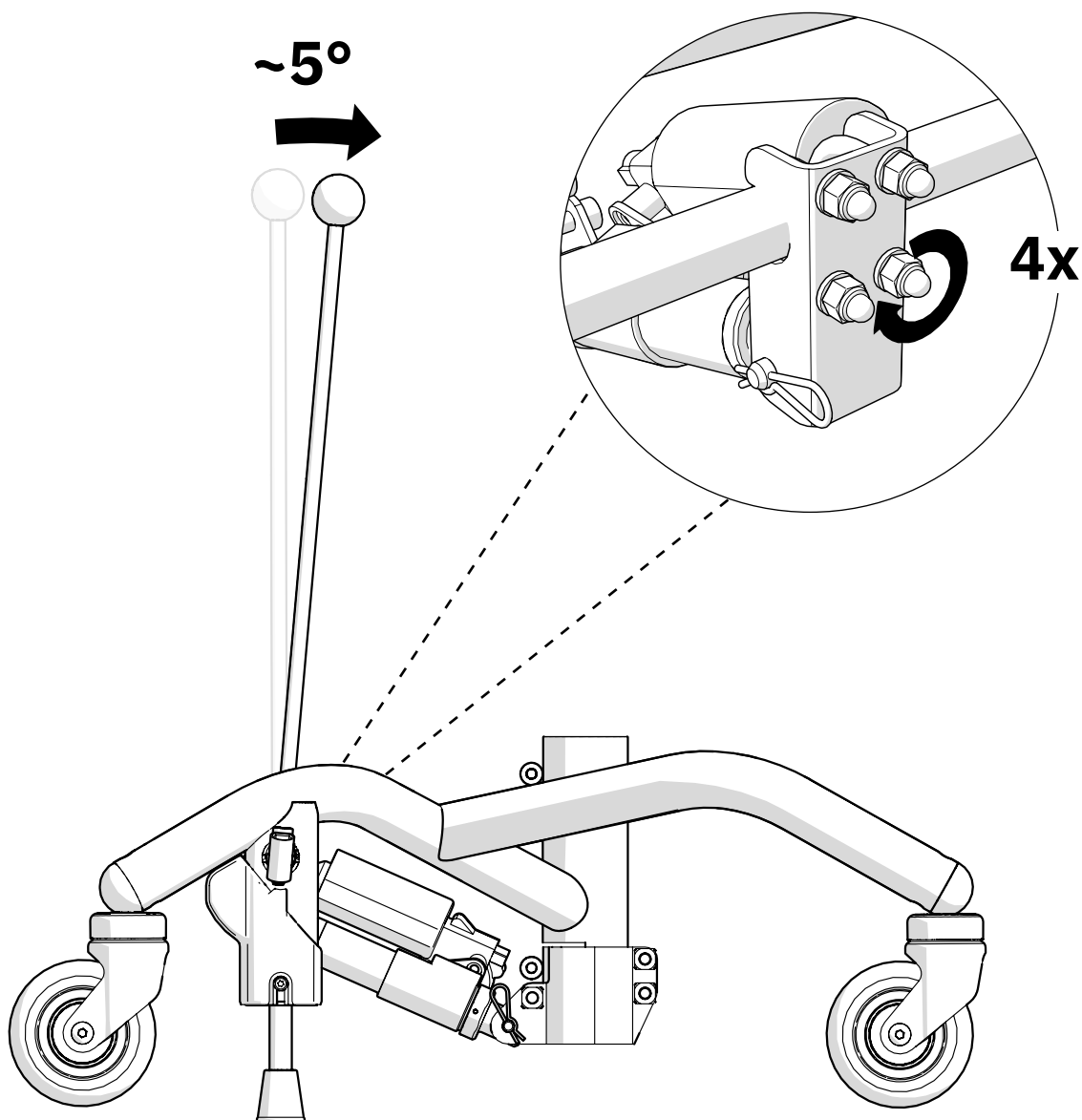

4. Skötselråd

Inga specifika skötselråd för denna artikel. Följ råden i bruksanvisningen.

5. Destruktion och återvinning

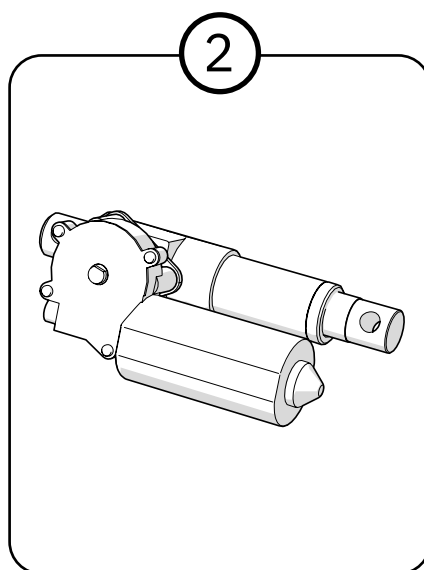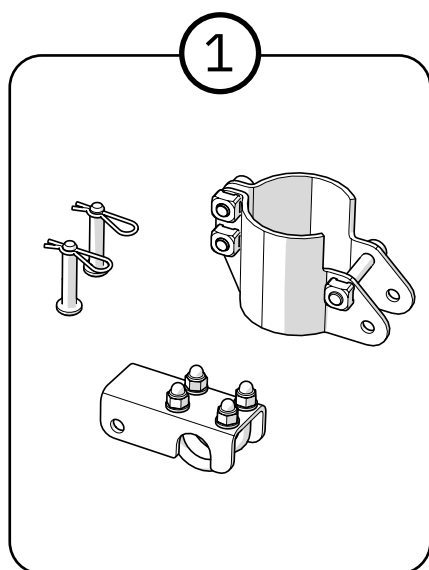

1. Sorteras som metall
2. Sorteras som elektronik

Kontaktinformation

Mercado Medic AB



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö



08-555 143 00
Mån-Fre 08.00-16.30



www.mercado.se
info@mercado.se