





ELBROMS REAL 9000 PLUS

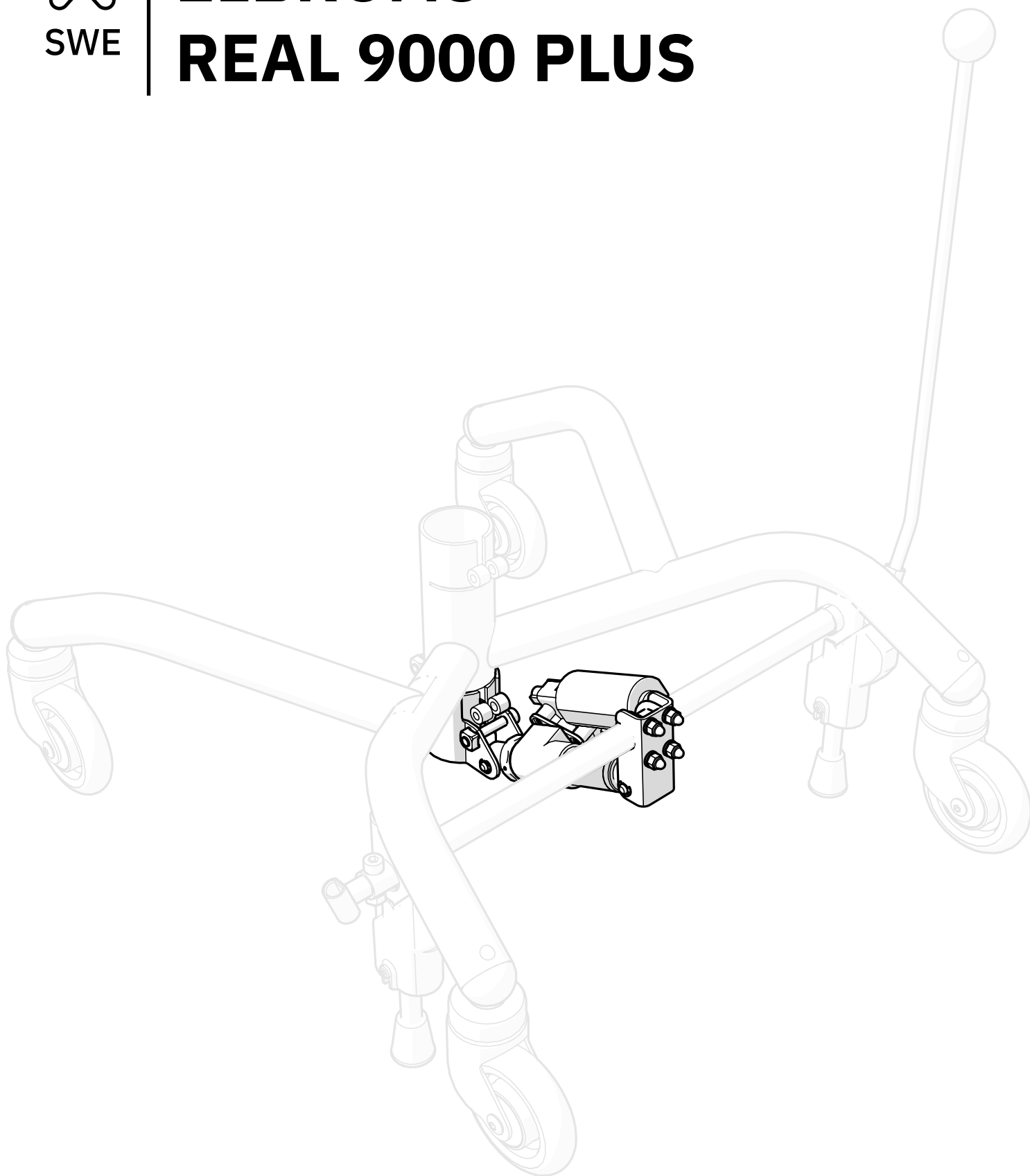

Innehållsförteckning

1. Artikellista	3
2. Nödvändiga verktyg	3
3. Varningar	3
4. Monteringsinstruktion	4
4.1. Klämskydd	4
4.2. Bromsa stativet	4
4.3. Montera fästena	5
4.4. Montera elställdonet	6
4.5. Koppla in elektroniken	6
4.6. Kontrollera och eventuellt justera	7
4.7. Ställ in elställdonet	8
4.8. Positionering av bromskam	9
5. Skötselråd	10
6. Destruktion och återvinning	10

1. Artikellista

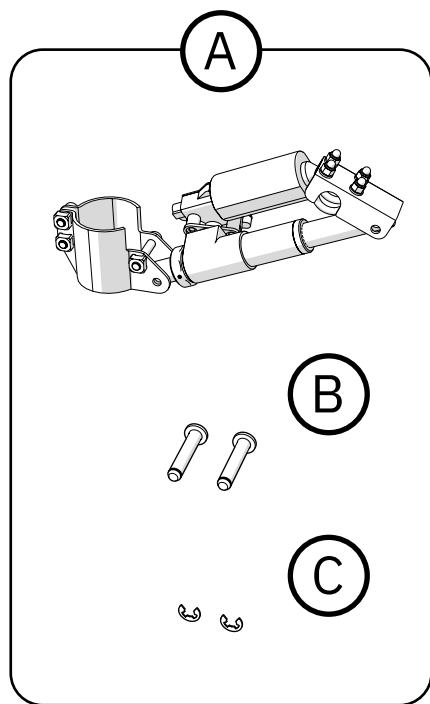

- Ⓐ 803037 Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
- 803067 Reläkortssats broms+upp/ner kpl inkl. Eldonsats elbr. Plus
- 803077 Eldonskit f elbroms f manuell 9000 stol PLUS inkl batteri
- 803273 Eldon+Reläsats f broms f 9000 Plus exkl laddbox
- 803276 Eldon+Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus tunga
- 803899 Eldon+Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus slät
- 804482 Eldonssats broms Inkl Manbox utan tunga 24V 1G
- 804498 Eldonssats broms 24V 1G
- 804521 Eldon+Reläsats f 9000 Plus bromsknapp fram inkl manbox
- 804548 Elbromskit kpl f manuell stol m manöverbox u tunga 24V 1G
- 804621 Eldonssats broms Inkl manbox med tunga 24V 1G
- 804627 Elbromskit kpl f manuell stol m manöverbox med tunga 24V 1G

Ⓑ 805266 Cylindrisk bult fzb f. spårryttare

Ⓒ 805267 Spårryttare RWS 6

2. Nödvändiga verktyg

- Insexnyckel 6 mm
- Blocknyckel 10 mm
- Verktyg för att demontera spårryttare - liten spårmejsel (Ø3 mm eller mindre) till exempel.
- Verktyg för att montera spårryttare - tång till exempel.

Monteringsinstruktionen kompletteras med *Kopplingsguide 24V1G* alternativt *Kopplingsguide f REAL 9000 PLUS 12V* som går att hitta på [mercado.se](https://www.mercado.se).

3. Varningar



Varning!

1. Klämrisk mellan bromskam och stativ om klämskydd saknas.
2. Klämrisk mellan ställdon och bromsaxel under montering.

4. Monteringsinstruktion



Större delen av instruktionen kommer visas för bakåtbromsat stativ, men instruktionen gäller även för framåtbromsade stativ.

4.1. Klämskydd


Kontrollera att klämskydd finns monterat. Saknas det så går det att beställa i vår webshop. Artikelnummer 805192.



Elbroms får inte användas utan klämskydd monterat!

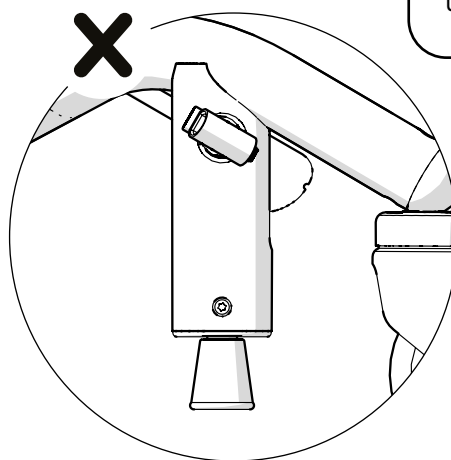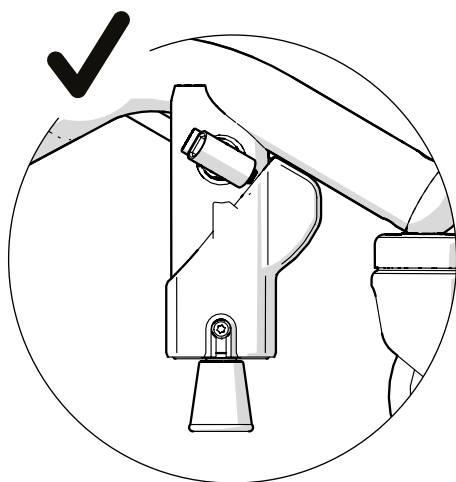


4.2. Bromsa stativet

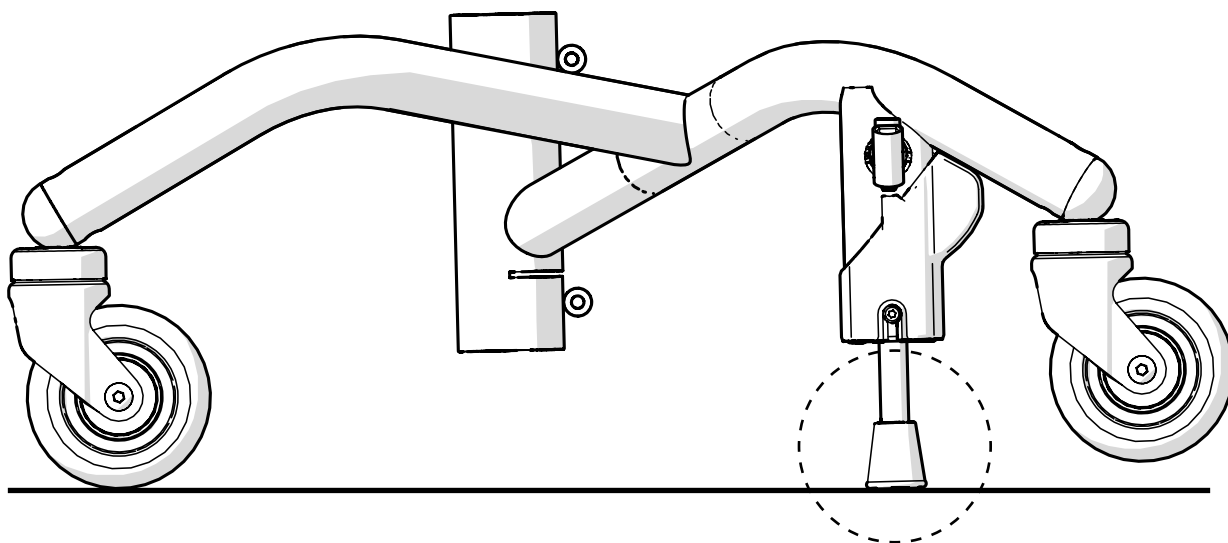

4.3. Montera fästena


Montera respektive fäste på centrumröret och bromsaxeln.
Skruva in skruvarna för hand utan att dra åt hårt.

i Båda fästena ska gå att justera. De dras åt och säkras i senare monteringssteg.

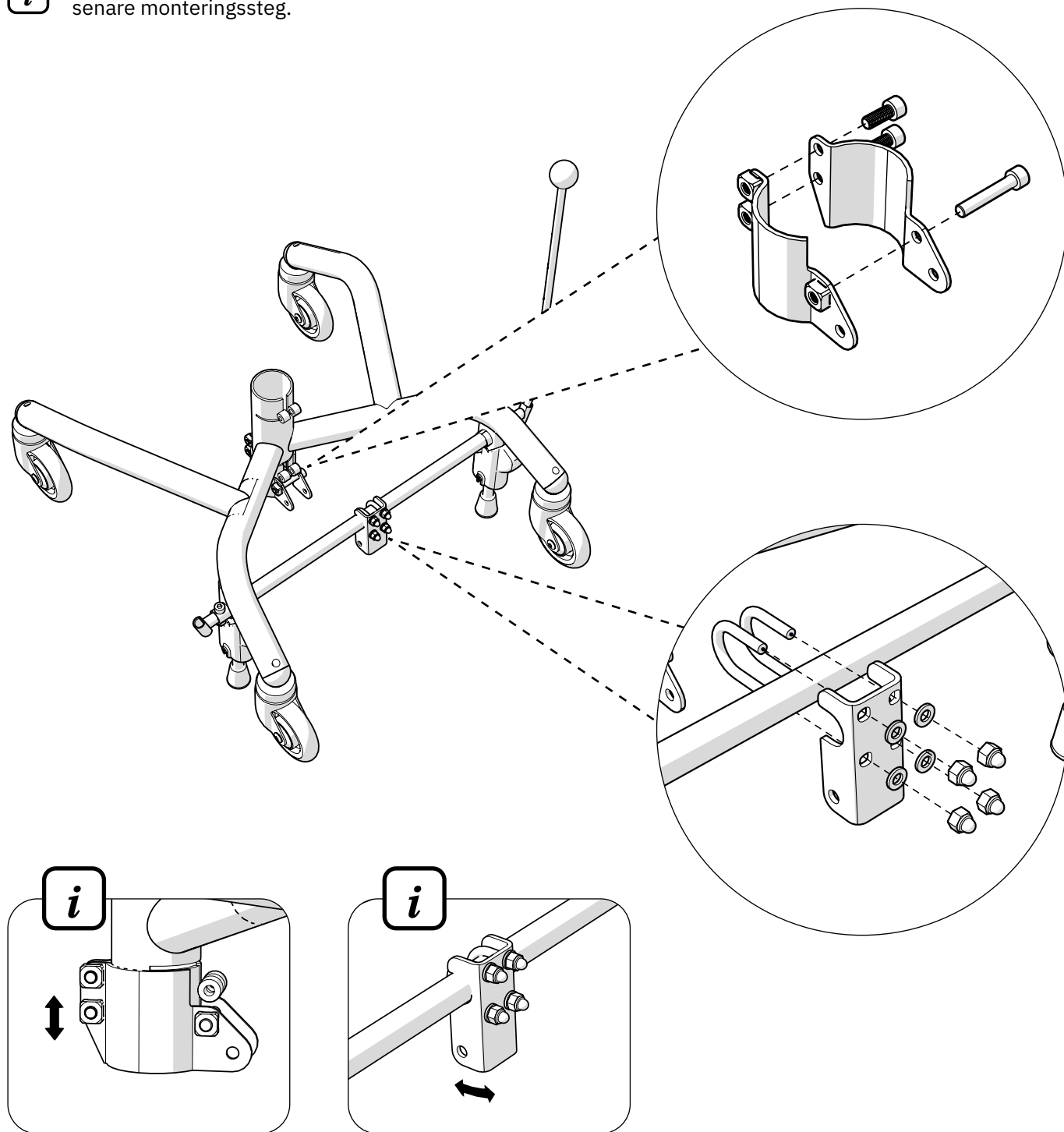

4.4. Montera elställdonet

Tryck igenom de cylindriska bultarna så att elställdonet fixeras. Lås de cylindriska bultarna med hjälp av spårryttarna.

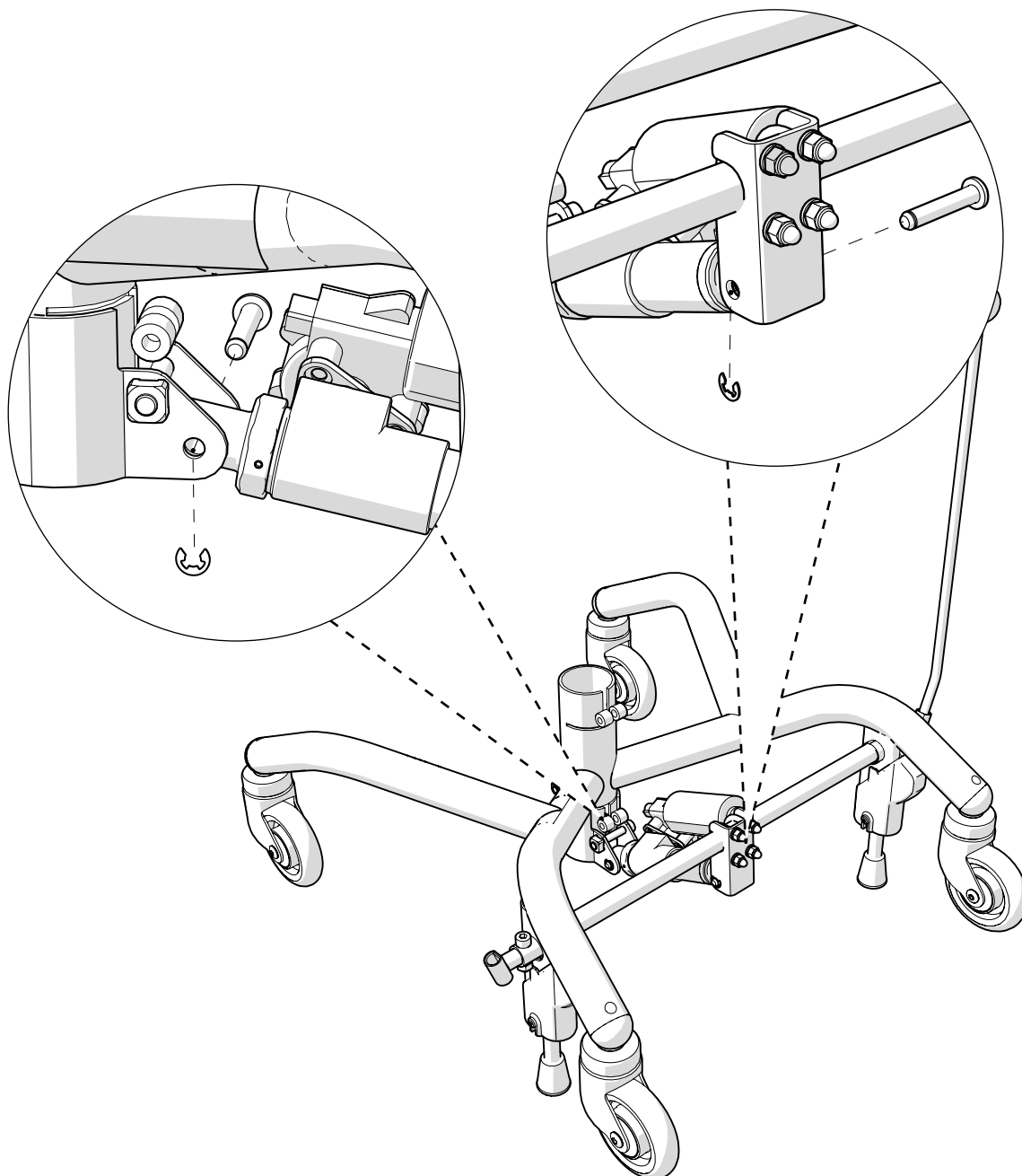


4.5. Koppla in elektroniken



För information kring hur elektroniken ska kopplas in se dokumentet *Kopplingsguide 24V1G* alternativt *Kopplingsguide f REAL 9000 PLUS 12V* som går att hitta på [mercado.se](https://www.mercado.se).

4.6. Kontrollera och eventuellt justera

Kontrollera att ställdonets axel inte kolliderar med bromsaxelfästet eller bromsaxeln. Vid risk för kollision, justera centrumfästets position i höjdlid. När det inte finns kollisionsrisk eller klämrisk, dra åt skruvarna.

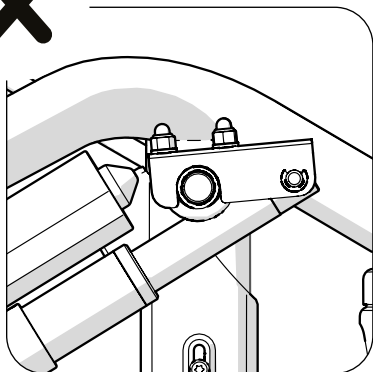

Notera klämrisk mellan
ställdon och bromsaxel.

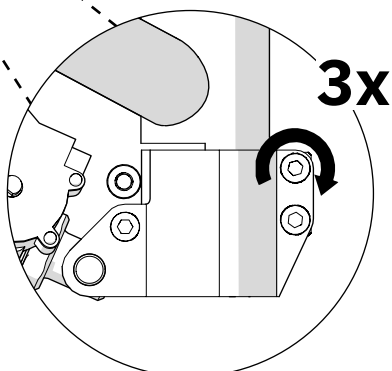
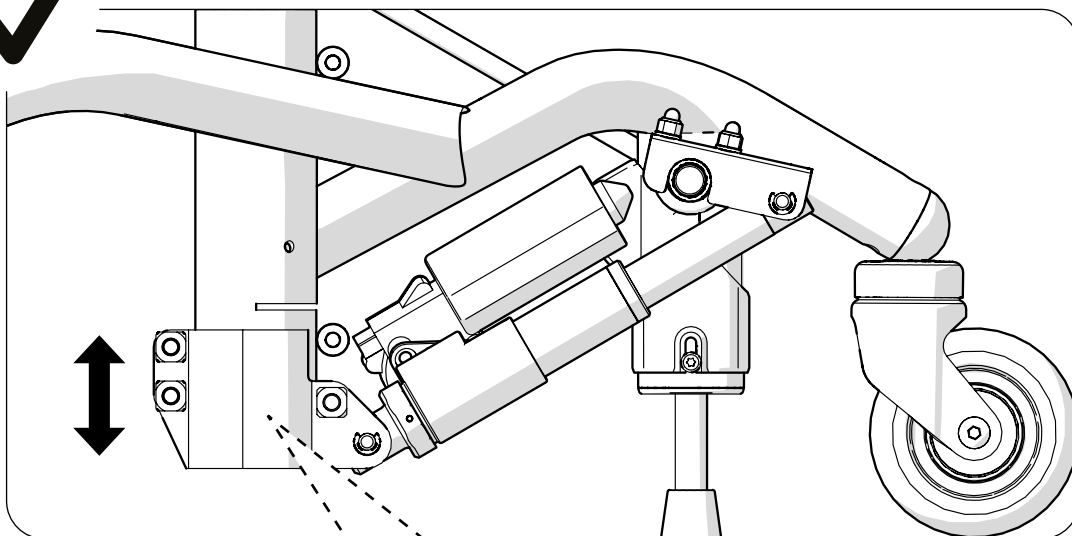


4.7. Ställ in elställdonet



Börja med att ta reda på vilken typ av stativ bromsen monteras på. Undersök detta genom att kolla åt vilket håll bromskammen och bromsskyddet på bromsbenet pekar åt (se illustrationerna nedan). Pekar de bakåt är stativet bakåtbromsat och pekar de framåt är stativet framåtbromsat.

Aktivera bromsfunktionen så att ställdonet hamnar i dess ändläge enligt bild nedan.

Bakåtbromsat

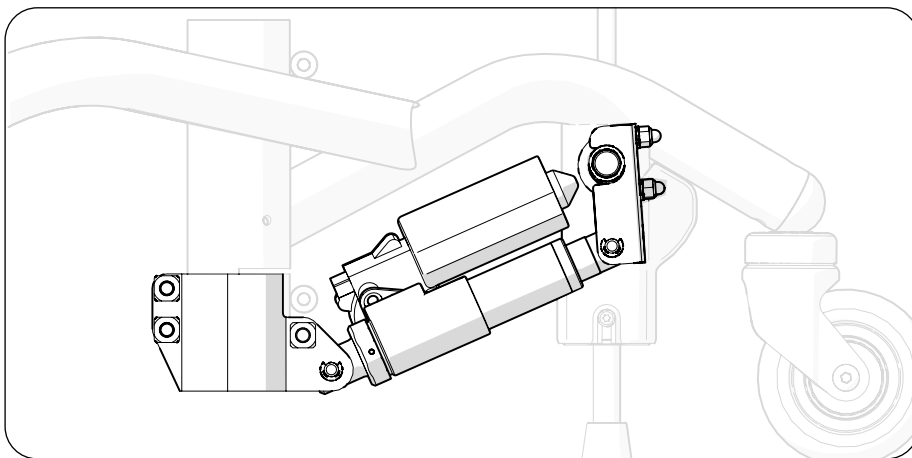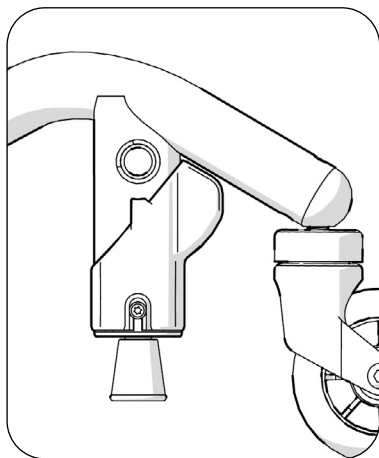


Framåtbromsat

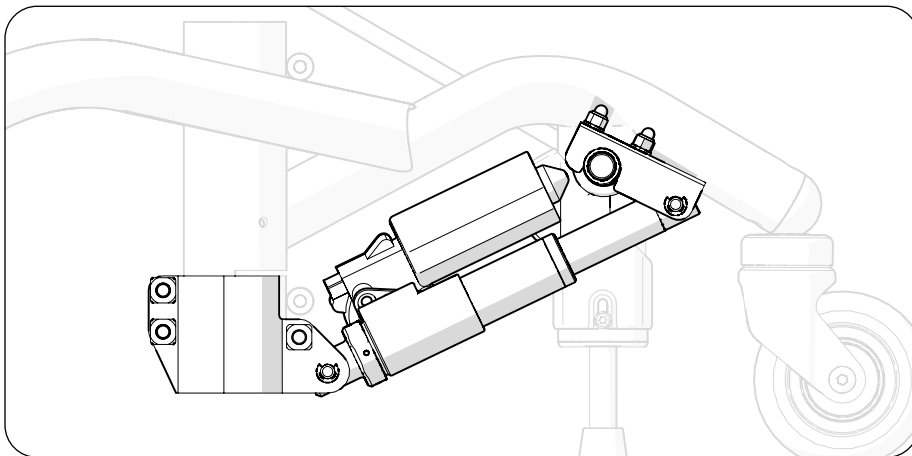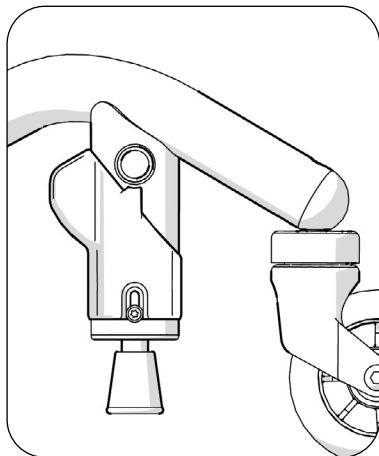

4.8. Positionering av bromskam

Säkerställ att stativet är bromsat.



Från bromsat läge, vinkla bromsspaken ca 5 grader framåt (illustrationen nedan visar bakåtbromsat stativ). Håll kvar bromsspaken och dra samtidigt åt de 4 kupolmuttrarna på axelfästet. Alla muttrar ska dras åt jämnt och med samma kraft.

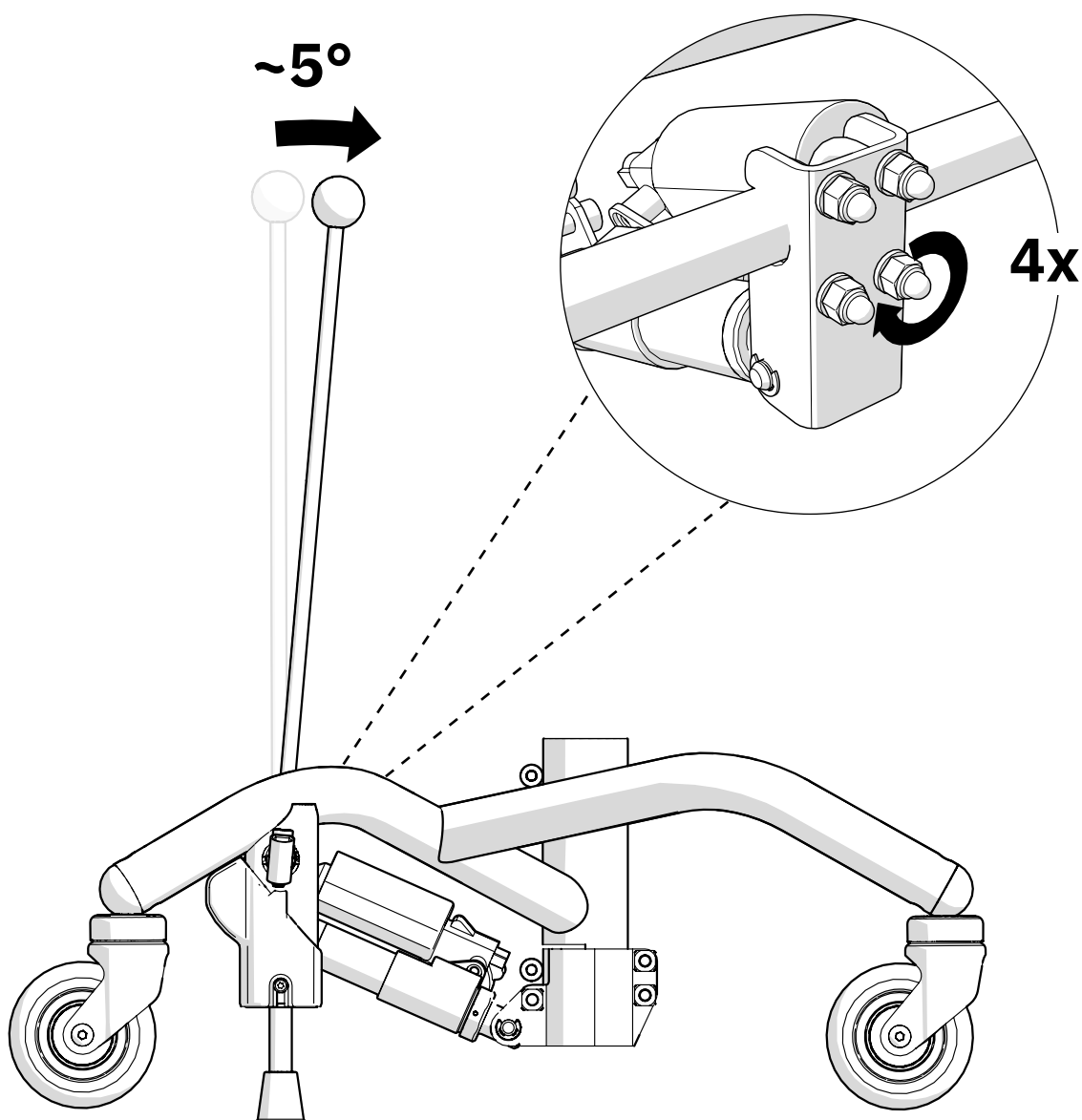

5. Skötselråd

Inga specifika skötselråd för denna artikel. Följ råden i bruksanvisningen.

6. Destruktion och återvinning

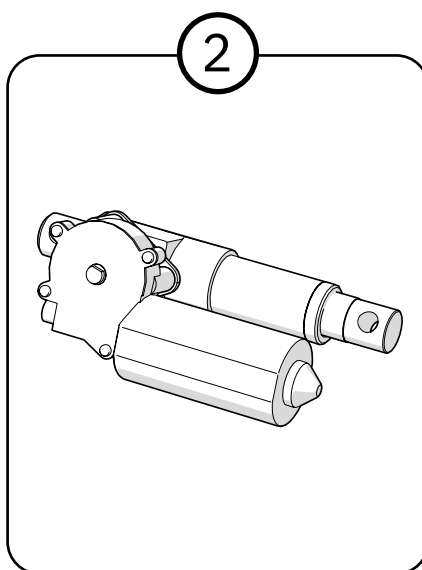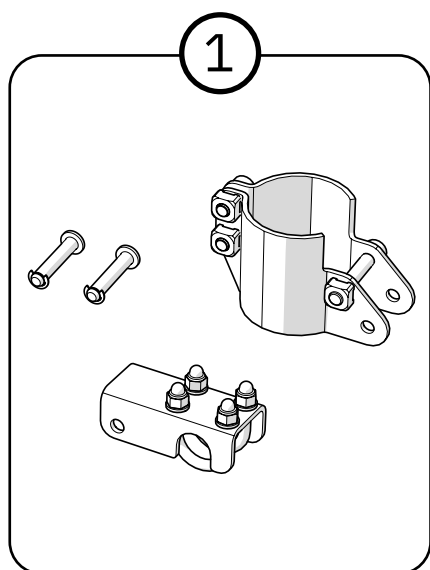

1. Sorteras som metall
2. Sorteras som elektronik

Kontaktinformation

Mercado Medic AB



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö



08-555 143 00
Mån-Fre 08.00-16.30



www.mercado.se
info@mercado.se