

Körhandtag Optimal

REAL 9000 PLUS

Dok.nr: 20-06639

Revision: 02

Ändrad: 2024-07-24

Giltig från: 2017-11-01


Artikel	Art.nr.
Körhandtag Optimal för PLUS-stativ hö+vå kpl.	PB1020
Nödvändiga verktyg	
T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)	800897

Instruktioner

! För elstol med låg sitthöjd behöver ellyftmaten höjas för att komponenter inte ska krocka. För instruktioner på positionering av ellyftomat, se monteringsanvisning "Byte av ellyftomat". Finns att hitta på www.mercado.se.

- Placera klämhylsans två halvor över knutpunkten för stativets rör, med den lösa änden emellan halvorna och halvan med gängade hål på undre sidan av stativet.
- Innan du placerar de sex M6-skruvarna i ett varsitt skruvhål så ska det användas fett för att skruven ska lättare nypa åt. Skruvskallarna skall vara på ovansidan av stativet för att vara så lättillgängliga som möjligt.
- Dra åt de fyra skruvar som ska förbinda klämhylsans båda halvor så att dessa, tillsammans med klämhylsans ände, hålls på plats på stativet - men inte hårdare än att änden kan rotera i sin position mellan halvorna.
- Montera teleskophandtaget i klämhylsans ände.
- Rotera teleskophandtaget till önskad position och dra åt de fyra skruvar som förbinder klämhylsans båda halvor. Se till att klämhylsans ände nu är låst i sin position och inte går att rotera längre.
- Placera teleskophandtaget så att dess yttre rör sticker ut 4-5 cm igenom klämhylsans ände alt. så mycket eller lite så att önskad justermån för teleskophandtagets längd fås. Dra åt de två skruvar som går igenom klämhylsans ände. Se till att teleskophandtaget nu är låst i sin position.
- Upprepa steg 1-6 på andra sidan av stativet.

OBS! Avståndet mellan ellyftomatens underdel och golvet ska vara 30 mm.

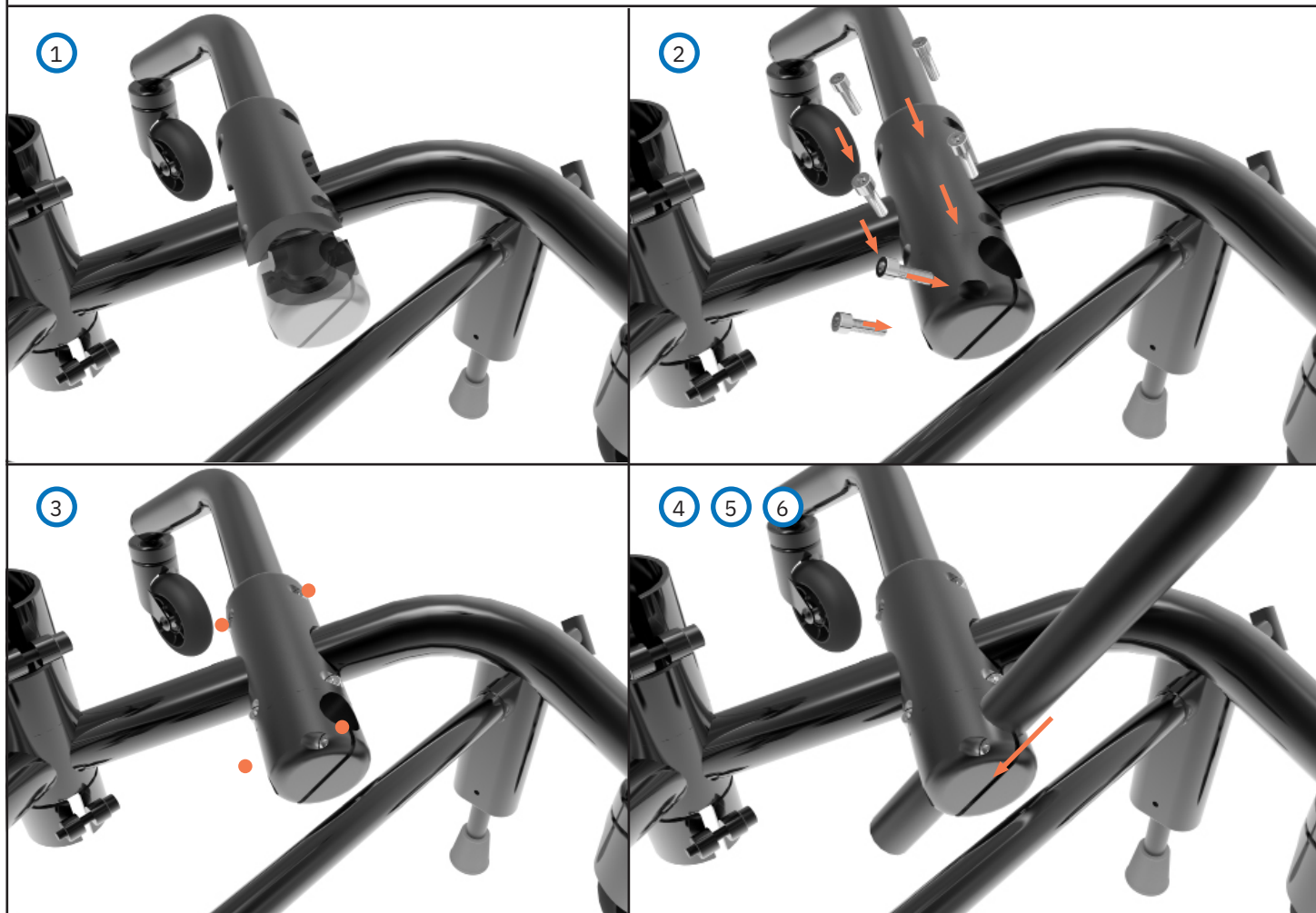

Bruksanvisning - Justering och användning av körhandtag Optimal

Körhandtag Optimal kan justeras in för alla REAL 9000 Plus modeller med stativ 43X53 eller 48x53 med olika bredd och höjd på sättenheten. Man kan då få ett körhandtag som inte breddar stolen mer än nödvändigt för att uppnå en bekväm och säker inställning av körhandtaget. Måttet mellan handtagen behöver inte vara bredare än att ryggplattan inklusive extra tillbehör får plats utan att körhandtagen är i vägen för den som sitter i stolen.


Genom att lossa på skruvarna (A) så kan man sänka/höja eller rotera teleskophandtagets nedre del tills önskad bredd och djup uppnås. Man kan även tilta körhandtagen utåt/inåt genom att lossa skruvarna (B).

Lossa både skruvarna (A) och (B) för att lätt och snabbt hitta ett idealiskt läge för körhandtagen. Dra sedan åt skruvarna (A) och (B) igen och provbelasta så de sitter fast. Genom att lossa vreden (C) så kan man justera höjd och vinkel på handtagen.

OBS! Stolen bör vara max tildad bakåt vid injustering så man undviker klämrisk senare vid tilt.

För att undvika belastningsskador bör man inte förflytta stolen med vinklade handleder.

Man bör ej heller justera handtagen högre än sin egen armbåge.

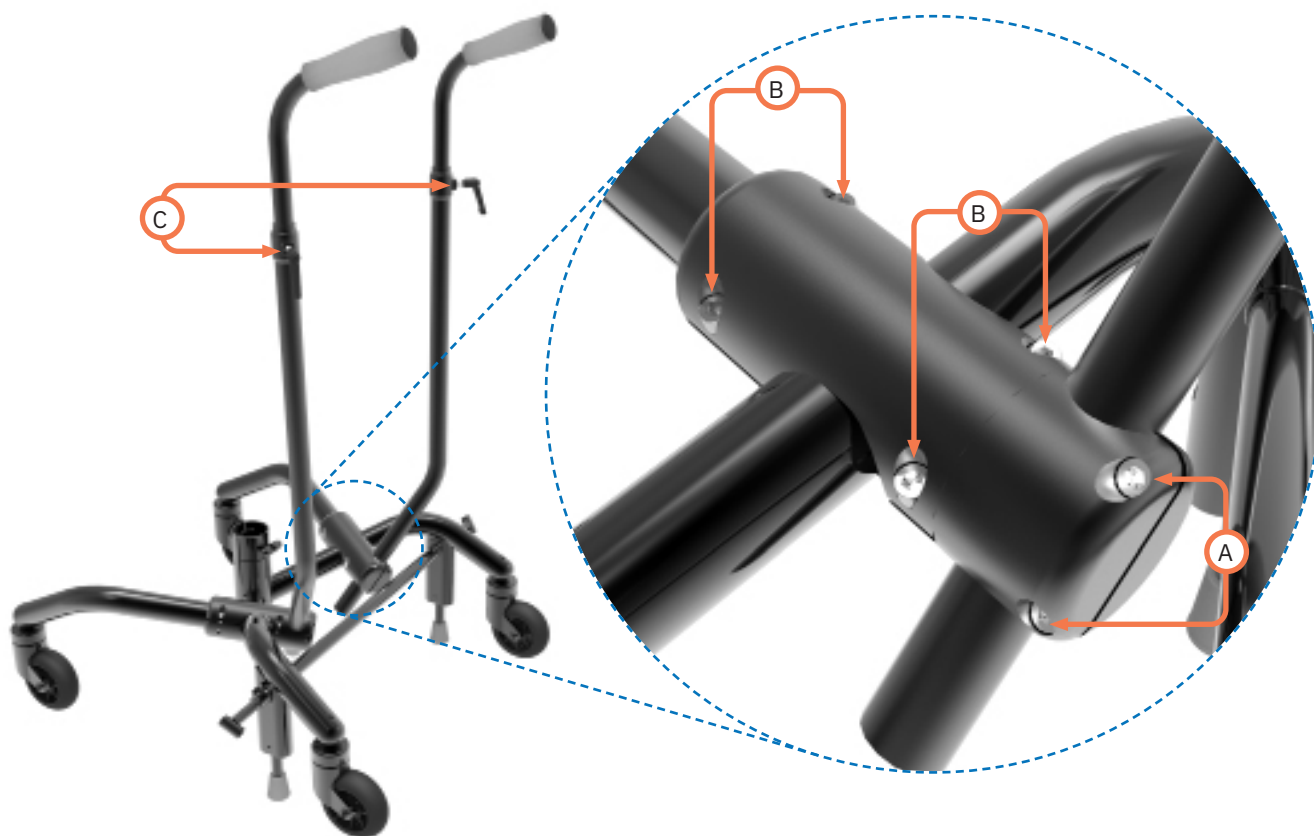

Destruktionsanvisningar

Brännbart:

- Plastdetaljer

Metall:

- Övriga metalleder av produkter sålda utav Mercado Medic AB



Mercado Medic AB
Tryffelsgatan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se

