



REAL® 9000 PLUS



**KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET REAL 9000 PLUS/
SÄHKÖ/AIKUINEN/LAPSI/MINI/COXIT**


Asiak. 20-07313-FI-03
Tuotenro 803410
Muutettu 2020-12-04
Voimassa alkaen 2007-06-01

REAL 9000 PLUS on luokan I lääkinällinen laite. Se on CE-merkitty Ruotsin Lääkeviraston lääkinällisiä laitteita koskevan säädöskokoelman LVFS 2003:11 mukaisesti ja se on testattu ja hyväksytty standardien EN 1335, IEC 60601 ja EN 12182 mukaisesti. Kaikki tuolin tekstiilit on testattu ja hyväksytty standardien EN 1021-1 ja EN 1021-2 mukaisesti. Mercado Medic AB on sertifioitu standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 13485 mukaan ja täyttää sovellettavan työ- ja ympäristölainsäädännön vaatimukset.


Jos sinulla on kysyttävää tuotteestasi tai jos jotain odottamatonta on tapahtunut, ota ensi sijassa yhteyttä lääkäriisi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä Mercado Medic AB:ssä.

Käyttö- ja hoito-ohjeidemme PDF-versiot suurenusmahdollisuuksin löytyvät verkkosivuiltamme www.mercado.se. Sivuilta löydät myös tietoa Mercado Medic -tuoleihin asennettavista lisävarusteista sekä mahdolliset turvallisuusilmoitukset markkinoille, tukea tuotteiden ja lisävarusteiden määräämiseen tai tuotteiden ja lisävarusteiden takaisinkutsut.


Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän käsikirjaan ja sen sisältöön.

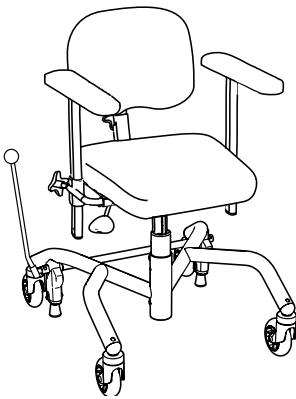


☐ REAL PLUS

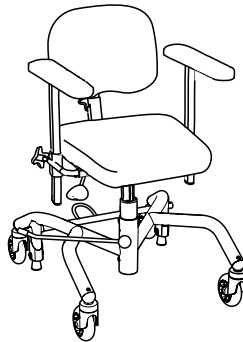


☐ REAL PLUS LAPSI/MINI

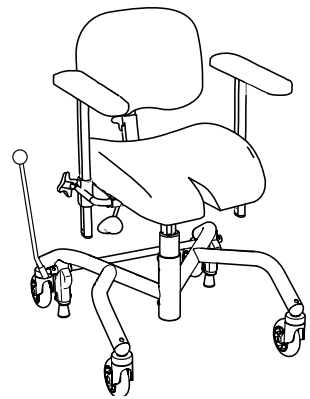


☐ REAL PLUS COXIT

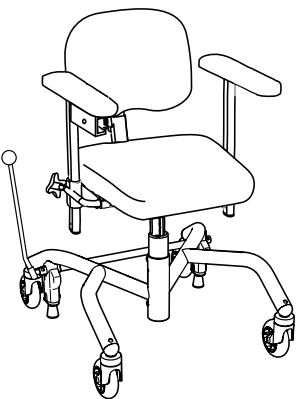

☐ REAL PLUS SÄHKÖ

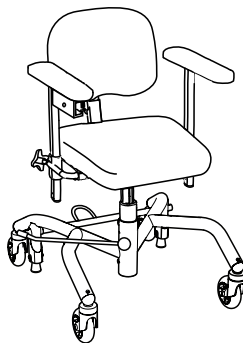

☐ REAL PLUS LAPSI/
MINI SÄHKÖ

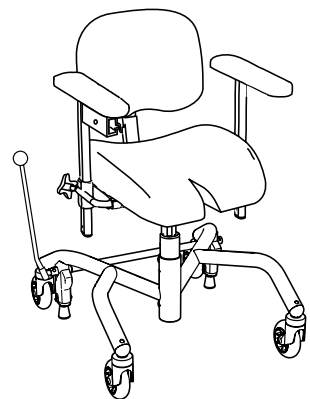

☐ REAL PLUS COXIT
SÄHKÖ

**Riittävä pätevyys tämän tuotteen turvalliseen käyttöön saavutetaan lukemalla
huolellisesti tämä käyttö- ja hoito-ohje ennen tuolin käyttöönottoa.**



SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ TIETOA JA LUOKKA	SIVU 4
ODOTETTU KÄYTTÖIKÄ	SIVU 4
HÄVITTÄMINEN	SIVU 5
REAL 9000 PLUS -TUOLIN ESITTELY	SIVU 5
YKSILÖLLINEN MUKAUTTAMINEN	SIVU 5
KÄYTTÖOHJE	SIVU 6
PUHDISTUS, HOITO JA LATAUS	SIVU 8
KUNNOSTUS JA HUOLTO	SIVU 9

TÄRKEÄÄ TIETOA JA LUOKKA

REAL-tuolissa on vaihdettavia osia, lisävarusteita ja toimintoja, joissa on säätömahdollisuuksia yksilöllistä mukautusta varten. Tuolia saa käyttää vain se henkilö, jolle se on tarkoitettu ja siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Tuoli on tarkoitettu sisäkäyttöön, eikä sitä saa altistaa vedelle, muille nesteille tai kemikaaleille. Sitä ei saa myöskään altistaa korkealle lämmölle tai pitkittyneelle ja voimakkaalle auringonpaisteelle tai muulle säteilylle. Tuoliin ei saa asentaa muita kuin Mercado Medic AB:n hyväksymiä lisävarusteita tai osia. CE-merkinnän säilyttämiseksi tuoliin ei saa tehdä mitään mukautuksia tai muutoksia ilman Mercado Medic AB:n hyväksyntää. Korjaukset ja muut tekniset toimenpiteet saa suorittaa vain Mercado Medic AB:n valtuuttama henkilöstö. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuolin käyttöä.

- REAL PLUS SÄHKÖ kuuluu suojausluokkaan II, sisäinen akku.
- REAL PLUS SÄHKÖ kuuluu suojaustyyppiin B.
- REAL PLUS SÄHKÖ on EMC-testattu ja testattu standardien SFS-EN 60601-1-1 ja SFS-EN 60601-1-2 mukaisesti, joten sitä tulee käsitellä käyttö- ja hoito-ohjeidemme mukaisesti.
- EMC-liite on ladattavissa osoitteesta mercado.se/dokument
- Käyttäjän enimmäispaino: REAL PLUS 140 kg. REAL PLUS SÄHKÖ 150 kg.
- Tuoli on kuljetettava kuormalavalla asianmukaisessa pakkauksessa. Säilytettävä sisätiloissa vähintään +10 °C.
- REAL PLUS SÄHKÖ -tuolissa saa käyttää vain Mercado Medic AB:n sähkölaitteita.
- HUOM! REAL PLUS SÄHKÖ -tuolin sähkötoimintoja voidaan käyttää enintään 10 % ajasta (enintään 6 min/h). Jos tämä raja ylittyy, tuoli voi vahingoittua.
- Jos REAL PLUS SÄHKÖ on varustettu jalkatuilla, potilaan jalkojen on oltava jalkalevyllä sähkötoimintoja käytettäessä.
- Varoitussymbolit, joita voi esiintyä tuolissa: Puristumisvaara (1), kuuma pinta (2)



①



②

ODOTETTU KÄYTTÖIKÄ

Tuotteen odotettu käyttöikä on 10 vuotta, kun sitä käytetään tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen valmistuspäivä ja sarjanumero löytyvät tuotteen alustan hopeanvärisestä etiketistä merkinnällä Lev/Del ja lueteltuna muodossa ÅÅVV (vuosi- ja viikkonumero).

Tuotteen käyttäjänä sinun tulee ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjään, apuvälinekeskukseen tai jälleenmyyjään, jos tuotteen suorituskyky on heikentynyt tai muuttunut.

Odotetun käyttöiän mukaan on tärkeää, että tuotteesta tehdään kokonaisarvio ennen käytön jatkamista. Odotetun käyttöiän jälkeen Mercado Medic AB ei voi taata tuotteen soveltuvuutta ja turvallisuutta, koska Mercado Medic AB ei voi vaikuttaa siihen, miten tuotetta on käytetty ja miten se on kulunut. Terveydenhuollon organisaation on suoritettava tuotteen kokonaisarviointi, jos lääkäri on määrännyt tuotteen käytettäväksi. Arvioinnissa on otettava huomioon ainakin se, miten tuotetta on käytetty, missä kunnossa tuote ja sen komponentit ovat, onko tuotetta kunnostettu ja huollettu sekä mikäli näin on tehty, mitä tällöin on korjattu ja mikä on ollut toimien syytä.

Ruotsin ja Norjan ulkopuolisilla markkinoilla, joilla jakelija myy tuotetta tarvittaessa suoraan käyttäjälle ja joilla ei näin ollen ole vastuullista tuotteen määrännyttä lääkäriä, määräaikaishuolto on suoritettava edellä olevan kokonaisarvioinnin lisäksi kohdassa Kunnostaminen ja huolto annettujen ohjeiden mukaisesti.

Odotetun käyttöiän jälkeen Mercado Medic AB ei voi taata, että varaosia on saatavissa. Odotettu käyttöikä ei vaikuta CE-merkintään.

HÄVITTÄMINEN

Palava:

- istuin
- selkänoja
- käsinojat
- niskatuki
- Mercado Medic AB:n myymät muut pehmusteet

Elektroniikkaromu:

- moottorit
- johdot
- ohjausjärjestelmä

Metalli:

- jalusta
- sähköhissit
- kaasumännät
- kaasujouset
- istuinristikko
- selkänojamekanismi
- sivukaaret ja käsinojamekanismi
- muut metalliosat tuotteissa, joita myy Mercado Medic AB

HUOM! Akku lajitellaan erikseen.

REAL 9000 PLUS -TUOLIN ESITTELY

TARKISTUSKOHDAT ENNEN KÄYTTÖÄ

1. Sääda käsinojat sopivalle korkeudelle ja lukitse korkeudensäädön säätöpyörä.
2. Asenna selkänojan tolppa kiinnikkeeseen ja lukitse selkänojan korkeudensäädön säätöpyörä.
3. Asenna jarruvipu kiinnikkeeseen (oikealle tai vasemmalle puolelle). Ei koske sähköjarruja.
4. Kaikki säätöpyörät ja nupit on kiristettävä ennen tuolin käyttöä.
5. Tuolin jarrun on aina oltava kiristetty, kun tuoliin istutaan ja nousta ylös.
6. Lataa tuoli ohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa (koskee SÄHKÖ-tuolia).

OHJEET MERCADO MEDIC AB:N TUOTTEIDEN YKSILÖLLISIÄ MUKAUTUKSIA VARTEN

Mukautuksia saa tehdä vain henkilöstö, joka on suorittanut Mercado Medic AB:n huolto- ja kunnostuskoulutuksen. Voimassa olevien yhdistelmäsovimusten luettelossa www.mercado.se/mercado-dokument olevat tuotteet voidaan varustaa Mercado Medic AB:n CE-merkinnällä. Jos tuoliin halutaan asentaa tuote, jota ei ole olemassa olevien yhdistelmäsovimusten luettelossa, asiakkaan valtuuttaman henkilökunnan on otettava yhteyttä Mercado Medic AB:hen kirjallista hyväksyntää varten.

Asiakkaan tai kyseisen tuotteen toimittajan on lähetettävä arvioitava tuote Mercado Medic AB:lle. Mercado Medic AB ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan, jos yhdistelmäsovimus on ajan tasalla, Mercado Medic AB tekee halutusta tuotteesta riskianalyysin. Riskianalyysin jälkeen asiakas saa kirjallisen lausunnon.

Mercado Medic AB:n on varmistettava muutetut tuolit, jotta Mercado Medic AB voi säilyttää tuotevastuun.

- Pehmustettuja osia, kuten istuimia, selkänoja, käsinoja, sivutukia, ylävartalotukia ja niskatukia voidaan mukauttaa, kunhan tuotteen ulkoisia säätömittoja ei ylitetä.
- Painopiste on pidettävä/keskitettävä nostolaitteen päälle parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi.
- Pehmustettujen osien on täytettävä voimassa olevat syttyvyysvaatimukset ja muut ympäristövaatimukset.
- Merkittävillä pystyvoimilla kuormitetut pinnat eivät saa ulottua pyörien keskipisteiden muodostaman pinnan (alustan) ulkopuolelle.

Jos nämä vaatimukset täyttyvät, Mercado Medic AB säilyttää tuotevastuun tuotteestaan.

Tuotteet, jotka hoitolaitos erikoismukauttanut ilman Mercado Medic AB:n ohjausta, jolloin hoitolaitos myös ottaa tuotevastuun, voidaan palauttaa alkuperäiseen kuntoon. Mercado Medic AB:n hyväksymän valtuutetun teknikon on suoritettava palautus. Mercado Medic AB ottaa silloin CE-merkinnän mukaisen tuotevastuun lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin MDD 93/42/ETY mukaan.

Jos sinulla on kysyttävää mukautuksista/erityismukautuksista, ota yhteyttä Ronny Fogelqvistiin:

Puh +46 (0)708 27 96 14


Sähköposti ronny.fogelqvist@mercado.se

JARRU


HUOM! Tuolin jarrun on aina oltava kiristetty, kun tuoliin istutaan ja nouseaan ylös. Jarru on tarkastettava säännöllisesti. Kulunut kumijarrujalka on vaihdettava. Jarrujen toiminto voi heikentyä epätasaisella pinnalla.

JARRUTYYPEJÄ ON KOLMENLAISIA:


Jarruvipu, jalkajarru ja sähköjarru.

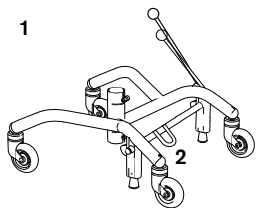


Käsijarru ja jalkajarru

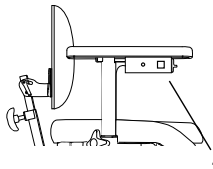


Sähköjarru
(valinnainen)

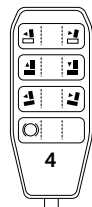

Sähköjarrun säätimet
irtokotelossa (valinnainen)

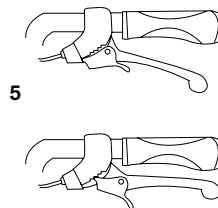

Käsijarru

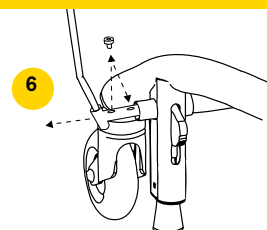

Jarruvivun kiinnitys


SÄÄTIMET

1. Jarru, PLUS-jalusta 48 työnä vipua eteenpäin.
2. Jarru, PLUS-jalusta 43 työnä vipua eteenpäin, paina poljinta.
3. Sähköjarru, paina nappia.
4. Sähköjarru, paina nappia.
5. Käsijarru kuljetustelineessä, jarruta täysillä ja paina punainen kiila alas. Avaus – paina kahvaa ylöspäin, kunnes kiila irtoaa.
6. Jarruvivun kiinnitys – jarruttaa tuolia myös silloin, kun käsinoja on säädetty maksimileveydelle; löysää jarruvivun kiinnikkeen ruuvia 6 mm:n kuusiokoloavaimella, vedä kiinnike ulos, kiinnitä ruuvi seuraavaan reikään ja kiristä ruuvi tiukasti kuusiokoloavaimella.


ISTUINKORKEUS/HISSIT

ON OLEMASSA KAHDENLAISIA HISSEJÄ:


Kaasujousi ja sähkö. Istumakorkeudet ovat vakio ja matala. Kaasujousen säätimet voidaan sijoittaa istuimen tai käsinojen alle. Sähkösäätimet on asennettu vakiona käsinojen alle. **HUOM!** Kevyet ihmiset saattavat tarvita apua kaasujousihissin nostamiseen ja laskemiseen.

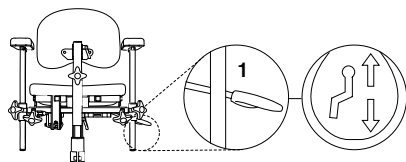


Kaasujousen säätimet
istuimen alla

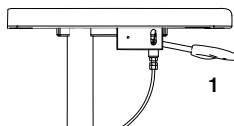

Kaasujousen säätimet
käsinojan alla
(valinnainen)

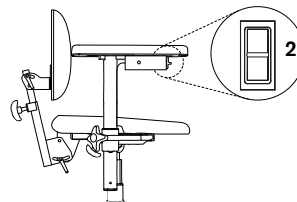

Sähkösäädetty

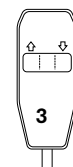

Lisävarusteena saatavat säätimet
ohjausrasiassa/ohjaussauvassa/
kaukosäätimessä.
Kuvassa on ohjausrasia.


SÄÄTIMET

1. Istumakorkeus. Kaasujousi - siirrä säädintä ylöspäin.
2. Istumakorkeus. Sähkö - siirrä säädintä ylös/alas.
3. Istumakorkeus. Sähkö - säätimet ohjausrasiassa.
Vasen painike = ylös.
Oikea painike = alas.


ISTUIMEN KALLISTUS (VALINNAINEN)

ISTUIMEN KALLISTUKSIA ON KOLMEA TYYPPIÄ:


Kampi, kaasujousi ja sähkö. Kaasujousen säätimet voidaan sijoittaa istuimen vasempaan takareunaan tai käsinojen alle. Sähkösäätimet on asennettu vakiona käsinojen alle. Istuimen kallistuksen vakioalue on +15°/-8°.

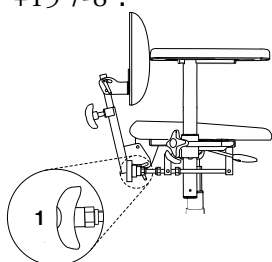


Kampikäyttöinen

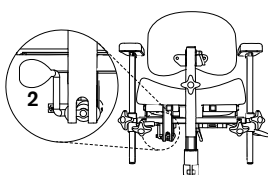


Kaasujousen säätimet
istuimen alla

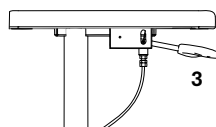

Kaasujousen säätimet
käsinojen alla

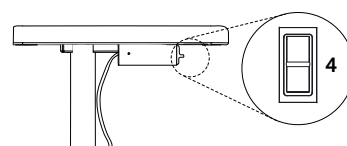

Sähkösäädetty

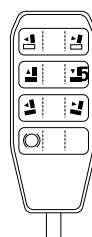


Sähkösäädetty
irtokotelossa

SÄÄTIMET

1. Istuimen kallistus. Kampikäyttöinen - kierrä säädintä.
2. Istuimen kallistus. Kaasujousi - siirrä säädintä taaksepäin.
2. Istuimen kallistus. Kaasujousi - siirrä säädintä ylöspäin.
4. Istuimen kallistus. Sähkö - siirrä säädintä ylös/alas.
5. Istuimen kallistus. Sähkö - säätimet ohjausrasiassa.
Vasen painike = eteenpäin
Oikea painike = taaksepäin.

KÄÄNTEINEN ISTUIMEN KALLISTUS TAI ISTUIMEN KALLISTUS KOKONAAN TAAKSEPÄIN (VALINNAINEN)

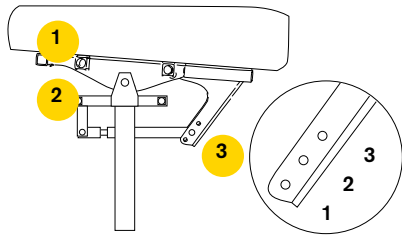

SÄÄTIMET

1. Tähän sijoitetut käsinojat kallistuvat istuimen mukana.
2. Tässä olevat käsinojat eivät seuraa istuimen kallistusta.
3. Asentoja on 3. **Kun valitset asennon 3, tuolissa on oltava jalustan jatke.**
 1. Eteen 15°, taakse 8° - istuimen vakiokallistus
 2. Eteen 8°, taakse 15° - käänteinen istuimen kallistus
 3. Eteen 0°, taakse 23° - istuimen kallistus kokonaan taaksepäin

SELKÄNOJAMEKANISMI


SELKÄNOJAMEKANISMEJA ON NELJÄÄ TYYPPIÄ:

Vakio, Medic, Comfort ja Sähkö. Kaikista on saatavilla matala ja korkea versio (kuvien tuoleissa on matala selkänoja). Kaikissa selkänojamekanismeissa on erilliset korkeus-, syvyys- ja kallistussäätimet. Medic-mallissa on laajennettu syvyyssäätö.

SÄÄTIMET

1. Korkeus.
2. Selkämekanismin kulma.
3. Selkälevyn kulma.
4. Syvyys.
5. Selkänojan kulma. Sähkösäätimet ohjausrasiassa.
Vasen painike = eteenpäin
Oikea painike = taaksepäin.


HUOM! Varmista, että Medic-selkänojamekanismi on säädetty kiinnikkeeseen siten, että jousilukko lukittuu eikä selkänojamekanismia voi vetää ulos.

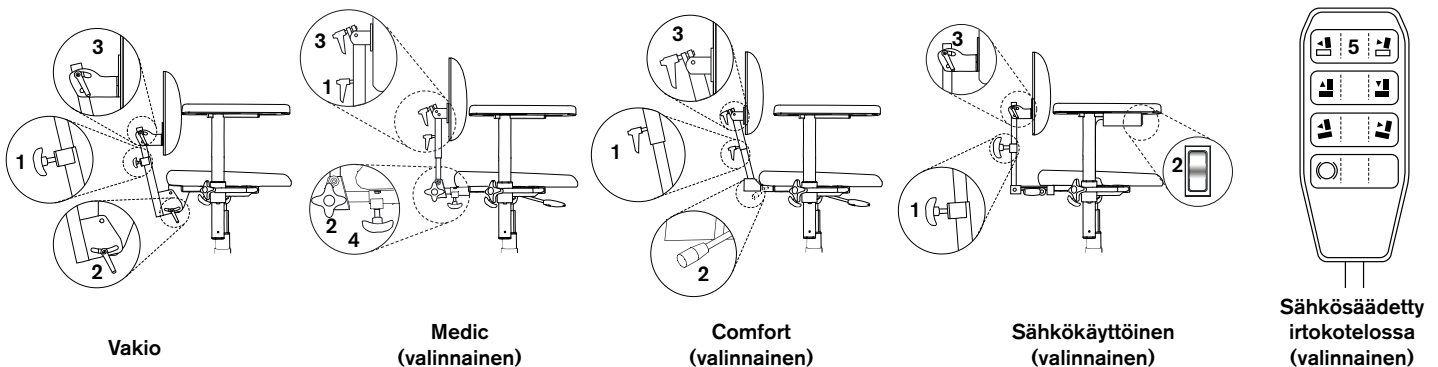

KÄSINOJAT

SÄÄTIMET

1. Korkeudensäätö.
2. Leveyden säätö.
3. Kallistus.

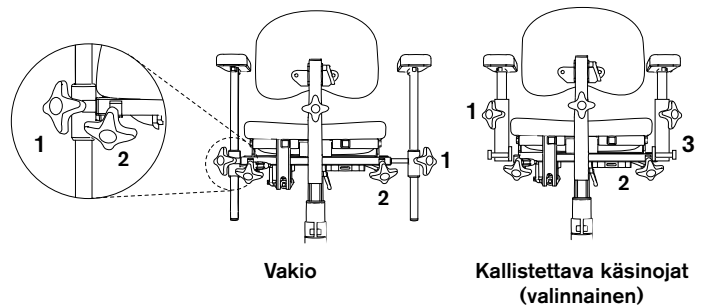


KIERRON VAPAUTUS (VALINNAINEN)

HUOM! Kierron on oltava lukitussa asennossa, kun tuoliin istutaan ja siitä nouseaan. Varmista, että salpa on "napsahtanut" sisään

SÄÄTIMET

1. Kierrä myötäpäivään vapauttaaksesi, vastapäivään lukitaksesi.

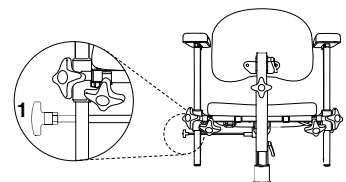


REAL PLUS COXIT/SÄHKÖ

Coxit-läpät voidaan säätää kahdella eri tavalla. Tuolissa, jossa ei ole istuimen kallistusta, säätimet sijaitsevat istuimen etureunan alapuolella. Istuimen kallistuksella varustetuissa tuoleissa säätimet sijaitsevat istuimen takareunan alapuolella.

SÄÄTIMET

1. Löysää, aseta haluttu kulma ja kiristä.
2. Kierrä säädintä läpän laskemiseksi/nostamiseksi.

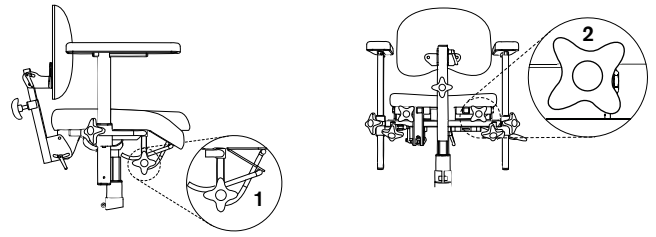

PUHDISTUS, HOITO JA LATAUS

Tuoli on pidettävä puhtaana pölystä ja liasta. Hyväksytyjä puhdistusaineita ovat sellaiset, joiden pH on 7–12 (tiiviste).

Plyysiverhoilu pestään vaahtopesulla.

1. Poista irtolika, murut ja vastaavat.
2. Levitä ohut kerros vaahtoa, hiero vaahto tasaisesti kostealla liinalla.
3. Pyyhi puhtaalla ja hieman kostealla liinalla.
4. Imuroi hyvin, kun kaikki on kuivunut.

Keinonahka pestään saippuavedellä tai pyyhitään alkoholiliuoksella, esim. desinfiointiaineella.

Istuinta, selkänojaa ja muita pehmusteita ei ole toiminnallisista syistä valmistettu umpinaisesta materiaalista.

Kunnostettaessa pehmusteet on vaihdettava hygieenisistä syistä.

Sähköhissi on tarkastettava säännöllisesti pölyn, lian ja vakauden varalta: nosta istuinlevy korkeimpaan asentoon. Puhdista liinalla.

Älä käytä vettä tai liuotinta. Voitele sitten sylinteri ohuella kerroksella teflon- tai silikonipohjaista voitelurasvaa.

Suosittellemme, että tuolin lataukseen käytetään akkulaturia REAL 9000 tyyppi 2240-12 V, tuotenro 802289. Jos haluat käyttää muuta akkulaturia, ota yhteyttä Mercado Medic AB:hen saadaksesi kirjallisen hyväksynnän. Akun lataaminen tulee tehdä säännöllisesti, jos mahdollista kerran päivässä. Akun käyttöä kannalta on tärkeää, ettei se koskaan täysin purkautunut.

LATAAMINEN (SÄHKÖTUOLI)


Kytke laturin latausliitin latausliitäntään (1) kotelossa, jossa keinukytkin tuolin nostamista ja laskemista varten sijaitsee. Kytke sitten laturin pistotulppa pistorasiaan. Laturin LED-valo ilmaisee, että lataus on käynnissä. Kun LED-valo vaihtaa väriä oranssista vihreäksi, akku on ladattu täyteen. Tuolia voidaan nostaa ja laskea latauksen aikana. Tämä koskee sähkötuoleja, jotka on toimitettu 11 2013 jälkeen tai aiemmin toimitettuja päivitettyjä tuoleja.

HUOM!

Akun lataaminen on erityisen tärkeää tuoleissa, joissa on sähköjarru, istuimen ja selkänojan sähköinen kallistus, koska nämä toiminnot vaativat suurta akun kapasiteettia, jotta ne toimivat. Varmista toiminnot lataamalla akku kerran päivässä. Kun vaihdat akkua (tyyppimerkintä: HP7-12 12V 7.2Ah), kytke punainen akkukaapeli akun plusnapaan ja musta akkukaapeli miinusnapaan. Jos istuimen sähkötoiminnot lakkaavat toimimasta, sulake on luultavasti lauennut. Tarkista sulakkeet. Ne sijaitsevat istuimen alla akun ja toimilaitteen välisessä johdossa. Vaihda viallinen sulake uuteen 25 A -sulakkeeseen.

MUISTA SEURAAVAT ASIAT, KUN KÄSITTELET AKKUJA:

- Älä koskaan oikosulje akkua.
- Älä altista akkua voimakkailla iskuille tai avotulelle.
- Jos akkuhappoa roiskuu iholle, huuhtelee vedellä noin 30 minuuttia ja ota yhteys lääkäriin.
- Toimita vanhat akut ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

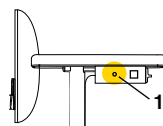

Laturi tuotenro 802289

! Tärkeää tietoa koskien REAL 9000 PLUS -tuolin (jäljempänä "tuote") kunnostusta ja huoltoa:

- Tuote ei vaadi määräaikaishuoltoa tapauksissa, joissa sillä on tuotteen määräämisestä vastaava lääkäri terveydenhuollon piirissä. Ruotsin ja Norjan ulkopuolisilla markkinoilla, joilla jakelija myy tuotetta tarvittaessa suoraan käyttäjälle ja joilla ei näin ollen ole vastuullista tuotteen määrännyttä lääkärinä, määräaikaishuolto on suoritettava joka toinen vuosi tuotteen koko käyttöajan ajan tämän luvun kohtien 1–10 mukaisesti.
- Tuotteen pääkomponenteille on kuitenkin tehtävä perusteellinen silmämääräinen tarkastus huollon ja kunnostuksen yhteydessä, jotta voidaan taata käyttäjän turvallisuus. Pääkomponentit ovat jalusta, hissi, istuinristikko, selkänojamekanismi sekä käsinojen leveyssäätö. Tarkastuksen täytyy sisältää hitsisaumat, lukittavat toiminnot ja säädöt.
- Käyttäjä ei saa istua tuotteessa kunnostus-, huolto- tai kunnossapitotöiden aikana.
- Älä käytä painepesuria tuotteen puhdistukseen.
- Jalustaa tarkastettaessa on tarkastettava jalustan etu- ja takajalkojen väliset hitsit. Kaikki materiaalin tai maalin taipumukset halkeiluun tällä alueella on nähtävä syynä jalustan tai tuotteen vaihtamiseen.
- Jos tuotteen jarrutusteho on heikko, jalustan tasapaino on tarkistettava jarrujalkojen kunnon lisäksi. Jos tuote ei seiso kaikilla neljällä pyörällä jarruttamattomassa asennossa, tuote on poistettava välittömästi käytöstä. Tarkista epätasapaino useissa paikoissa ja eri suuntiin varmistaaksesi, että epätasapaino ei johdu lattiasta.

KUNNOSTUSOHJEIDEN TARKISTUSPISTEET

1. Elektroniikkayksikkö

☐ 1.1. Elektroniikka/toiminto/puhdistus

Tarkista elektroniikka ja tarkista, mitkä sähkötoiminnot on kytketty. Testaa sähkötoiminnot, jos tuoli ei toimi. Tarkista piirikorttien, säätimien ja johdotuksen vauriot.

☐ 1.2. ohjausrasia/toiminto/puhdistus

Tarkista säätimien toiminnot, tarkista, että kotelo on täysin ehjä ja että kaikki painikkeet toimivat. Pyyhi säätimet desinfiointiaineella kostutetulla liinalla. Älä käytä tuolissa liuottimia, valkaisuaineita, kiillotusaineita, synteettisiä pesuaineita, kiillotusaineita tai suihkeita.

☐ 1.3. Koskettimet, kiinnitys

Varmista, että johdot ja koskettimet ovat ehjiä ja kunnolla kiinni. Varmista, ettei johdot ja koskettimet eivät voi jäädä puristuksiin.

☐ 1.4. Akut/akkulaturi/toiminto

Varmista, että laturi toimii eikä sen kotelossa tai johdoissa ole vaurioita.

Mittaa akku ja tarkista, että arvot eivät ole liian alhaiset. Liian alhaiset arvot viittaavat siihen, että akkua ei ole ladattu tai että jokin akun kenno on rikki.

☐ 1.5. Sähköinen istuimen kallistus/toiminto

Varmista, ettei sähkölaitteissa ole näkyviä vaurioita. Tarkista sähkölaitteiden liikkuvien osien

toiminta. Varmista, että kaikki lukitusruuvit on kiristetty niin, ettei päätyasennossa ole välystä.

☐ 1.6. Sähköisesti säädettävä selkänoja/toiminto

Varmista, ettei sähkölaitteissa ole näkyviä vaurioita. Tarkista sähkölaitteiden liikkuvien osien toiminta. Varmista, että kaikki lukitusruuvit on kiristetty niin, ettei päätyasennossa ole välystä.

☐ 1.7. Sähkötoiminen jarru/toiminto

Varmista, ettei sähkölaitteissa ole näkyviä vaurioita. Tarkista sähkölaitteiden liikkuvien osien toiminta. Varmista, että kaikki lukitusruuvit on kiristetty niin, ettei päätyasennossa ole välystä.

Tarkista kaikki liitokset ja että jarruakselin ja jalustaputken välinen kiinnitys on kiinnitetty kunnolla.

2. Sähköhissi

☐ 2.1. Melua/liukukytin

Kuuntele kuuluuko sähköhissistä melua, vaihda sähköhissi, jos laakeri on viallinen. Sähköhissi voidaan lähettää Mercado Medic AB:lle korjattavaksi/kunnostettavaksi.

Kuormita tuolia ja tarkista, että sähköhissi ei luista ala-asennossa. Muussa tapauksessa säädä liukukytimen momentti.

☐ 2.2. Pyörimislukitus/voitelu

Tarkista, että sähköhississä ei ole välystä pyörimissuunnassa. Muussa tapauksessa vaihda sähköhissi.

Sähköhissi voidaan lähettää Mercado Medic AB:lle korjattavaksi/kunnostettavaksi.

☐ 2.3. Kiinnitys/jälkikiristys

Varmista, että istuinristikon ja jalustan kiinnitys on kiristetty kunnolla.

☐ 2.4. Johdotus/kuluminen

Tarkista onko johdoissa kulumia tai puristumisvaurioita.

3. Runko

☐ 3.1. Hitsit

Tarkista huolellisesti kaikki hitsit halkeamien, korroosion, liikkeen jne. varalta.

☐ 3.2. Ruuviliitokset

Tarkista ja kiristä kaikki ruuviliitokset. Vaihda ruuvit, joiden kanta tai kierteet ovat vaurioituneet.

4. Jarrut

☐ 4.1. Toiminto/kuluminen

Vaihda jarrujalat ja tarkista, että jarru toimii tyydyttävästi.

☐ 4.2. Muovitulpat/ohjainholkit

Varmista, että ohjainholkit ja muovitulpat ovat kunnolla paikoillaan, vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.

5. Pyörät

☐ 5.1. Toiminto/rullaus/heilahtelu

Poista hiukset ja pöly pyöristä, tarkista onko pyöristä ja nivelissä kulumia ja välystä, jotka viittaavat kuluneisiin laakereihin. Varmista, että pyörät pyörivät ja

nivelet kääntyvät. Vaihda pyörä tarvittaessa.

☐ 5.2. Kiinnitys/jälkikiristys

Tarkista, että ohjauspyörien ruuvit ovat ehjiä ja kireällä.

6. Istuinristikko

☐ 6.1. Mekaniikka/hitsit

Tarkista huolellisesti kaikki hitsatut osat (erityisesti kallistuslaitteiden kiinnitysten luona, koska nämä osat kuormittuvat eniten)

☐ 6.2. Ruuviliitokset/jälkikiristys

Tarkista ja kiristä kaikki ruuviliitokset. Vaihda ruuvit, joiden kanta tai kierteet ovat vaurioituneet.

☐ 6.3. Muovitulpat/ohjainholkit

Varmista, että ohjainholkit ja muovitulpat ovat kunnolla paikoillaan, vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.

☐ 6.4. Istuinlevy/vaihto/puhdistus

Vaihda istuinlevy uuteen ja pese tai vaihda verhoilu

☐ 6.5. Käyttö/voitelu

Varmista, että istuinristikon säätöpyörät ja nupit toimivat ja lukittuvat kunnolla.

☐ 6.6. Kaasujousikallistus/toiminto

Jos tuolissa on kaasujousikallistuksen säädin, tarkista, että se lukittuu kunnolla eikä kallistus muutu hitaasti kuormitettuna. Tarkista ja vaihda vaurioituneet vaijerit ja vaijerikuoret.

☐ 6.7. Kampikallistus/kuluminen

Jos tuolissa on kampikallistuksen säädin, tarkista, ettei siinä ole välystä ja että kaikki ruuvit on kiristetty.

☐ 6.8. Coxit-mekanismi/ohjaus

Varmista, että läppien säätöpyörät pyörivät kevyesti ja ne on kunnolla lukittu vastamutterilla.

7. Selkänojamekanismi

☐ 7.1. Toiminto/kuluminen

Tarkista ja vaihda kuluneet osat, varmista, että liikkuvat osat toimivat hyvin.

☐ 7.2. Kiinnitys/jälkikiristys

Varmista, että kaikki ruuvit, säätöpyörät ja nupit lukittuvat kunnolla ja varmista, että jousisalpa toimii moitteettomasti.

☐ 7.3. Muovitulpat/ohjainholkit

Varmista, että ohjainholkit ja muovitulpat ovat kunnolla paikoillaan, vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.

☐ 7.4. Selkälevy/vaihto/puhdistus

Vaihda selkälevy uuteen ja pese tai vaihda verhoilu

☐ 7.5. Kaasujousen säädin/toiminto

Tarkista kaasujousen kaasunpaine ja vakaus, varmista, että se lukittuu kunnolla ja että selkänojan kulma ei hitaasti muutu kuormitettuna. Tarkista ja vaihda vaurioituneet vaijerit ja vaijerikuoret.

8. Käsinojat

☐ 8.1. Toiminto/kuluminen

Tarkista ja vaihda kuluneet osat, varmista, että liikkuvat osat lukittuvat ja toimivat oikein.

☐ 8.2. Muovitulpat/ohjainholkit

Varmista, että ohjainholkit ja muovitulpat ovat kunnolla paikoillaan, vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.

☐ 8.3. Käsinojalevyt/vaihto/puhdistus

Vaihda käsinojalevyt uusiin.

☐ 8.4. Käsinojamekanismi/toiminto

Tarkista kaikki hitsit ja että putkissa ei ole vaurioita, jotka voivat huonontaa tai heikentää rakennetta.

9. Lisävarusteet

☐ 9.1. Palautus

Irrota lisävarusteet, jotka eivät yleensä kuuluu tuoliin, ja tarkista ne alla olevan kuvan mukaisesti, ennen kuin palautat ne varastoon.

☐ 9.2. Mekanismi

Tarkista kaikki hitsit ja että mekanismeissa ei ole vaurioita, jotka voivat huonontaa tai heikentää rakennetta.

☐ 9.3. Toiminto/kuluminen

Tarkista ja vaihda kuluneet osat, varmista, että liikkuvat osat lukittuvat ja toimivat oikein.

☐ 9.4. Pehmusteet

Hävitä pehmusteet tartunnan leviämisen estämiseksi, hävitä tai pese verhoilut pesuohjeiden mukaisesti.

10. Lopputarkastus

☐ 10.1. Koekäyttö

Koekäytä tuolin toimintoja ja tarkista, että kaikki toiminnot, sähkötoiminnot ja jarrut toimivat oikein. Jos tuoli on tarkoitus varastoida, aseta tuoli lepotilaan asianmukaisella 9V adapterilla akun säästämiseksi.

MERCADON YHTEYSTIEDOT

Pääkonttori

Käyntiosoite
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postiosoite
Box 1074, 181 22 Lidingö

Vaihde on auki: ma-pe 08.00-16.30
Puh: +46 (0)8-555 143 00
Faksi: +46 (0)8-555 143 99
Sähköposti: info@mercado.se

Huolto ja tekninen tuki

Puhelinaika ma-pe
08.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Puh: +46 (0)8-555 143 08
Faksi: +46 (0)8-555 143 99
Matkapuhelin:
+46 (0)70-550 63 98, +46 (0)70-894 63 68
Sähköposti: service@mercado.se

[Paikka tuote-etiketilä sarjanumeroineen.]