




FR

# EVI



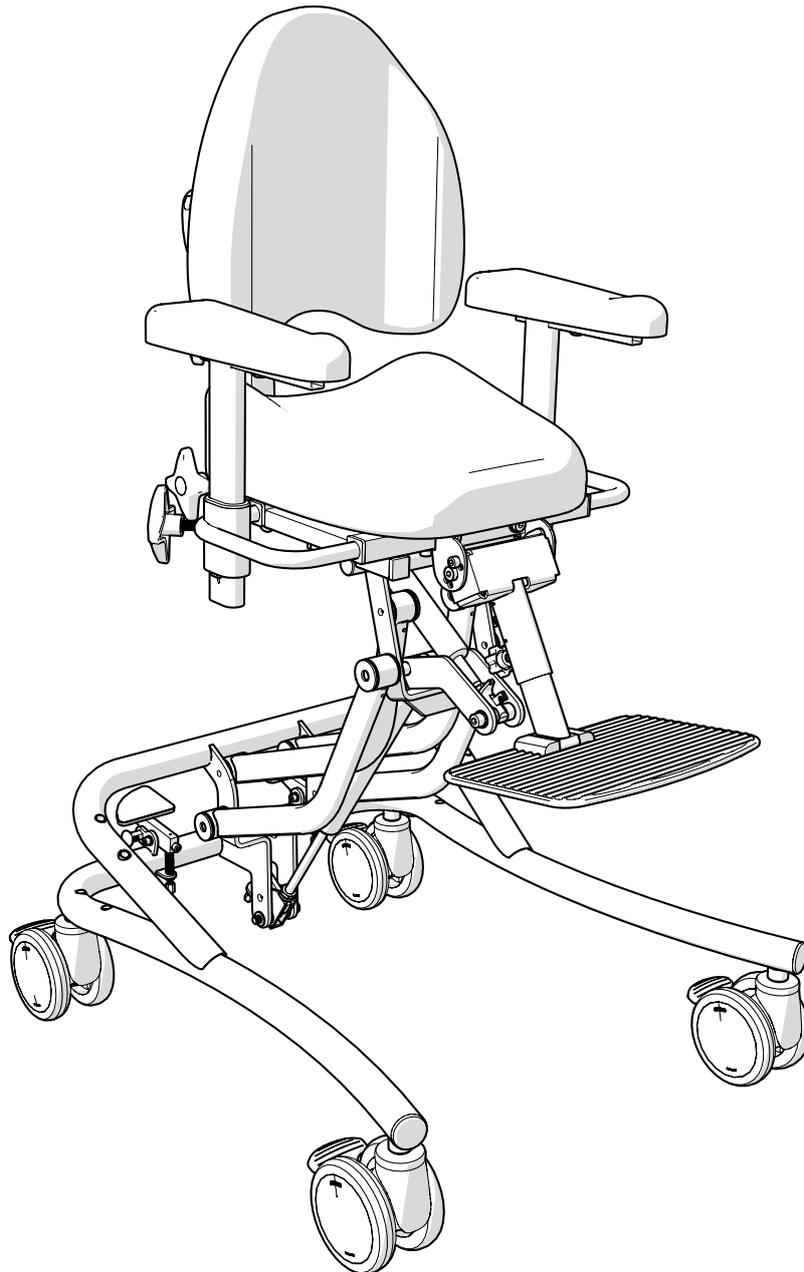

Le fauteuil EVI est un produit médical de classe I. Le produit porte le marquage CE conformément au code de l'Agence suédoise des produits médicaux applicable aux dispositifs médicaux, LVFS 2003:11. Tous les textiles utilisés pour fabriquer le fauteuil ont été testés et homologués conformément aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2. Mercado Medic AB est une entreprise certifiée selon les normes ISO 13485, 9001 et ISO 14001, et se conforme aux lois applicables en matière de travail et d'environnement.

Si vous avez des questions au sujet du produit ou si un événement inattendu s'est produit, contactez en premier lieu votre prescripteur. Si ce dernier n'est pas en mesure de vous aider, n'hésitez pas à contacter directement Mercado Medic AB.

Vous trouverez les versions PDF (avec options de zoom) de nos instructions d'utilisation et de maintenance sur [www.mercado.se](http://www.mercado.se). Vous y trouverez également des informations concernant les accessoires disponibles pour les fauteuils Mercado Medic ainsi que les avis de sécurité à destination du marché, les documents d'aide pour les prescripteurs et les rappels de produits et d'accessoires.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au présent manuel et à son contenu.

# Table des matières

1. Informations importantes .....	4
2. Symboles .....	6
3. Avant l'utilisation.....	7
4. Utilisation du produit .....	8
5. Nettoyage et entretien .....	13
6. Élimination et recyclage.....	14

# 1. Informations importantes

Le fauteuil EVI intègre des composants remplaçables, accessoires et fonctions offrant des options permettant un réglage personnalisé. Le fauteuil doit uniquement être utilisé par la personne à laquelle il est destiné et aux fins pour lesquelles il a été conçu. Le fauteuil est exclusivement conçu pour un usage à l'intérieur et ne doit jamais être utilisé à l'extérieur. Ne pas exposer le fauteuil à un froid ou une chaleur extrêmes, à un ensoleillement prolongé ou à tout autre type de radiation. Ne pas exposer le fauteuil à l'eau, à d'autres liquides ou à des produits chimiques. Avertissement : les surfaces métalliques peuvent chauffer fortement si elles sont exposées à la lumière du soleil. Le fauteuil doit exclusivement être équipé d'accessoires et de composants homologués par Mercado Medic AB. Aucune modification ne peut être effectuée sans l'accord de Mercado Medic AB.

- Afin de pouvoir utiliser ce produit en toute sécurité, il est impératif de lire soigneusement les présentes instructions d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser le fauteuil.
- Manipuler le fauteuil avec précaution. Avant de se déplacer, prêter un œil attentif au milieu environnant. Une collision avec des animaux ou enfants au sol pourrait se produire. Le fauteuil est uniquement conçu pour s'y asseoir et ne doit pas être utilisé comme un jouet par les enfants et les adultes.
- Les accoudoirs, sièges, dossiers et autres pièces rembourrées de Mercado Medic ont été développés et fabriqués à partir de matériaux exempts de substances toxiques et d'allergènes.
- Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg.
- Utiliser le fauteuil EVI uniquement sur des surfaces planes et horizontales.
- Le fauteuil doit être transporté dans sa boîte en carton, sur une palette. Si le fauteuil est transporté dans une voiture, le régler à la hauteur d'assise minimale et le sangler au niveau du cadre et du siège. Bloquer les pédales de réglage de la hauteur et de l'inclinaison pendant le transport.
- Le fauteuil est conçu pour être utilisé à une température ambiante entre +5 et +40 °C et à un taux d'humidité de l'air (sans condensation) de 15 à 90 %. Si le fauteuil a été stocké dans un endroit où ces valeurs limites n'ont pas été respectées, le laisser s'acclimater dans l'environnement dans lequel il sera utilisé afin de garantir une utilisation sûre.
- Les réparations ou adaptations techniques doivent uniquement être effectuées par du personnel agréé par Mercado Medic AB.
- Le fauteuil EVI est fourni de série avec un siège, un dossier, des accoudoirs et un repose-pieds.
- Sauf accord contraire, le fauteuil est garanti pendant une période de deux (2) ans. Concernant les réclamations au titre de la garantie, veuillez contacter votre représentant Mercado Medic (voir dernière page).
- La durée de vie attendue est de dix (10) ans.
- Le fauteuil EVI peut être équipé d'une multitude d'accessoires. Tous les accessoires doivent être fixés de manière à ce qu'aucune petite pièce ne puisse se détacher.

## 1.1. Directives pour les réglages personnalisés des produits Mercado Medic AB

Les réglages doivent exclusivement être effectués par des personnes qui ont suivi la formation d'entretien et de remise en état dispensée par Mercado Medic AB. Les pièces reprises sur la liste des combinaisons autorisées en vigueur [www.mercado.se/mercado-dokument](http://www.mercado.se/mercado-dokument) peuvent être fixées sur le fauteuil dans le cadre du marquage CE du produit Mercado Medic AB. Si la pièce à installer n'est pas reprise sur la liste des combinaisons autorisées en vigueur, le personnel engagé par le client doit contacter Mercado Medic AB en vue d'obtenir une autorisation écrite.

Un exemplaire de la pièce à examiner doit être envoyé à Mercado Medic AB, soit par le client, soit par le fournisseur de ladite pièce. Mercado Medic AB contactera ensuite le fournisseur de ladite pièce afin d'évaluer si un accord de combinaison pourrait éventuellement présenter un intérêt. Mercado Medic AB procède à une évaluation des risques de la pièce en question. Lorsque cette évaluation des risques a été effectuée, Mercado Medic AB transmet son avis par écrit au client.

Les fauteuils modifiés comme décrit ci-dessus devront être contrôlés par Mercado Medic AB afin d'être toujours couverts par la garantie produit de Mercado Medic AB.

- Les sièges, dossiers, accoudoirs, supports latéraux, cale-troncs et repose-têtes peuvent être réglés à condition de ne pas dépasser les dimensions externes du produit.

- Les pièces rembourrées doivent satisfaire les exigences applicables en matière d'ignition et d'environnement.
- Les surfaces supportant des charges verticales ne doivent pas se trouver sous la zone (cadre) formée par les points des centres de roues.

Si toutes ces directives sont respectées, Mercado Medic AB assume la responsabilité produit pour son produit.

Les produits qui ont été modifiés par des services de soins de santé sans tenir compte des directives données par Mercado Medic AB et pour lesquels les services de soins de santé ont assumé la responsabilité produit, peuvent être remis en état d'origine. Cette opération doit être effectuée par un technicien agréé par Mercado Medic AB. Mercado Medic AB assume alors à nouveau la responsabilité produit, et le marquage CE est rétabli conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.

Pour toute question concernant les adaptations et les adaptations spéciales, se reporter aux informations de contact à la dernière page du présent manuel.

## 2. Symboles

Symboles pouvant être indiqués sur le produit et leur signification.



1. Suivre les instructions d'utilisation



2. Séparation des matières premières



3. Ce produit est recyclable



4. Poids maximum de l'utilisateur



5. Fabricant




6. Risque d'écrasement. Tous les risques sont indiqués

## 3. Avant l'utilisation


### 3.1. Configuration standard

La configuration standard correspond à celle du produit livré prêt à l'emploi au moment de sa sortie de la boîte.

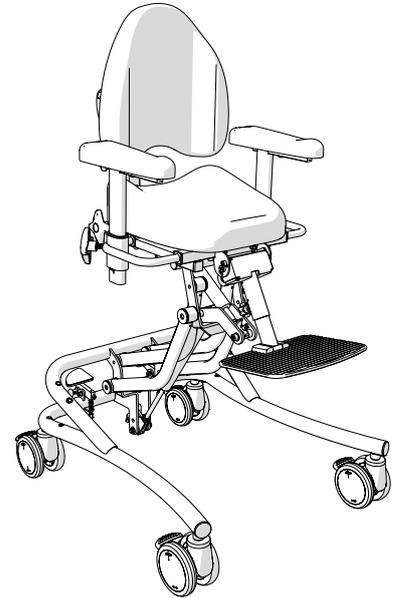

### 3.2. Support pour cou (en option)


Fixer le support pour cou à l'arrière en le faisant glisser dans la bonne position. Régler la position du support pour cou à l'aide des boutons.

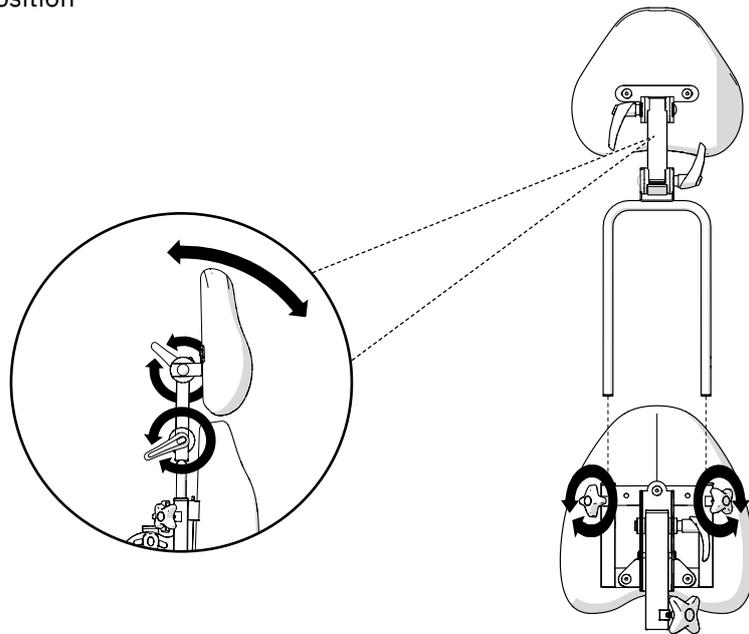

## 4. Utilisation du produit


### 4.1. Réglages

Dans le présent manuel, les pièces réglables sont indiquées par une flèche noire. Les pièces telles que les pédales et les boutons peuvent être actionnées à la main. Pour les vis réglables, utiliser la clé Mercado (réf. 800897).

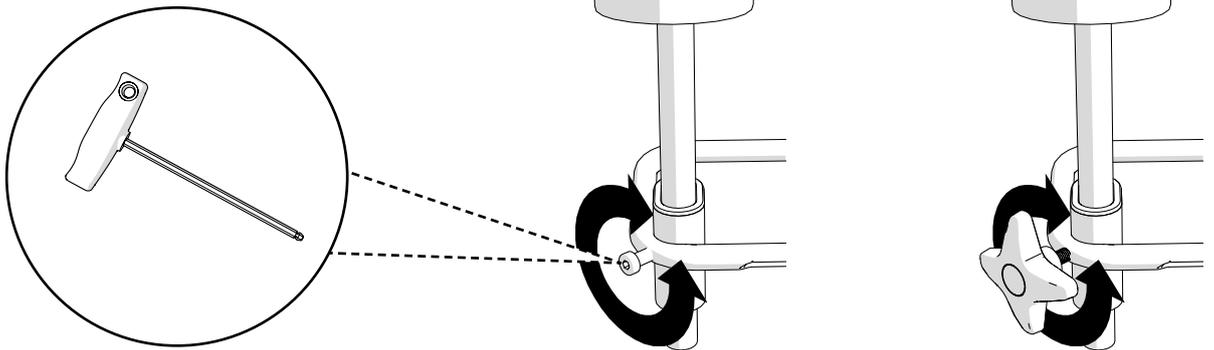

### 4.2. Frein

Activer et désactiver le frein de chaque roue à l'aide des pédales.

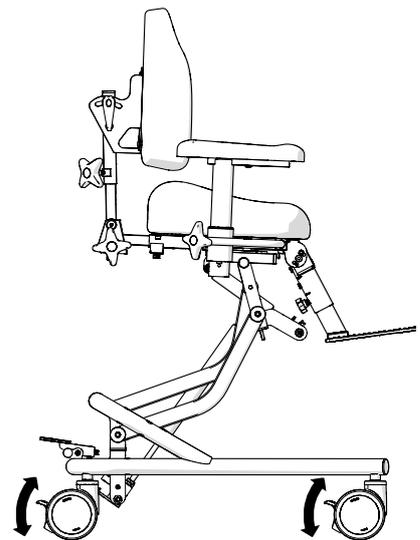


### 4.3. Hauteur du siège

Régler la hauteur du siège à l'aide de la pédale.



Avertissement ! Risque d'écrasement entre le mécanisme du dossier et la base lors de l'abaissement de la hauteur du siège, surtout lorsqu'il est incliné vers l'arrière.

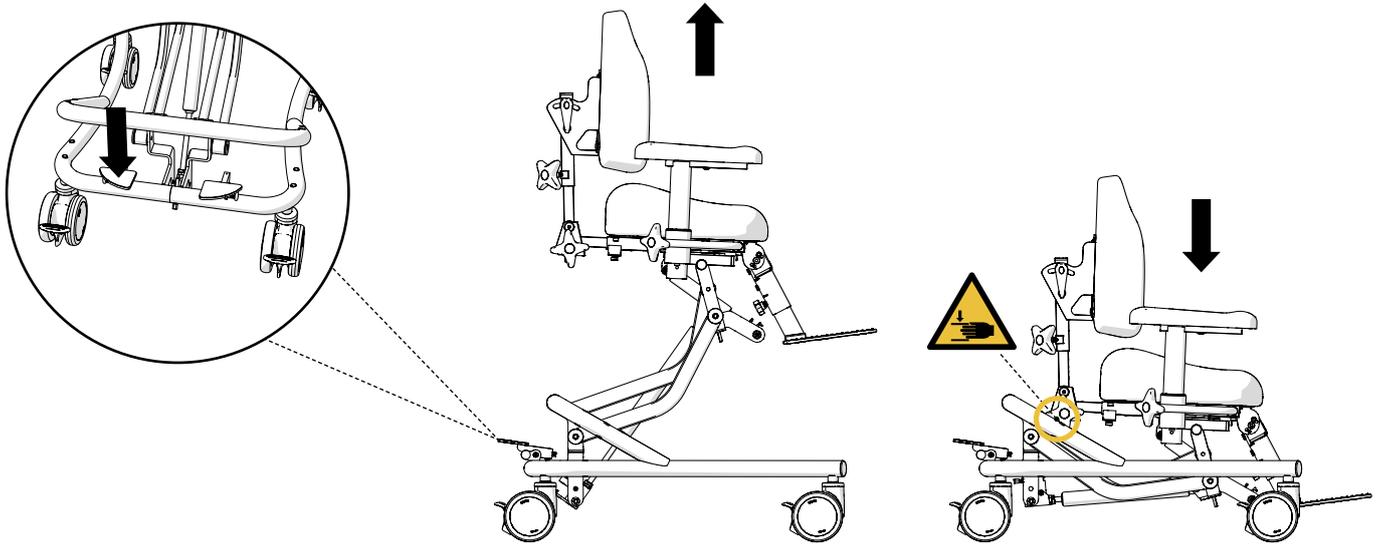


### 4.4. Inclinaison du siège

Régler l'inclinaison du siège à l'aide de la pédale.




Avertissement ! Risque d'écrasement entre le repose-pieds et le mécanisme d'inclinaison sur le cadre lors de l'inclinaison vers l'avant. Risque d'écrasement entre le mécanisme du dossier et la base lors de l'inclinaison vers l'arrière, surtout lorsque le siège est en position basse.

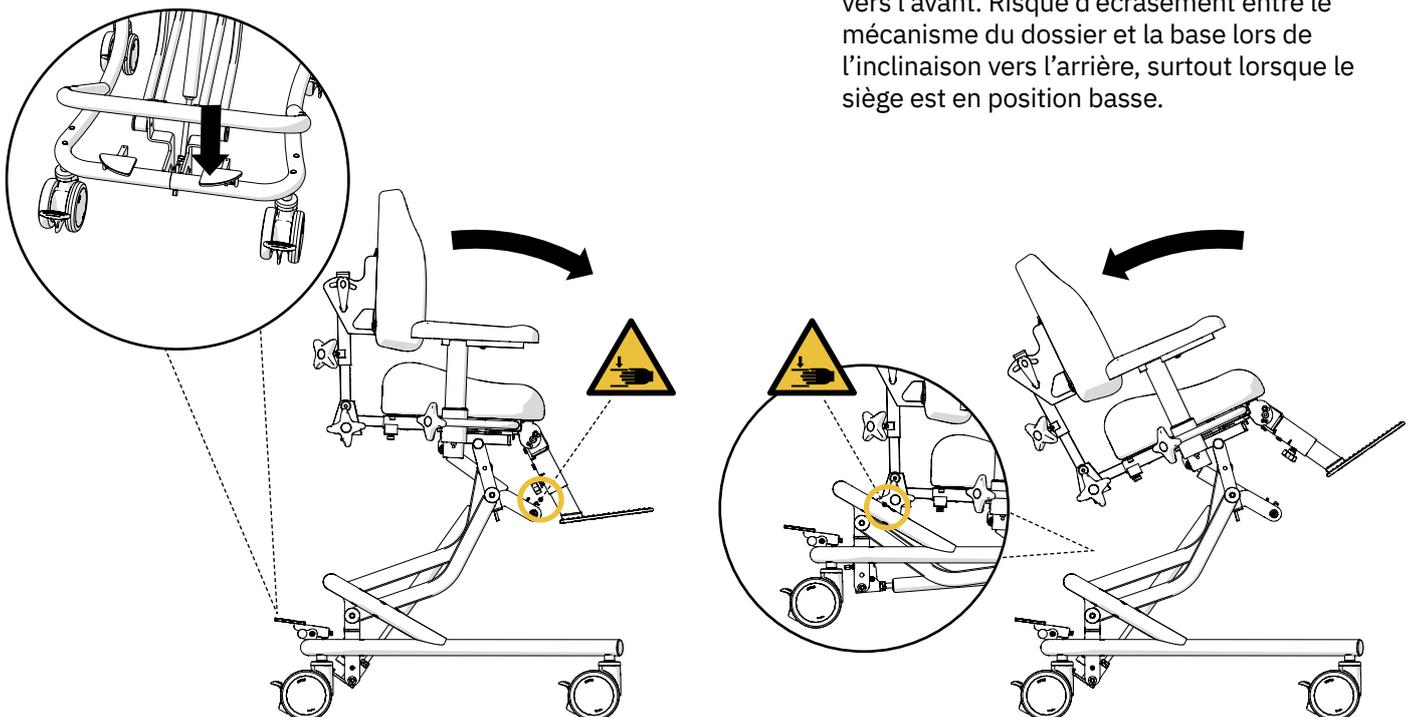


## 4.5. Blocage des pédales

Il est possible de bloquer les pédales afin de prévenir toute utilisation non intentionnelle. Verrouiller et déverrouiller les pédales utilisées pour procéder au réglage du siège et de l'inclinaison à l'aide du bouton correspondant.

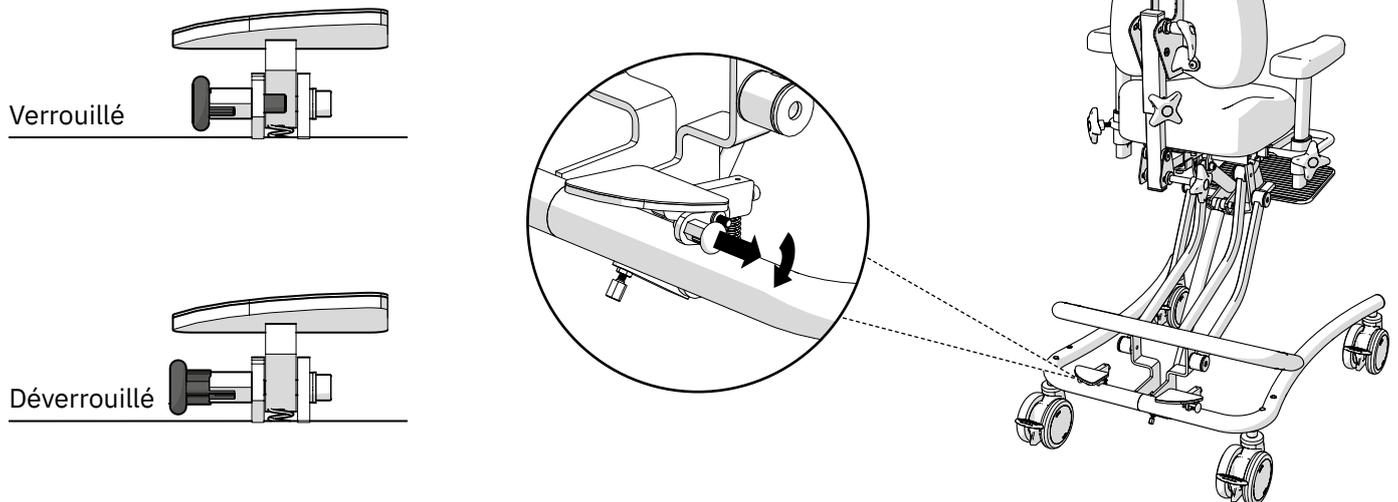


## 4.7. Dossier

Régler la position du dossier à l'aide des boutons et de la vis.

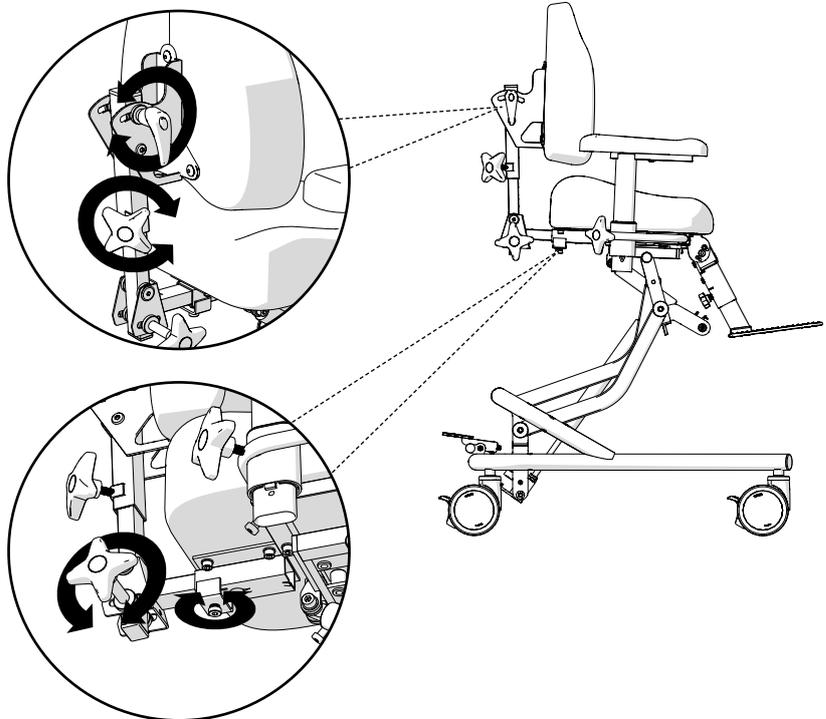

## 4.6. Accoudoirs

Régler la position des accoudoirs à l'aide des boutons et des vis.

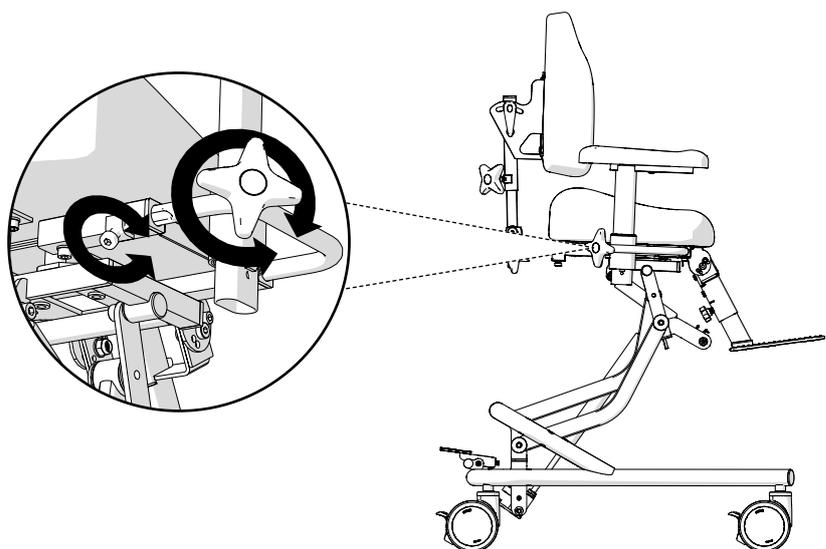

## 4.8. Plateau de jambe


Le fauteuil est fourni avec l'un des deux plateaux de jambe.



Avertissement ! Il existe un risque de pincement ou d'écrasement au niveau de l'angle du plateau de jambe si ce dernier est trop proche du mécanisme d'inclinaison situé sur la base du fauteuil.


### Plateau de jambe central

Régler la position du plateau de jambe à l'aide des boutons et des vis.

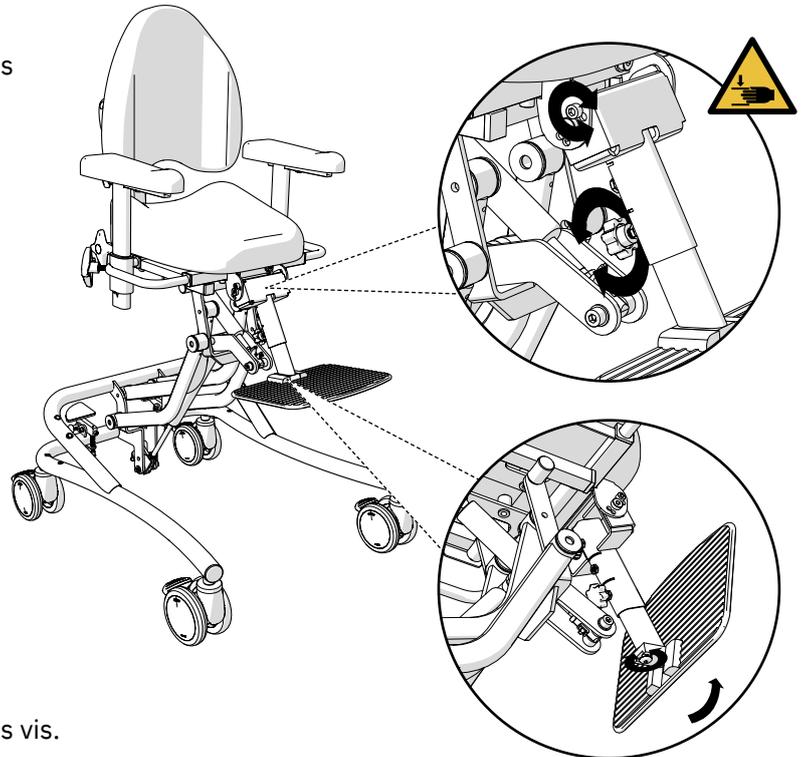

### Plateau de jambe divisé Medic

Régler la position du plateau de jambe à l'aide des vis.

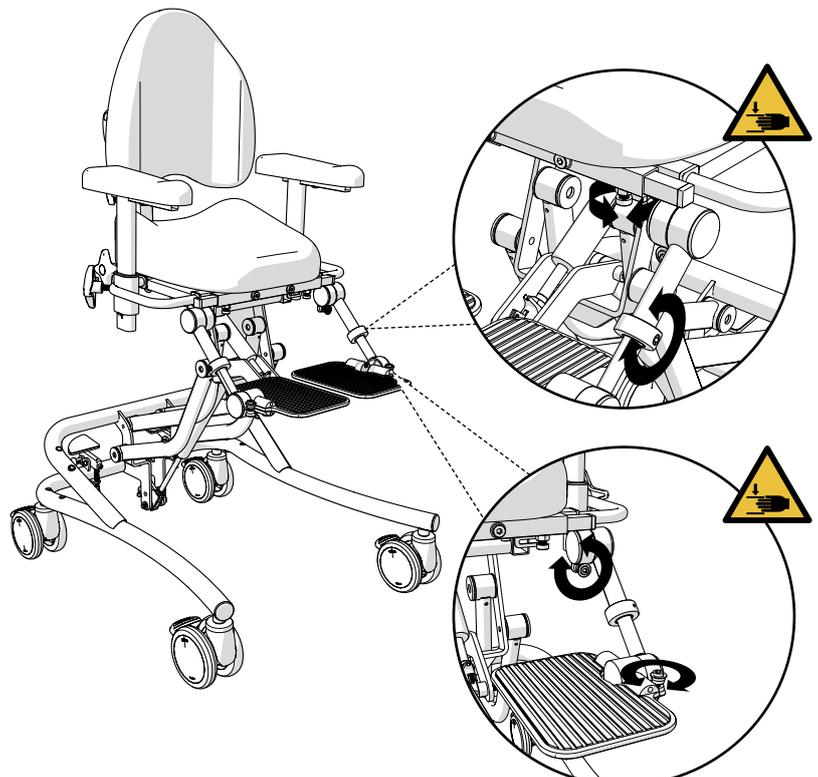


## 5. Nettoyage et entretien

- Essuyer le fauteuil et éviter tout contact avec la poussière et la saleté.
- Nettoyer le fauteuil avec un désinfectant au pH entre 7 et 12 (concentré), à l'exception des pièces rembourrées.
- Nettoyer les pièces rembourrées avec une mousse nettoyante :
  - Éliminer la poussière, les miettes, etc.
  - Appliquer une fine couche de mousse et la faire pénétrer de manière uniforme à l'aide d'un chiffon humide.
  - Essuyer avec un chiffon propre légèrement humide.
  - Une fois sec, aspirer.
- Nettoyer le similicuir avec de l'eau savonneuse ou une solution à base d'alcool, par exemple un désinfectant.
- Les pièces rembourrées en cuir requièrent un entretien supplémentaire :
  - Essuyer immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon humide ; ne jamais utiliser de nettoyants agressifs.
  - Éviter tout contact entre les pièces rembourrées et les produits cosmétiques tels que le maquillage, le gel pour cheveux, etc.
  - Éviter tout contact entre les animaux et les pièces rembourrées en cuir car ils pourraient griffer le cuir.
  - Éviter toute exposition prolongée à la lumière du soleil car cela pourrait provoquer des décolorations.
- Pour des raisons fonctionnelles, le siège, le dossier et les autres pièces rembourrées ne sont pas fabriqués à partir de matériaux imperméables.
- C'est pourquoi il faut remplacer le siège et les autres pièces rembourrées lors du reconditionnement du fauteuil afin d'en garantir la bonne hygiène.
- L'utilisateur ou son assistant doit veiller à éliminer la poussière, essuyer et sécher les pièces rembourrées du fauteuil conformément aux instructions ci-dessus, en faisant de son mieux et en fonction des besoins. Si le nettoyage s'avère insuffisant, le fauteuil ne sera pas reconditionné afin de garantir la sécurité hygiénique.

## 6. Élimination et recyclage


### 6.1. Combustible

- Siège
- Dossier
- Accoudoir
- Repose-tête
- Autres pièces rembourrées commercialisées par Mercado Medic AB

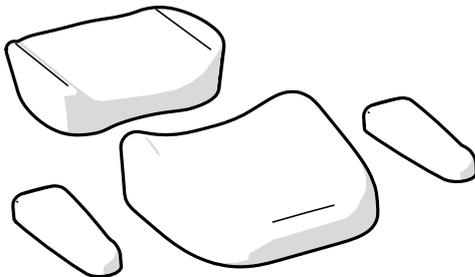

### 6.2. Métal

- Cadre
- Vérins à gaz
- Cadre du siège
- Mécanisme du dossier
- Barres en U et mécanisme de l'accoudoir
- Autres pièces métalliques dans les produits commercialisés par Mercado Medic AB

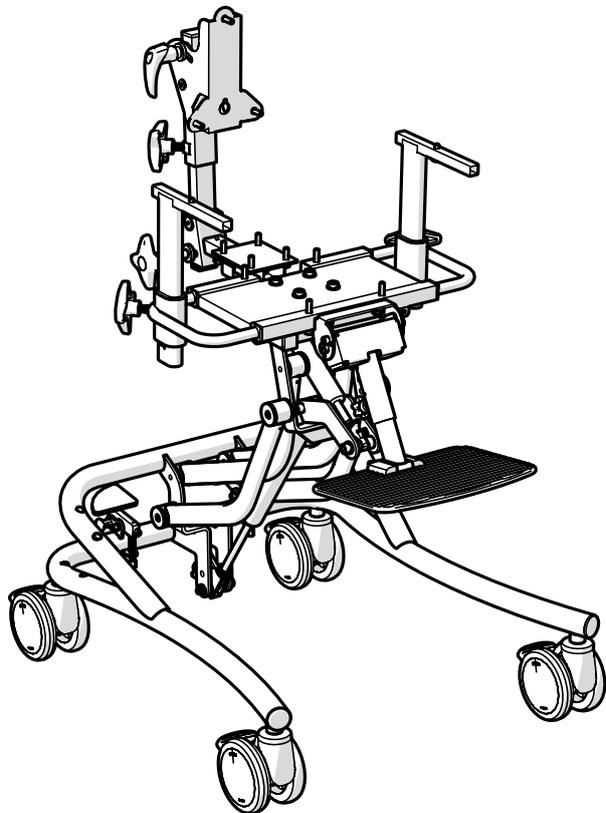



# Informations de contact

## Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV

Nobelweg 22

NL-3899 BN Zeewolde



Téléphone : +31 36 521 99 95

Télécopie : +31 36 521 99 90



[www.mercado-medic.nl](http://www.mercado-medic.nl)

[admin@mercado-medic.nl](mailto:admin@mercado-medic.nl)

Espace pour l'étiquette du produit  
et le numéro de série.



Mercado Medic AB  
Tryffelslingan 14  
SE-181 57 Lidingö  
SUÈDE

Téléphone : +46 8 555 143 00  
E-mail : [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)