




FIN

EVI



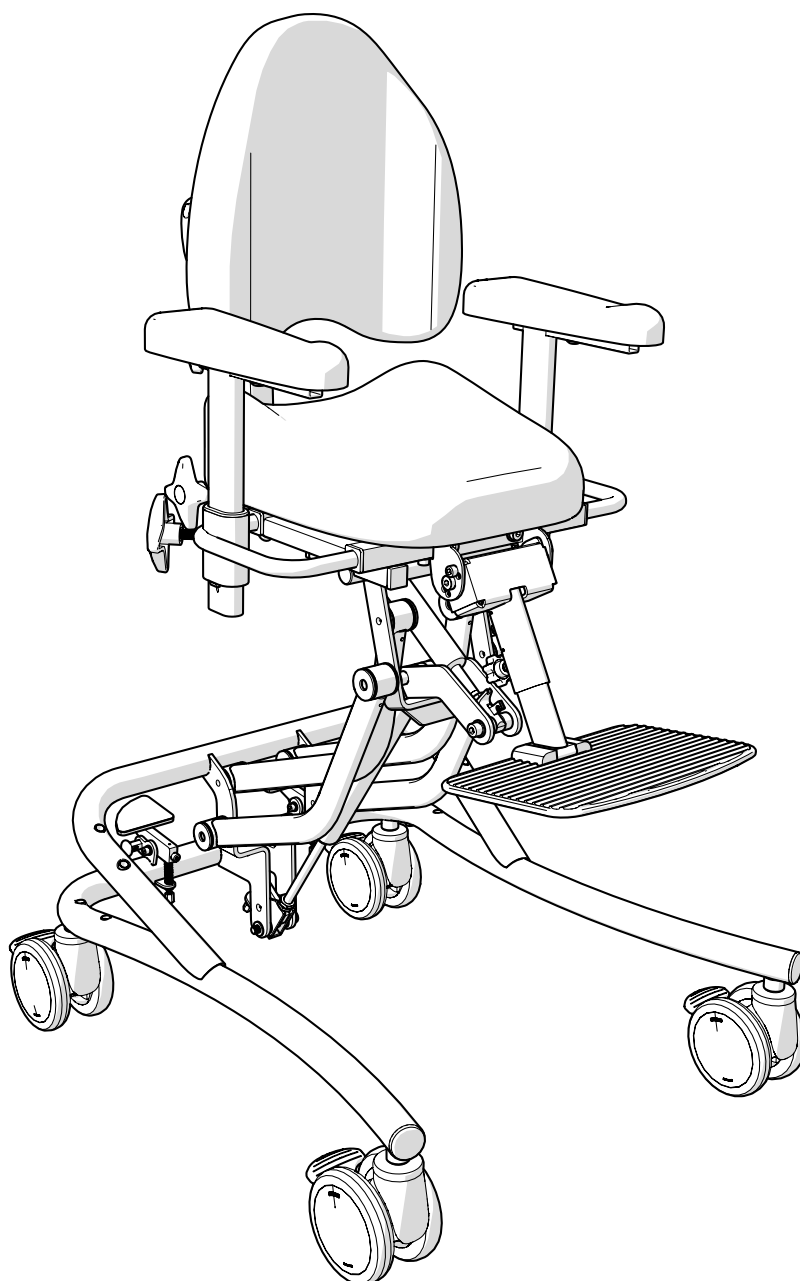

EVI on luokan I lääketieteellinen laite. Se on CE-merkitty Ruotsin Lääkeviraston lääkinnällisiä laitteita koskevien asetusten LVFS 2003:11 mukaisesti. Kaikki tuolin tekstiilit on testattu ja hyväksytty standardien EN 1021-1 ja EN 1021-2 mukaisesti. Mercado Medic AB on sertifioitu sekä ISO 13485, 9001- että 14001-standardien mukaisesti, ja se noudattaa sovellettavia työ- ja ympäristölakeja.

Jos sinulla on kysyttävää tuotteestasi tai jos jotain odottamatonta on tapahtunut, ota ensin yhteyttä lääkäriisi. Olet aina tervetullut ottamaan yhteyttä Mercado Medic AB:hen.

Käyttö- ja huolto-ohjeidemme PDF-versiot suurennusvaihtoehtoiseen löytyvät verkkosivuiltamme www.mercado.se. Siellä on myös tietoa lisävarusteista, jotka voidaan asentaa Mercado Medicin tuoleihin, mahdolliset turvallisuusviestit markkinoille, reseptituki sekä tuotteiden ja lisävarusteiden takaisinkutsut.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän käsikirjaan ja sen sisältöön.

Sisällysluettelo

1. Tärkeitä tietoja	4
2. Symbolit	6
3. Ennen käyttöä	7
4. Miten tuotetta käytetään	8
5. Puhdistus ja kunnossapito	13
6. Hävittäminen ja kierrätys	14

1. Tärkeitä tietoja

EVI-tuolissa on vaihdettavia komponentteja, lisävarusteita ja toimintoja, joissa on vaihtoehtoja yksilöllisille asetuksille. Tuolia saa käyttää vain henkilö, jolle se on tarkoitettu, ja siihen tarkoitukseen, jota varten se on suunniteltu. Tuoli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää ulkona. Tuoli ei saa altistua äärimmäiselle kylmälle tai kuumuudelle, pitkittyneelle auringonvalolle tai muulle säteilylle. Tuolia ei saa altistaa vedelle, muille nesteille tai kemikaaleille. Varoitus: Metallipinnat voivat kuumentua, jos ne ovat altistuneet auringonvalolle. Tuolille ei saa varustaa muilla kuin Mercado Medic AB:n hyväksymillä lisävarusteilla ja komponenteilla. Tuoliin ei saa tehdä muutoksia ilman Mercado Medic AB:n hyväksyntää.

- Riittävä pätevyys tämän tuotteen turvalliseen käyttöön saadaan lukemalla huolellisesti nämä käyttö- ja hoito-ohjeet ennen tuolin käyttämistä.
- Tuolia on käytettävä varoen. Ota ympäristö huomioon ennen siirtymistä. Voit helposti törmätä lemmikkeihin tai lapsiin. Tuolia saa käyttää vain istumiseen, eikä sitä saa käyttää leluna.
- Mercado Medic käsinojat, istuimet, selkänojat ja muu verhoilu on kehitetty ja valmistettu ilman myrkyllisiä aineita ja allergeeneja.
- Käyttäjän maksimipaino: 50 kg.
- Käytä EVI:ä vain tasaisilla ja suorilla pinnoilla.
- Tuolia on kuljetettava pahvilaatikkoon pakattuna kuormalavalla. Jos tuoli kuljetetaan autolla, se on kiinnitettävä paikoilleen liinoilla sekä rungon että istuimen päältä, ja istuinkorkeus on asetettava mahdollisimman alas. Korkeudensäätö- ja kallistuspolkimet on lukittava kuljetuksen ajaksi.
- Tuolin käyttölämpötila on +5...+40 °C ja suhteellinen kosteus 15–90 % tiivistymätön. Jos tuolia on säilytetty näiden rajojen ulkopuolella, sen on annettava mukautua ympäristöönsä ennen käyttöä, jotta sitä voidaan käyttää turvallisesti.
- Vain Mercado Medic AB:n valtuuttama henkilöstö saa suorittaa korjaukset ja muut tekniset toimenpiteet.
- EVI toimitetaan vakiona istuimella, selkänojalla, käsinojilla ja jalkalevyllä varustettuna.
- Takuuaika on kaksi (2) vuotta, ellei toisin sovita. Takuuvaateita varten ota yhteyttä Mercado Medicin edustajaan (katso viimeinen sivu).
- Odottavissa oleva käyttöikä on kymmenen (10) vuotta.
- EVI-tuoli voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla. Kaikki lisävarusteet on kiinnitettävä niin, että niistä ei voi irrota pieniä osia.

1. 1. Ohjeet Mercado Medic AB:n tuotteiden yksilöllisiin mukautuksiin

Mukautuksia voi tehdä vain henkilöstö, joka on suorittanut Mercado Medic AB:n huolto- ja kunnostuskoulutuksen. Osoitteesta www.mercado.se/mercado-dokument löytyvien nykyisten yhdistelmäsovimusten luettelon osia käyttämällä voidaan säilyttää Mercado Medic AB:n CE-merkintä. Jos tuoliin halutaan asentaa osa, joka ei ole nykyisten yhdistelmäsovimusten luettelossa, asiakkaan valtuutetun henkilöstön on otettava yhteyttä Mercado Medic AB:hen kirjallista hyväksyntää varten.

Asiakkaan tai kyseisen osan toimittajan on lähetettävä arvioitavat osat Mercado Medic AB:lle. Sen jälkeen Mercado Medic AB ottaa yhteyttä kyseisen osan toimittajaan selvittääkseen onko tällä kiinnostusta solmia yhdistelmäsovimus. Mercado Medic AB tekee riskiarvioinnin pyydetyn osan osalta. Kun riskiarviointi on suoritettu, asiakas saa kirjallisen lausunnon.

Mercado Medic AB:n on tarkistettava alla kuvatulla tavalla muutetut tuolit, jotta Mercado Medic AB:n tuotevastuu pysyy voimassa.

- Verhoilua, kuten istuimet, selkänojat, käsinojat, sivutuet, vartalotuet ja niskatuet, voidaan säätää edellyttäen, että ne eivät ylitä tuotteen nykyisiä ulkoisia ulottuvuuksia.

- Verhoilun on täytettävä sovellettavat sytytysvaatimukset ja muut ympäristövaatimukset.
- Pinnat, joihin kohdistuu merkittäviä pystyvoimin, eivät saa ulottua pyörien keskipisteiden muodostaman alueen (rungon) ulkopuolelle.

Kun nämä vaatimuksen täyttyvät, Mercado Medic AB säilyttää tuotevastuun tuotteistaan.

Tuotteet, joihin ovat tehneet muutoksia terveydenhoitopalvelut, jotka ovat Mercado Medic AB:n vaikutusvallan ulkopuolella, jolloin terveydenhoitopalvelut kantavat myös tuotevastuun, voidaan palauttaa alkuperäiseen kuntoon. Mercado Medic AB:n hyväksymän valtuutetun teknikon on palautettava tuote. Mercado Medic AB kantaa silloin taas tuotevastuun CE-merkinnän 93/42/ETY Lääkinnällisistä laitteista annettu direktiivi, mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää mukautuksista ja erikoismukautuksista, katso tämän oppaan viimeisellä sivulla olevat yhteystiedot.

2. Symbolit

Symbolit, jotka saattavat näkyä tuotteessa ja mitä ne tarkoittavat.



1. Noudata käyttöohjeita



2. Lähdemateriaalien erottelu



3. Tuote on osa kierrätysprosessia



4. Käyttäjän maksimipaino



5. Valmistaja




6. Puristumisvammojen vaara.
Kaikki riskit, jotka on merkitty

3. Ennen käyttöä


3.1. Vakiokokoonpano

Vakiokokoonpano toimitetaan käyttövalmiina.

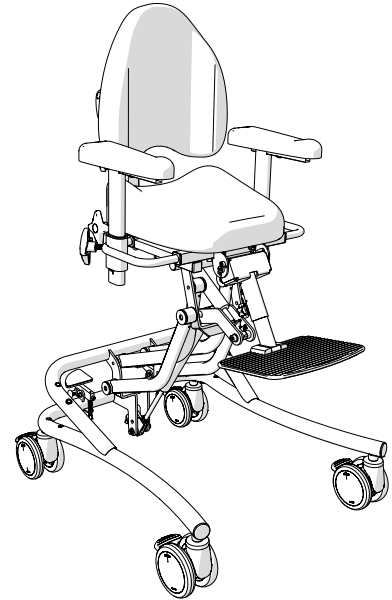

3.2. Niskatuki (valinnainen)


Kiinnitä niskatuki selkänojaan liu'uttamalla se paikalleen. Sääda niskatuen asentoa nupeilla.

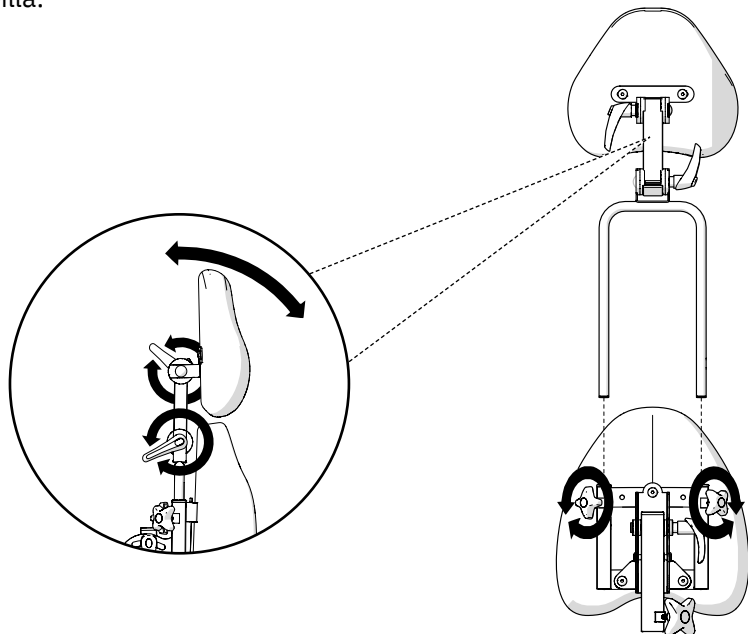

4. Miten tuotetta käytetään


4.1. Säädöt

Tässä käsikirjassa säädettävät osat on merkitty mustalla nuolella. Polkimien ja nappien kaltaisia osia voidaan käyttää käsin. Jos ruuveja on merkitty säädettäviksi, käytä Mercado-avainta (tuotenro 800897).

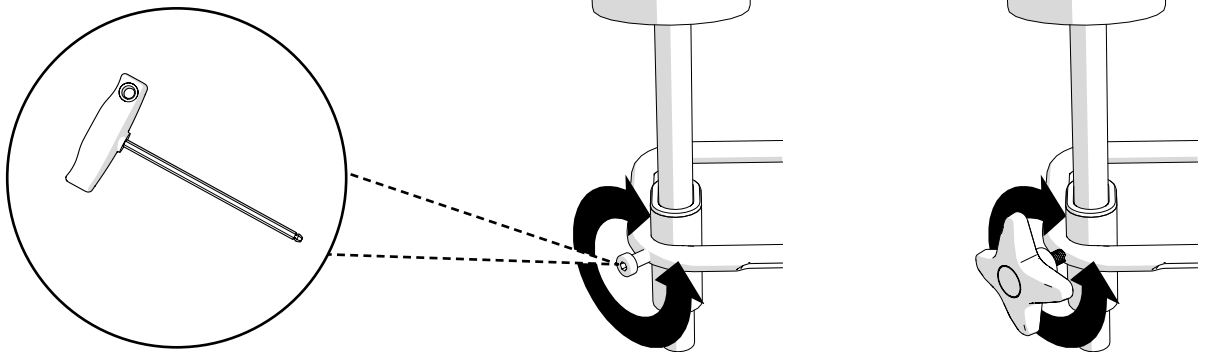

4.2. Jarru

Kytke ja vapauta kunkin pyörän jarru polkimien avulla.

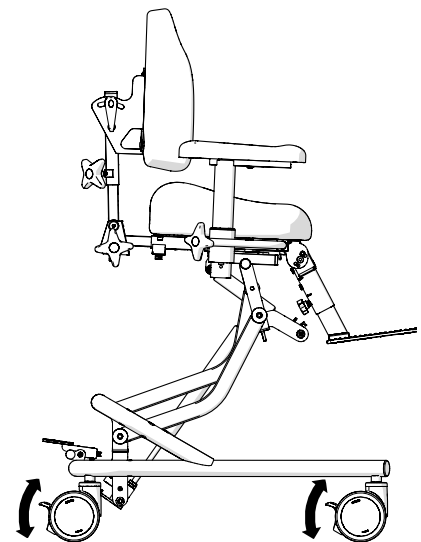


4. 3. Istuinkorkeus

Säädä istuinkorkeutta polkimen avulla.



Varoitus! Selkänojamekanismin ja jalustan välinen puristumisvaara, kun lasket istuinkorkeutta, varsinkin kun sitä kallistetaan taaksepäin.

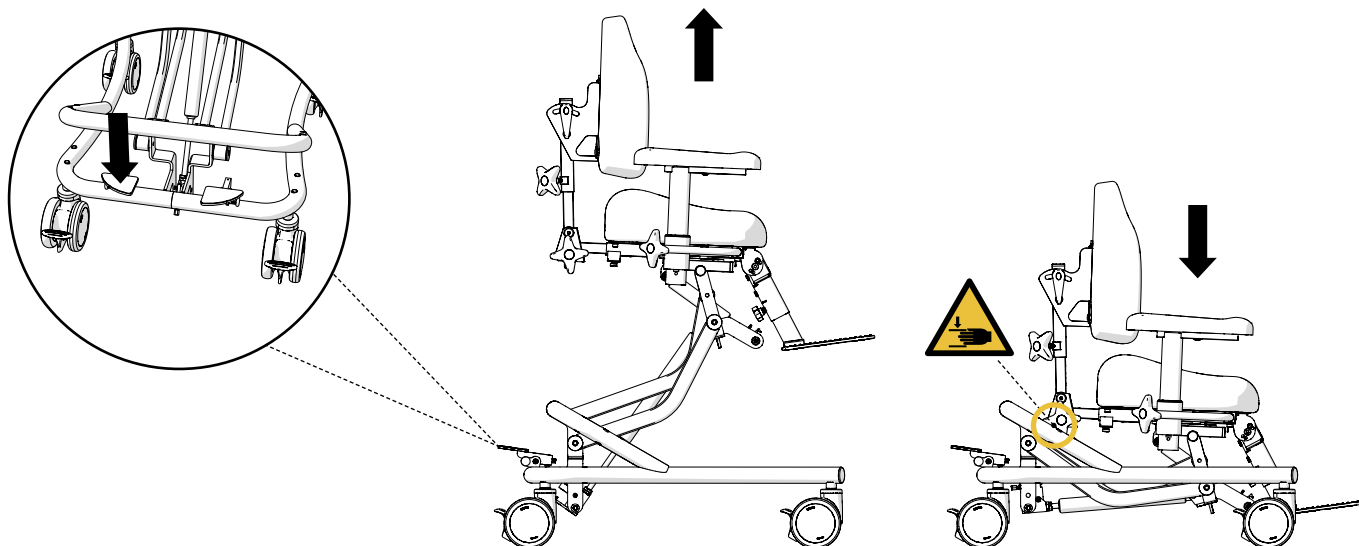


4. 4. Istuimen kallistus

Säädä istuimen kallistusta polkimen avulla.






Varoitus! Jalkalevyn ja kallistusmekanismin välinen puristumisvaara, kun kallistat istuinta eteenpäin. Selkänojamekanismin ja jalustan välinen puristumisvaara, kun kallistat istuinta taaksepäin, varsinkin kun istuin on matalalla.

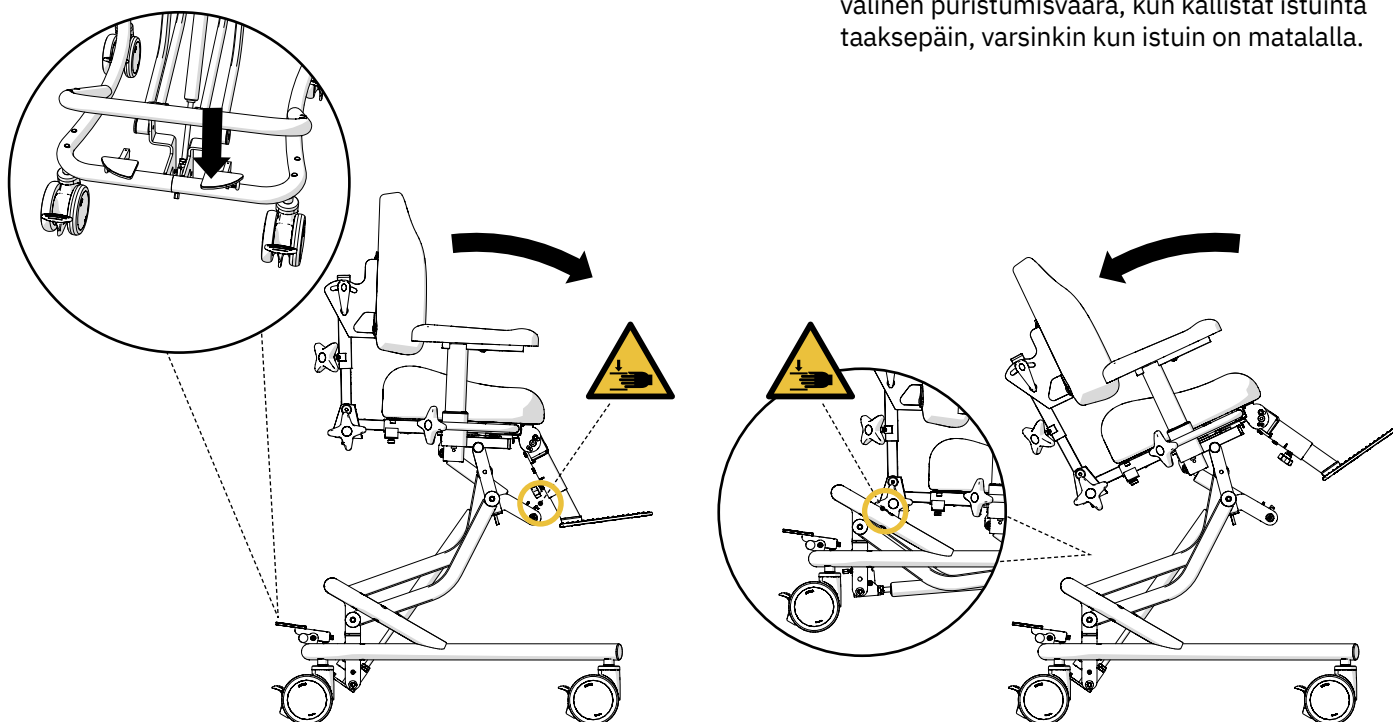


4. 5. Poljinlukko

Polkimet voi lukita tahattoman käytön estämiseksi.
Lukitse ja avaa istuinkorkeuden ja kallistuksen
polkimet vastaavilla nupeilla.

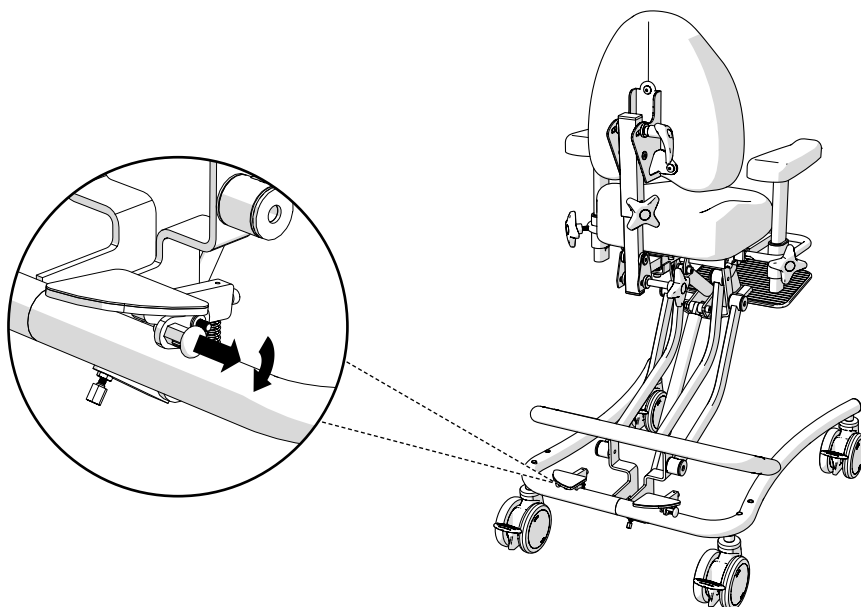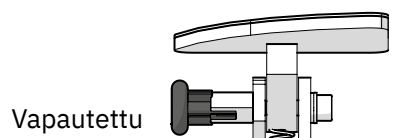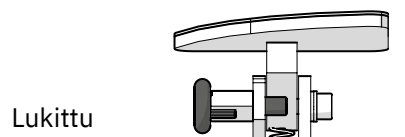


4. 7. Selkänoja

Säädä selkänojan asento nupeilla ja ruuvilla.

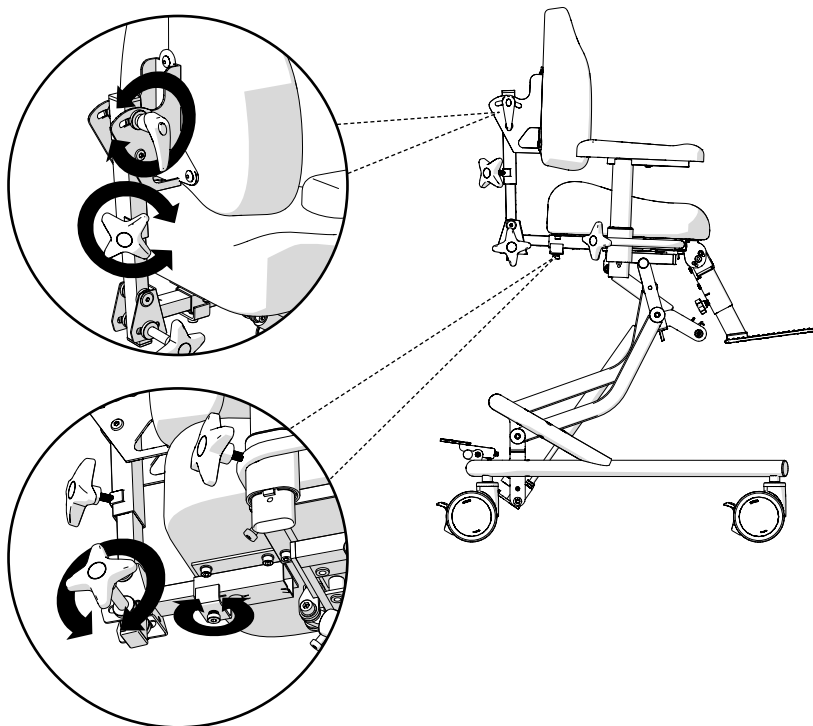

4. 6. Käsinojat

Säädä käsinojien asentoa nupeilla ja ruuveilla.

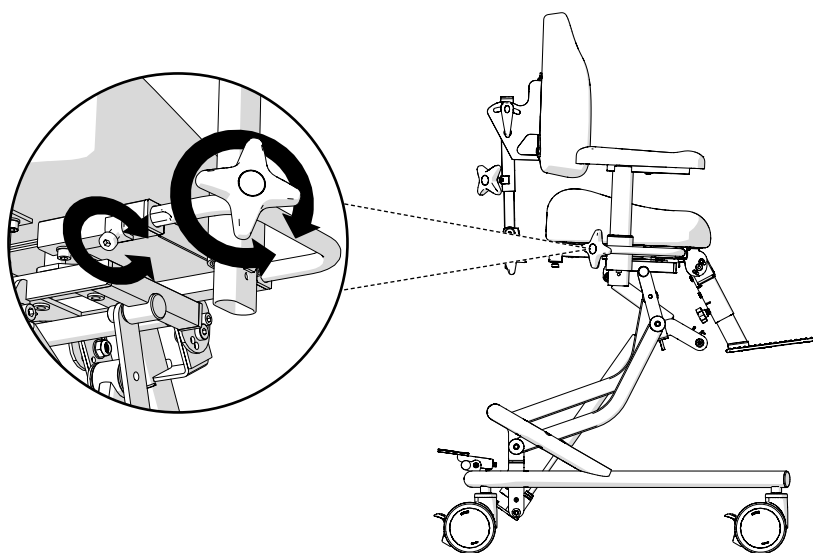

4. 8. Jalkatuki


Tuoliin on saatavana kaksi vaihtoehtoista jalkatukea.



Varoitus! Puristumis- tai murskautumisriski, jos jalkatuen kulmaa säädetään liian lähellä tuolin jalustan kallistusmekanismia.


Jalkatuki keskikiinnitys

Säädä jalkatuen asento nupeilla ja ruuveilla.

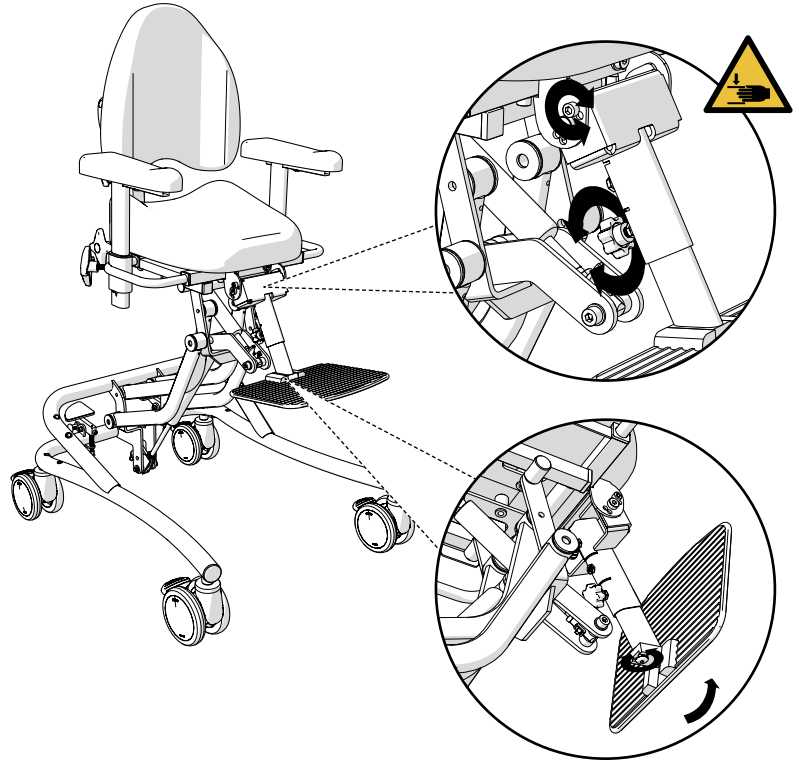

Jalkatuki Medic jaettu

Säädä jalkatuen asento ruuveilla.

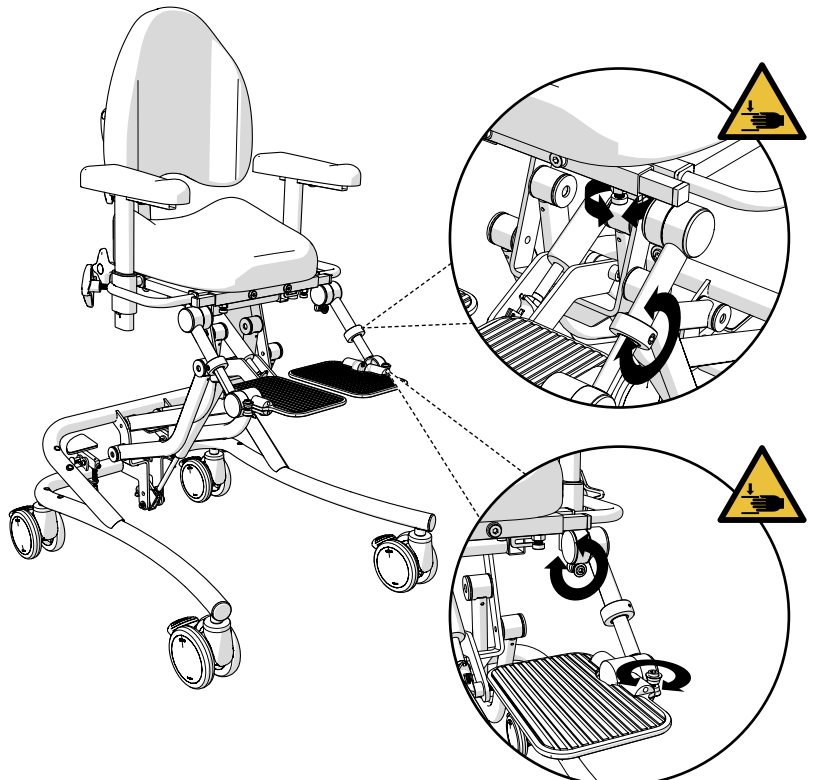


5. Puhdistus ja kunnossapito

- Tuoli tulisi pyyhkiä ja pitää puhtaana pölystä ja liasta.
- Tuoli tulisi verhoilua lukuun ottamatta pestä desinfiointiaineella, jonka PH on 7–12 (tiiviste).
- Puhdista verhoilu vaahtopesuaineella.
 - Poista lika, murut jne.
 - Levitä ohut kerros vaahtoa ja hiero sitä tasaisesti kostealla liinalla.
 - Pyyhi kuivaksi puhtaalla, hieman kostealla liinalla.
 - Imuroi hyvin kuivana.
- Keinonahka on pestävä saippuavedellä tai puhdistettava alkoholiliuoksella, esimerkiksi desinfiointiaineella.
- Nahkaverhoilu vaatii hieman ylimääräistä hoitoa.
 - Roiskeet on pyyhittävä välittömästi kostealla liinalla. Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita.
 - Varmista, ettei verhoilu joudu kosketuksiin kauneudenhoitotuotteiden, kuten meikin, hiusgeelin jne. kanssa.
 - Älä päästä lemmikkejä nahkakalusteille, niiden kynnet voivat naarmuttaa nahkaa.
 - Vältä suoraa ja pitkäaikaista altistumista auringonvalolle, koska se voi aiheuttaa nahan värin haalistumista pitkällä aikavälillä.
- Toiminnallisista syistä istuinta, selkänojaa ja muuta verhoilua ei valmisteta läpäisemättömästä materiaalista.
- Hygieniasyistä istuin ja muu verhoilu on korvattava tuolin kunnostuksen yhteydessä.
- Käyttäjän tai avustajan tulisi parhaan kykynsä ja tarpeen mukaan poistaa pöly, pyyhkiä puhtaaksi ja kuivata verhoilu yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä tyydyttävästi, tuolille on tehtävä kunnostus hygieenisen turvallisuuden takaamiseksi.

6. Hävittäminen ja kierrätys


6.1. Energiajäte

- Istuin
- Selkänoja
- Käsinoja
- Niskatuki
- Muu Mercado Medic AB:n myymä verhoilu

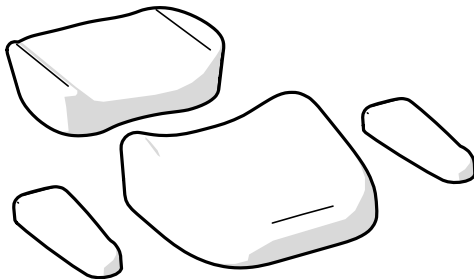

6.2. Metalli

- Runko
- Kaasujouset
- Istuimen runko
- Selkänoja
- U-tangot ja käsinojamekanismi
- Muut metalliosat Mercado Medic AB:n myymissä tuotteissa

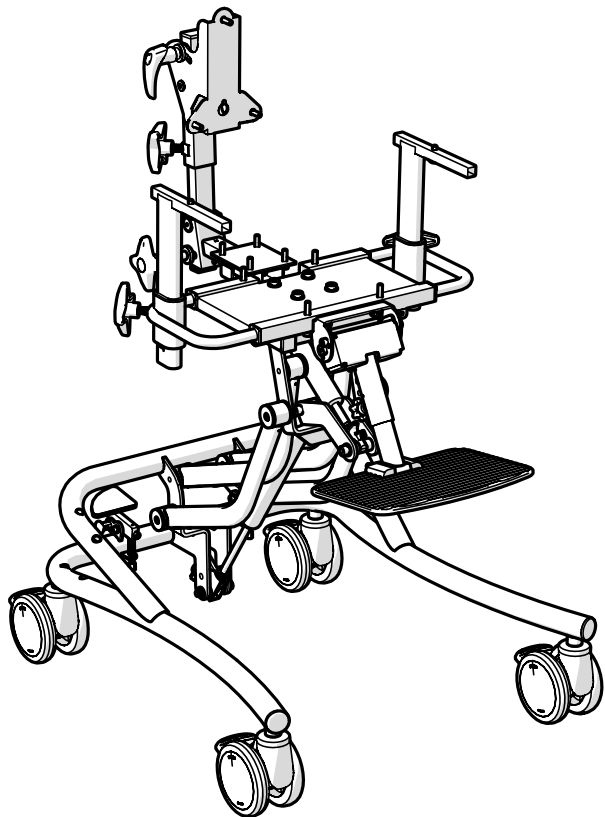

Yhteystiedot

Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV

Nobelweg 22

3899 BN Zeewolde



Puhelin: + 31 36 521 99 95

Faksi: + 31 36 521 99 90



www.mercado-medic.nl

admin@mercado-medic.nl

Tila tuote-etiketille,
jossa on sarjanumero.



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
SE-181 57 Lidingö
SWEDEN

Puhelin: +46 8 555 143 00
Sähköposti: info@mercado.se