



NL

LENGTECOMPENSERENDE ELEKTRISCHE BEENSTEUN REAL 6100 PLUS


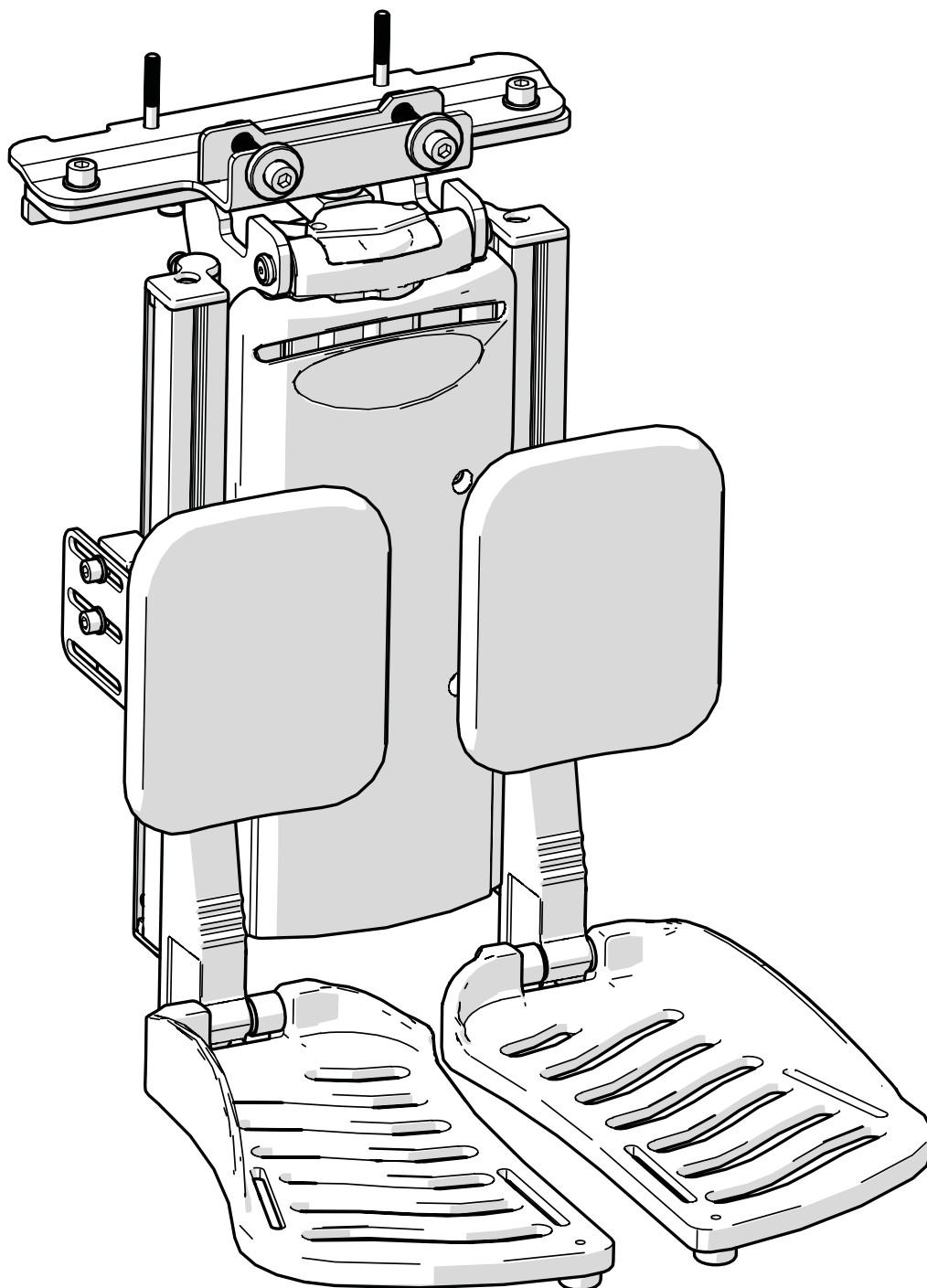


Table of content

1. Lijst met objecten	3
2. Waarschuwingen	4
3. Montage-instructies	5
3.1. Monteer de voetsteunen	5
3.2. Monteer de kuitsteunen.....	6
3.3. Monteer de adapterplaat.....	7
3.4. Monteer de adapterplaat.....	8
3.5. Monteer de beensteun.....	9
3.6. Monteer de beensteun zitdiepte 48 en groter.....	10
3.7. Sluit de elektronica aan	11
4. Verzorging.....	12
5. Vernietiging en recycling	12

1. Lijst met objecten

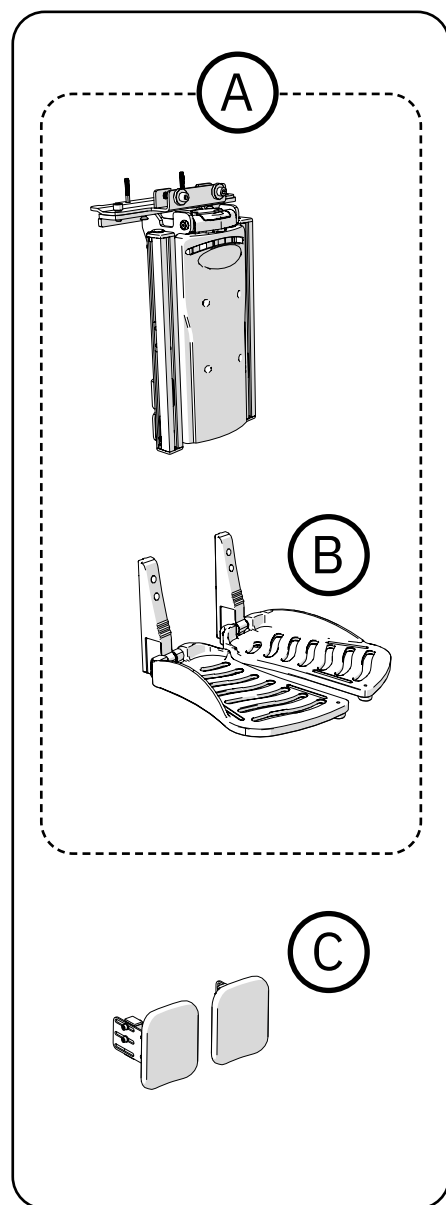

- (A)** LS311110 Beensteun lengte compenserend, inclusief voetplaat 30 cm, exclusief. Kuitsteun

LS311111 Beensteun lengte compenserend, inclusief voetplaat 25 cm, excl. kuitsteun

LS311112 Beensteun lengte compenserend, inclusief voetplaat 30 cm, exclusief. kuitsteun >48 cm

LS311113 Beensteun lengte compenserend, inclusief voetplaat 25 cm, exclusief. kuitsteun >48 cm
- (B)** 805093 Voetsteun Kort R+L v Lengtecompenserende elektrische beensteun LS3111*

805094 Voetsteun Lang R+L v Lengtecompenserende elektrische beensteun LS3111*
- (C)** CS501458 Kuitsteun compl R+L v Lengtecompenserende elektrische beensteun LS3111* Neopreen zwart


2. Waarschuwingen

**Waarschuwing!**

Het risico van beknelling kan optreden bij het bedienen van de stoelfuncties.


Let op de volgende risico's op beknelling:

1. Risico op beknelling tussen beensteun en zitframe
2. Risico op beknelling tussen beensteun en chassis
3. Risico op beknelling tussen beensteun en vloer

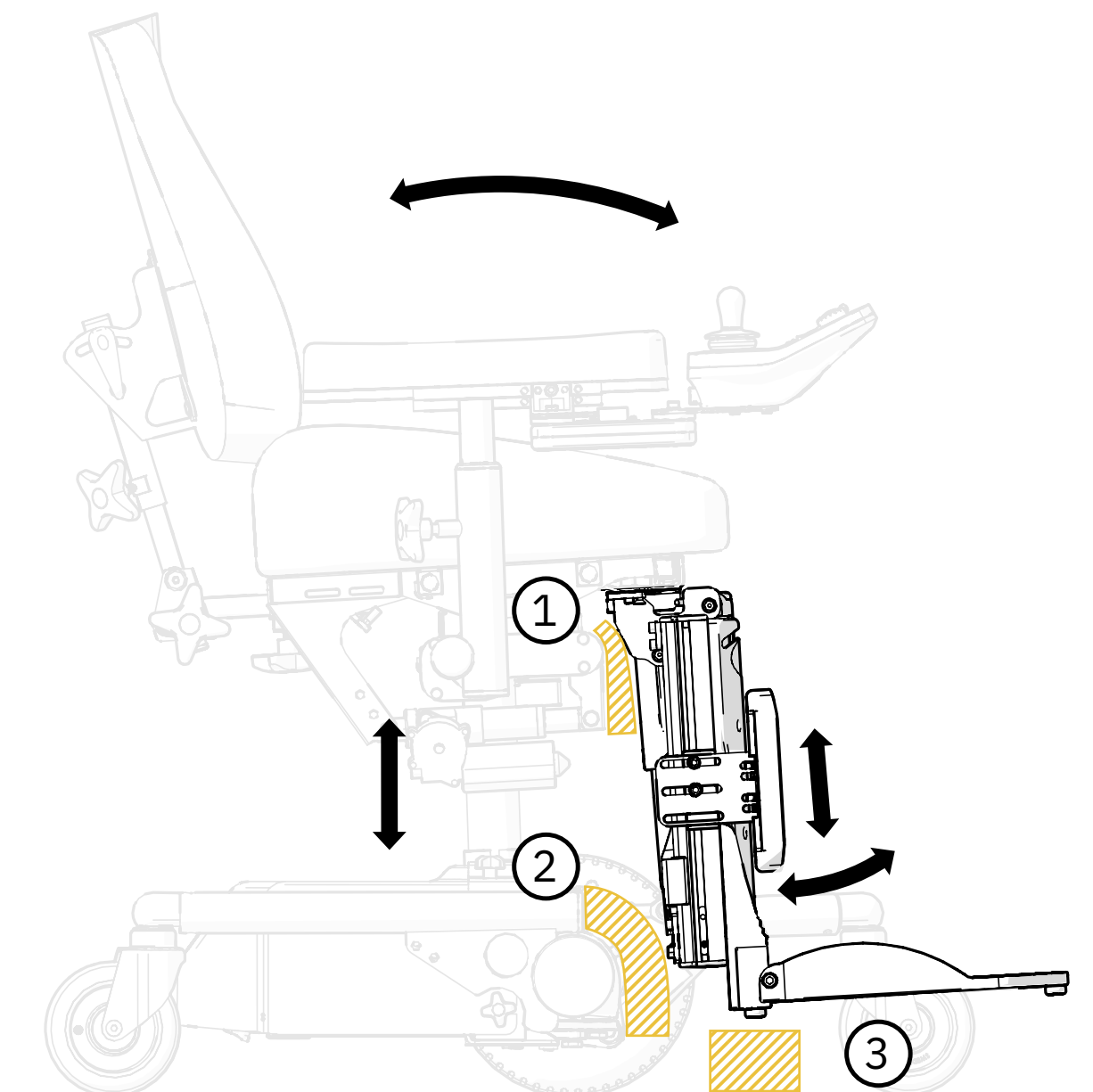


3. Montage-instructies


3.1. Monteer de voetsteunen

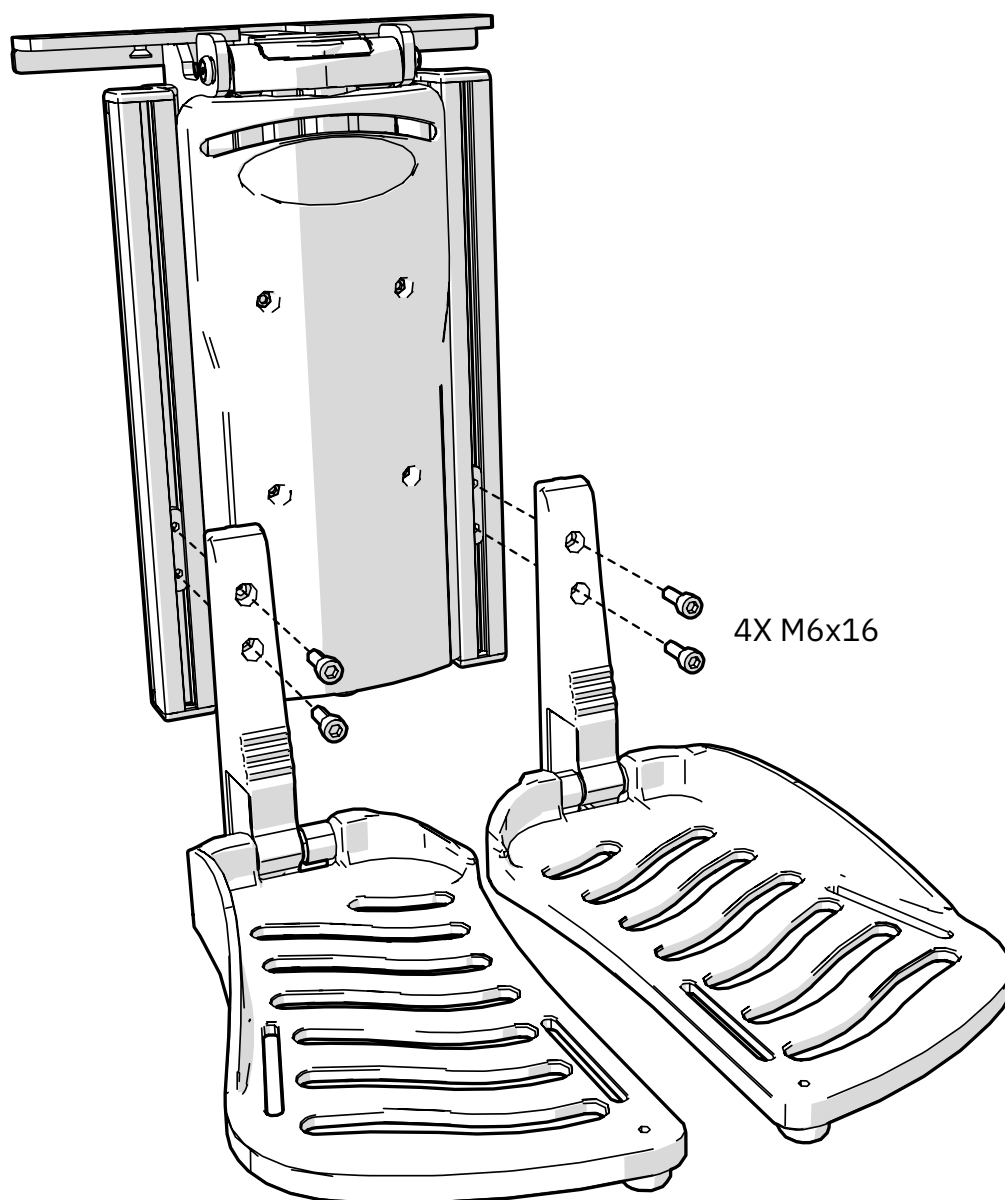

3.2. Monteer de kuitsteunen

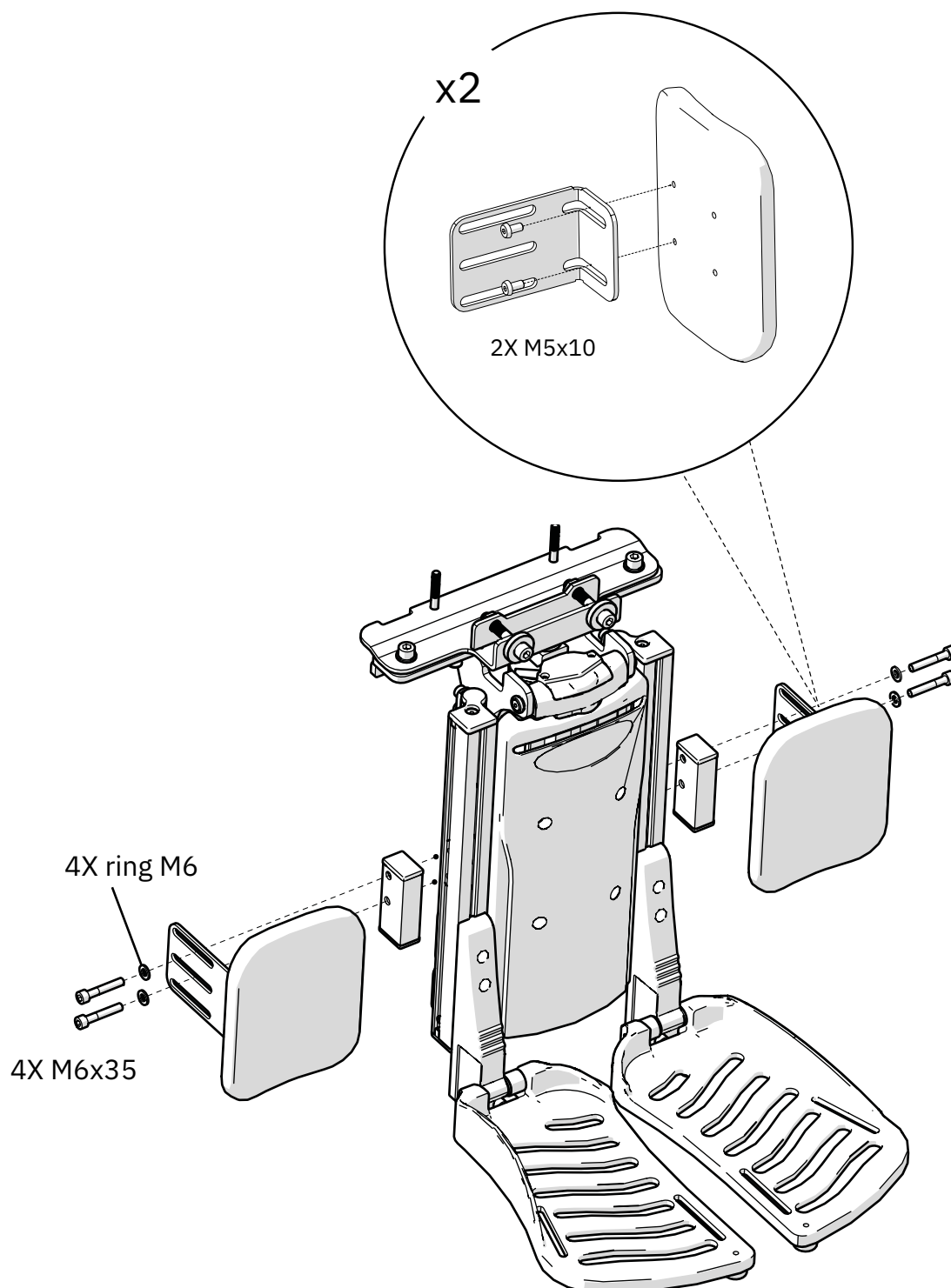


3.3. Monteer de adapterplaat

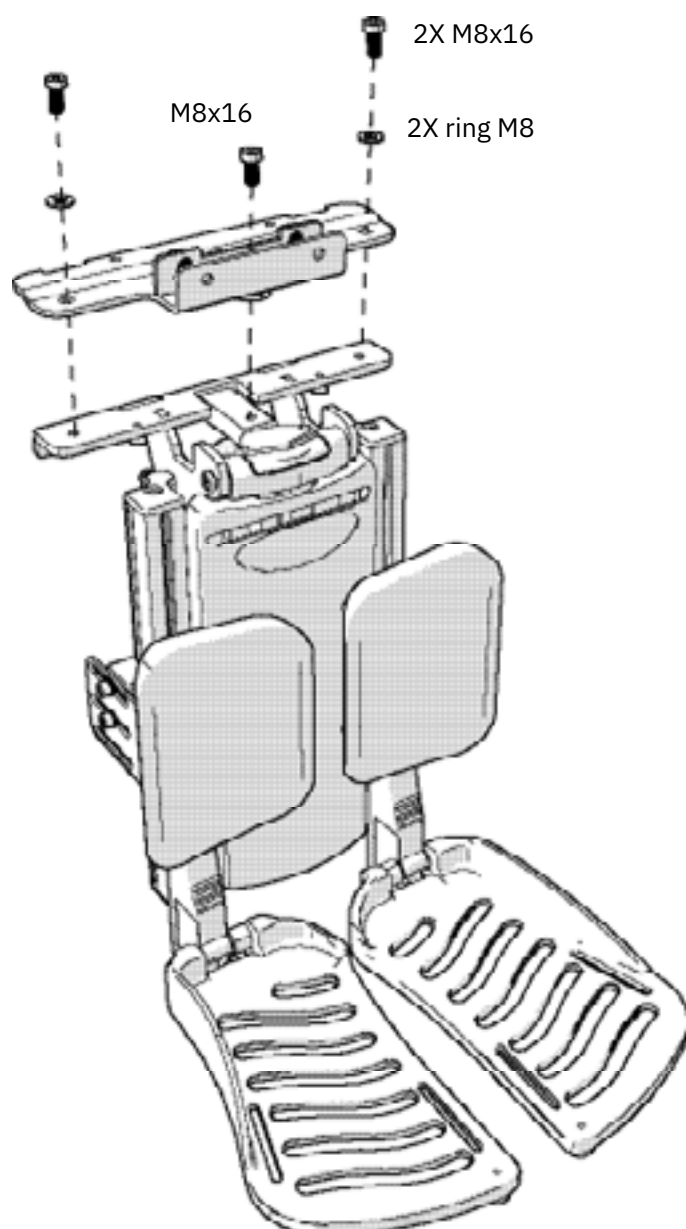


3.4. Monteer de adapterplaat

De stoel is verstelbaar voor 2 verschillende zitdieptes, 48cm en 53cm.

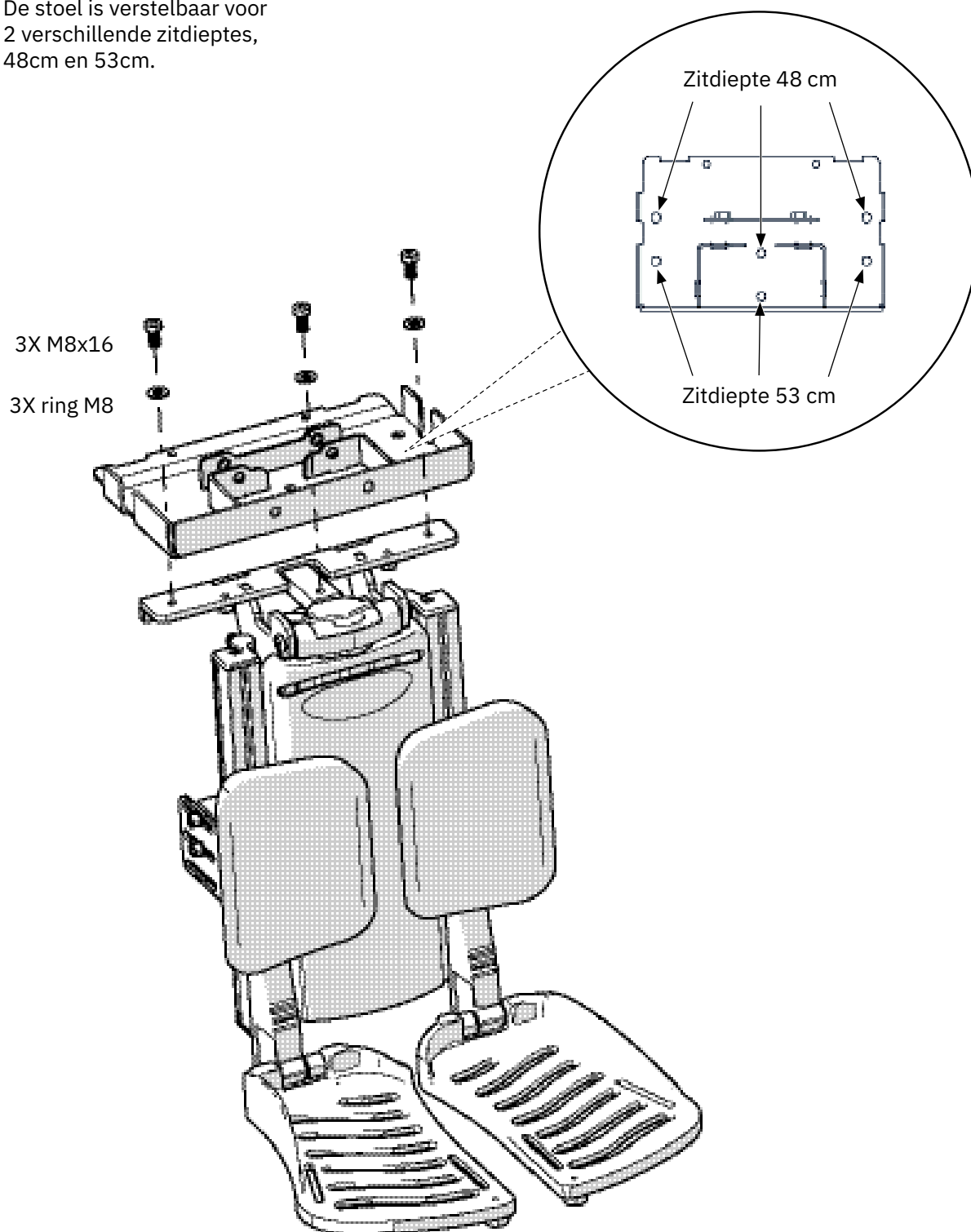


3.5. Monteer de beensteun

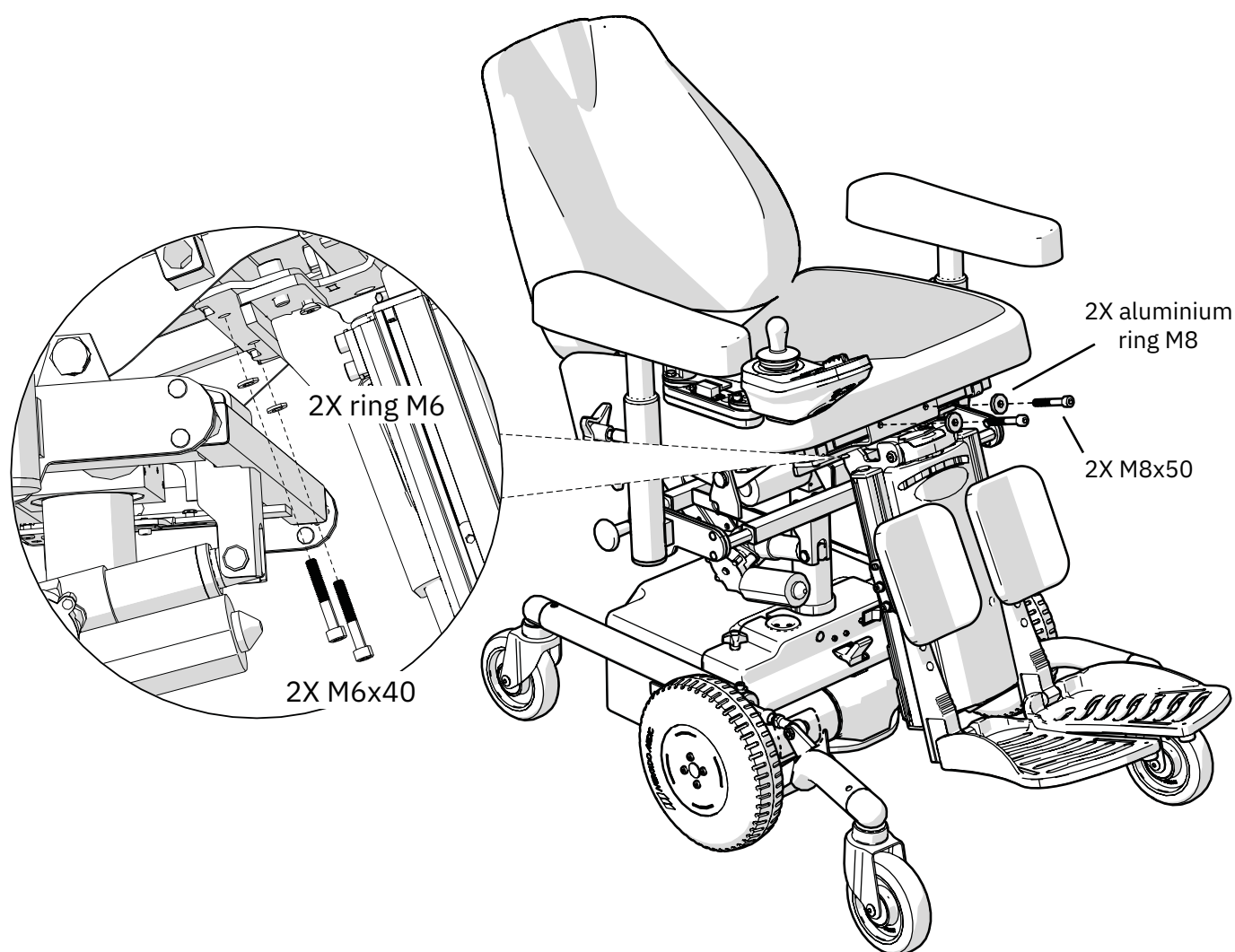


3.6. Monteer de beensteun zitdiepte 48 en groter

1. Schroef de zitting los, 4 stuks M6x40.
2. Monteer de beensteun met de adapter op het zitkruis met de M8x50 schroeven.
Deze bevinden zich in de adapter.
3. Monteer de zitplaat opnieuw met de M6x40 schroeven (4 stuks).
De twee schroeven aan de voorkant bevestigen de beensteun.

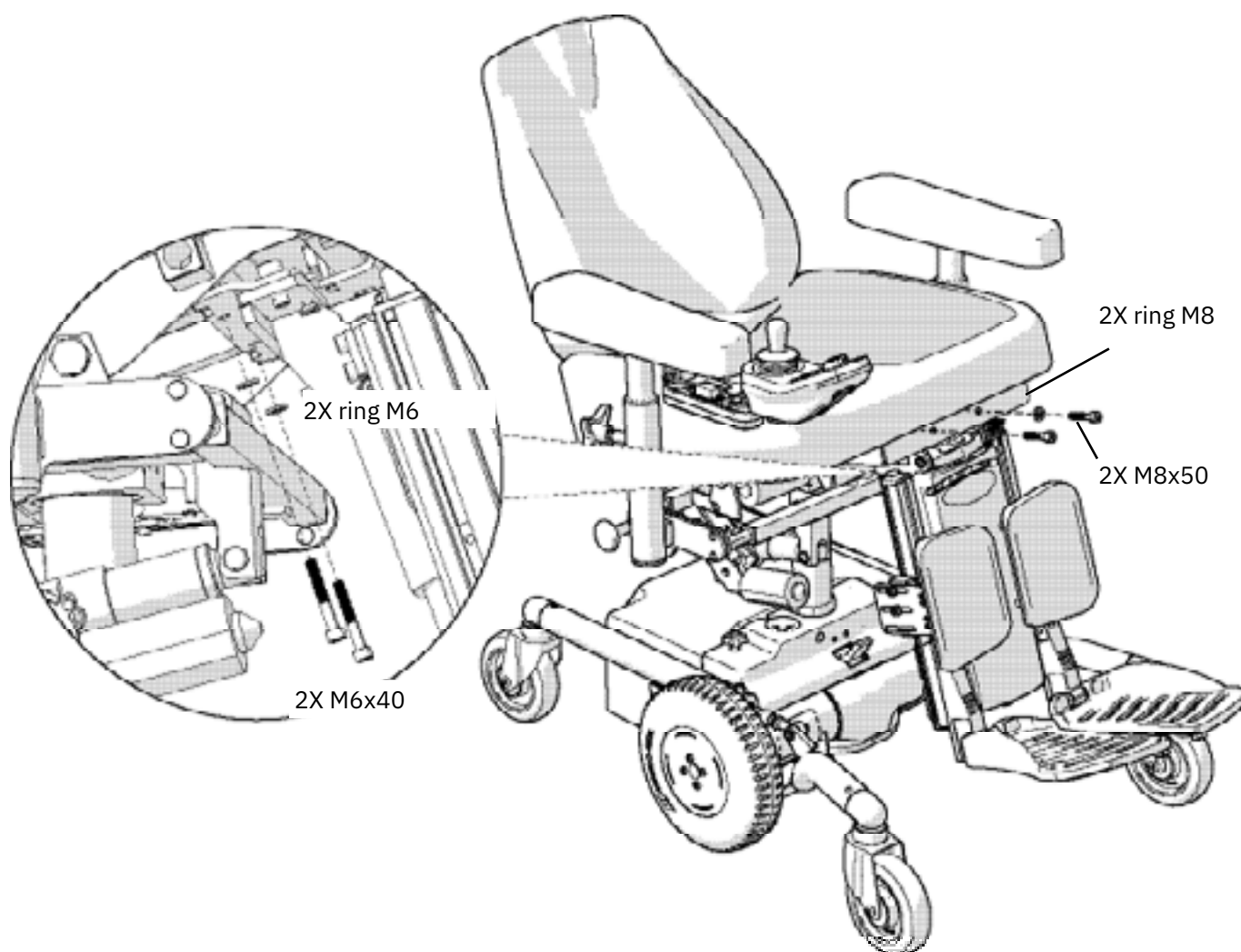

3.7. Sluit de elektronica aan

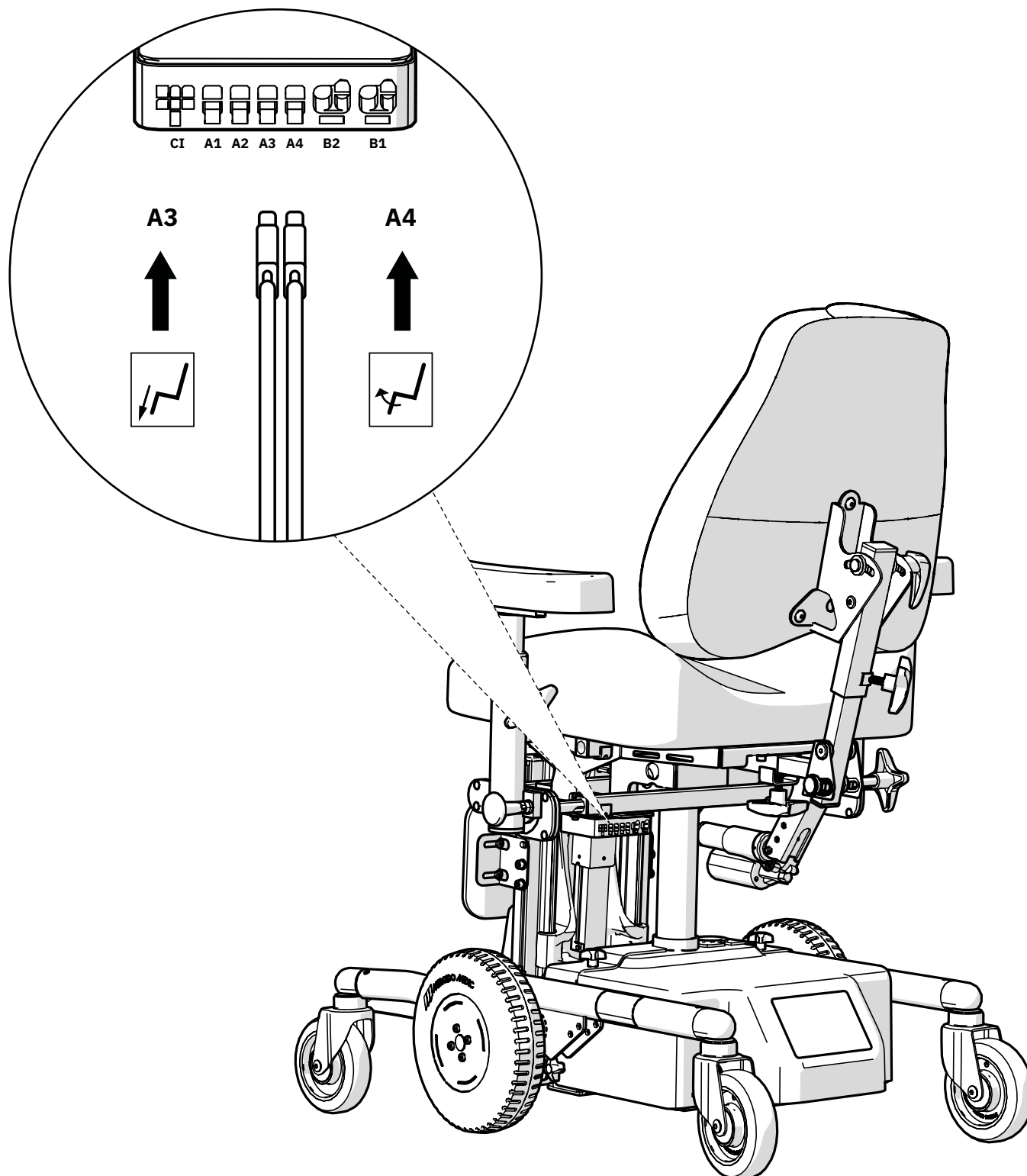


4. Verzorging


Neem het product regelmatig af om het vrij te houden van stof en vuil. U mag reinigingsmiddelen met een pH-waarde van 7 tot 12 gebruiken (geconcentreerd).

5. Vernietiging en recycling


1. Dient als metaal te worden gesorteerd
2. Dient als elektronica te worden gesorteerd
3. Dient als brandbaar afval te worden gesorteerd

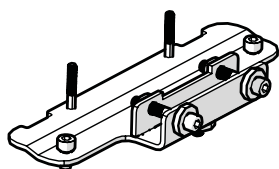


1

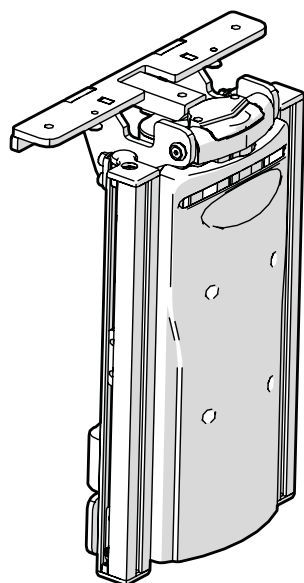


2

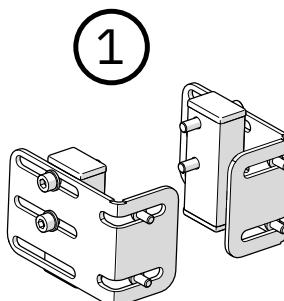

1

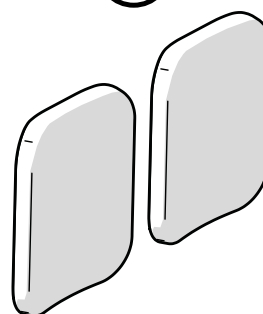

3

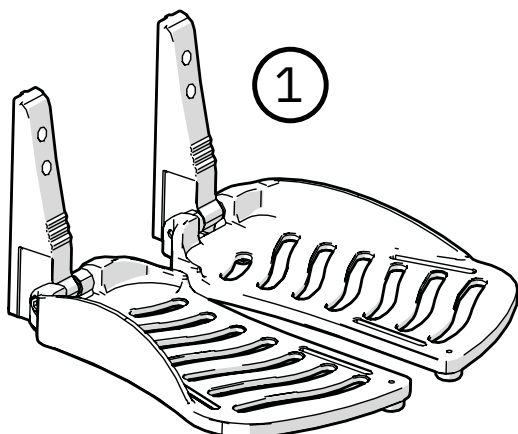

1