



REAL[®] 9500/9600 SÄHKÖ



ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET


Asiak. 20-07315-FI-02
Tuotenro 801978
Muutettu 2020-12-04
Voimassa alkaen 2018-01-01

REAL 9500/9600 SÄHKÖ on luokan I lääkinällinen laite. Se on CE-merkitty Ruotsin Lääkeviraston lääkinällisiä laitteita koskevan säädöskokoelman LVFS 2003:11 mukaisesti ja se on testattu ja hyväksytty standardien EN 1335 ja EN 60601-1-2 mukaisesti. Kaikki tuolin tekstiilit on testattu ja hyväksytty standardien EN 1021-1 ja EN 1021-2 mukaisesti. Mercado Medic AB on sertifioitu standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 13485 mukaan ja täyttää sovellettavan työ- ja ympäristölainsäädännön vaatimukset.

Jos sinulla on kysyttävää tuotteestasi tai jos jotain odottamatonta on tapahtunut, ota ensi sijassa yhteyttä lääkäriisi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä Mercado Medic AB:ssä.

Käyttö- ja hoito-ohjeidemme PDF-versiot suurennusmahdollisuuksin löytyvät verkkosivuiltamme www.mercado.se. Sivuilta löydät myös tietoa Mercado Medic -tuoleihin asennettavista lisävarusteista sekä mahdolliset turvallisuusilmoitukset markkinoille, tukea tuotteiden ja lisävarusteiden määrittämiseen tai tuotteiden ja lisävarusteiden takaisinkutsut.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän käsikirjaan ja sen sisältöön.

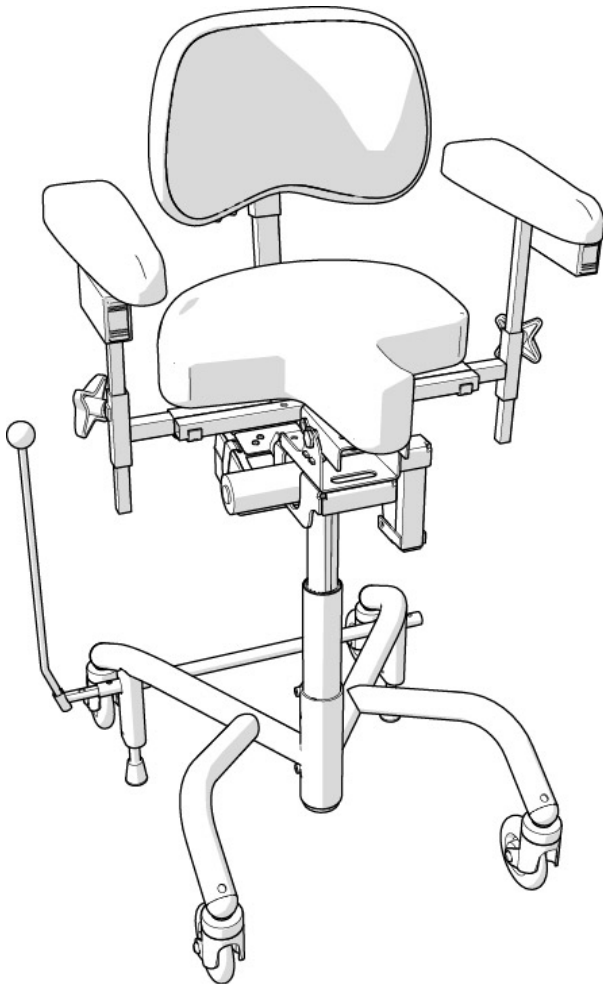

DIN REAL[®] 9500/9600 EL

- ☐ Manuaalinen (9500)
- ☐ Sähkö (9600)
- ☐ PLUS
- ☐ H-jalusta

Riittävä pätevyys tämän tuotteen turvalliseen käyttöön saavutetaan lukemalla huolellisesti tämä käyttö- ja hoito-ohje ennen tuolin käyttöönottoa.



SISÄLLYSLUETTELO

REAL 9500/9600 SÄHKÖ -TUOLIN ESITTELY	SIVU 3
TÄRKEÄÄ TIETOA JA LUOKKA	SIVU 3
ODOTETTU KÄYTTÖIKÄ.....	SIVU 4
KÄYTTÖOHJE.....	SIVU 5
YKSILÖLLINEN MUKAUTTAMINEN	SIVU 8
PUHDISTUS JA HOITO.....	SIVU 8
HUOLTO JA KUNNOSTUS.....	SIVU 9

TARVITTAVAT TIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ

1. Sääda käsinojat sopivalle korkeudelle ja lukitse korkeudensäädön säätöpyörä.
2. Asenna selkänojan tolppa kiinnikkeeseen ja lukitse selkänojan korkeudensäädön säätöpyörä.
3. Asenna jarruvipu kiinnikkeeseen (oikealle tai vasemmalle puolelle). Ei koske sähköjarrua.
4. Kaikki säätöpyörät ja nupit on kiristettävä ennen tuolin käyttöä.
5. Tuolin jarrun on aina oltava kiristetty, kun tuoliin istutaan ja nouseaan ylös. Jarru on tarkastettava säännöllisesti.
6. Koskee sähkötuolia: Lataa tuoli käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. **HUOM! Lataus tulee tehdä päivittäin.**
7. Tuolia ei saa käyttää ilman selkänojaa ja/tai käsinojia.

TÄRKEÄÄ TIETOA JA LUOKKA

REAL-tuolissa on vaihdettavia osia, lisävarusteita ja toimintoja, joissa on säätömahdollisuuksia yksilöllistä mukautusta varten. Tuolia saa käyttää vain se henkilö, jolle se on tarkoitettu ja siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Tuoli on tarkoitettu sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää ulkona. Tuolia ei saa altistaa liialliselle kylmyydelle, kuumuudelle, pitkittyneelle auringonpaisteelle tai muulle säteilylle. Tuolia ei myöskään saa altistaa vedelle, muille nesteille tai kemikaaleille. Varoitus! Metallipinnat voivat kuumentua, jos ne altistuvat auringonpaisteelle. Tuoliin ei saa asentaa muita kuin Mercado Medic AB:n hyväksymiä lisävarusteita tai osia. CE-merkinnän säilyttämiseksi tuoliin ei saa tehdä mitään mukautuksia tai muutoksia ilman Mercado Medic AB:n hyväksyntää <http://mercado.se/mercado-dokument/>. Korjaukset ja muut tekniset toimenpiteet saa suorittaa vain Mercado Medic AB:n valtuuttama henkilöstö. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuolin käyttöä.

- REAL 9500/9600 SÄHKÖ kuuluu suojausluokkaan II, sisäinen akku.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ kuuluu suojaustyyppiin B.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ on EMC-testattu ja testattu standardien SFS-EN 60601-1-1 ja SFS-EN 60601-1-2 mukaisesti, joten sitä tulee käsitellä käyttö- ja hoito-ohjeidemme mukaisesti.
- EMC-liite on ladattavissa osoitteesta <http://mercado.se/mercado-dokument/>
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ täyttää IP 21:n vaatimukset. IP2x tarkoittaa sormien ym. kosketussuojausta, ts. sormilla tai vastaavilla ei yllä mihinkään vaaralliseen. IPx1 tarkoittaa suojausta pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kevyeltä vesisuihkulta ylhäältä.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ -tuolissa on sähköhissi, joka nostaa potilaan niin korkealle, että se voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa riskin. Jos potilas ei pääse tuolista korkeimmassa asennossa, tuolin korkeus ei saa koskaan olla niin korkea, että potilaan jalat irtoavat maasta.
Poikkeukset ovat sallittuja, jos potilas voi saada apua kotihoidon hälytyksen tai puhelimen kautta.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ -tuolissa saa käyttää vain Mercado Medic AB:n sähkölaitteita.
- Tuoli on siirrettävä varoen. Ennen liikkumista on otettava huomioon ympäristö. Jos lattialla on lemmikkejä tai lapsia, ne voivat helposti jäädä alle. Tuolia saa käyttää vain istumiseen. Sitä ei ole tarkoitettu leluksi lapsille tai aikuisille.
- Mercado Medicin käsinojat, istuimet, selkänojat jne. eivät sisällä myrkyllisiä ja allergisoivia aineita.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ on hyväksytty kuljetettavaksi/varastoitavaksi -25...+60 °C:n lämpötilassa ja enintään 90 % ei-kondensoituvassa ilmankosteudessa.
- Käyttäjän enimmäispaino, aikuinen: REAL 9500 140 kg. REAL 9600 SÄHKÖ 150 kg.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ on hyväksytty seisomaan jarrutettuna enintään 5° rinteessä kaikkiin suuntiin. Jos tuoli on jarrutettuna jyrkemmässä rinteessä, tuoli voi alkaa liukua.
- Tuoli on kuljetettava kuormalavalla asianmukaisessa pakkauksessa. Jos tuolia kuljetetaan autossa, tuoli on kiinnitettävä hihnoilla sekä jalustasta että istuimesta ja säädettävä mahdollisimman alhaiselle istuinkorkeudelle.
- Tuoli on testattu ja hyväksytty käytettäväksi +5...+40 °C:n lämpötilassa ja 15–90 % ei-kondensoituvassa ilmankosteudessa. Jos tuolia on säilytetty ympäristössä, joka ei ole näiden rajojen sisällä, tuolin on annettava akklimatisoitua ennen käyttöä, jotta tuolia voidaan käyttää turvallisesti.
- Korjaukset ja muut tekniset toimenpiteet saa suorittaa vain Mercado Medic AB:n valtuuttama henkilöstö.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ -tuolin toimitus sisältää aina vakiona istuimen, selkänojan ja käsinojat sekä säätimet tuolin sähkötoimintojen käyttöä varten.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ -tuolia ei saa siirtää, kun istuin on nostetussa asennossa.
- Takuu-aika on kaksi (2) vuotta, ellei toisin ole sovittu. Ota takuuasioissa yhteyttä Mercado Medic AB:hen
- Enimmäiskäyttöikä on kymmenen (10) vuotta.
- REAL 9500/9600 SÄHKÖ -tuolia voidaan täydentää erilaisilla lisävarusteilla. Kaikki lisävarusteet on asennettava siten, että pienet osat, sulakkeet jne., eivät pääse irtoamaan. Kaikki johdot on kiinnitettävä nippusiteillä puristumisriskien minimoimiseksi.

ODOTETTU KÄYTTÖIKÄ

Tuotteen odotettu käyttöikä on 10 vuotta, kun sitä käytetään tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen valmistuspäivä ja sarjanumero löytyvät tuotteen alustan hopeanvärisestä etiketistä merkinnällä Lev/Del ja lueteltuna muodossa ÅÅVV (vuosi- ja viikkonumero).

Tuotteen käyttäjänä sinun tulee ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjään, apuvälinekeskukseen tai jälleenmyyjään, jos tuotteen suorituskyky on heikentynyt tai muuttunut.

Odotetun käyttöiän mukaan on tärkeää, että tuotteesta tehdään kokonaisarvio ennen käytön jatkamista. Odotetun käyttöiän jälkeen Mercado Medic AB ei voi taata tuotteen soveltuvuutta ja turvallisuutta, koska Mercado Medic AB ei voi vaikuttaa siihen, miten tuotetta on käytetty ja miten se on kulunut. Terveystieteiden organisaation on suoritettava tuotteen kokonaisarviointi, jos lääkäri on määrännyt tuotteen käytettäväksi. Arvioinnissa on otettava huomioon ainakin se, miten tuotetta on käytetty, missä kunnossa tuote ja sen komponentit ovat, onko tuotetta kunnostettu ja huollettu sekä mikäli näin on tehty, mitä tällöin on korjattu ja mikä on ollut toimien syynä.

Ruotsin ja Norjan ulkopuolisilla markkinoilla, joilla jakelija myy tuotetta tarvittaessa suoraan käyttäjälle ja joilla ei näin ollen ole vastuullista tuotteen määrännyttä lääkäriä, määrääkaishuolto on suoritettava edellä olevan kokonaisarvioinnin lisäksi kohdassa Kunnostaminen ja huolto annettujen ohjeiden mukaisesti.

Odotetun käyttöiän jälkeen Mercado Medic AB ei voi taata, että varaosia on saatavissa. Odotettu käyttöikä ei vaikuta CE-merkintään.


KÄYTTÖOHJE

SELKÄMEKANISMI

Medic-selkämekanismista on saatavilla matala ja korkea versio (kuvan tuoleissa on matala selkänoja). Selkämekanismissa on erilliset korkeuden (1), kulman (2), syvyyden (3) säätimet ja itse selkänojan kulma säädetään nupilla (4). Löysää nuppia, aseta selkänoja haluttuun asentoon ja lukitse sitten nuppi.

HUOM! Varmista, että Medic-selkänojamekanismi on säädetty kiinnikkeeseen niin, että jousisalpa lukittuu eikä selkänojaa voi vetää ulos.


Comfort-selkämekanismista on saatavilla matala ja korkea versio (kuvien tuoleissa on matala selkänoja). Selkämekanismissa on erilliset korkeuden (1) ja selkälevyn kulman (2) säätimet. Löysää nuppia, aseta selkänoja haluttuun asentoon (1) ja (2) ja lukitse sitten nuppi. Selkänojan kulmaa säädetään vivulla (3).

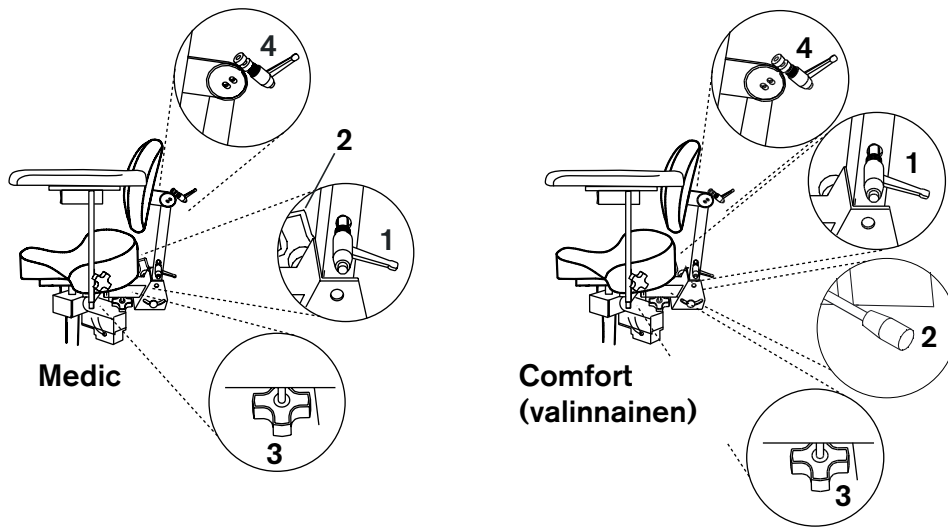

KÄSINOJAT


Käsinoja voidaan säätää pysty- ja sivusuunnassa. Löysää korkeuden (1) tai leveydensäätönuppi (2), aseta haluamasi leveys/korkeus ja lukitse sitten nuppi.

HUOM! Varmista, että käsinoja on säädetty kiinnikkeeseen niin, että jousisalpa lukittuu eikä käsinojaa voi vetää ulos.

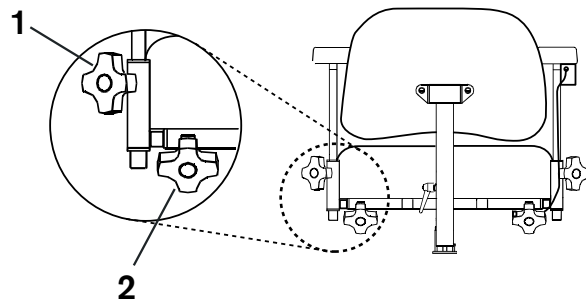


ISTUINKORKEUS/HISSIT

Manuaalisen REAL 9500 -tuolin istuinkorkeus säädetään käsinojan alapuolella olevalla vivulla (1) (vakiona oikealla). Säädä korkeus nostamalla vipua. REAL 9600 SÄHKÖ -tuolissa istuinkorkeutta säädetään keinukytkimellä (2). Nosta istuinta painamalla kytkimen yläosaa ja laske painamalla kytkimen alaosaa. Kieliohjain: nosta vetämällä vipua ylöspäin nostaa ja laske vetämällä vipua alaspäin.

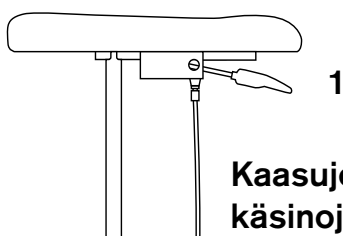

Kaasujousen säätimet
käsinojien alla

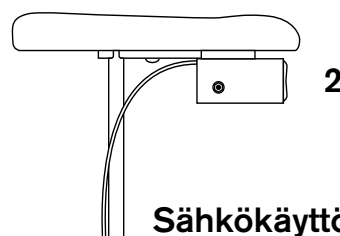


Sähkökäyttöinen

JARRU


Käsijarrua ohjataan vivulla (1). Lukitus: työnnä vipua taaksepäin. Jarruvipu voidaan siirtää tuolin halutulle puolelle. H-jalustalla varustettuja tuoleja voidaan jarruttaa myös jalalla (2).

HUOM! Tuolin jarrun on aina oltava kiristetty, kun tuoliin istutaan ja nouseaan ylös. Jarru on tarkastettava säännöllisesti. Kulunut kumijarrujalka on vaihdettava. Jarrujen toiminto voi heikentyä epätasaisella pinnalla.


Sähköjarrua käytetään punaisella painikkeella (3). Siinä on pitopiiri ja tarvitaan vain lyhyt painallus jarrutustoiminnon suorittamiseen. Jarruta tuolia painamalla painiketta (3) uudelleen.

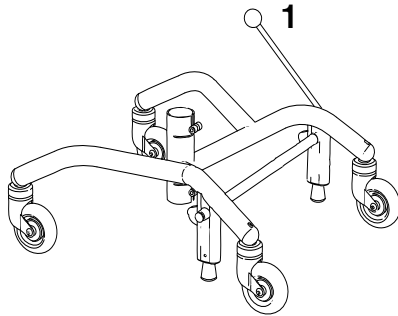

**Taaksepäin jarrutettu
PLUS -jalusta**

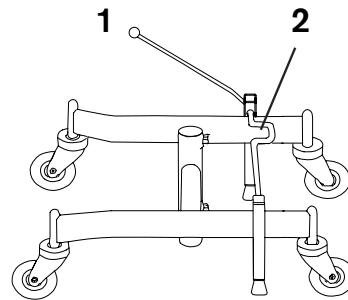

H-jalusta

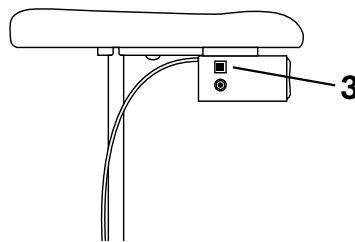


**Sähköjarru
(valinnainen)**


ISTUIMEN KALLISTUS

Kaasujousen kallistusta säädellään kaasujousella. Sitä ohjataan käsinojan alla olevalla vivulla (1) (vakiona vasemmalla). Käsinojat seuraavat mukana, jotta saavutetaan paras tuki kaikissa kallistusasennoissa.

Sähkötoimista kallistusta ohjataan käsinojan alla olevalla säätimellä (2) (vakio vasemmalla). Käsinojat seuraavat mukana, jotta saavutetaan paras tuki kaikissa kallistusasennoissa.

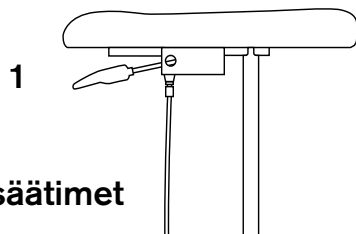

**Kaasujousen säätimet
käsinojien alla**

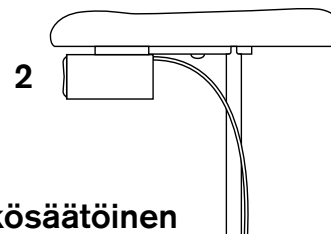

**Sähkösäätöinen
(valinnainen)**

LATAUS


Suosittellemme, että tuolin lataukseen käytetään akkulaturia REAL 9000 tyyppi 2240-12 V, tuotenro 802289. Jos haluat käyttää muuta akkulaturia, ota yhteyttä Mercado Medic AB:hen saadaksesi kirjallisen hyväksynnän. Akku tulee ladata säännöllisesti, mieluummin kerran päivässä. Akun käyttöiän kannalta on tärkeää, ettei se koskaan täysin purkautunut.

Kytke laturin latausliitin latausliitintään (1) kotelossa, jossa keinukytkin tuolin nostamista ja laskemista varten sijaitsee. Kytke sitten laturin pistotulppa pistorasiaan. Laturin LED-valo ilmaisee, että lataus on käynnissä. Kun LED-valo vaihtaa väriä oranssista vihreäksi, akku on ladattu täyteen. Tuolia voidaan nostaa ja laskea latauksen aikana. Tämä koskee sähkötuoleja, jotka on toimitettu 11 2013 jälkeen tai aiemmin toimitettuja päivitettyjä tuoleja.


HUOM! Akun lataaminen on erityisen tärkeää tuoleissa, joissa on sähköjarru, istuimen ja selkänojan sähköinen kallistus, koska nämä toiminnot vaativat suurta akun kapasiteettia, jotta niitä ei menetetä. Varmista toiminnot lataamalla akku kerran päivässä. Kun vaihdat akkua (tyyppimerkintä: HP7-12 12V 7.2Ah), kytke punainen akkukaapeli akun plusnapaan ja musta akkukaapeli miinusnapaan. Jos istuimen sähkötoiminnot lakkaavat toimimasta, sulake on luultavasti lauennut. Tarkista sulakkeet. Ne sijaitsevat istuimen alla akun ja toimilaitteen välisessä johdossa. Vaihda viallinen sulake uuteen 25 A -sulakkeeseen.

Kun käsittelet akkuja, muista seuraavat asiat:

- Älä koskaan oikosulje akkua.
- Älä altista akkua voimakkaille iskuille tai avotulelle.
- Jos akkuhappoa pääsee iholle, huuhtelee vedellä noin 30 minuuttia ja ota yhteys lääkäriin.
- Käytetyt akut on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

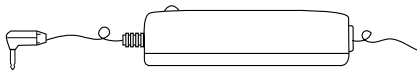

Laturi tuotenro 802289

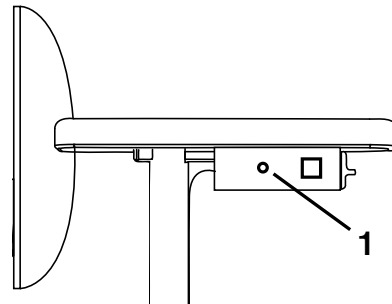

Mukautuksia saa tehdä vain henkilöstö, joka on suorittanut Mercado Medic AB:n huolto- ja kunnostuskoulutuksen. Voimassa olevien yhdistelmäsopimusten luettelossa www.mercado.se/mercado-dokument olevat tuotteet voidaan varustaa Mercado Medic AB:n CE-merkinnällä. Jos tuoliin halutaan asentaa tuote, jota ei ole olemassa olevien yhdistelmäsopimusten luettelossa, asiakkaan valtuuttaman henkilökunnan on otettava yhteyttä Mercado Medic AB:hen kirjallista hyväksyntää varten.

Asiakkaan tai kyseisen tuotteen toimittajan on lähetettävä arvioitava tuote Mercado Medic AB:lle. Mercado Medic AB ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan, jos yhdistelmäsopimus on ajan tasalla, Mercado Medic AB tekee halutusta tuotteesta riskianalyysin. Riskianalyysin jälkeen asiakas saa kirjallisen lausunnon.

Mercado Medic AB:n on varmistettava muutetut tuolit, jotta Mercado Medic AB voi säilyttää tuotevastuun.

- Pehmustettuja osia, kuten istuimet, selkänojat, käsinojat, sivutuet, ylävartalotuet ja niskatuet voidaan mukauttaa, kunhan tuotteen ulkoisia säätömittoja ei ylitetä.
- Painopiste on pidettävä/keskitettävä nostolaitteen päälle parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi.
- Pehmustettujen osien on täytettävä voimassa olevat syttyvyysvaatimukset ja muut ympäristövaatimukset.
- Merkittävillä pystyvoimilla kuormitetut pinnat eivät saa ulottua pyörien keskipisteiden muodostaman pinnan (alustan) ulkopuolelle.

Jos nämä vaatimukset täyttyvät, Mercado Medic AB säilyttää tuotevastuun tuotteestaan.

Tuotteet, jotka hoitolaitos erikoismukauttanut ilman Mercado Medic AB:n ohjausta, jolloin hoitolaitos myös ottaa tuotevastuun, voidaan palauttaa alkuperäiseen kuntoon. Mercado Medic AB:n hyväksymän valtuutetun teknikon on suoritettava palautus. Mercado Medic AB ottaa silloin CE-merkinnän mukaisen tuotevastuun lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin MDD 93/42/ETY mukaan.

Jos sinulla on kysyttävää mukautuksista/erityismukautuksista, ota yhteyttä Ronny Fogelqvistiin:

Puh +46 (0)708 27 96 14

Sähköpostin ronny.fogelqvist@mercado.se

PUHDISTUS JA HOITO

- Tuoli on pidettävä puhtaana pölystä ja liasta.
- Tuoli on pestävä desinfiointiaineella, jonka pH 7-12 (tiiviste), lukuun ottamatta pehmustetta.
- Plyssiverhoilu pestään vaahtopesulla;
 1. Poista irtolika, murut ja vastaavat.
 2. Levitä ohut kerros vaahtoa, hiero vaahto tasaisesti kostealla liinalla.
 3. Pyyhi puhtaalla ja hieman kostealla liinalla.
 4. Imuroi hyvin, kun kaikki on kuivunut.
- Keinonahka pestään saippuavedellä tai pyyhitään alkoholiliuoksella, esim. desinfiointiaineella.
- Nahkaverhoilu vaatii hieman ylimääräistä hoitoa;
 - Roiskeet pyyhitään välittömästi kostealla liinalla, älä koskaan käytä vahvoja pesuaineita.
 - Vältä sotkemasta verhoilua vartalonhoitotuotteilla, kuten meikillä, hiusgeelillä jne.
 - Älä päästä lemmikkejä nahkatuolille, niiden kynnet voivat naarmuttaa nahkaa.
 - Vältä suoraa ja pitkäaikaista auringonvaloa, se voi ajan myötä haalistaa nahan.
- Istuinta, selkänojaa ja muita pehmusteita ei ole toiminnallisista syistä valmistettu umpinaisesta materiaalista. Kunnostettaessa pehmusteet on vaihdettava hygieenisistä syistä.
- Sähköhissin pölyisyys, likaantuminen ja vakavuus on tarkastettava säännöllisesti: Nosta istuinlevy korkeimpaan asentoon. Puhdista liinalla. Älä käytä vettä tai liuotinta. Voitele sitten sylinteri ohuella kerroksella teflon- tai silikonipohjaista voitelurasvaa.
- Käyttäjän/käyttäjän avustaja voi pyyhkiä puhtaaksi ja puhdistaa oman tuolinsa pehmusteet yllä olevien ohjeiden mukaisesti parhaan kykynsä ja tarpeensa mukaan. Jos tätä ei suoriteta tyydyttävästi, hygieenisen turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan kunnostusta.

! Tärkeää tietoa koskien REAL 9500/9600 SÄHKÖ -tuolin (jäljempänä "tuote") kunnostusta ja huoltoa:

- Tuote ei vaadi määräaikaishuoltoa tapauksissa, joissa sillä on tuotteen määräämisestä vastaava lääkäri terveydenhuollon piirissä. Ruotsin ja Norjan ulkopuolisilla markkinoilla, joilla jakelija myy tuotetta tarvittaessa suoraan käyttäjälle ja joilla ei näin ollen ole vastuullista tuotteen määrännyttä lääkäriä, määräaikaishuolto on suoritettava joka toinen vuosi tuotteen koko käyttöajan ajan tämän luvun kohtien 1–10 mukaisesti.
- Tuotteen pääkomponenteille on kuitenkin tehtävä perusteellinen silmämääräinen tarkastus huollon ja kunnostuksen yhteydessä, jotta voidaan taata käyttäjän turvallisuus. Pääkomponentit ovat jalusta, hissi, istuinristikko, selkänojamekanismi sekä käsinojen leveyssäätö. Tarkastuksen täytyy sisältää hitsisaumat, lukittavat toiminnot ja säädöt.
- Käyttäjä ei saa istua tuotteessa kunnostus-, huolto- tai kunnossapitotöiden aikana.
- Älä käytä painepesuria tuotteen puhdistukseen.
- PLUS-jalustaa tarkastellessa on tarkastettava jalustan etu- ja takajalkojen välinen hitsaus. Kaikki materiaalin tai maalin taipumukset halkeiluun tällä alueella on nähtävä syynä jalustan tai tuotteen vaihtamiseen.
- Jos tuotteen jarrutusteho on heikko, jalustan tasapaino on tarkistettava jarrujalkojen kunnon lisäksi. Jos tuote ei seiso kaikilla neljällä pyörällä jarruttamattomassa asennossa, tuote on poistettava välittömästi käytöstä. Tarkista epätasapaino useissa paikoissa ja eri suuntiin varmistaaksesi, että epätasapaino ei johdu lattiasta.

KUNNOSTUSOHJEIDEN TARKISTUSPISTEET

1. Elektroniikkayksikkö

☐ 1.1. Elektroniikka/toiminto/ puhdistus

Tarkista elektroniikka ja tarkista, mitkä sähkötoiminnot on kytketty. Testaa sähköiset toiminnot. Jos tuoli ei toimi, kokeile kytkemällä laturi vähintään 10 sekunniksi. Tarkista elektroniikkarasian vauriot.

☐ 1.2. ohjausrasia/toiminto/ puhdistus

Tarkista säätimien toiminnot, tarkista, että kotelo on täysin ehjä ja että kaikki painikkeet toimivat. Pyyhi säätimet desinfiointiaineella kostutetulla liinalla. Älä käytä tuolissa liuottimia, valkaisuaineita, kiillotusaineita, synteettisiä pesuaineita, kiillotusaineita tai suihkeita.

☐ 1.3. Koskettimet, kiinnitys

Varmista, että johdot ja koskettimet ovat ehjiä ja kunnolla kiinni. Varmista, ettei johdot ja koskettimet eivät voi jäädä puristuksiin.

☐ 1.4. Akut/ akkulaturi/toiminto

Varmista, että laturi toimii eikä sen kotelossa tai johdoissa ole vaurioita.

Mittaa akut ja tarkista, että akkujen varausasteiden välillä ei ole liikaa eroa, mikä viittaa siihen, että jokin pariston kenno on rikkoutunut.

☐ 1.5. Sähköinen istuimen kallistus/toiminto

Varmista, ettei sähkölaitteissa ole näkyviä vaurioita. Tarkista sähkölaitteiden liikkuvien osien toiminta. Varmista, että kaikki lukitusruuvit on kiristetty niin, ettei päätyasennossa ole välystä.

☐ 1.6. Sähköisesti säädettävä selkänoja/toiminto

Varmista, ettei sähkölaitteissa ole näkyviä vaurioita. Tarkista sähkölaitteiden liikkuvien osien toiminta. Varmista, että kaikki lukitusruuvit on kiristetty niin, ettei päätyasennossa ole välystä.

☐ 1.7. Sähkötoiminen jarru/ toiminto

Varmista, ettei sähkölaitteissa ole näkyviä vaurioita. Tarkista sähkölaitteiden liikkuvien osien toiminta. Varmista, että kaikki lukitusruuvit on kiristetty niin, ettei päätyasennossa ole välystä.

Tarkista kaikki liitokset ja että jarruakselin ja jalustaputken välinen kiinnitys on kiinnitetty kunnolla.

2. Sähköhissi

☐ 2.1. Melua/liukukytkin

Kuuntele kuuluuko sähköhissistä melua, vaihda sähköhissi, jos laakeri on viallinen. Sähköhissi voidaan lähettää Mercado Medic AB:lle korjattavaksi/kunnostettavaksi.

Kuormita tuolia ja tarkista, että sähköhissi ei luista ala-asennossa. Muussa tapauksessa säädä liukukytken momentti.

☐ 2.2. Pyörimislukitus/voitelu
Tarkista, että sähköhississä ei ole välystä pyörimissuunnassa. Muussa tapauksessa vaihda sähköhissi. Sähköhissi voidaan lähettää Mercado Medic AB:lle korjattavaksi/kunnostettavaksi.

☐ 2.3. Kiinnitys/jälkikiristys
Varmista, että istuinristikon ja jalustan kiinnitys on kiristetty kunnolla.

☐ 2.4. Johdotus/kuluminen
Tarkista onko johdoissa kulumia tai puristumisvaurioita.

3. Runko

☐ 3.1. Hitsit

Tarkista huolellisesti kaikki hitsit halkeamien, korroosion, liikkeen jne. varalta.

☐ 3.2. Ruuviliitokset

Tarkista ja kiristä kaikki ruuviliitokset. Vaihda ruuvit, joiden kanta tai kierteet ovat vaurioituneet.

4. Jarrut

☐ 4.1. Toiminto/kuluminen

Vaihda jarrujalat ja tarkista, että jarru toimii tyydyttävästi.

- ☐ 4.2. Muovitulpat/ohjainholkit
Varmista, että ohjainholkit ja muovitulpat ovat kunnolla paikoillaan, vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.

5. Pyörät

- ☐ 5.1. Toiminto/rullaus/heilahtelu
Poista hiukset ja pöly pyöristä, tarkista onko pyörissä ja nivelissä kulumia ja välystä, jotka viittaavat kuluneisiin laakereihin. Varmista, että pyörät pyörivät ja nivelet kääntyvät. Vaihda pyörä tarvittaessa.

- ☐ 5.2. Kiinnitys/jälkikiristys
Tarkista, että pyörien ruuvit ovat ehjiä ja kireällä.

6. Istuinristikko

- ☐ 6.1. Mekaniikka/hitsit
Tarkista huolellisesti kaikki hitsatut osat (erityisesti kallistuslaitteiden kiinnitysten luona, koska nämä osat kuormittuvat eniten)
- ☐ 6.2. Ruuviliitokset/jälkikiristys
Tarkista ja kiristä kaikki ruuviliitokset. Vaihda ruuvit, joiden kanta tai kierteet ovat vaurioituneet.
- ☐ 6.3. Muovitulpat/ohjainholkit
Varmista, että ohjainholkit ja muovitulpat ovat kunnolla paikoillaan, vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.
- ☐ 6.4. Istuinlevy/vaihto/puhdistus
Vaihda istuinlevy uuteen ja pese tai vaihda verhoilu
- ☐ 6.5. Käyttö/voitelu
Varmista, että istuinristikon säätöpyörät ja nupit toimivat ja lukittuvat kunnolla.
- ☐ 6.6. Kaasujousikallistus/toiminto
Jos tuolissa on kaasujousikallistuksen säädin, tarkista, että se lukittuu kunnolla

eikä kallistus muutu hitaasti kuormitettuna. Tarkista ja vaihda vaurioituneet vaijerit ja vaijerikuoret.

- ☐ 6.7. Kampikallistus/kuluminen
Jos tuolissa on kampikallistuksen säädin, tarkista, ettei siinä ole välystä ja että kaikki ruuvit on kiristetty.

- ☐ 6.8. Coxit-mekanismi/ohjaus
Varmista, että läppien säätöpyörät pyörivät kevyesti ja ne on kunnolla lukittu vastamutterilla.

7. Selkänojamekanismi

- ☐ 7.1. Toiminto/kuluminen
Tarkista ja vaihda kuluneet osat, varmista, että liikkuvat osat toimivat hyvin.
- ☐ 7.2. Kiinnitys/jälkikiristys
Varmista, että kaikki ruuvit, säätöpyörät ja nupit lukittuvat kunnolla ja varmista, että jousisalpa toimii moitteettomasti.
- ☐ 7.3. Muovitulpat/ohjainholkit
Varmista, että ohjainholkit ja muovitulpat ovat kunnolla paikoillaan, vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.
- ☐ 7.4. Selkälevy/vaihto/puhdistus
Vaihda selkälevy uuteen ja pese tai vaihda verhoilu
- ☐ 7.5. Kaasujousen säädin/toiminto
Tarkista kaasujousen kaasunpaine ja vakaus, varmista, että se lukittuu kunnolla ja että selkänojan kulma ei hitaasti muutu kuormitettuna. Tarkista ja vaihda vaurioituneet vaijerit ja vaijerikuoret.

8. Käsinojat

- ☐ 8.1. Toiminto/kuluminen
Tarkista ja vaihda kuluneet osat, varmista, että liikkuvat osat lukittuvat ja toimivat oikein.

- ☐ 8.2. Muovitulpat/ohjainholkit
Varmista, että ohjainholkit ja muovitulpat ovat kunnolla paikoillaan, vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.

- ☐ 8.3. Käsinojalevyt/vaihto/puhdistus

Vaihda käsinojalevyt uusiin.

- ☐ 8.4. Käsinojamekanismi/toiminto

Tarkista kaikki hitsit ja että putkissa ei ole vaurioita, jotka voivat huonontaa tai heikentää rakennetta.

9. Lisävarusteet

- ☐ 9.1. Palautus
Irrota lisävarusteet, jotka eivät yleensä kuulu tuoliin, ja tarkista ne alla olevan kuvan mukaisesti, ennen kuin palautat ne varastoon.
- ☐ 9.2. Mekanismi
Tarkista kaikki hitsit ja että mekaniismissa ei ole vaurioita, jotka voivat huonontaa tai heikentää rakennetta.
- ☐ 9.3. Toiminto/kuluminen
Tarkista ja vaihda kuluneet osat, varmista, että liikkuvat osat lukittuvat ja toimivat oikein.
- ☐ 9.4. Pehmusteet
Hävitä pehmusteet tartunnan leviämisen estämiseksi, hävitä tai pese verhoilut pesuohjeiden mukaisesti.

10. Lopputarkastus

- ☐ 10.1. Koekäyttö
Koekäytä tuolin toimintoja ja tarkista, että kaikki toiminnot, sähkötoiminnot ja jarrut toimivat oikein. Jos tuoli on tarkoitettu varastoida, aseta tuoli lepotilaan asianmukaisella 9V adapterilla akun säästämiseksi.

MERCADON YHTEYSTIEDOT

Pääkonttori

Käyntiosoite
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postiosoite
Box 1074, 181 22 Lidingö

Vaihde on auki: ma-pe 08.00-16.30
Puh: +46 (0)8-555 143 00
Faksi: +46 (0)8-555 143 99
Sähköposti: info@mercado.se

Huolto ja tekninen tuki

Box 1074
181 22 Lidingö

Huollon puhelinaika on ma-pe
08.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Puh: +46 (0)8-555 143 08
Faksi: +46 (0)8-555 143 99
Matkapuhelin:
+46 (0)70-550 63 98, +46 (0)70-894 63 68
Sähköposti: service@mercado.se

[Paikka tuote-etiketilte sarjanumeroineen.]



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Puhelin ja faksi
Puh +46 (0)8 555 143 00
Faksi +46 (0)8 555 143 99

Sähköposti ja Internet
Sähköposti info@mercado.se
Internet www.mercado.se