



**REAL<sup>®</sup> 9500/9600 EL 24V**



**MONTERINGSANVISNING, BRUKS-  
OG VEDLIKEHOLDSANVISNING**


Dok. 20-07939-01  
Endret 200514  
Gyldig fra 180101

REAL 9500/9600 EL 24V er et medisinsk-teknisk produkt, klasse I. Den er CE-merket i samsvar med det svenske legemiddelverkets bestemmelser om medisinsk-tekniske produkter LVFS 2003:11, og den er testet og godkjent i henhold til NS-EN 1335 samt IEC 60601-1-2. Alle tekstiler er testet og godkjent i samsvar med NS-EN 1021-1 og NS-EN 1021-2. Mercado Medic AB ser sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 13485, og selskapet følger gjeldende arbeids- og miljølovgivning.

Hvis du har spørsmål om produktet, eller hvis det inntreffer noe uforutsett, må du i første omgang kontakte foreskriveren din. Ellers er du også velkommen til å kontakte Mercado Medic AB.

Du finner PDF-versjoner av våre bruks- og vedlikeholdsanvisninger med mulighet til forstørrelse på [www.mercado.se](http://www.mercado.se). Der finner du også informasjon om tilbehør som kan monteres på Mercado Medics-stoler samt eventuelle sikkerhetsmeldinger til markedet, støtte for foreskrivning eller tilbakekalling av produkter og tilbehør.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne veiledningen og innholdet i den.

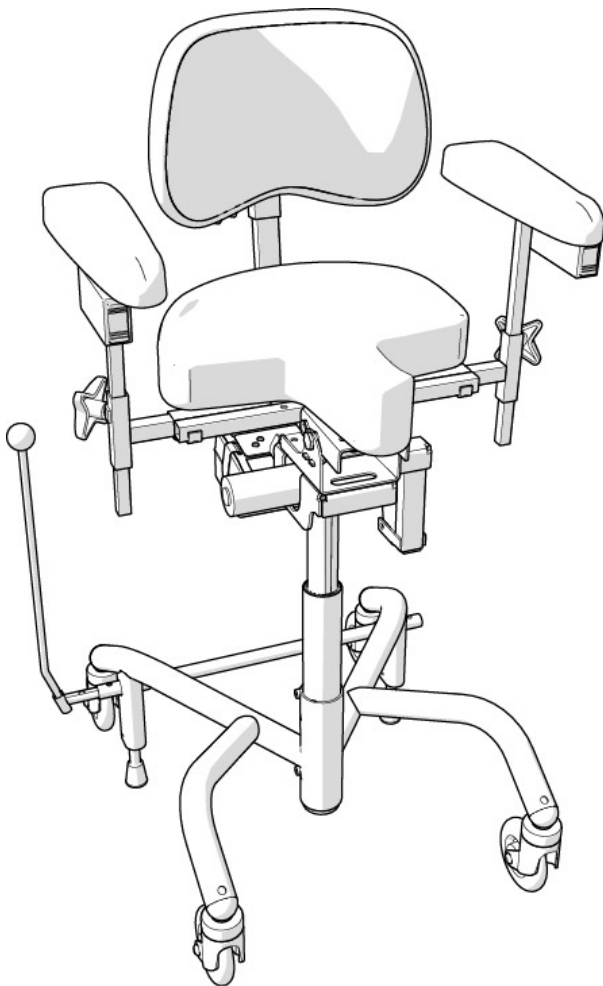

#### **DIN REAL<sup>®</sup> 9500/9600 EL 24V**

- Manuell (9500)
- EL 24V (9600)
  
- PLUS
- H-stativ

**Du oppnår tilstrekkelig kompetanse for å kunne bruke dette produktet på en trygg måte ved å lese denne bruks- og vedlikeholdsanvisningen grundig før du tar i bruk stolen.**





## INNHOLDSFORTEGNELSE

DIN REAL 9500/9600 EL 24V .....	SIDE 4
VIKTIG INFORMASJON OG KLASSE .....	SIDE 4
BRUKERMANUAL .....	SIDE 5
INDIVIDUELL TILPASNING .....	SIDE 8
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD .....	SIDE 8
SERVICE/OVERHALINGSOVERSIKT .....	SIDE 9

### NØDVENDIG INFORMASJON FØR BRUK

1. Juster opp armlenet i egnet høyde og lås rattet til høydereguleringen.
2. Monter ryggstolpen i riktig feste og lås rattet for høydejustering av ryggstøtten.
3. Monter bremsespaken i riktig feste (høyre eller venstre side). Gjelder ikke el-brems.
4. Alle ratt og vridninger skal være strammet før man setter seg i stolen.
5. Bremsen må alltid være på når man setter seg på eller reiser seg fra stolen. Bremsen må kontrolleres regelmessig.
6. Gjelder el-stol: Lad stolen som beskrevet i denne bruksanvisningen. **OBS! Den bør lades daglig.**
7. Stolen må ikke brukes hvis ryggen og/eller armlenene ikke er montert.

### VIKTIG INFORMASJON OG KLASSE

*REAL-stolen har utskiftbare deler, tilbehør og funksjoner med innstillingsmuligheter slik at stolen kan tilpasses individuelt. Stolen skal bare brukes av den personen og til det formålet den er beregnet. Stolen er ment for innendørsbruk og må ikke brukes utendørs. Stolen må ikke utsettes for sterk kulde, høy varme, langvarig sollys eller annen stråling. Stolen må heller ikke utsettes for vann, andre væsker eller kjemikalier. Advarsel! Metallflater kan bli svært varme hvis de har vært utsatt for sollys. Stolen må ikke utstyres med annet tilbehør eller andre deler enn det som er godkjent av Mercado Medic AB. For at CE-merkingen skal opprettholdes, må det ikke utføres tilpasninger eller endringer uten godkjenning fra Mercado Medic AB <http://mercado.se/mercado-dokument/>. Reparasjoner og andre tekniske inngrep må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB. Les denne bruksanvisningen grundig før stolen tas i bruk.*

- REAL 9500/9600 EL tilhører beskyttelsesklasse II, internt batteri.
- REAL 9500/9600 EL tilhører beskyttelsestype B.
- REAL 9500/9600 EL er EMC-testet og godkjent i henhold til NS-EN 60601-1-1 og NS-EN 60601-1-2 og skal derfor håndteres i henhold til vår bruks- og vedlikeholdsanvisning.
- REAL 9500/9600 EL oppfyller IP 21. IP2x innebærer berøringsbeskyttelse for fingre m.m. Man kan ikke berøre farlige deler med fingrene eller lignende. IPx1 innebærer vertikal dryppbeskyttelse, lett dusj ovenfra.
- REAL 9500/9600 EL kan påvirke og bli påvirket av RF-utstyr i umiddelbar nærhet som genererer elektromagnetiske felt, for eksempel kan kommunikasjonssystemer, strømaggregat og liknende utstyr på virke styresystemet. Du finner ytterligere informasjon på <https://mercado.se/mercado-dokument/>
- Maks. vekt på bruker, voksen: REAL 9500/9600 MANUELL 140 kg. REAL 9500/9600 EL 150 kg.
- Maks. vekt på bruker, barn: REAL 9500/9600 MANUELL 75 kg. REAL 9500/9600 EL 75 kg.
- REAL 9500/9600 er godkjent for å stå bremsset i opptil 5° helning i alle retninger. Hvis stolen står bremsset i brattere helninger, kan den begynne å skli.
- OBS! De elektriske funksjonene på REAL 9500/9600 EL-stolene kan brukes maksimalt 10 % av tiden (i maksimalt 2 minutter per 20 minutter). Elektronikken måler aktivitet og slår av de elektriske funksjonene hvis denne grensen overskrides.
- REAL 9500/9600 EL skal bare brukes med testede og godkjente batterier og lader fra Mercado Medic AB.
- Advarsel! Det skal bare kobles elektrisk tilbehør som er tilpasset av Mercado Medic AB, i kontaktene i styresystemet.
- Mercado Medics armlener, seter, ryggstøtter med mer er utviklet og produsert slik at de skal være fri for giftige og allergifremkallende stoffer.
- Stolen er testet og godkjent for bruk i temperaturer mellom 5 og +0 °C samt i 15–90 % ikke-kondenserende luftfuktighet. Hvis stolen oppbevares i et miljø utenfor disse grensene, må den akklimatiseres før bruk for å kunne brukes på en trygg måte.
- REAL 9500/9600 EL har en elektrisk liftomat som løfter pasienten såpass høyt at det i verste fall medfører en risiko. Hvis pasienten ikke klarer å komme seg ut av stolen fra høyeste innstilling, må sittehøyden aldri være høyere enn at føttene når gulvet. Unntak tillates hvis pasienten kan påkalle hjelp via trygghetsalarm eller telefon.
- Hvis REAL 9500/9600 EL er utstyrt med benstøtte, skal brukerens føtter holdes på fotplaten ved hjelp av el-funksjoner.
- Stolen må flyttes med forsiktighet. Før stolen flyttes, må man sjekke omgivelsene. Hvis det er husdyr eller barn på gulvet, kan de lett bli påkjørt. Stolen må bare brukes til å sitte. Den er ikke et leketøy for verken barn eller voksne.
- REAL 9500/9600 EL er godkjent for å transporteres/oppbevares i temperaturer mellom –25 og +60 °C og opptil 90 % ikke-kondenserende relativ luftfuktighet.
- Stolen må transporteres på pall i emballasje som er beregnet til det. Hvis stolen transporteres i bil, må den festes med stropper i både stativ og sete samt være innstilt på lavest mulige sittehøyde.
- Reparasjoner og andre tekniske inngrep må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB.
- Stolen skal ikke brukes i høyder som overstiger 2000 moh.
- REAL 9500/9600 leveres som standard alltid med sete, rygg og armlene. Stoler med el-funksjoner leveres også med håndkontroll.
- REAL 9500/9600 må ikke flyttes når setet er i hevet stilling.
- Garantitid to (2) år med mindre annet er avtalt. Ved garantirelaterte saker må du kontakte Mercado Medic AB.
- Maks. levetid ti (10) år.
- REAL 9500/9600 kan kompletteres med en rekke forskjellig tilbehør. Alt tilbehøret må monteres slik at det ikke er mulighet for at små deler, f.eks. sikringer, kan løsne. Alle ledninger må sikres med strips for å redusere kvelningsfaren.

## BRUKERVEILEDNING


### RYGGMEKANISME

Medic ryggmekanisme finnes i lav og høy utførelse (stolene som vises her, har lav rygg). Ryggmekanismen har separat regulering av høyde (1), vinkel (2) og dybde (3), og vinkelen på selve ryggen justeres med vrideren (4). Løsne vrideren, still inn ønsket posisjon, og lås vrideren igjen.

**OBS!** Påse at Medic-ryggsokkelen justeres inn i festet, slik at fjærlåsen låser og ryggsokkelen ikke kan trekkes ut.

Comfort Ryggmekanisme finnes i lav og høy utførelse (alle stolene på illustrasjonene har lav rygg).


Ryggmekanismen har separat regulering av høyde (1) og ryggplatens (2) vinkel. Løsne vrideren, still inn ønsket posisjon for (1) og (2), og lås vrideren igjen. Ryggsokkelens vinkel reguleres med spaken (3).

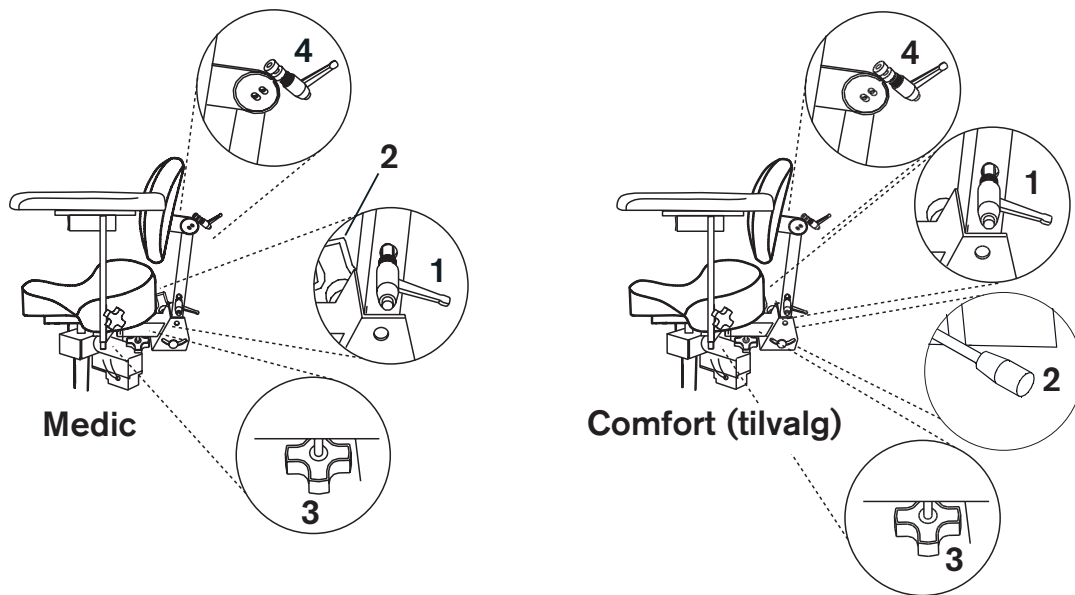

### ARMLENE


Armlenene kan justeres vertikalt og sidelengs på hver armlenebue. Løsne vrideren for justering av høyden (1) eller bredden (2), still inn ønsket bredde/høyde, og lås deretter vrideren igjen.

**OBS!** Påse at armlenet justeres inn i festet, slik at fjærlåsen låser og armlenet ikke kan trekkes ut.

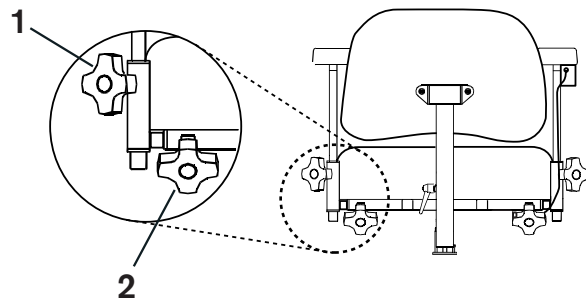


### SITTEHØYDE/LIFTOMATER

Høyden på REAL 9500 manuell justeres med spaken (1) under den ene siden av armlenet (vanligvis høyre). Løft spaken for å endre høyden. På REAL 9600 EL 24 V justeres setehøyden med vippebryteren (2). Trykk på den øvre delen av bryteren for å heve setet. Trykk på den nedre delen av bryteren for å senke det. Regulering med tunge – dra bryteren oppover for å heve, og nedover for å senke.

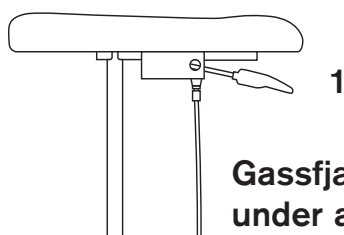

Gassfjæringsregulering  
under armlenet

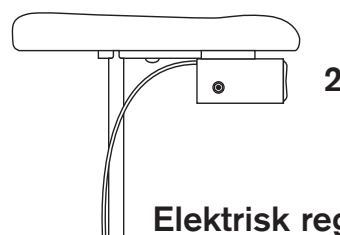


Elektrisk regulert

## BREMS


Håndbremsen styres av spaken (1). Før spaken bakover for å låse. Bremsespaken kan flyttes til valgfri side av stolen. Stoler som er utstyrt med H-stativ, kan også bremses med foten (2).

**OBS!** Bremsen må alltid være på når man setter seg på eller reiser seg fra stolen. Bremsen må kontrolleres regelmessig. Ved slitasje må bremsefoten av gummi byttes. Bremsefunksjonen kan være nedsatt på ujevnt underlag.


Hvis elbrems er montert, betjenes den med rød knapp (3). Den har en holdekrets, og det trengs bare et kort trykk for å aktivere bremsefunksjonen. Trykk på knappen (3) igjen for å deaktivere bremsen.

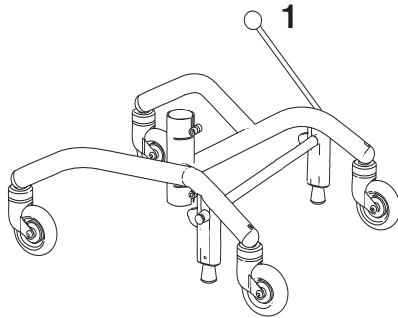

**Bakoverbremset PLUS-stativ**

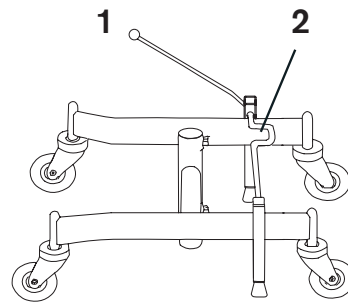

**H-stativ**

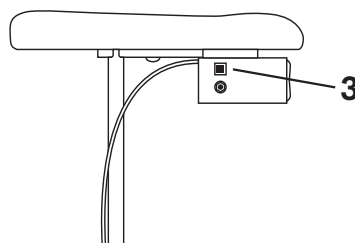


**Elbrems (tilvalg)**


## SETETVIPP

Gassfjærtilten reguleres med gassfjær. Den betjenes med spaken (1) under den ene siden av armlenet (vanligvis venstre). Armlenene følger med vippeposisjonen, slik at man alltid får best mulig støtte.

Hvis elektrisk vipp er montert, betjenes det med regulering (2) under den ene siden av armlenet (vanligvis venstre). Armlenene følger med vippeposisjonen, slik at man alltid får best mulig støtte.

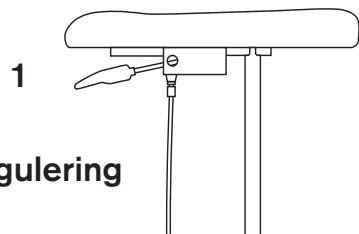

**Gassfjæringsregulering  
under armlenet**

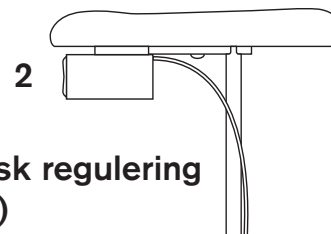

**Elektrisk regulering  
(tilvalg)**

## LADING

Batterilader 2240-24V (artikkelnr. 804428) skal brukes ved lading av stolen. Siden stolen blir sertifisert som en enhet sammen med laderen, må det gjennomføres ytterligere tester hvis man ønsker å bruke en annen lader. Hvis det brukes en annen lader eller andre batterier enn de som leveres av Mercado Medic AB sammen med produktet, vil CE-merkingen og Mercado Medic ABs produktansvar ikke lenger gjelde for batteri, lading eller øvrig elektronikk på stolen. Batteriet bør lades hver dag. Det tar 2–6 timer å fullade stolens batteri ved daglig lading. For batteriets levetid er det viktig at det aldri blir helt utladet, siden det kan skade batteriets celler. Hvis stolen er utstyrt med en håndkontroll, kan batterinivået avleses med indikatorlampene (1). Med fulladet batteri og høy el-liftomat kan man kjøre opp/ned opptil 120 ganger med 80 kg belastning eller opptil 90 ganger med 150 kg belastning.

### SLIK LADER DU STOLEN

Koble kontaktpluggen (2) på laderen til ladeuttaket (3) (ladeuttaket kan være plassert under stolens sete eller armlene, avhengig av avtale eller ønske). Koble deretter laderens støpsel til en stikkontakt. Lysdioden på laderen indikerer at ladingen pågår. Når lysdioden endrer farge fra oransje til grønt, er batteriet ferdig ladet.

Ingen elektriske funksjoner fungerer mens stolen lades. Stolen må lades på en trygg måte. Velg derfor en stikkontakt som det er enkelt å koble laderen til. Ladeledningen er 1,8 meter, og den må ikke forlenges. I nødssituasjoner kan stolen kobles fra strømmettet ved å trekke ut laderen fra stikkontakten. Det er forbudt å sitte i stolen under lading.


### KOBLE TIL OG FRA BATTERIET

Ved oppbevaring over lengre tid vil batteriet gå i dvalemodus automatisk etter sju dager. Batteriet kan også tvinges til dvalemodus ved at man kobler en 9 V strømforsyning (artikkelnr. 804823) til ladeuttaket og venter i minst 5 sekunder før man kobler den fra igjen. Hvis det brukes håndkontroll, vil alle indikatorlampene blinke når batteriet er i dvalemodus, og strømforsyningen kan kobles fra. Når batteriet er i dvalemodus, må batteriet lades hver fjerde måned for å beholde funksjonaliteten. Hvis disse ladeinstruksjonene følges, har batteriet nok kapasitet i 4 år. For å koble batteriet til systemet igjen, kobles batteriladeren til ladekontakten og stikkontakten. Vent i minst 5 sekunder før du kobler fra batteriladeren. Nå er batteriet koblet til, og systemet er klart til bruk. Det anbefales å fullade batteriet hvis produktet har blitt oppbevart med batteriet i dvalemodus.

### FØR FØRSTE GANGS BRUK

Produktet leveres fra Mercado Medic AB med batteriet i dvalemodus. Før første gangs bruk må batteriet kobles til systemet. Det gjøres ved å koble batteriladeren til ladekontakten og stikkontakten. La batteriladeren være tilkoblet til batteriet er fulladet. Det vises ved at laderens lysdiode lyser grønt. Hvis håndkontrolleren brukes, vises dette også ved at de tre grønne batteridiodene på håndkontrolleren blinker i takt. Selv om batteriet har vært i dvalemodus, kan det hende det må lades, siden det alltid forekommer noe selvutlading i et batteri. ►

- A. Det er nødvendig med lading
- B. Batterinivå
- C. Varsellampe  
(intern feil / tastelås)

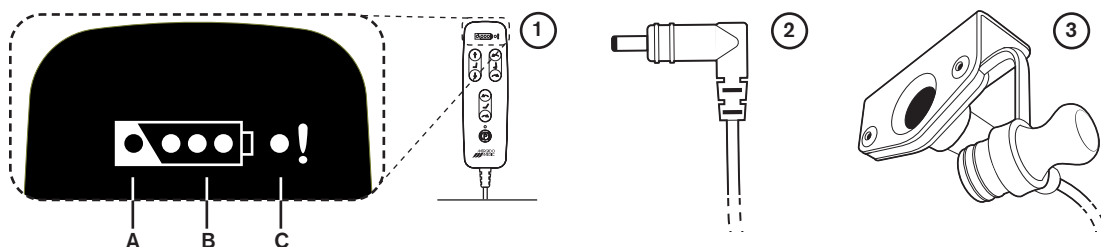

## LADING, FORTS.

### OBS!

Det er spesielt viktig at batteriet lades for de stolene som har elektrisk brems, el-vipp av sete og elektrisk rygg, siden disse funksjonene krever høyere batterikapasitet for å fungere. Sikre funksjonene ved å lade batteriet en gang i døgnet. Bytte av batteri må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB. Se «Bytte av batteri» i monteringsanvisningen.

### FEILSØKING FOR ELEKTRISKE FUNKSJONER PÅ STOLEN DIN

Det er ingen bevegelse i det hele tatt:

Det kan hende at batteriet må lades. Se instruksjonene på forrige side.

Systemet kan ha oppdaget en intern feil, slik at én eller alle funksjonskanaler deaktiveres, og varsellampen på håndkontrolleren tennes. Systemet tilbakeføres automatisk etter 10 sekunder. Hvis feilen er løst, vil alle kanaler låses opp igjen, og varsellampen slukkes.

Tastelåsen kan være aktivert. For å aktivere eller deaktivere tastelåsen for en funksjon, holder du inne begge retningsknappene for funksjonen i minst 3 sekunder.

De elektriske funksjonene på stolen går langsomt:

Batteriet må lades. Se instruksjonene på forrige side.

Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kan det være nødvendig med service. Kontakt hjelpemiddelsentralen eller Mercado Medic AB. Du finner kontaktinformasjon på siste side i veiledningen.

### NØDSTOPP

Hvis systemet ikke avbryter en bevegelse når funksjonsknappen slippes, kan den avbrytes ved å trykke ned en av de andre knappene på håndkontrolleren. Hvis fast montert styreboks brukes istedenfor håndkontroller, oppnås samme nødstoppp funksjon ved å trykke på knappen for bevegelse i en annen retning.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Stolen bør tørkes av og holdes ren for støv og smuss.
- Stolen skal vaskes med desinfeksjonsmiddel med pH 7–12 (konsentrat). Gjelder ikke de polstrede delene.
- Plysjtrekk vaskes med skumvask.
  1. Fjern løst smuss, smuler og lignende.
  2. Påfør et tynt lag med skum og gni skummet jevnt inn med en fuktig klut.
  3. Etertørk med en ren og lett fuktet klut.
  4. Støvsug godt når alt har tørket.
- Kunstskinn vaskes med såpevann eller tørkes av med en spritløsning, f.eks. desinfiseringsmiddel.
- Skinntrekk krever litt ekstra vedlikehold.
  - Søl tørkes straks av med en fuktig klut. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler.
  - Unngå at trekket kommer i kontakt med kroppspfleieprodukter som sminke, hårgelé m.m.
  - Ikke la husdyr være på skinnmøbler, da klørne kan ripe opp skinnen.
  - Unngå direkte og langvarig sollys, da det på sikt kan bleke skinnen.
- Sete, ryggstøtte og andre polstrede detaljer er av funksjonelle årsaker ikke produsert av tett materiale. Ved overhaling bør stoppede detaljer byttes ut av hygieniske årsaker.
- Den elektriske liftomaten må kontrolleres regelmessig med tanke på støv, smuss og stabilitet: Sett sitteplaten i høyeste stilling. Vask med en klut. Vann eller løsemidler må ikke brukes. Smør deretter sylindren inn med et tynt lag med teflon- eller silikonbasert smørefett.
- Brukeren / brukerens assistent må tørke støv av, vaske og rengjøre de polstrede detaljene på stolen etter beste evne og behov. Følg fremgangsmåten som beskrevet tidligere. Hvis dette ikke utføres tilfredsstillende, kreves det overhaling for å sikre hygienisk trygghet.



### ! Viktig informasjon ved overhaling og service av REAL 9500/9600 EL (heretter kalt «produktet»):

- Produktet krever ikke forebyggende eller periodisk vedlikehold i sin forventede levetid. Det skal gjennomføres en grundig visuell kontroll av produktets hovedkomponenter i forbindelse med service og overhaling. Dette inkluderer stativ, lift, sittekryss, rygg sokkel samt breddejusteringsbuer til armlener. Kontrollen skal omfatte sveiser, låsbare funksjoner og innstillinger. Dette for å ivareta brukerens sikkerhet, siden verken produsenten eller den ansvarlige har fullt innsyn i produktets tidligere bruk.
- Det er forbudt for brukeren å sitte i produktet under overhaling, service eller vedlikeholdsarbeid.
- Produktet må ikke rengjøres med høytrykksspyler.
- Serienummer og leveringsdato er trykt på produktets produksjonsetikett. Produktets forventede levetid er 10 år.
- Ved kontroll av PLUS-stativet skal sveisen mellom stativets forbein og bakbein kontrolleres. Hvis det avdekkes tegn på sprekker i materialet eller endringer i fargen her, må stativet eller produktet byttes.
- Hvis produktets brems ikke fungerer tilfredsstillende, bør du kontrollere bremseføttene og stativets balanse. Hvis produktet ikke står på alle fire hjul når bremsen ikke er aktivert, må produktet umiddelbart tas ut av drift. Kontroller ubalansen flere steder og i flere retninger for å utelukke at den skyldes underlaget.
- For at produkter som er eldre enn 10 år skal kunne brukes på en trygg måte for pasienten, må de totaloverhales. Totaloverhaling skal utføres av servicepersonell fra Mercado Medic AB eller av overhalings/servicepersonell hos ansvarlig/kunde som er godkjent av Mercado Medic AB.  
En totaloverhaling innebærer blant annet at kritiske komponenter byttes ut. Dette inkluderer lift, sittekryss, rygg sokkel samt breddejusteringsbuer til armlener. Produktet skal tilbakestilles til ny stand på en måte som gjør at levetiden kan forlenges utover det produsenten har angitt. Et totaloverhalt produkt må oppfylle kravene i det svenske legemiddelverkets forskrifter når det tas i bruk igjen.  
Enheten som utfører totaloverhalingen, overtar rollen som produsent og har ansvaret for CE-merking av produkter som føres tilbake til markedet. Det betyr at hvis totaloverhaling har blitt utført av godkjent personell hos den ansvarlige, overtar denne enheten produsentens ansvar og CE-merking fra Mercado Medic AB.

## OVERHALINGSANVISNING KONTROLLPUNKTER

### 1. Elektronikkenhet

- 1.1. Elektronikk/funksjon/rengjøring

Kontroller elektronikken og undersøk hvilke elektriske funksjoner som er koblet til. Test de elektriske funksjonene. Hvis stolen ikke fungerer, kan du forsøke å koble til laderen og la den være tilkoblet i minst 10 sekunder. Kontroller skader på elektronikkboksen.

- 1.2. Styreboks/funksjon/rengjøring

Kontroller styrefunksjonene, kontroller at dekselet er helt og at alle knappene fungerer. Tørk av reguleringsanordningene med en lett fuktet klut med desinfeksjonsmiddel for å unngå at eventuell smitte spres. Ikke bruk løsemidler, blekemidler, poleringsmidler, syntetiske vaskemidler, poleringsvoks eller spray på stolen.

- 1.3. Kontakter, feste

Kontroller at kabler og kontakter er hele og sitter godt fast. Kontroller at det ikke er klemfare for kabler og kontakter.

- 1.4. Batterier/batterilader/funksjon

Kontroller at laderen fungerer, og at det ikke er skader på deksel eller ledninger.

Mål batteriene og kontroller at det ikke er for stor forskjell mellom batterienes lading, da det kan tyde på at en celle i batteriet er ødelagt.

- 1.5. Elektrisk seteveipp/funksjon

Kontroller at el-aktuatoren ikke har synlige skader. Kontroller at el-aktuatorens bevegelige deler fungerer. Kontroller at alle låseskruer er strammet til, slik at det ikke oppstår glippe i endeposisjon.

- 1.6. El-rygg/funksjon

Kontroller at el-aktuatoren ikke har synlige skader. Kontroller at el-aktuatorens bevegelige deler fungerer. Kontroller at alle låseskruer er strammet til, slik at det ikke oppstår glippe i endeposisjon.

- 1.7. El-brems/funksjon

Kontroller at el-aktuatoren ikke har synlige skader. Kontroller at el-aktuatorens bevegelige deler fungerer. Kontroller at

alle låseskruer er strammet til, slik at det ikke oppstår glippe i endeposisjon.

Kontroller alle skjøter, og kontroller at klemfestet på bremseakselen og stativvoret sitter godt.

### 2. El-liftomat

- 2.1. Ulyd/slurekobling

Lytt etter ulyd i el-liftomaten. Bytt el-liftomaten hvis noen av lagrene er dårlige. El-liftomaten kan sendes til Mercado Medic AB for reparasjon/overhaling.

Belast stolen og kontroller at el-liftomaten ikke slurer i bunnposisjon. Ellers må slurekoblingen justeres til riktig moment.

- 2.2. Rotasjonslåsing/smøring

Kontroller at el-liftomaten ikke glipper i rotasjonsretning. Hvis den gjør det, må den byttes. El-liftomaten kan sendes til Mercado Medic AB for reparasjon/overhaling.

- 2.3. Festing/ettertrekking

Kontroller at fester i sittekryss og stativ er strammet godt til.

## OVERHALING FORTS.

### 2.4. Kabeltrekking/slitasje

Se etter slitasje og klemskader på kabler.

### **3. Understell**

#### 3.1. Sveiser

Kontroller alle sveiser grundig for å avdekke tegn på sprekker, korrosjon, bevegelser med mer.

#### 3.2. Skrueforbindelser

Kontroller og etterstram alle skrueforbindelser. Bytt ut skruer med skadet nøkkelgrep eller gjenger.

### **4. Brems**

#### 4.1. Funksjon/slitasje

Bytt ut bremseføtter, og kontroller at bremsen fungerer tilfredsstillende.

#### 4.2. Plastplugg/styrebøssinger

Påse at styrebøssinger og plastplugg sitter godt på plass. Bytt ut slitte eller skadede deler.

### **5. Lenkehjul**

#### 5.1. Funksjon/rulle/svinging

Rens hjulene for hår og støv, og kontroller hjul og bøyler for slitasje og glipp som kan tydelig på slitte lagre. Kontroller at hjulene snurrer, og at bøyler roterer som de skal. Bytt hjul ved behov.

#### 5.2. Festing/ettertrekking

Kontroller at hjulenes skruer er hele og strammet til.

### **6. Sittekryss**

#### 6.1. Mekanikk/sveiser

Kontroller alle sveisede deler grundig (spesielt ved tiltanordningens oppheng der delene belastes mest)

#### 6.2. Skrueforbindelser/etterstramming

Kontroller og etterstram alle skrueforbindelser. Bytt ut skruer med skadet nøkkelgrep eller gjenger.

#### 6.3. Plastplugg/styrebøssinger

Påse at styrebøssinger og plastplugg sitter godt på plass. Bytt ut slitte eller skadede deler.

#### 6.4. Sitteplate/bytte/rengjøre

Bytt ut sitteplaten med en ny, og vask eller bytt ut eventuelle trekk

#### 6.5. Styring/smøring

Kontroller at sittekrysets ratt og vridere fungerer og låser som de skal.

#### 6.6. Gassfjærtilt/funksjon

Hvis stolen er utstyrt med gasstilt, må du kontrollere at den låser som den skal, og at den ikke sakte går over til tilt ved belastning. Kontroller og bytt ut skadede vaiere og vaierstøper.

#### 6.7. Sveivetiltkontroll/slitasje

Hvis stolen er utstyrt med sveivetilt, må du kontrollere at den ikke glipper, og at alle skruene er stramme til.

#### 6.8. Coxit-mekanikk/styring

Kontroller at hjulene til klaffene går lett, og at de er låst med kontramutteren.

### **7. Ryggmekanisme**

#### 7.1. Funksjon/slitasje

Kontroller og bytt ut eventuelle slitte deler. Kontroller at bevegelige deler fungerer som de skal.

#### 7.2. Festing/ettertrekking

Kontroller at alle skruer, hjul og vridere låser som de skal, og kontroller at fjærlåsen fungerer feilfritt.

#### 7.3. Plastplugg/styrebøssinger

Påse at styrebøssinger og plastplugg sitter godt på plass. Bytt ut slitte eller skadede deler.

#### 7.4. Ryggplate/bytte/rengjøre

Bytt ut ryggplaten med en ny, og vask eller bytt ut eventuelle trekk

#### 7.5. Gassfjærregulering/funksjon

Kontroller gassfjærens gasstrykk og stabilitet, at den låser som den skal og at ryggens vinkel ikke endres sakte ved belastning. Kontroller og bytt ut skadede vaiere og vaierstøper.

### **8. Armlene**

#### 8.1. Funksjon/slitasje

Kontroller og bytt ut eventuelle slitte deler. Kontroller at bevegelige deler låses og fungerer som de skal.

#### 8.2. Plastplugg/styrebøssinger

Påse at styrebøssinger og plastplugg sitter godt på plass. Bytt ut slitte eller skadede deler.

#### 8.3. Armleneplater/bytte/rengjøring

Bytt ut armleneplatene med nye.

#### 8.4. Armlenemekanikk/funksjon

Kontroller alle sveiser og at det ikke er skader på rørsystemet som kan skade eller svekke konstruksjonen.

### **9. Tilbehør**

#### 9.1. Tilbakestilling

Demonter tilbehøret som ikke normalt sitter på stolen, og kontroller dem som beskrevet nedenfor før de eventuelt plasseres på lageret igjen.

#### 9.2. Mekanikk

Kontroller alle sveiser og at det ikke er skader på mekanikken som kan skade eller svekke konstruksjonen.

#### 9.3. Funksjon/slitasje

Kontroller og bytt ut eventuelle slitte deler. Kontroller at bevegelige deler låses og fungerer som de skal.

#### 9.4. Polstrede detaljer

Kast polstrede detaljer for å unngå spredning av smitte. Kast eller vask trekk i henhold til merkingen.

### **10. Sluttkontroll**

#### 10.1. Prøvekjøring

Prøvekjør stolens funksjoner, og kontroller at alle manuelle funksjoner, elektriske funksjoner og brems fungerer som de skal. Hvis stolen skal settes på lager, skal den settes i hvilemodus med 9 V adapteren for å spare batteriene.



# KONTAKT MERCADO

## Hovedkontoret

Besøksadresse

Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö, Sverige

Postadresse

Box 1074, 181 22 Lidingö, Sverige

Sentralbordet er åpent: Man–fre 08.00–16.30

Tlf.: +46 (0) 8 555 143 00

Faks: +46 (0) 8 555 143 99

E-post: [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)

## Service og teknisk brukerstøtte

Box 1074

181 22 Lidingö, Sverige

Service har telefontid man–fre

08.00–12.00 og 13.00–16.00.

Tlf.: +46 (0) 8 555 143 08

Faks: +46 (0) 8 555 143 99

Mobil: +46 (0) 70 550 63 98, +46 (0) 70 894 63 68

E-post: [service@mercado.se](mailto:service@mercado.se)

---

*[Plass til produktetikett med serienummer.]*



**Mercado Medic AB**  
Tryffelslingan 14  
SE-181 57 Lidingö

**Telefon og faks**  
Tlf. +46 8 555 143 00  
Faks +46 8 555 143 99

**E-post og internett**  
E-post [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)  
Internett [www.mercado.se](http://www.mercado.se)