




FIN


SÄHKÖJARRU REAL 9000 PLUS

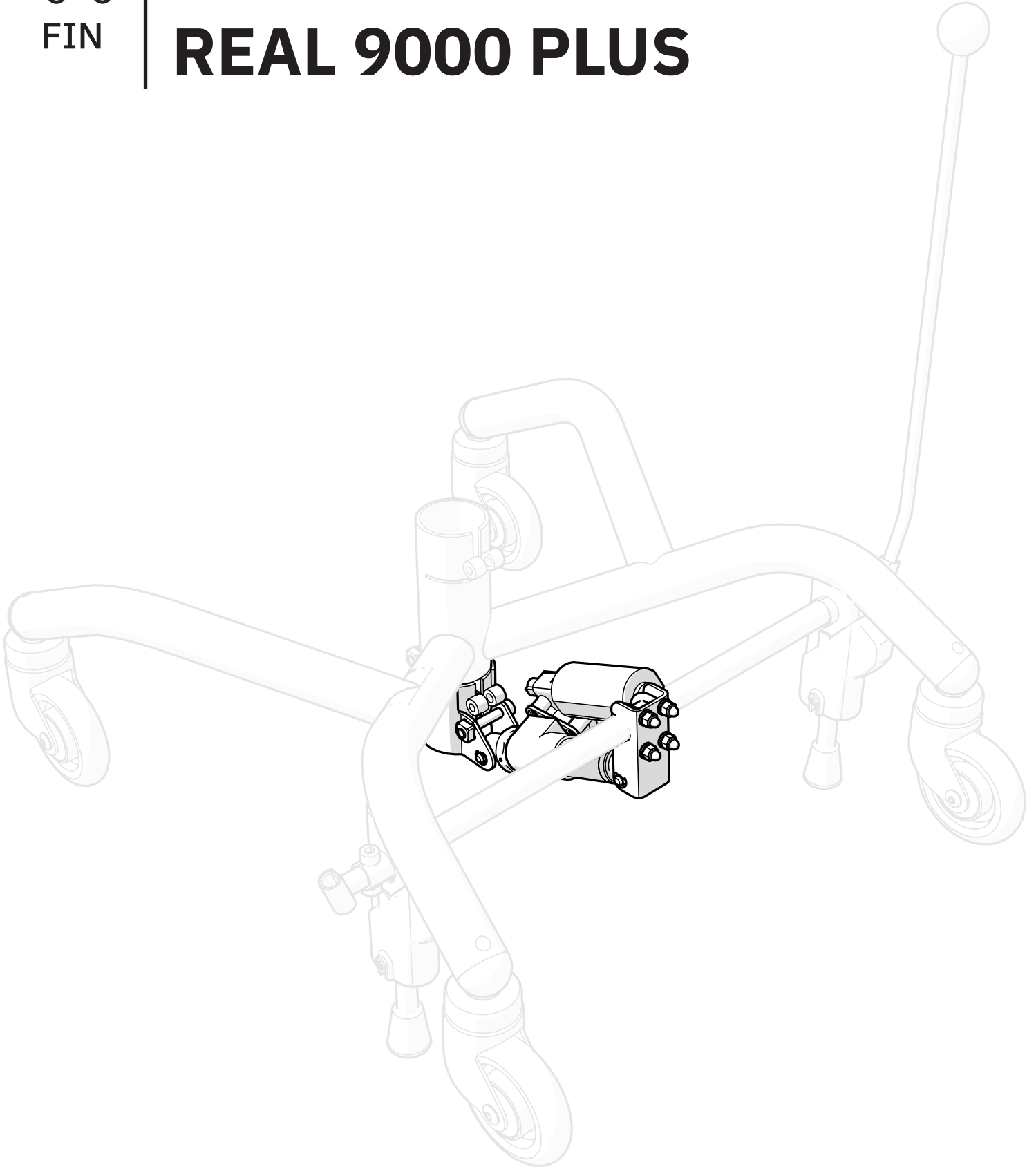

Sisällysluettelo

1. Tuoteluettelo	3
2. Tarvittavat työkalut	3
3. Varoitukset	3
4. Asennusohje	4
4.1. Puristumissuoja	4
4.2. Jarruta alusta	4
4.3. Asenna kiinnikkeet	5
4.4. Sähköisen säätövivun asentaminen	6
4.5. Elektroniikan kytkeminen	6
4.6. Tarkista ja säädä tarvittaessa	7
4.7. Sähköisen säätövivun säätäminen	8
4.8. Jarrunokan sijoittaminen	9
5. Hoito	10
6. Hävittäminen ja kierrätys	10

1. Tuoteluettelo

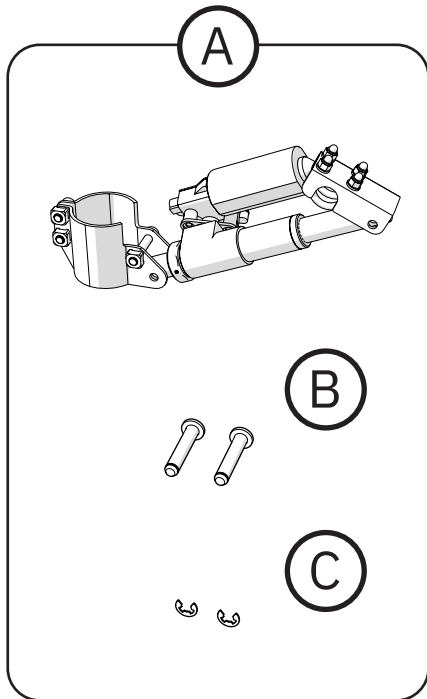

- Ⓐ 803037. Sähköinen säätövipusarja Plus -alustan sähköjarrulle 20 Akseli ja relekortti
 803067 Relekorttisarja jarru+ylös/alas täyd. sis. Sähkösarja sähköjarru Plus
 803077 Sähköinen säätövipusarja manuaalisen 9000 PLUS -alustan sähköjarrulle, sis. akku
 803273 Sähköinen säätövipu+relesarja 9000 Plus -alustan jarrulle ilman latauskotelo
 803276 Sähköinen säätövipu+relesarja 9000 Plus -alustan jarrulle sis. hallintarasia Plus kieli
 803899 Sähköinen säätövipu+relesarja 9000 Plus -alustan jarrulle sis. hallintarasia Plus sileä
 804482 Sähköinen säätövipusarja jarrulle sis. hallintarasia ilman kieltä 24 V 1G
 804498 Sähköinen säätövipusarja jarrulle 24 V 1G
 804521 Sähköinen säätövipu+relesarja 9000 Plus -alustan jarrupainikkeelle etu sis. hallintarasia
 804548 Sähköjarrusarja täyd. manuaaliselle tuolille sis. hallintarasia ilman kieltä 24 V 1G
 804621 Sähköinen säätövipusarja jarrulle sis. hallintarasia kielellä 24 V 1G
 804627 Sähköjarrusarja täyd. manuaaliselle tuolille sis. hallintarasia kielellä 24 V 1G
- Ⓑ 805266 Lieriömäinen pultti fzb varmistinlevylle
- Ⓒ 805267 Varmistinlevy RWS 6

2. Tarvittavat työkalut

- 6 mm:n kuusiokoloavain
- 10 mm:n kiintoavain
- Työkalu varmistinlevyn purkamiseen, esimerkiksi pieni urataltta (Ø enintään 3 mm).
- Työkalu varmistinlevyn asentamiseen, esimerkiksi hohtimet.

Asennusohjetta täydentää *KytKentäopas 24 V 1G* tai *KytKentäopas REAL 9000 PLUS 12 V*, jotka löytyvät osoitteesta mercado.se.

3. Varoitukset



Varoitus!

1. Puristumisvaara jarrunokan ja alustan välillä, jos puristumissuoja puuttuu.
2. Puristumisvaara toimilaitteen ja jarruakselin välillä asennuksen aikana.

4. Asennusohje



Ohjeessa on kuvattu enimmäkseen taaksejarrutettua alustaa, mutta ohje koskee myös eteenjarrutettua alustaa.

4.1. Puristumissuoja


Tarkista, että puristumissuoja on asennettu. Jos se puuttuu, voit tilata sen verkkokaupastamme. Tuotenumero 805192.



Sähköjarrua ei saa käyttää ilman puristumissuojaa!

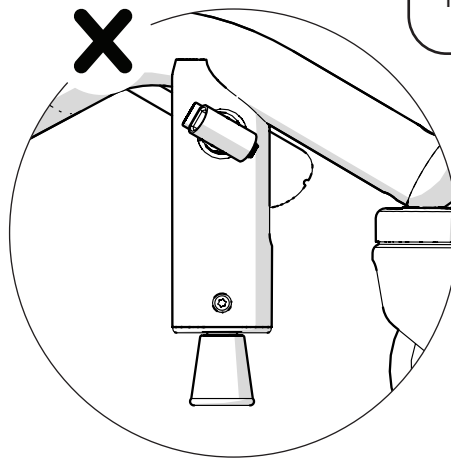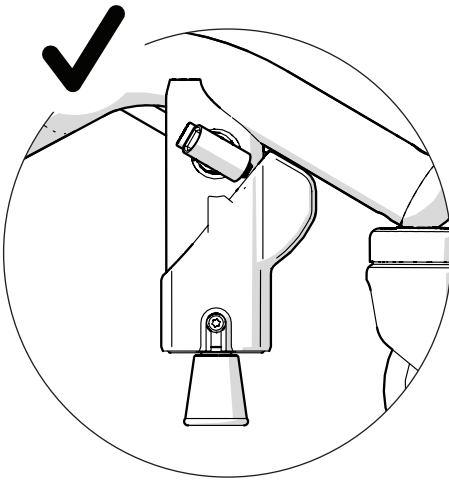


4.2. Jarruta alusta

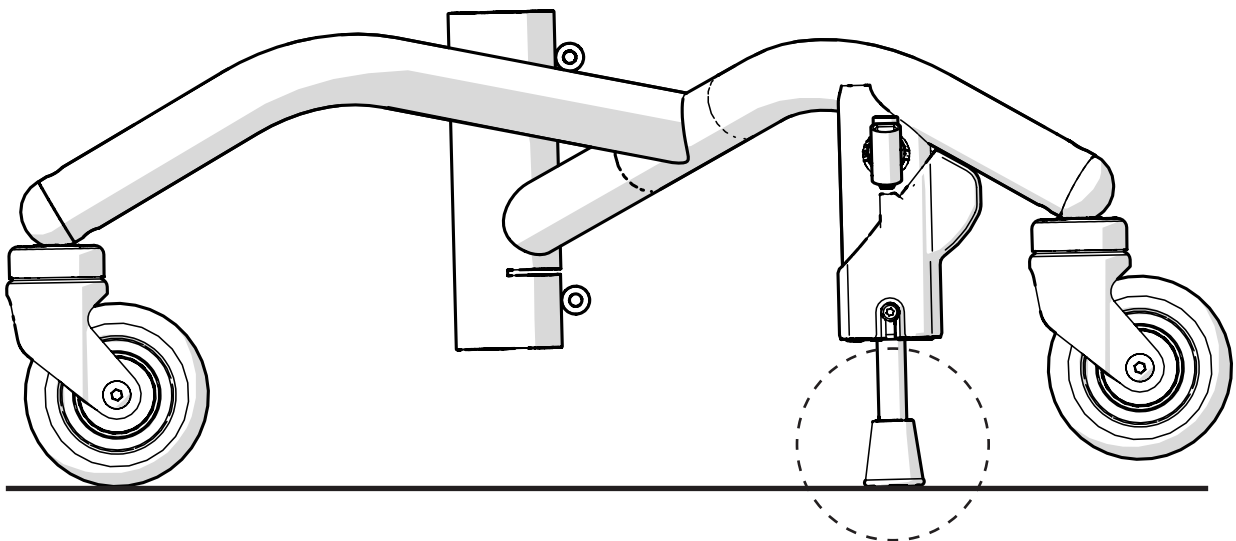

4.3. Asenna kiinnikkeet

Asenna kiinnikkeet keskiputkeen ja jarruakseliin.
Ruuvaa ruuvit käsin kiristämättä tiukasti.

i Molempia kiinnikkeitä voidaan säätää. Ne kiristetään ja lukitaan myöhemmissä asennusvaiheissa.

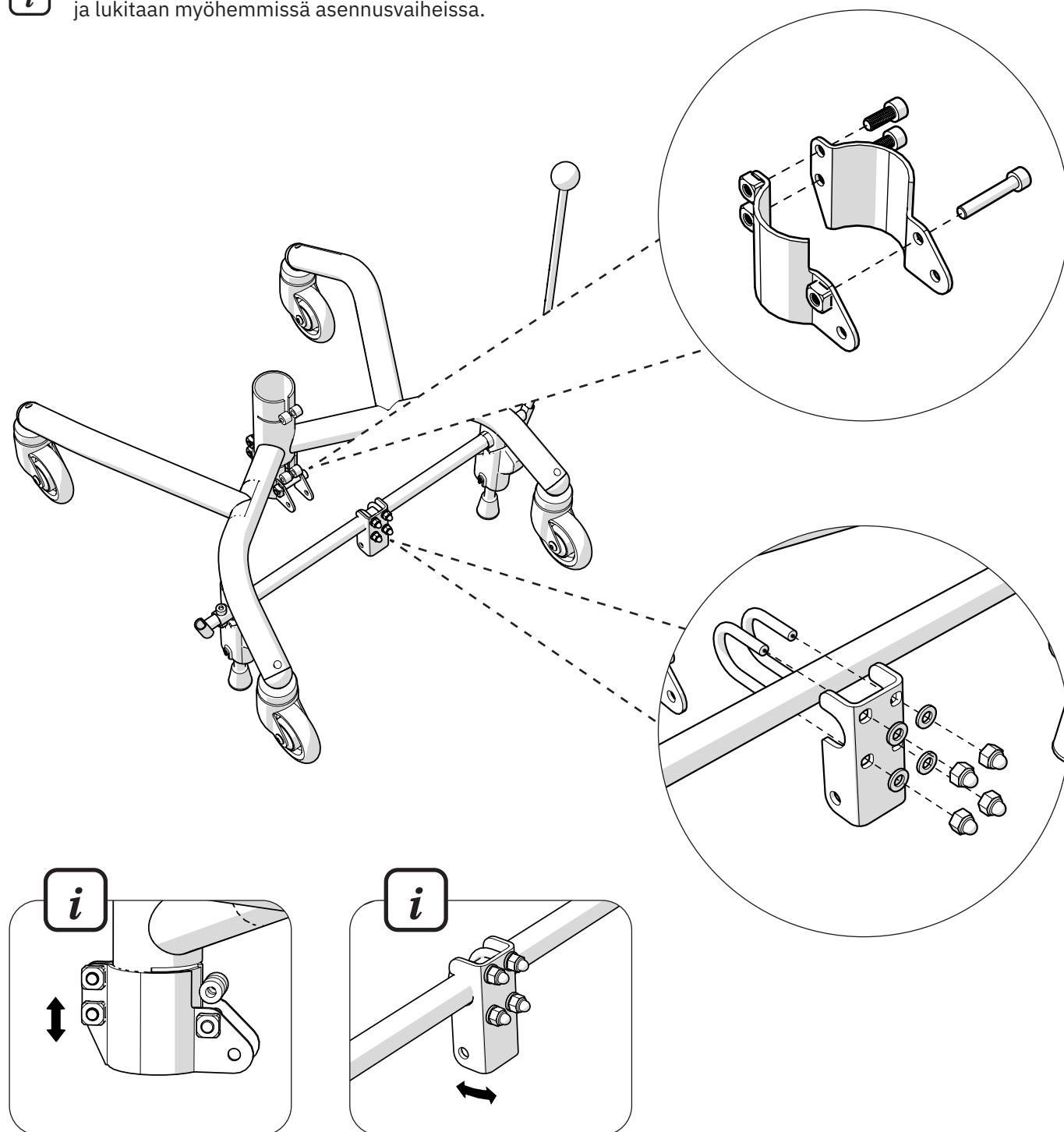


4.4. Sähköisen säätövivun asentaminen

Työnnä lieriömäiset pultit läpi niin, että säätövipu kiinnittyy paikalleen. Lukitse lieriömäiset pultit varmistinlevyjen avulla.


4.5. Elektroniikan kytkeminen

Lisätietoja elektroniikan kytkemisestä on asiakirjassa *KytKentäopas 24V1G* tai *KytKentäopas REAL 9000 PLUS 12V*, jotka löytyvät osoitteesta mercado.se.


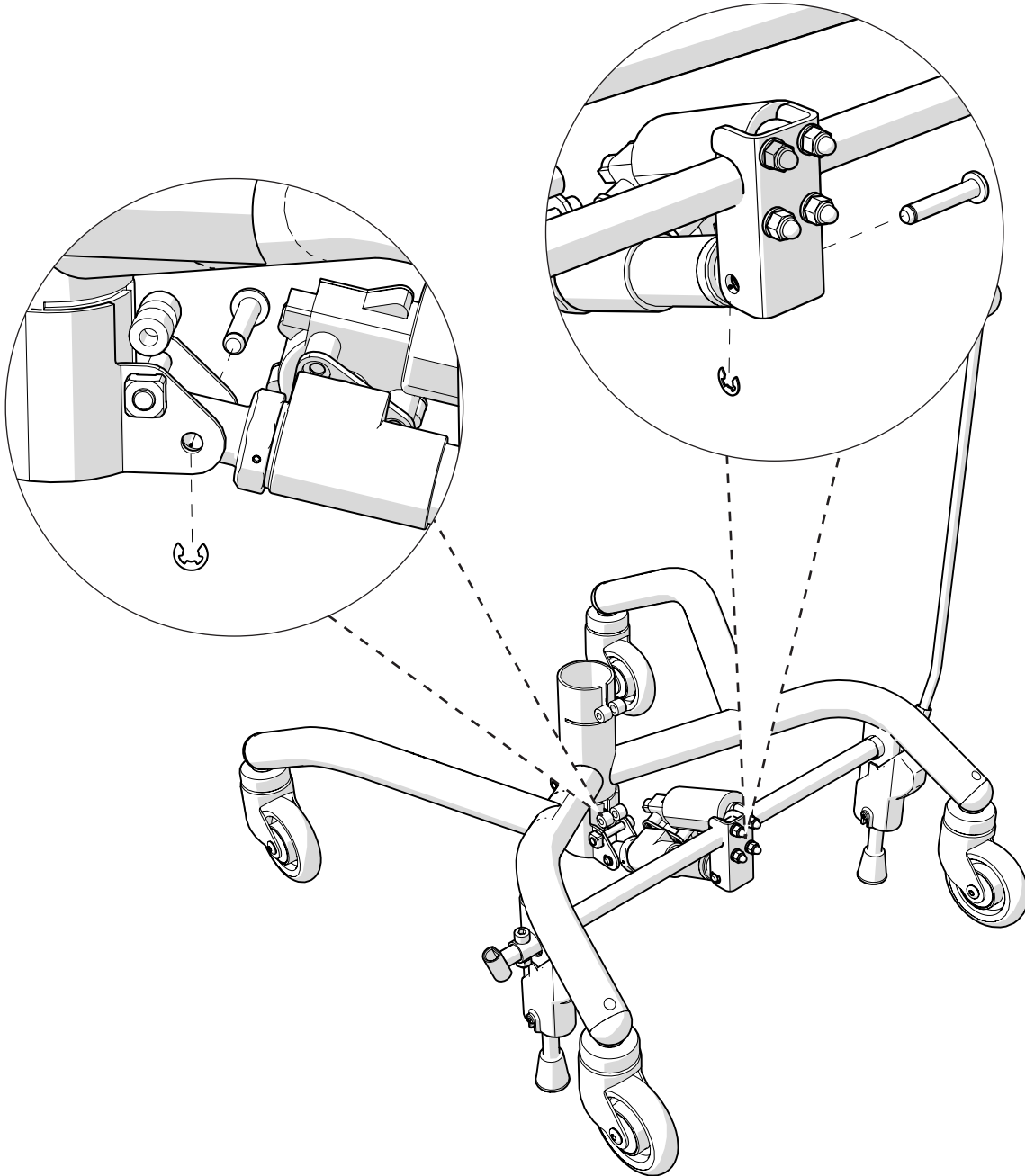


4.6. Tarkista ja säädä tarvittaessa

Tarkista, ettei toimilaitteen akseli osu jarruakselin kiinnikkeeseen tai jarruakseliin. Säädä keskikiinnikettä korkeussuunnassa, jos törmäysvaara on olemassa. Kiristä ruuvit, kun törmäys- tai puristumisvaaraa ei ole.

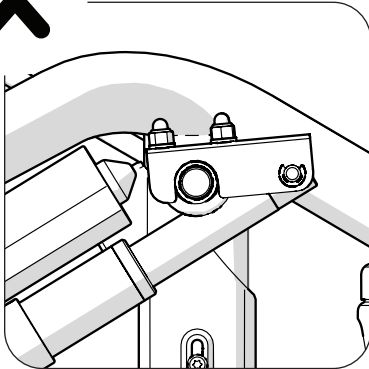

Huomaa puristumisvaara
toimilaitteen ja
jarruakselin välillä.

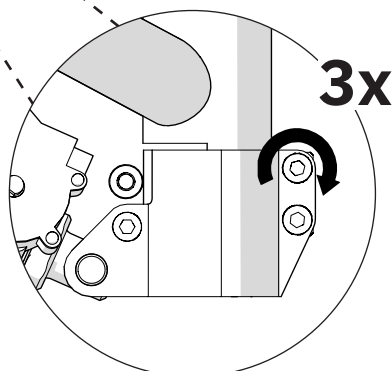
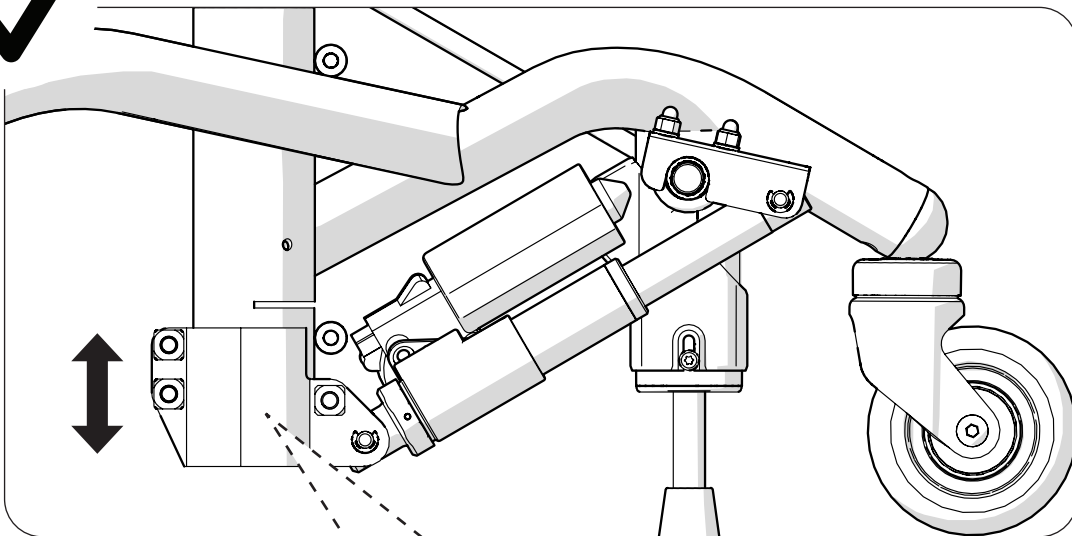


4.7. Sähköisen säätövivun säätäminen



Selvitä aluksi, millaiseen alustaan jarru asennetaan. Tämä tarkistetaan katsomalla, mihin suuntaan jarrunokka ja jarrujalan jarrusuoja osoittaa (katso kuvat alla). Jos ne osoittavat taaksepäin, alusta on taaksejarrutettu, ja jos ne osoittavat eteenpäin, alusta on eteenjarrutettu.

Aktivoi jarrutoiminto niin, että toimilaite on ääriasennossaan alla olevan kuvan mukaisesti.

Taaksejarrutettu

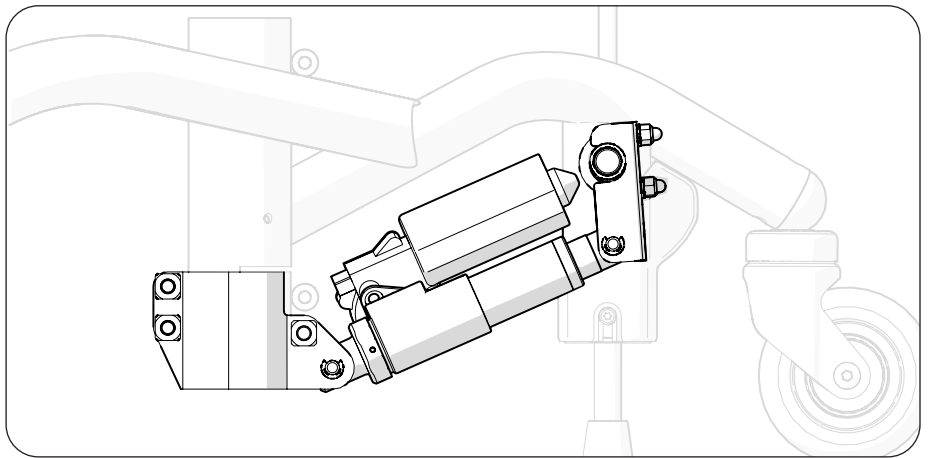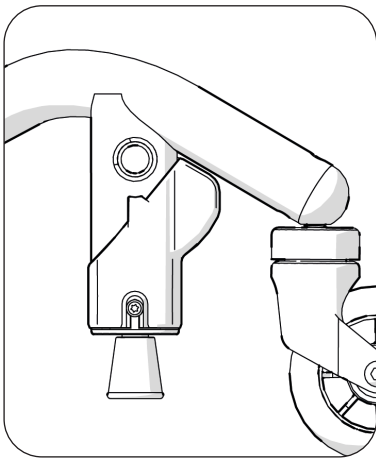


Eteenjarrutettu

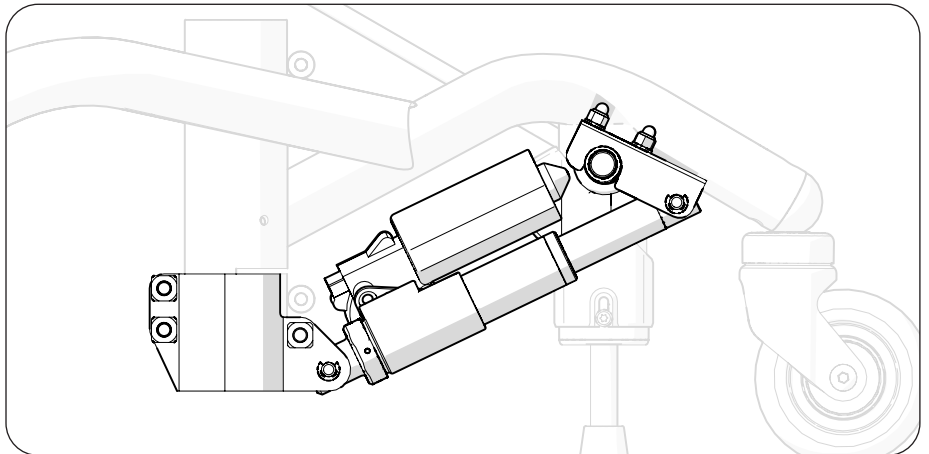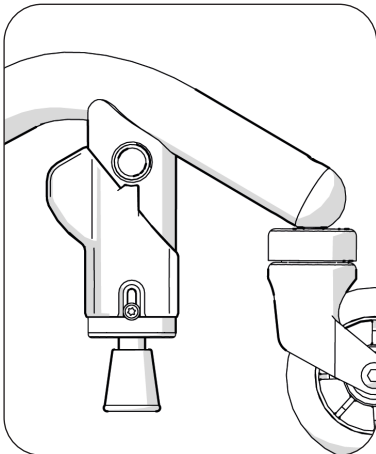

4.8. Jarrunokan sijoittaminen

Varmista, että alusta on jarrutettu.



Käännä jarruvipua jarrutetussa tilassa noin 5 astetta eteenpäin (alla olevassa kuvassa on taaksejarrutettu alusta). Pidä jarruvipua paikallaan ja kiristä samalla akselikiinnikkeen 4 kupumutteria. Kaikki mutterit on kiristettävä tasaisesti ja samalla voimalla.

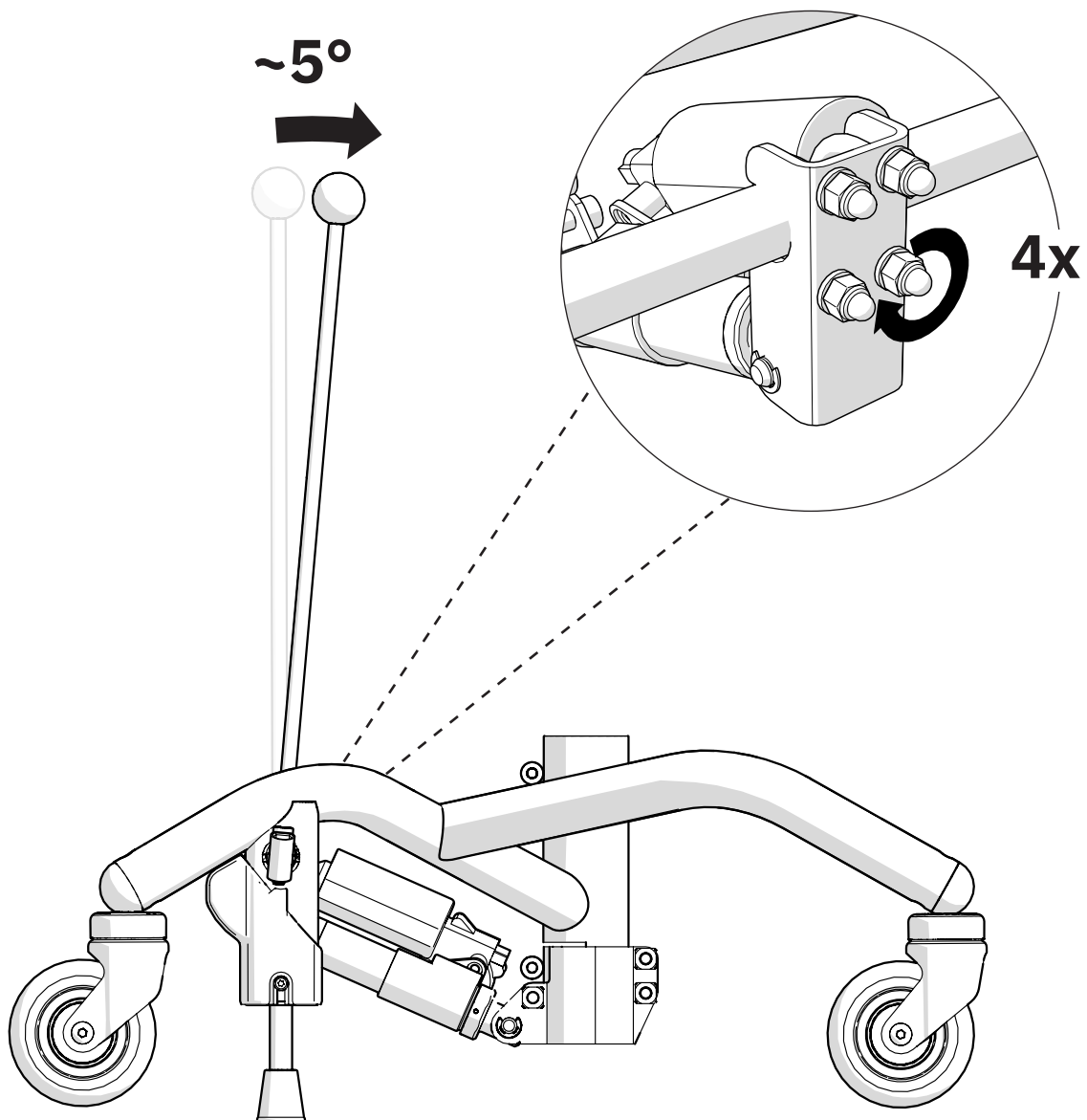

5. Hoito

Tälle tuotteelle ei ole erityisiä hoito-ohjeita. Noudata käyttöohjeen ohjeita.

6. Hävittäminen ja kierrätys

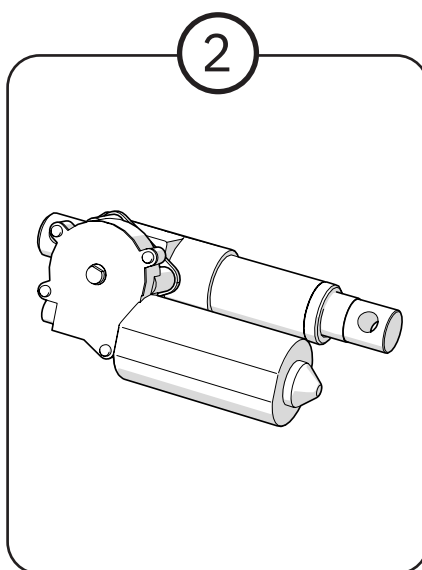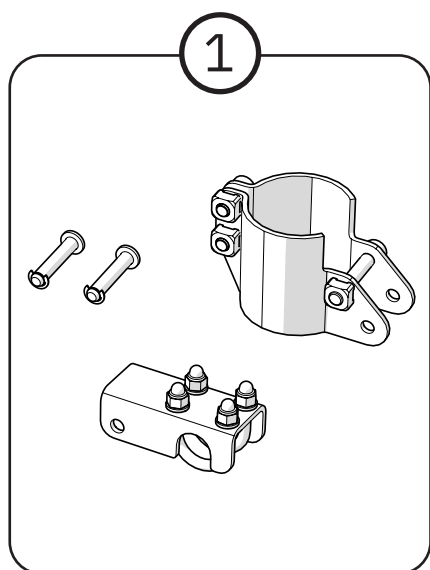

1. Lajitellaan metalliksi
2. Lajitellaan elektroniikaksi

Yhteystiedot

Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde
NETHERLANDS



Puhelin: +31 36 521 99 95
Faksi: +31 36 521 99 90
ma-pe 08.00-16.30



www.mercado-medic.nl

admin@mercado-medic.nl



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
SE-181 57 Lidingö
SWEDEN

Puhelin: +46 8 555 143 00
Sähköposti: info@mercado.se