



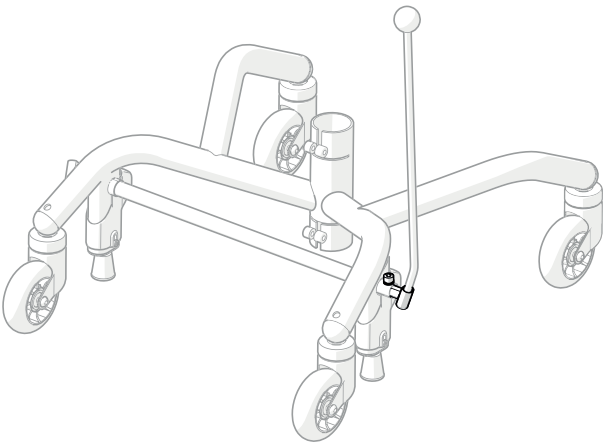

IS


BREMSUSTANGARFESTING FYRIR REAL 9000 PLUS

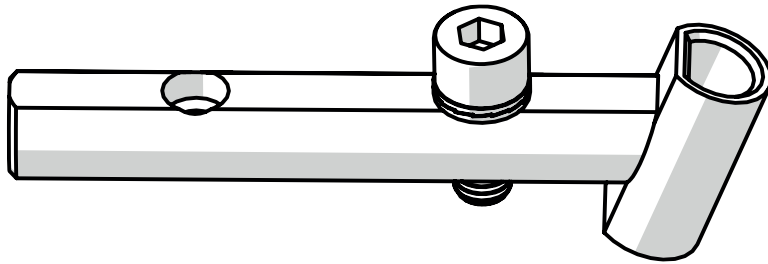

Efnisyfirlit

1. Vörulisti.....	3
2. Nauðsynleg verkfæri.....	3
3. Leiðbeiningar um uppsetningu	4
3.1. Fjarlægðu fyrirliggjandi hemilstangarfestingu	4
3.2. Uppsetning hemilstangarfestingar.....	4
4. Notkun og stillingar.....	5
4.1. Notaðu hemilstangarfestinguna til að stilla stöðu hemilstangarinnar	5
5. Förgun og endurvinnsla	5

1. Vörulisti

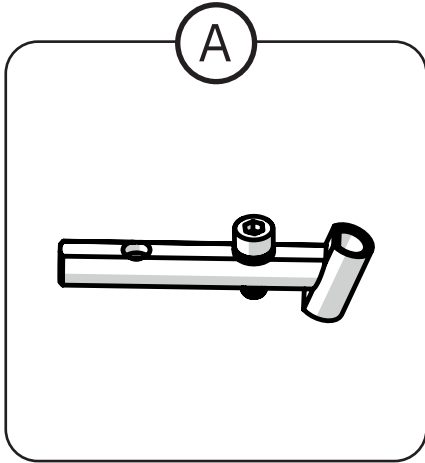

- Ⓐ 802799 Hemilstangarfesting fyrir PLUS-statíf, stillanleg
(2 stillingar)
- 802880 Hemilstangarfesting fyrir PLUS-statíf, stillanleg
(7 stillingar)

2. Nauðsynleg verkfæri

- Allen-lykill, 6 mm


3. Leiðbeiningar um uppsetningu

3.1. Fjarlægðu fyrirbyggjandi hemilstangarfestingu

Hemlaðu sætið og fjarlægðu hemilstöngina, ef til staðar (1) með því að toga hana út úr festingunni. Notaðu því næst 6 mm Allen-lykil til að losa skrúfuna (2) sem læsir hemilstangarfestingunni í hemlaöxlinum. Fjarlægðu loks hemilstangarfestinguna með því að draga hana út úr hemlaöxlinum.

3.2. Uppsetning hemilstangarfestingar


Festu hemilstangarfestinguna í hemlaöxlinum á þann hátt að eitt af skrúfugötum hemilstangarfestingarinnar sé miðjustillt við geislaútvísandi götin á hemlaöxlinum. Hafðu í huga að hægt er að nota aðrar dýptarstillingar fyrir hemilstangarfestinguna með því að nota tvö, í sumum tilvikum sjö, skrúfugöt á öxlinum. Læstu hemilstangarfestingunni með því að herða skrúfuna (2) vel í læsiskinnunni og hemlaöxlinum. Settu að lokum upp hemilstöngina.(1).

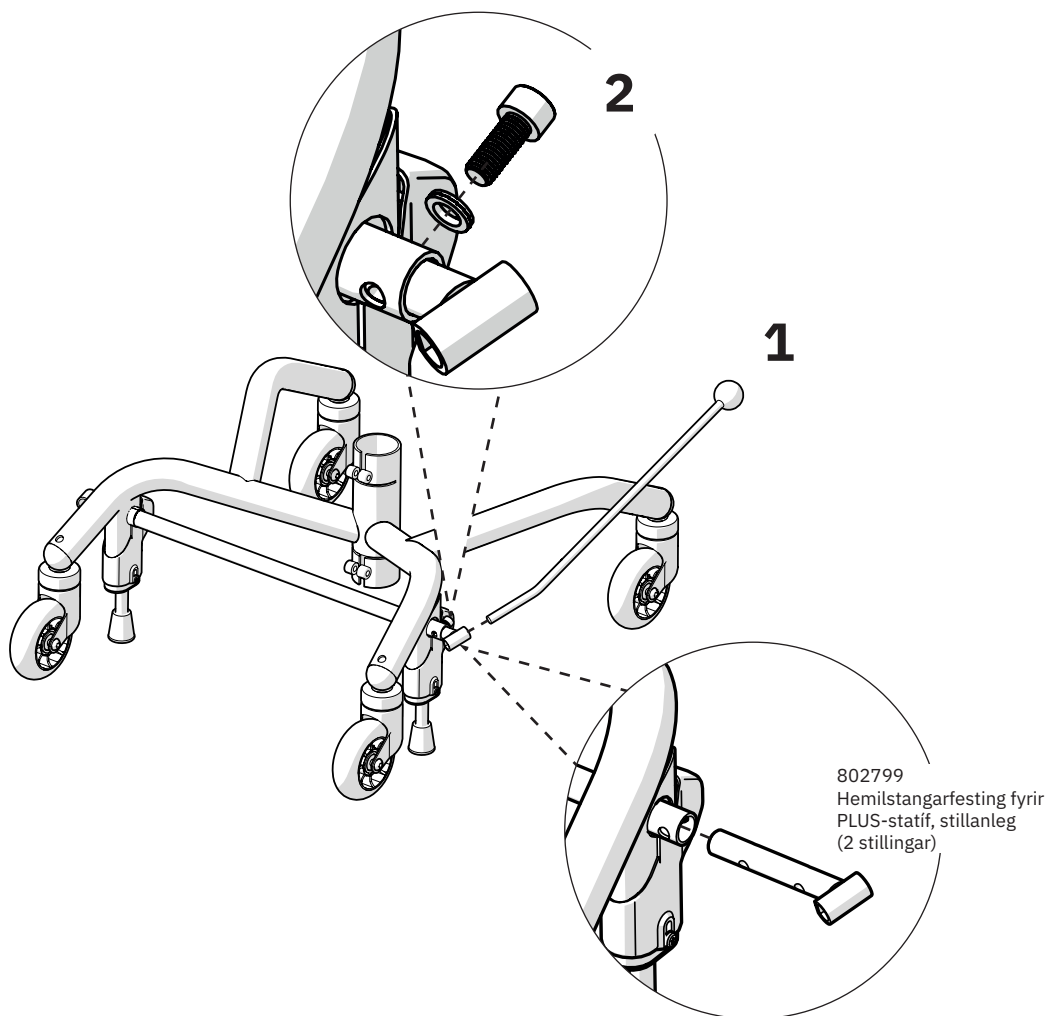


4. Notkun og stillingar

4.1. Notaðu hemilstangarfestinguna til að stilla stöðu hemilstangarinnar

Ef nauðsyn krefur er hægt að stilla dýpt hemilstangarfestingarinnar til að fá greiðara aðgengi að hemilstönginni. Dýptarstillingarnar sem hægt er að læsa hemilstangarfestingunni í eru ýmist tvær eða sjö, eftir gerð hemilstangarfestingarinnar sem nota á. Hemlaðu sætið og fjarlægðu hemilstöngina, ef til staðar (1) með því að toga hana út úr festingunni. Losaðu því næst skrúfuna (2) og renndu eða dragðu hemilstangarfestinguna út úr hemaöxlinum til að stilla stöðu hennar á dýptina. Gakktu úr skugga um að eitt af skrúfugötum hemilstangarfestingarinnar sé miðjustilt við geislaútvísandi götin á hemaöxlinum og hertu skrúfuna (2). Settu að lokum hemilstöngina (1) aftur upp í hemilstangarfestinguna.

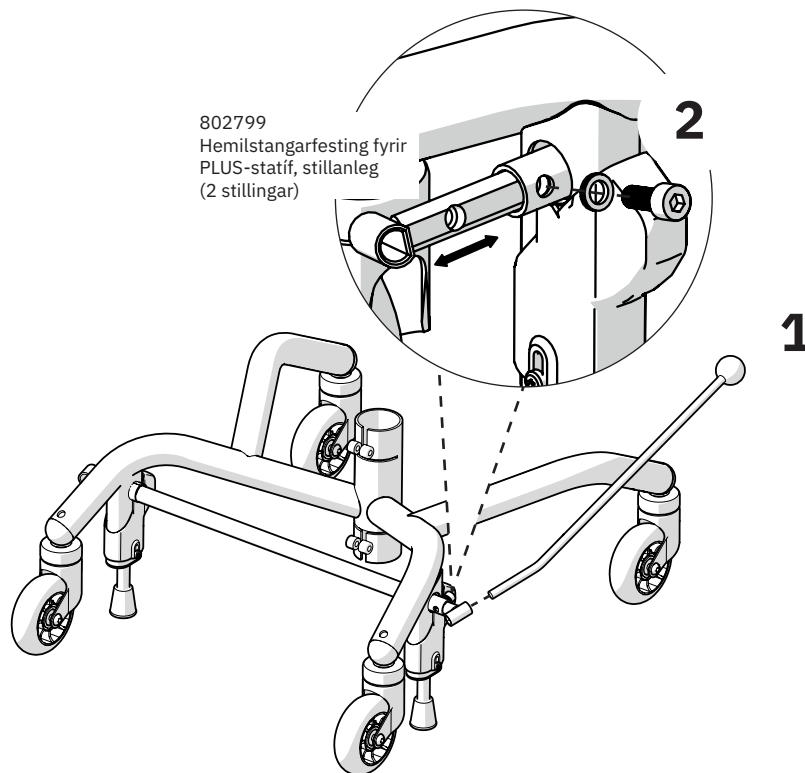

5. Förgun og endurvinnsla

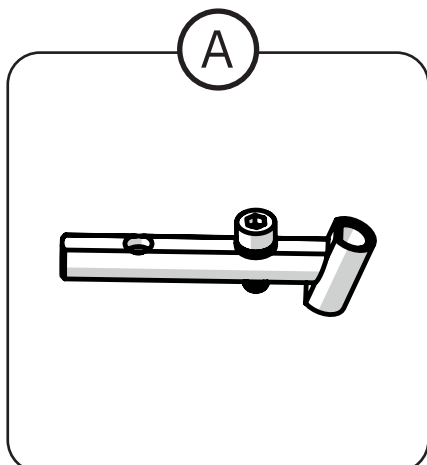

(A) Flokkast sem málmur

Samskiptaupplýsingar

Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde
NETHERLANDS



Sími: +31 36 521 99 95
Fax: +31 36 521 99 90
Mán-fös 08:00-16:30



www.mercado-medic.nl

admin@mercado-medic.nl



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
SE-181 57 Lidingö
SWEDEN

Sími: +46 8 555 143 00
Netfang: info@mercado.se