



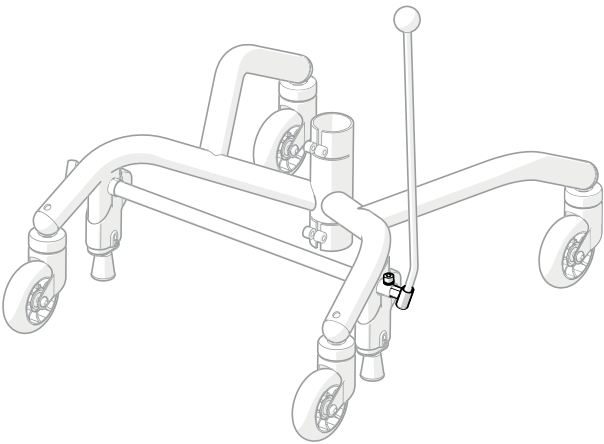

NL


REMHENDELSTEUN REAL 9000 PLUS

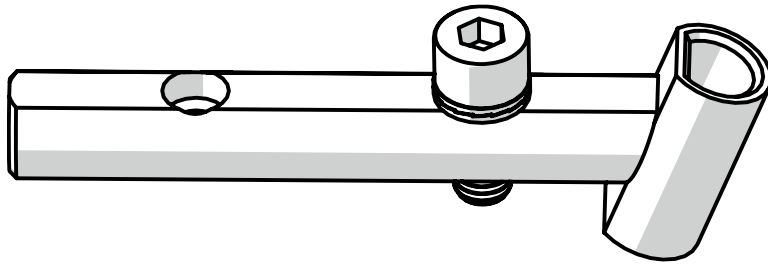

Inhoudsopgave

1. Lijst met artikelen	3
2. Benodigd gereedschap.....	3
3. Montage-instructies	4
3.1. Verwijder de oude remhendelsteun.....	4
3.2. Montage remhendelsteun	4
4. Gebruik en aanpassing.....	5
4.1. Pas de positie van de remhendel aan met de remhendelsteun.....	5
5. Vernietiging en recycling	5

1. Lijst met artikelen

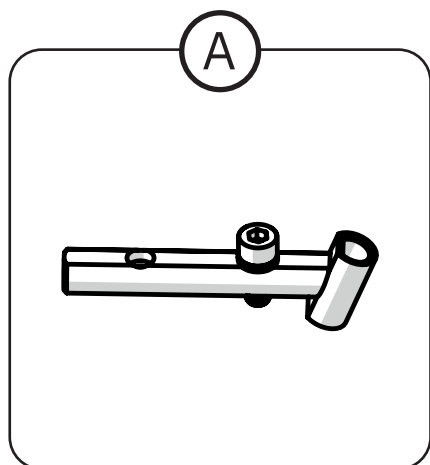

- | | |
|----------|---|
| Ⓐ 802799 | Remhendelsteun v PLUS-frame verstelbaar (2 standen) |
| 802880 | Remhendelsteun v PLUS-frame verstelbaar (7 standen) |

2. Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 6 mm


3. Montage-instructies

3.1. Verwijder de oude remhendelsteun

Zet de stoel op de rem en verwijder evt. de remhendel (1) door deze uit de remhendelsteun te trekken. Maak vervolgens de schroef (2) waarmee de remhendelsteun in de remas vastzit los met een 6 mm inbusleutel. Verwijder ten slotte de remhendelsteun door deze uit de remas te trekken.

3.2. Montage remhendelsteun


Plaats de remhendelsteun zo op de remas dat een van de schroefgaten van de remhendelsteun in het midden zit van de radiale gaten van de remhendelas. Let op dat de remhendelsteun verschillende verstelmogelijkheden in de diepte heeft in de vorm van de twee of zeven schroefgaten in de as. Vergrendel de remhendelsteun door de schroef (2) door de borgring en de remas te schroeven. Monteer ten slotte een remhendel (1).

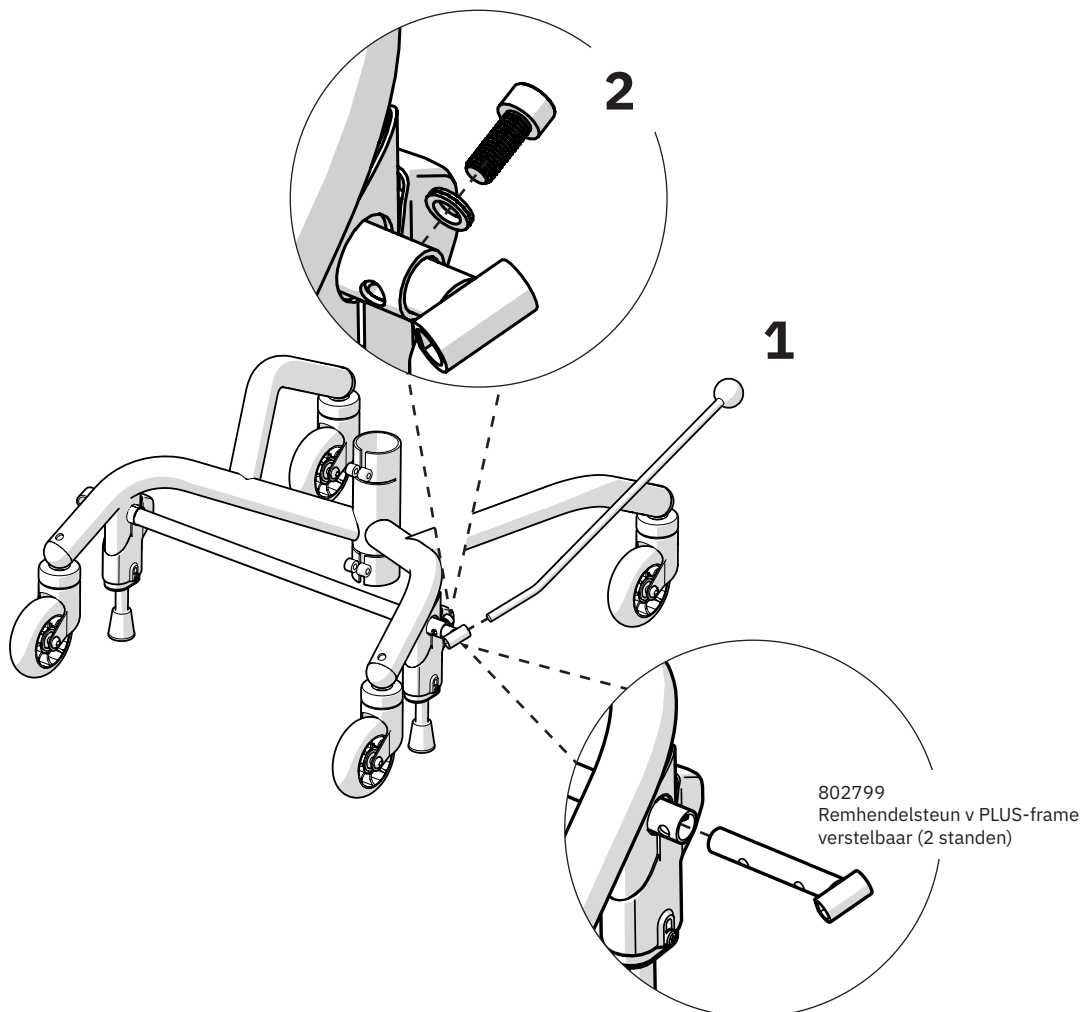


4. Gebruik en aanpassing

4.1. Pas de positie van de remhendel aan met de remhendelsteun

Indien nodig kan de remhendelsteun in de diepte worden afgesteld voor een betere toegankelijkheid van de remhendel. Afhankelijk van de gebruikte remhendelsteun zijn er twee of zeven diepteposities waarop de remhendelsteun kan worden vergrendeld. Rem de stoel en verwijder de remhendel (1) door deze uit de remhendelsteun te trekken. Draai vervolgens de schroef (2) los en schuif of trek de remhendelsteun uit de remas om de positie in de diepte aan te passen. Zorg ervoor dat een van de schroefgaten van de remhendelsteun in lijn is met de radiale gaten van de remas en draai de schroef aan (2). Sluit vervolgens af door de remhendel (1) opnieuw in de remhendelsteun te monteren.

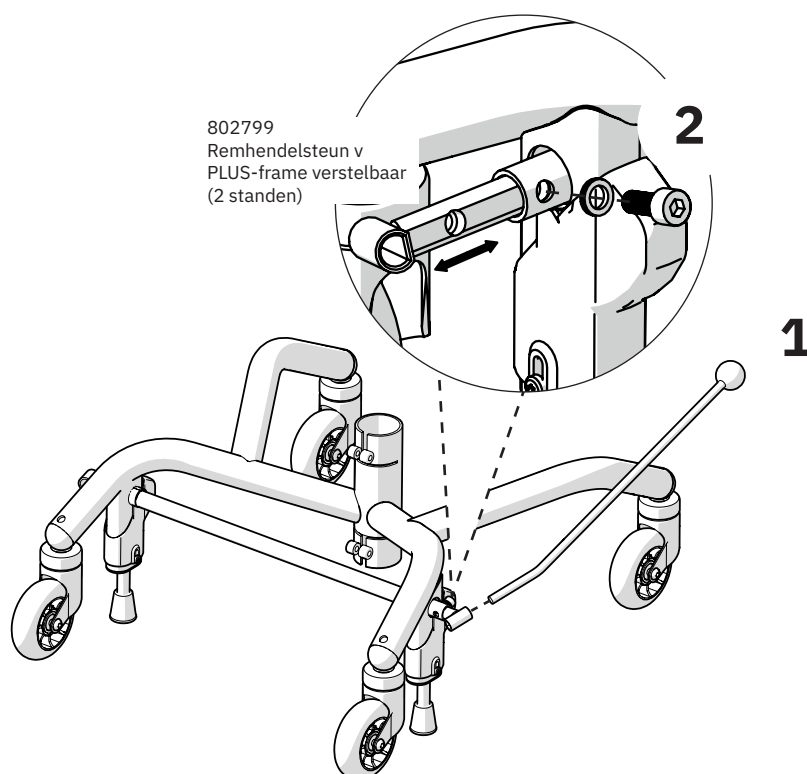

5. Vernietiging en recycling

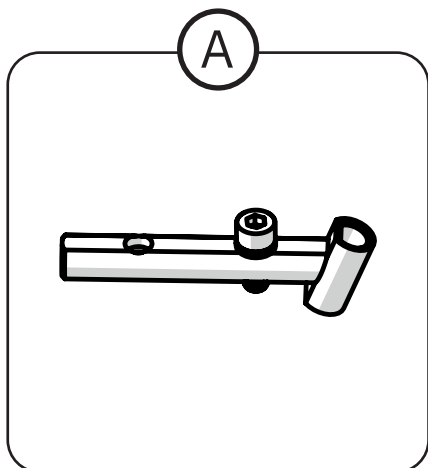

(A) Dient als metaal te worden gesorteerd

Contactgegevens

Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde



Telefoon: +31 36 521 99 95
Fax: +31 36 521 99 90
Ma-vr 08.00-16.30 uur



www.mercado-medic.nl

admin@mercado-medic.nl



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö
ZWEDEN

Telefoon: +46 8 555 143 00
E-mail: info@mercado.se