




FR


# RÉGLAGE DU RESSORT PNEUMATIQUE

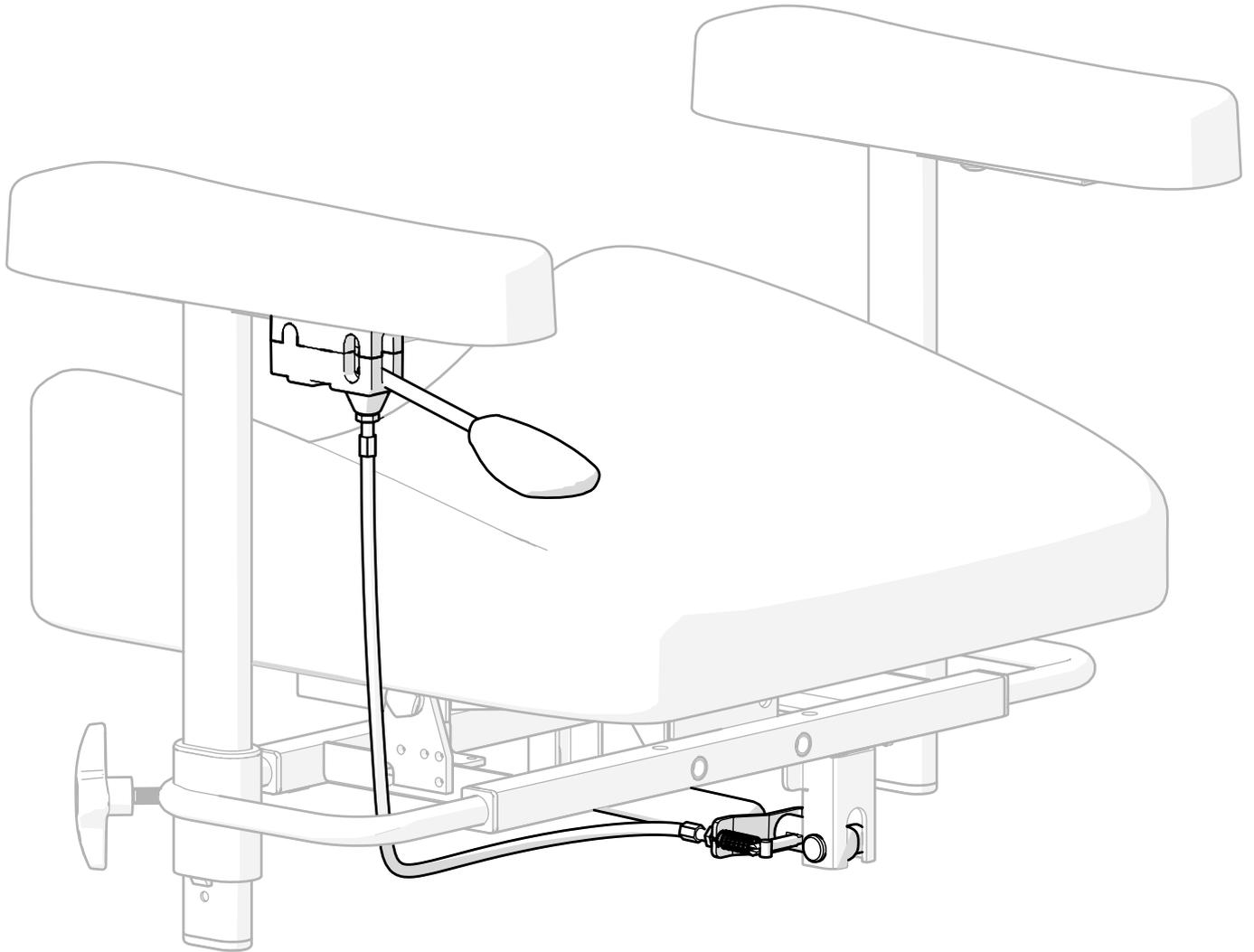

# Table des matières

1. Liste des pièces . . . . .	3
2. Outillage nécessaire . . . . .	3
3. Instructions de montage . . . . .	4
3.1. Montage du ressort pneumatique . . . . .	4
3.2. Montage du réglage par ressort pneumatique . . . . .	5
3.3. Passage du câble . . . . .	6
4. Ajustement . . . . .	7
5. Destruction et recyclage . . . . .	8

# 1. Liste des pièces

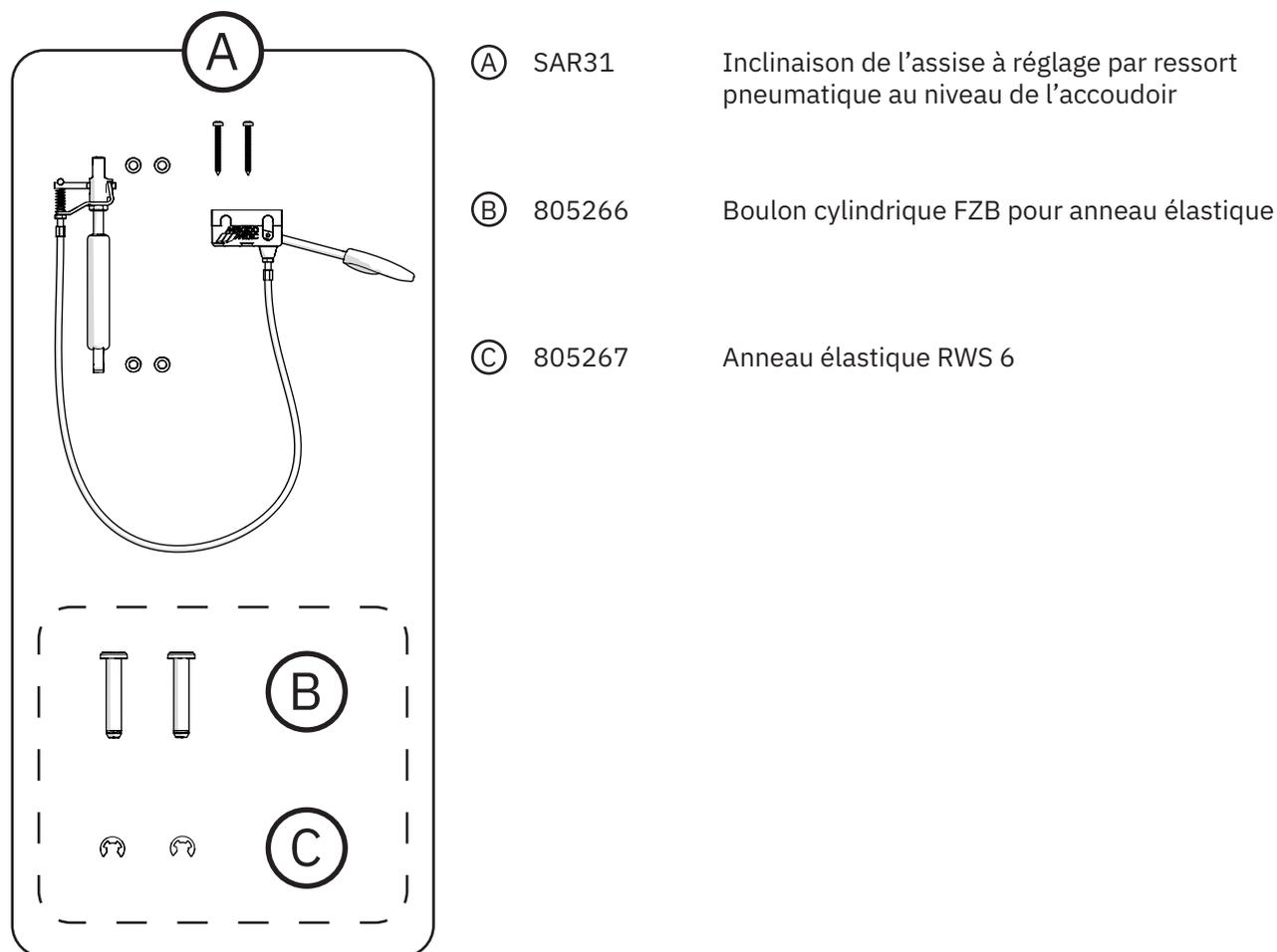






## 2. Outillage nécessaire

- Torx T25
- Outil pour démonter les anneaux élastiques - petit tournevis à fente (Ø 3 mm ou moins) par exemple.
- Outil pour monter les anneaux élastiques - pince à circlips par exemple.

## 3. Instructions de montage






### 3.1. Montage du ressort pneumatique

Placer le ressort pneumatique entre les supports sur le cadre de siège. Fixer le ressort pneumatique avec des boulons cylindriques et des entretoises. Bloquer les boulons cylindriques à l'aide d'anneaux élastiques.

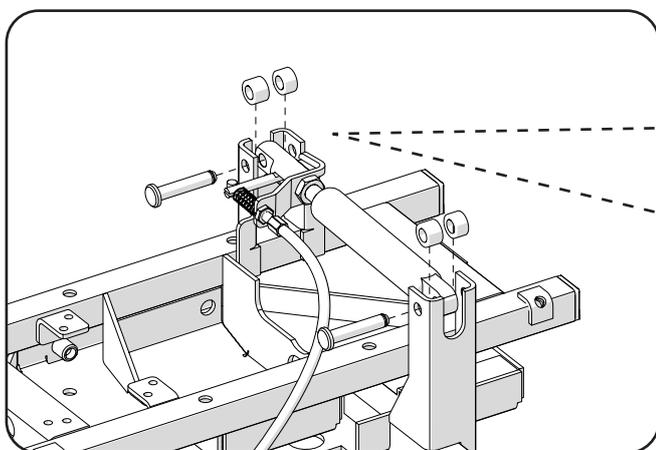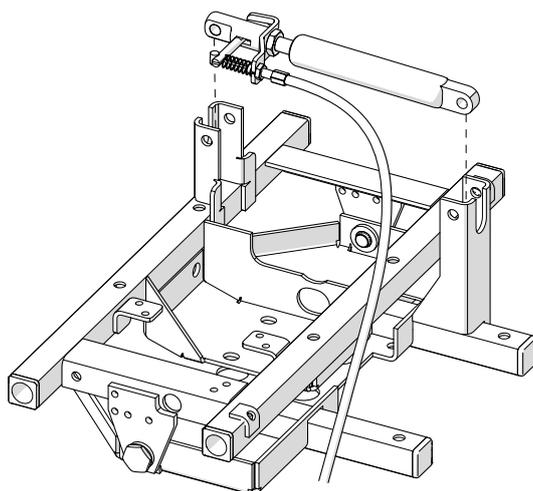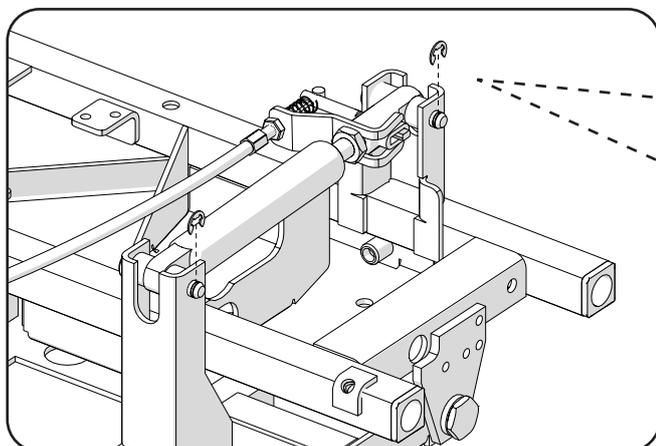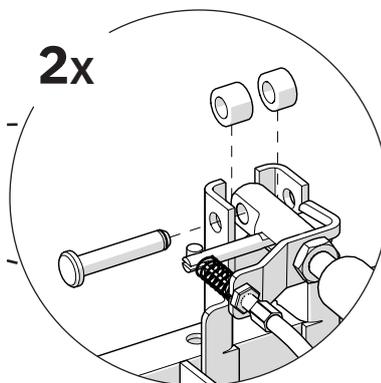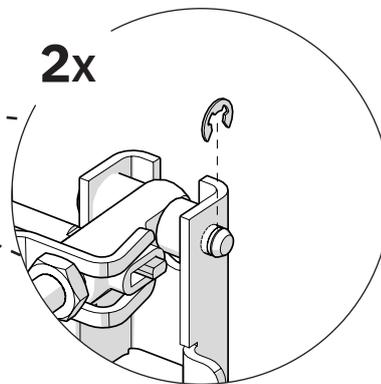**2x****2x**


### 3.2. Montage du réglage par ressort pneumatique

Rassembler les moitiés supérieure et inférieure du support de commande. Placer le support contre le dessous de l'accoudoir. Le support doit reposer contre l'extérieur du tube carré et le bord avant du réglage et de l'accoudoir doit dans la plupart des cas être aligné. Serrer ensuite les deux vis à bois dans la plaque en bois de l'accoudoir. Les vis sont autoperceuses.

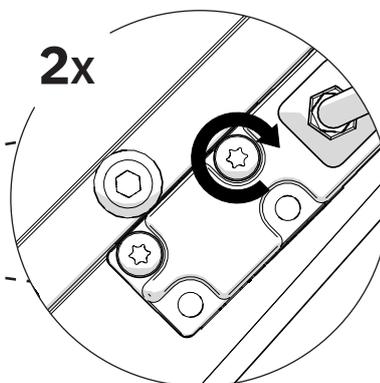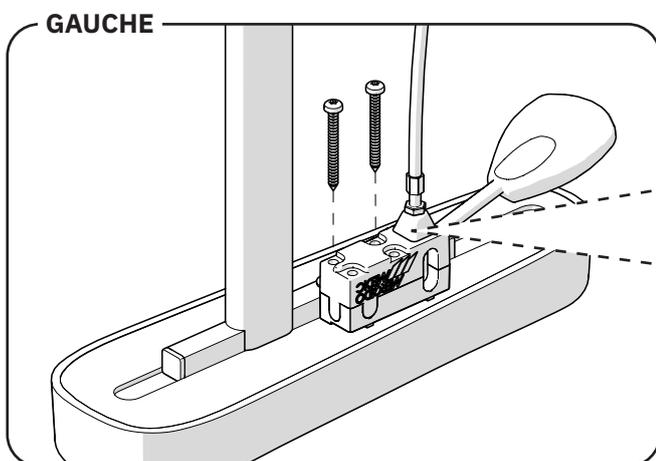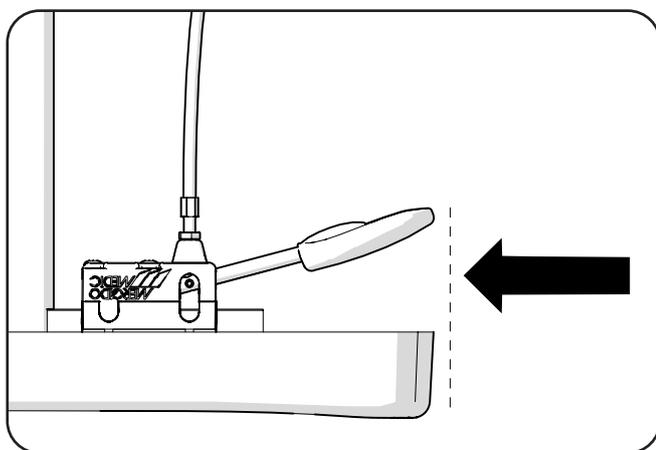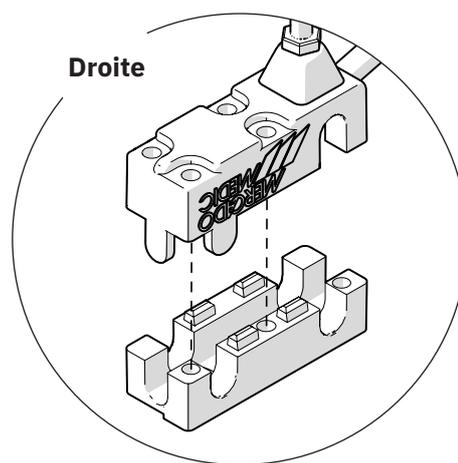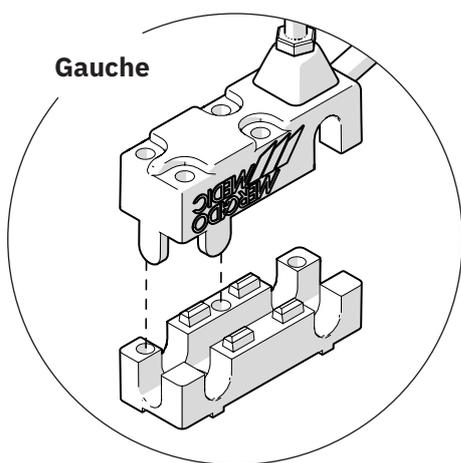




### 3.3. Passage du câble

Placer le câble à l'intérieur du support de réglage de la largeur de l'accoudoir.

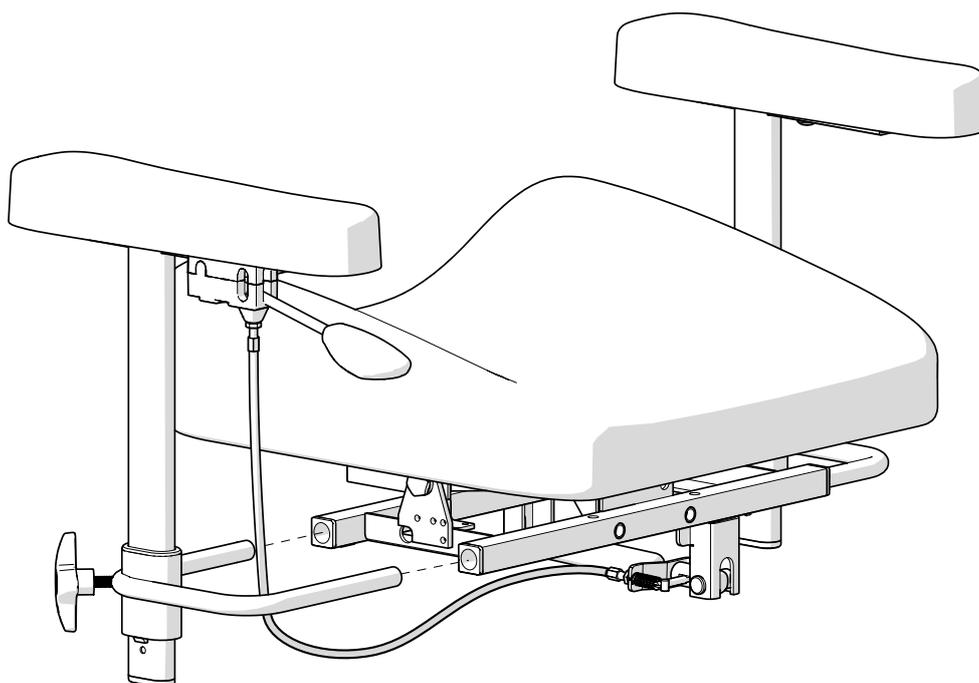


## 4. Ajustement

Le réglage doit pouvoir se soulever d'environ 2 mm avant l'activation du ressort pneumatique. Affiner le jeu en vissant le raccord fileté. Serrer ensuite le contre-écrou du raccord fileté pour verrouiller la position. Vérifier la fonction.

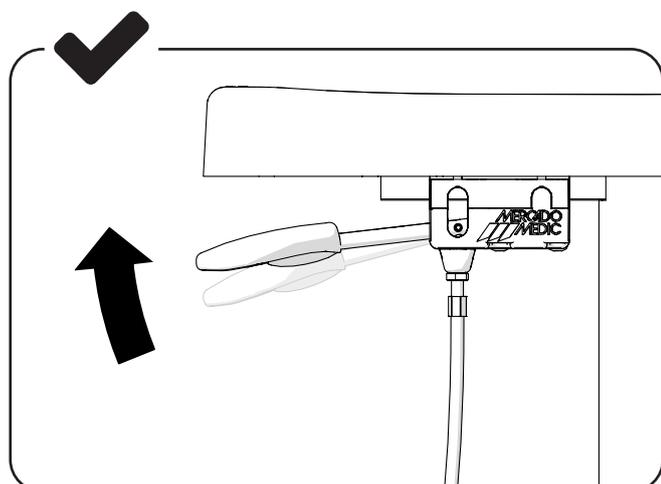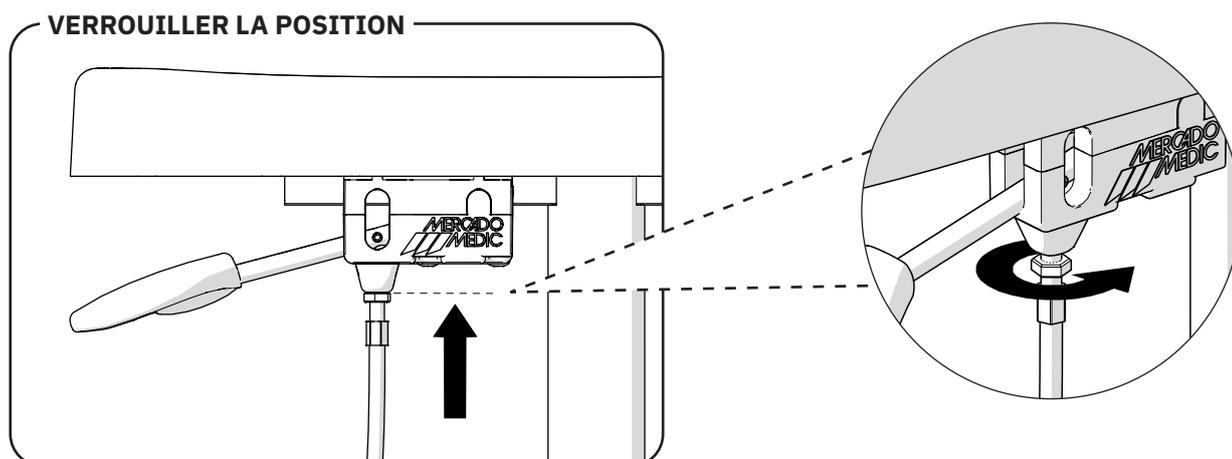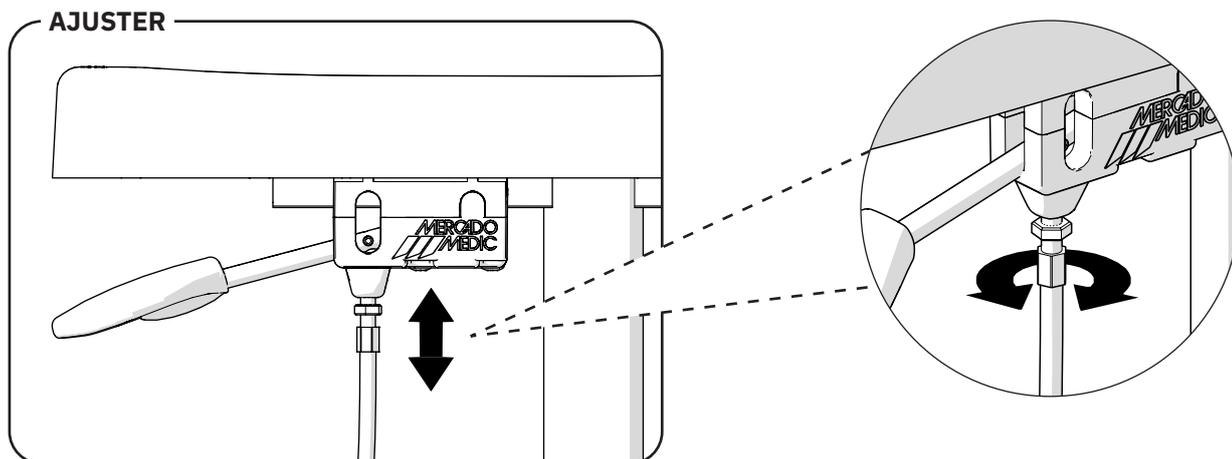

## 5. Destruction et recyclage

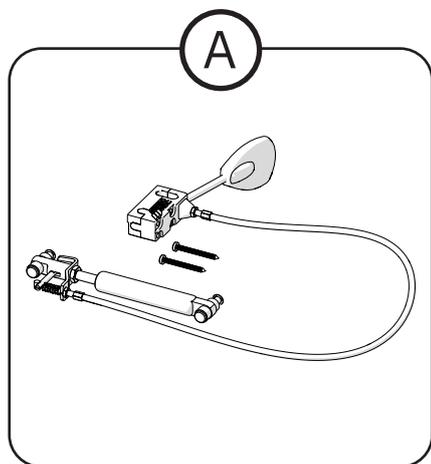

Ⓐ À trier comme métal

# Coordonnées

Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV  
Nobelweg 22  
3899 BN Zeewolde  
NETHERLANDS



Téléphone : +31 36 521 99 95  
Fax : +31 36 521 99 9  
Lun-ven 08h00-16h30



[www.mercado-medice.nl](http://www.mercado-medice.nl)

[admin@mercado-medice.nl](mailto:admin@mercado-medice.nl)



Mercado Medic AB  
Tryffelslingan 14  
SE-181 57 Lidingö  
SUÈDE

Téléphone : +46 8 555 143 00  
E-mail : [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)