



REAL[®] 9x00 PLUS SERIE



MONTERINGSANVISNING, BRUK- OG VEDLIKEHOLD
REAL 9x00 PLUS/EL/VOKSEN/BARN/MINI/COXIT

Dok. 20-07181-NO-01
Artikelnr 804838
Endret 2020-12-04
Gyldig fra 2017-06-01

REAL 9x00 PLUS er et medisinsk-teknisk produkt i klasse 1. Den er CE-merket i henhold til det svenske legemiddelverkets bestemmelser om medisinsk-tekniske produkter LVFS 2003:11 og er testet og godkjent etter EN 1335, IEC 60601 samt EN 12182. Alle tekstiler oppfylder kravene i henhold til EN 1021-1 og EN 1021-2. Mercado Medic AB er sertifisert mot både ISO 9001, 14001 og følger gjeldende arbeids- og miljølover.

Hvis du har spørsmål om produktet, eller hvis det inntreffer noe uforutsett, må du i første omgang kontakte den Sunrise Medical for det Norske markedet. Se siste side for kontaktopplysninger.


PDF- versjoner av bruks og monteringsanvisninger finnes på vår hjemmeside. For deg med nedsatt syn finnes det en PDF-versjon med forstørrelsesmuligheter.

Det finnes også informasjon om tilbehør som kan monteres samt sikkerhetsinformasjon. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på denne manualen og innholdet.

DIN REAL[®] 9x00 PLUS

- Voksen
- Barn/Mini
- Coxit

- Manuell
- El 24V

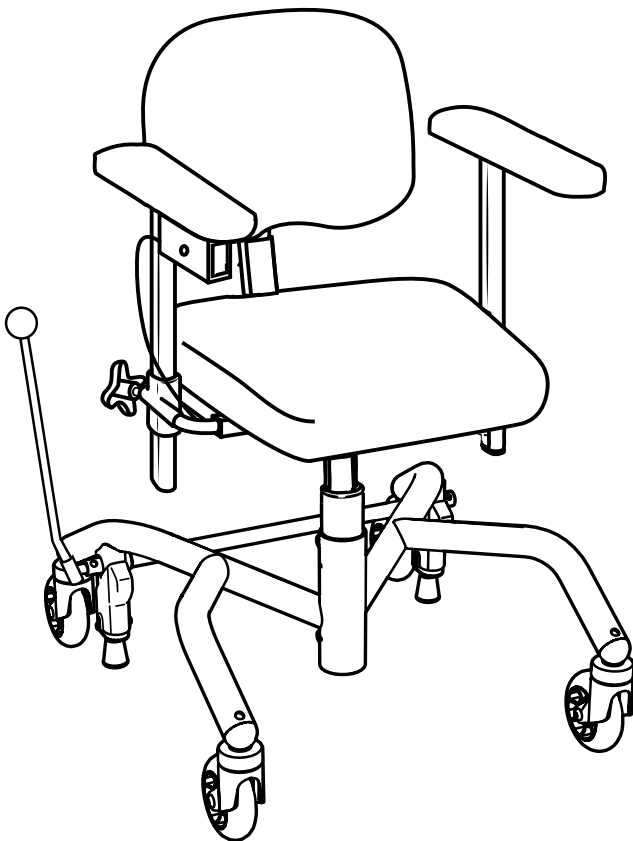


INNHOLD

MONTERING FØR BRUK	SIDE 2
DIN REAL 9x00 PLUS	SIDE 3
VIKTIG INFORMASJON OG KLASSE	SIDE 3
RENGJØRING OG OMSORG	SIDE 4
DESTRUERINGSANVISNINGER	SIDE 4
SYMBOLER	SIDE 5
SERVICE OG GJENBRUK	SIDE 5
INDIVIDUELL TILPASNING	SIDE 7
BRUKERVEILEDNING	SIDE 8

Tilstrekkelig kompetanse for sikker bruk oppnås ved å lese nøye denne bruksanvisning før stolen tas i bruk.


Bremsespak

Ta stolen ut av emballasjen. Løsne bremsespaken som er pakket i plast langs bremsespaken bak på stolen. Sett bremsespaken i bremsespakfestet (1) på høyre eller venstre side.

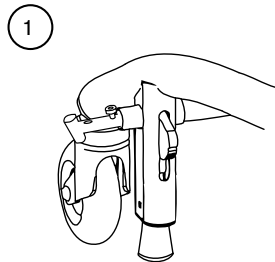



Armlener

Løsne reguleringsanordningen på armlenet (2). Still inn ønsket nivå for høyde og bredde. Stram deretter alle reguleringsanordningene (2).

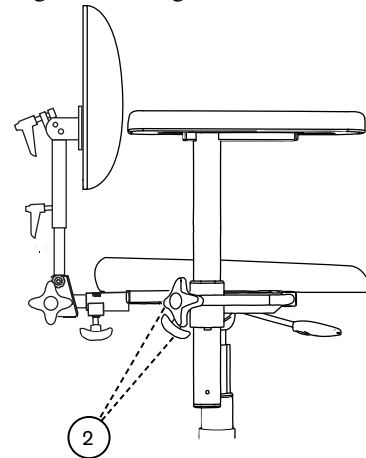


Ryggmekanisme

Monter ryggmekanismen ved å føre ryggstolpen ned på ryggsokkelen (3) til ønsket nivå. Stram deretter alle reguleringsanordningene (4).

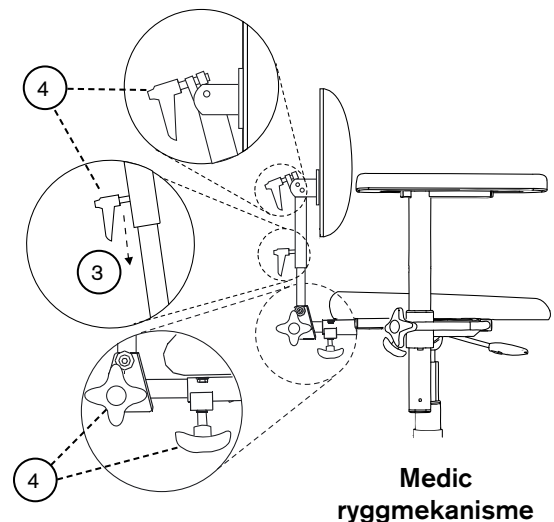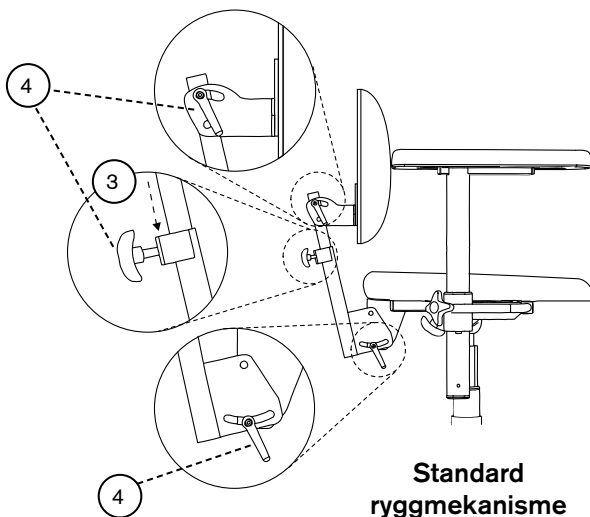

Hodestøtte

Hvis stolen kommer med hodestøtte, fører du hodestøttemekanismen ned i festet på ryggen iht. illustrasjonen. Stram deretter alle reguleringsanordningene (5).

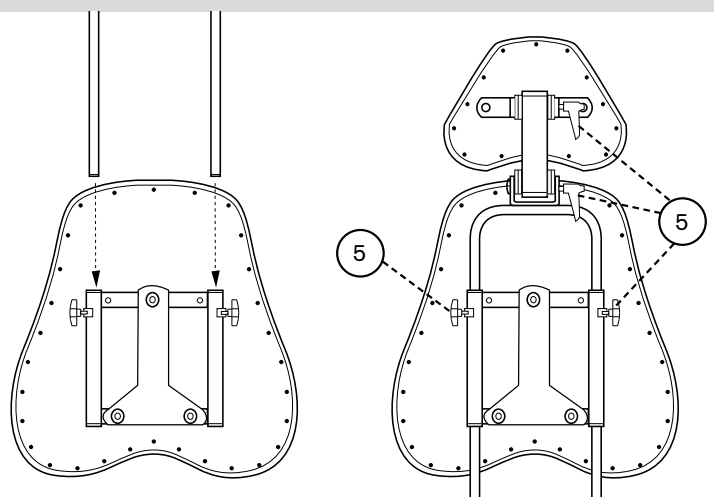

Stolen er nå klar til bruk!! >>

KONTROLLPUNKTER FØR BRUK

1. Juster opp armlenet i egnet høyde og lås rattet til høydereguleringen.
2. Monter ryggstolpen i riktig feste og lås rattet til høydejustering av ryggstøtten.
3. Monter bremsespaken i riktig feste (høyre eller venstre side). Gjelder ikke el-brems.
4. Alle ratt og hendler skal være strammet før man setter seg i stolen.
5. Bremsen må alltid være på når man setter seg på eller reiser seg fra stolen. Bremsen må kontrolleres regelmessig.
6. Lad stolen iht. vedlagte instruksjoner før første gangs bruk (gjelder el-stol). Se side 11. **OBS: Lading bør skje daglig.**
7. Stolen må ikke brukes hvis ryggen og/eller armlenene ikke er montert.

VIKTIG INFORMASJON OG KLASSE

REAL-stolen har utskiftbare deler, tilbehør og funksjoner med innstillingsmuligheter slik at stolen kan tilpasses individuelt. Stolen skal bare brukes av den personen og til det formålet den er beregnet. Stolen er ment for innendørs bruk og må ikke brukes utendørs. Stolen må ikke utsettes for sterk kulde, høy varme, langvarig sollys eller annen stråling. Stolen må heller ikke utsettes for vann, andre væsker eller kjemikalier. Advarsel! Metallflater kan bli svært varme hvis de har vært utsatt for sollys. Stolen må ikke utstyres med annet tilbehør eller deler enn det som er godkjent av Mercado Medic AB. For at CE-merkingen skal opprettholdes må det ikke utføres tilpasninger eller endringer uten godkjenning av Mercado Medic AB. Reparasjoner og andre tekniske inngrep må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før stolen tas i bruk

- REAL PLUS EL tilhører beskyttelsesklasse II, Internt batteri.
- REAL PLUS EL tilhører beskyttelsestype B.
- REAL PLUS EL er EMC-testet og godkjent iht. EN 60601-1-1 og EN 60601-1-2 og må derfor håndteres iht. bruks- og vedlikeholdsanvisningen vår.
- Du kan laste ned EMC-vedlegg fra <http://www.mercado.se/pdf/swe/3/emc.pdf>
- REAL PLUS EL oppfyller IP 21. IP2x innebærer berøringsbeskyttelse for fingre m.m. Man kan ikke berøre farlige deler med fingrene eller lignende. IPx1 innebærer vertikal dryppbeskyttelse, lett dusj ovenfra.
- REAL PLUS EL har en elektrisk løftesøyle som løfter pasienten så høyt at det i verste fall medfører en risiko. Hvis pasienten ikke klarer å komme seg ut av stolen fra høyeste innstilling, må sittehøyden aldri være høyere enn at føttene når gulvet. Unntak tillates dersom pasienten kan få hjelp via trygghetsalarm eller telefon.
- Om Real Plus EL er utstyrt med benstøtter skal brukerens føtter holdes på fotplaten ved buk av el.funksjoner.
- OBS! De elektriske funksjonene på REAL PLUS EL-stolene må brukes maks. 10 % av tiden (maks. 2 min per 20 min). Elektronikken måler aktivitet og slår av de elektriske funksjonene hvis denne grensen overskrides.
- Bare elektrisk utstyr fra Mercado Medic AB må brukes på REAL PLUS EL.
- Advarsel! Ikke koble til noe annet enn tilbehøret som er tilpasset av Mercado Medic AB, i styresystemets kontakter.
- Stolen må flyttes med forsiktighet. Før stolen flyttes, må man sjekke omgivelsene. Hvis det er husdyr eller barn på gulvet, kan de lett bli påkjørt. Stolen må bare brukes til å sitte i og ikke ses som en leke for barn eller voksne.
- Mercado Medics armlener, seter, ryggstøtter m.m. er utviklet og produsert slik at de skal være fri for giftige og allergifremkallende stoffer.
- REAL PLUS EL er godkjent for å transporteres/oppbevares i -25 °C til +60 °C og opptil 90 % ikke-kondenserende relativ luftfuktighet.
- Maks. vekt på bruker, voksen: REAL PLUS 150 kg. REAL PLUS EL 150 kg. REAL 9200 160 kg, REAL 9200 EL 275 kg.
- Maks. vekt på bruker, barn: REAL PLUS 75 kg. REAL PLUS EL 75 kg.
- REAL 9x00 PLUS er godkjent til å stå bremset i opptil 5° helning i alle retninger. Hvis stolen står bremset i kraftigere helning, kan den begynne å skli.
- Stolen må transporteres på pall i emballasje som er beregnet til det. Hvis stolen transporteres i bil, må den spennes fast med strammebånd både i understell og sete samt være innstilt på lavest mulige sittehøyde.
- Stolen er testet og godkjent for bruk i mellom +5 og +40 °C samt 15–90 % ikke-kondenserende luftfuktighet. Hvis stolen oppbevares i et miljø utenfor disse grensene, må den akklimatiseres før bruk for å sikre at den kan brukes på en sikker måte.
- Reparasjoner og andre tekniske inngrep må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB.
- Maks. høyde 2000 moh.
- REAL Plus leveres som standard med sete, rygg og armlener samt håndkontroll for stoler med elektrisk funksjon.
- REAL PLUS må ikke flyttes når sittehøyden er i hevet stilling.
- Garantitid to (2) år med mindre annet er avtalt. Ved garantirelaterte saker må du kontakte Sunrise Medical.
- Maks. levetid ti (10) år.
- REAL PLUS kan kompletteres med en rekke forskjellig tilbehør. Alt tilbehøret må monteres slik at det ikke er mulighet for at små deler, f.eks. sikringer, kan løsne. Alle ledninger må sikres med strips for å redusere fare for kvelning.

FORVENTET LEVETID

Produktet har en forventet levetid på 10 år når det brukes i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen. Du finner produktets produksjonsdato sammen med serienummeret på en av de sølvfargede etikettene på produktets understell, merket med Lev/Del og oppgitt i formatet ÅÅUU (år og ukenummer).

Som bruker av produktet skal du kontakte foreskriveren, hjelpemiddelsentralen eller distributøren hvis produktets ytelse blir svekket eller endret.

Etter forventet levetid er det viktig at det foretas en helhetsvurdering av produktet før videre bruk. Etter forventet levetid kan ikke Mercado Medic AB garantere at produktet er egnet og sikkerhet, ettersom Mercado Medic AB ikke har kontroll over hvordan produktet har blitt brukt og slitt. Helhetsvurderingen

av produktet skal utføres av helseorganisasjonen som har foreskrevet produktet, og skal minst ta i betraktning hvordan produktet har blitt brukt, hvilken tilstand produktet og komponentene er i, om produktet har blitt reparert og vedlikeholdt, når dette er gjort, hva som er utbedret i disse tilfellene og årsaken til utbedringene.

På markedene utenfor Sverige og Norge hvor produktet selges direkte til brukeren av distributøren, der dette er aktuelt, og det derfor ikke finnes en ansvarlig forskriver, skal periodisk vedlikehold utføres i henhold til instruksjonene i avsnitt Overhaling og service i tillegg til helhetsvurderingen ovenfor.

Etter forventet levetid kan ikke Mercado Medic AB garantere at det er mulig å levere reservedeler. CE-merkingen påvirkes ikke av forventet levetid.

RENGJØRING OG OMSORG

- Stolen bør tørkes av og holdes ren for støv og smuss.
- Stolen må vaskes med et desinfeksjonsmiddel med PH 7-12 (Konsentrat) med unntak av stopping.
- Plysjtrekk vaskes med skumvask:
 1. Fjern løst smuss, smuler og lignende.
 2. Påfør et tynt lag med skum og gni skummet jevnt inn med en fuktig klut.
 3. Tørk etter med en ren og lett fuktet klut.
 4. Støvsug godt når alt har tørket.
- Kunstskinn vaskes med såpevann eller tørkes av med en spritløsning, f.eks. desinfiseringsmiddel.
- Skinntrekk krever litt ekstra vedlikehold:
 - Søl tørkes straks av med en fuktig klut. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler.
 - Unngå at trekket kommer i kontakt med kroppspfleieprodukter som sminke, hårgelé m.m. – Ikke la husdyr være på skinnmøbler, da klørne kan ripe opp skinnet.
 - Unngå direkte og langvarig sollys, da det på sikt kan bleke skinnet.
- Sete, ryggstøtte og andre polstrede detaljer er av funksjonelle årsaker ikke produsert av tett materiale. Ved vedlikehold bør stoppede detaljer byttes ut av hygieniske årsaker.
- Den elektriske løftesøylen må kontrolleres regelmessig med tanke på støv, smuss og stabilitet: Sett setet i høyeste stilling. Tørk av med en klut. Vann eller løsemidler må ikke brukes. Smør deretter sylindren inn med et tynt lag med teflon- eller silikonbasert smørefett.
- Brukeren / brukerens assistent må tørke støv av, vaske og rengjøre de polstrede detaljene, iht. ovenstående instruksjoner, på sin egen stol etter beste evne og behov. Hvis dette ikke utføres tilfredsstillende, kreves det vedlikehold for å sikre hygienisk trygghet.

DESTRUERINGSANVISNINGER

Brennbart:

- Sete
- Rygg
- Armlener
- Hodestøtte
- Bol- og sidestøtte






Elektronisk avfall:


- Motorer
- Ledninger
- Styresystem







Metall:

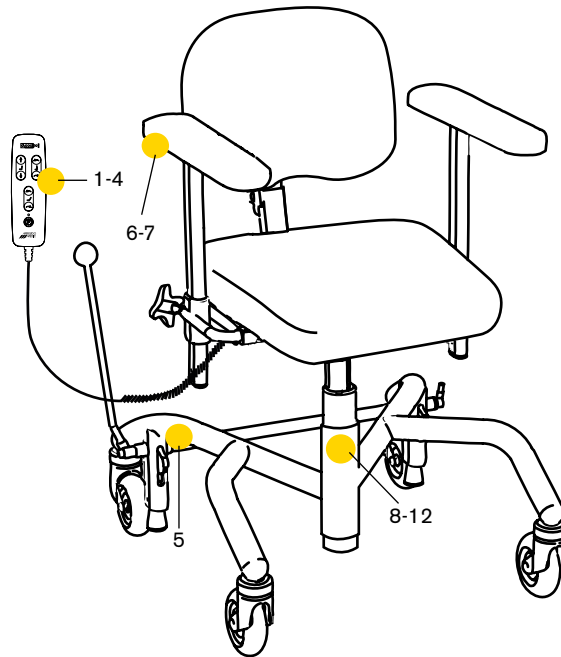- Understell
- Elektriske løftesøyler
- Gassdempere
- Gassfjærer
- Sittekryss
- Ryggsøyle
- Breddebøyler og armlenemekanisme

OBS! Batteriet må sorteres separat.

-  1. Setehøyde opp/ned.
-  2. Setevinkel frem/tilbake
-  3. Ryggvinkel frem/tilbake
-  4. Aktivere/slippe brems.
-  5. Klemfare. Fare er merket.



- 6. Advarsel! Les manualen før bruk.
- 7. Ladekontakt 
- 8. Kildesorteres. 24VDC 
- 9. Produktet er del av en gjenvinningsprosess. 
- 10. Produktet er klassifisert som en anvendt del av type B iht. IEC 60601-1. 
- 11. Maks. brukervekt 
- 12. Bruk tid for elektriske funksjoner 

INTERMITTENS
2/20 MIN
DUTY CYCLE

OVERHALING OG SERVICE

! Viktig informasjon ved overhaling og service av REAL 9x00 PLUS (heretter kalt produktet)

- Det kreves ikke periodisk vedlikehold av produktet i tilfeller der det har en ansvarlig forskriver innen helsesektoren. På markedene utenfor Sverige og Norge hvor produktet selges direkte til brukeren av distributøren, der dette er aktuelt, og det derfor ikke finnes en ansvarlig forskriver, skal periodisk vedlikehold utføres annethvert år gjennom hele livssyklusen til produktet i henhold til punktene 1–10 i dette avsnittet.
- I forbindelse med service og overhaling skal det gjennomføres en grundig visuell kontroll av produktets hovedkomponenter for å ivareta brukerens sikkerhet. Dette inkluderer stativ, lift, sittekryss, ryggsokkel samt breddejusteringsbuer til armlener. Kontrollen skal omfatte sveiseskjøter, låsbare funksjoner og innstillinger.
- Det er forbudt for brukeren å sitte i produktet under overhaling, service eller vedlikeholdsarbeid.
- Produktet må ikke rengjøres med høytrykksspyler.
- Ved kontroll av stativet skal sveisen mellom stativets forbein og bakbein kontrolleres. Hvis det avdekkes tegn på sprekker i materialet eller endringer i fargen her, må stativet eller produktet byttes.
- Hvis produktets brems ikke fungerer tilfredsstillende, bør du kontrollere bremseføttene og stativets balanse. Hvis produktet ikke står på alle fire hjul når bremsen ikke er aktivert, må produktet umiddelbart tas ut av drift. Kontroller ubalansen flere steder og i flere retninger for å utelukke at den skyldes underlaget.

1. Elektronikkenhet

- 1.1. Elektronikk / funksjon / rengjøring.

Kontroller elektronikken og se hvilke elektriske funksjoner som er slått på. Test elektriske funksjoner. Om ikke stolen fungerer, kan du prøve å koble til laderen i minst 10 sekunder. Kontroller skader på elektronikkboksen.

- 1.2. Styreboks / funksjoner / rengjøring

Kontroller styreboksens funksjoner, sørg for at boksen er hel og at alle knappene fungerer. Tørk av knappene med en lett fuktet klut med desinfiserende middel, for å unngå videreføring av smitte. Ikke bruk løsemidler, blekemiddel, poleringsmidler, syntetiske vaskemiddel eller spray på stolen.

- 1.3. Kontakt; innfesting

Forsikre deg om at kabler og kontakter er intakte og ordentlig festet. Forsikre deg om at det ikke er fare for klemming av kabler og kontakter.

- 1.4. Batterier / batterilader / funksjon

Sjekk at laderen fungerer og ikke har skader på batteriboksen eller kablene. Mål batteriene og sjekk at det ikke er for stor forskjell mellom ladingen på batteriene, det indikerer at en celle i batterieter defekt.

- 1.5. El-tilt / funksjon

Sjekk at el-motoren ikke har synlige skader. Kontroller funksjonen i el-motorens bevegelige deler. Forsikre deg om at alle låseskruer er strammet slik at det ikke er glippe i sluttposisjonen.

- 1.6. Elektrisk rygg / funksjon

Sjekk at el-motoren ikke har synlige skader. Kontroller funksjonen i el-motorens bevegelige deler. Forsikre deg om at alle låseskruer er strammet slik at det ikke er glippe i sluttposisjonen.

- 1.7. Elektrisk brems / funksjon

Sjekk at el-motoren ikke har synlige skader. Kontroller bremsemekanismen. Forsikre deg om at alle låseskruer er strammet slik at det ikke er glippe i sluttposisjonen.

Sjekk alle skjøter og at klemmebraketten på bremseakselen og understellsrørene sitter ordentlig.

Listen fortsetter på neste side >>

2. Seteløft 2.1. Støy / el-motor for seteløft

Lytt etter støy i den elektriske motoren, bytt el-motor for seteløft dersom den er i stand. Den elektriske motoren kan sendes til Mercado Medic AB for reparasjon / reovering.

Belast stolen og pass på at den elektriske løften glir ned i bunnposisjon. Juster ellers slik at glidekoblingen har riktig dreiemoment.

 2.2. Rotasjonslåsing / smøring

Kontroller at el-motoren ikke glipper i rotasjonsretningen. Skift i så fall el-motor for løft.

El-motoren kan sendes til Sunrise Medical/Mercado Medic AB for reparasjon / reovering.

 2.3. Feste / stramme

Forsikre deg om at festet til setekryssene og understellet er stramt.

 2.4. Kabling / slitasje

Kontroller for kabelslitasje og klemmeskader.

3. Understell 3.1. sveiser

Kontroller nøye alle sveiser for tegn på sprekker, korrosjon, bevegelse osv.

 3.2. Skruerforbindelser

Kontroller og stram alle skruerforbindelser, skift ut skruer som har skadet hode eller gjenger.

4. Bremses 4.1. Funksjon / slitasje

Bytt bremseføtter og kontroller at bremsen fungerer som den skal.

 4.2. Plastplugges / foringer

Sørg for at foringshylser og plastplugges sitter på plass, skift ut slitte eller ødelagte deler.

5. Hjul 5.1. Funksjon / rull / sving

Rengjør hjulene for hår og støv, og kontroller hjulene og gaflene for slitasje som kan indikere dårlige lagre. Sjekk at hjulene snurrer og gaflene roterer ordentlig. Skift om nødvendig hjul.

 5.2. Innfesting / etterstramming

Kontroller at hjulenes skruer er intakte og strammet til.

6. Setekryss 6.1. Mekanikk / sveiser

Kontroller nøye alle sveisede deler (spesielt ved innfesting av tiltmotor, da disse delene får mest belastning

 6.2. Skrudde forbindelser / etterstramming

Kontroller og stram alle skrudde forbindelser, skift ut skruer som har skadet hode eller gjenger.

 6.3. Plastplugges / foringer

Sørg for at foringshylser og plastplugges sitter på plass, skift ut slitte eller ødelagte deler.

 6.4. Setepute / bytte / rengjøring

Bytt seteputen med en ny og vask eller bytt eventuelle trekk.

 6.5. Betjening / smøring

Forsikre deg om at ratt og grep til setekrysses fungerer og låser ordentlig.

 6.6. Manuell tilt / funksjon

Dersom stolen er utstyrt med gassfjærregulert tilt, må du sørge for at den låser ordentlig og ikke langsomt tilter ved belastning. Kontroller og bytt ut ødelagte vaiere og strømper.

 6.7. Tiltregulering med ratt/ slitasje

Hvis stolen er utstyrt med ratt for tiltregulering, må du kontrollere at den ikke glipper og at alle skruer er strammet.

 6.8. Coxitmekanikk / betjening

Kontroller at rattene til klaffene beveger seg lett og er låst ordentlig med låsemutteren.

7. Ryggmekanisme 7.1. Funksjon / slitasje

Kontroller og bytt ut slitte deler, kontroller at bevegelige deler fungerer.

 7.2. Feste / stramme

Kontroller at alle skruer, knotter og knotter låses ordentlig, sørg for at snaplås fungerer.

 7.3. Plastplugges / foringshylser

Sørg for at foringshylser og plastplugges sitter på plass, skift ut slitte eller ødelagte deler.

 7.4. Ryggpute / utskifting / rengjøring

Bytt ut ryggpute med en ny og vask eller bytt eventuelle deksler

 7.5. Kontroll / funksjon av gassfjær

Kontroller gasstrykket og stabiliteten til gassfjæren, at den låses ordentlig og at ryggen ikke endrer vinkel sakte ved belastning. Kontroller og bytt ut ødelagte vaiere og strømper.

8. Armlener 8.1. Funksjon / slitasje

Kontroller og skift ut alle slitte deler, sørg for at låsing og funksjon i bevegelige deler fungerer bra.

 8.2. Plastplugges / foringer

Sørg for at foringshylser og plastplugges sitter på plass, skift ut slitte eller ødelagte deler.

 8.3. Armlenepads / erstatning / rengjøring

Bytt ut armlenepads med nye.

 8.4. Armlenemekanikk / funksjon

Kontroller alle sveiser og at det ikke er skader på rørsystemet som kan forringe eller svekke strukturen.

9. Tilbehør 9.1. Tilbakestilling

Fjern tilbehøret som normalt ikke skal sitte på stolen og sjekk dem som nedenfor før det eventuelt kan settes tilbake på lager.

 9.2. Mekanikk

Kontroller alle sveiser og at det ikke er skader på mekanikken som kan forringe eller svekke konstruksjonen.

 9.3. Funksjon / slitasje

Kontroller og skift ut alle slitte deler, sørg for at låsing og funksjon i bevegelige deler fungerer bra.

 9.4. Polstrede deler

Kast polstrede deler for å forhindre spredning av forurensning, kast eller vask deksler i henhold til merking av vasketråd.

10. Sluttkontroll 10.1. Prøvekjøring

Testkjør stolens funksjoner og kontroller at alle funksjoner, elektriske funksjoner og bremses fungerer som de skal. Hvis stolen skal oppbevares, bør stolen settes i dvale med den tilhørende 9V-adapteren for å spare på batterier

Tilpassing må kun utføres av personale som har gjennomgått Mercado Medic ABs opplæring for service og rekondisjonering. Artikler som er oppført på listen over gjeldende kombinasjonsavtaler på www.mercado.se/mercado-dokument kan monteres med opprettholdt CE-merking fra Mercado Medic AB. Hvis en artikkel som ikke er oppført på listen over gjeldende kombinasjonsavtaler skal monteres, må kundeautorisert personale kontakte Mercado Medic AB for skriftlig godkjenning.

Artikkelen som skal vurderes, må sendes fysisk til Mercado Medic AB enten av kunden eller leverandøren av artikkelen det gjelder. Mercado Medic AB kontakter deretter leverandøren av den aktuelle artikkelen hvis en kombinasjonsavtale er aktuelt, utfører Mercado Medic AB en risikoanalyse på ønsket artikkel. Når risikoanalysen er utført, mottar kunden en skriftlig erklæring.

Stoler som har gjennomgått endringer som beskrevet nedenfor, skal verifiseres av Mercado Medic AB for at Mercado Medic AB skal opprettholde produktansvaret.

- Polstrede detaljer, slik som seter, ryggstøtter, armlener, sidestøtter, overkroppsstøtter og nakkestøtter kan tilpasses så lenge produktets eksterne justeringsmålingene ikke overskrides.
- Tyngdepunktet over heisene skal opprettholdes/sentres for best mulig funksjon.
- Polstrede detaljer må oppfylle gjeldende brennbarhetskrav og andre miljøkrav.
- Overflater som belastes med betydelig vertikal kraft må ikke havne utenfor den flaten (basen) som dannes av hjulsenterpunktene.

Hvis disse retningslinjene følges, beholder Mercado Medic AB produktansvaret for sitt produkt.

Produkter som spesialtilpasses av pleier utenfor Mercado Medic ABs direktiv der pleieren også overtar produktansvaret, kan tilbakestilles til originaltilstand. Dette må gjøres av en autorisert tekniker som er godkjent av Mercado Medic AB. Mercado Medic AB får da igjen produktansvaret i henhold til CE-merking 93/42 EØF; Forskrift om medisinsk utstyr (MDD).

For spørsmål angående tilpassing/spesialtilpassing, ta kontakt med Ronny Fogelqvist:

Tlf. [0708 27 96 14](tel:0708279614)


E-post ronny.fogelqvist@mercado.se

BREMS


OBS! Bremsen må alltid være på når man setter seg på eller reiser seg fra stolen. Bremsen må kontrolleres regelmessig. Ved slitasje må bremsefoten av gummi byttes. Bremsesfunksjonen kan være nedsatt på ujevnt underlag.

DET FINNES TRE TYPER BREMSER:


Bremsepedal, fotbrems og el-brems.

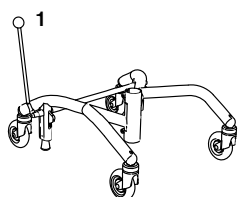


Håndbrems

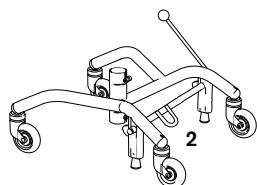


Fotbrems

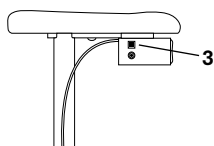

Elektrisk brems i løsboks

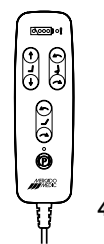

Håndkontroll

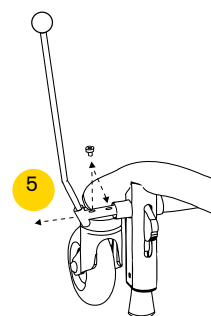

REGULERING


1. Brems, PLUS-understell 48 for spak fremover
2. Brems, PLUS-understell 43 for spak bakover, pedal nedover
3. EL-brems, trykk på knapp
4. EL-brems, trykk på knapp
5. Bremsepedal – Hvis du vil bremse stolen når armlenet er justert ut i bredden, løsner du skruen på bremsepedalmonteringen med en 6 mm unbrakonøkkel, drar ut festet, fester skruen i neste hull og strammer skruen med unbrakonøkkel.

SITTEHØYDE/SETELØFT


DET FINNES TO TYPER SETELØFT:

Gassfjær og elektrisk. Det finnes to løftesøyler for høy og lav setehøyde. Hendelen for regulering med gassfjærer kan plasseres under setet eller armlenet. Elektrisk regulering er som standard montert med håndkontroll.


OBS! Lette personer kan trenge hjelp med å heve og senke den gassfjæringsregulerte seteenheten.

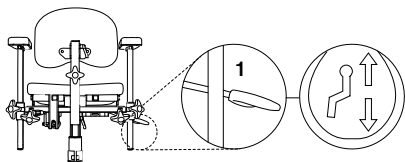


Gassfjærregulering under setet

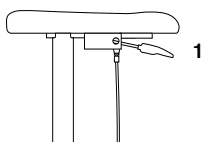

Gassfjærregulering under armlenet

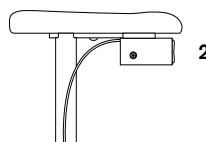

Elektrisk regulering under armlene

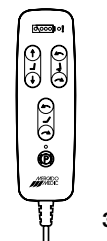

Håndkontroll

REGULERING

1. Setehøyde. Gassfjær – beveg hendelen oppover.
2. Setehøyde. EL - for regulering opp/ned
3. Setehøyde. EL - regulering med håndkontroll.

TILT

DET FINNES TRE TYPER TILT:


Regulering med ratt, gassfjær eller elektrisk.

Gassfjærreguleringen kan plasseres ved setets venstre bakkant eller under armlenet. Elektrisk regulering er som standard montert under armlenet.


Standard på intervallet på setetiltet er +15°/-8°.

REGULERING


1. Tilt. Rattregulering
2. Tilt. Gassfjær - for regulering bakover
3. Tilt. Gassfjær - for regulering framover
4. Tilt. Elektrisk for regulering bakover/framover
5. Tilt. Elektrisk – regulering i løsboks.
Venstre knapp = framover.
Høyre knapp = bakover.

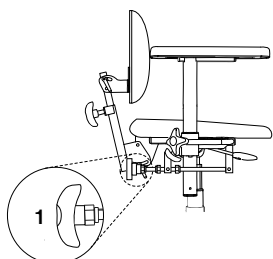


Rattregulering

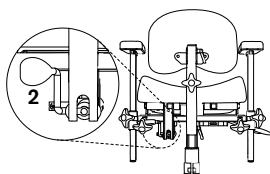


Gassfjæringsregulering under setet

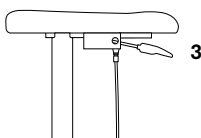

Gassfjærregulering under armlene

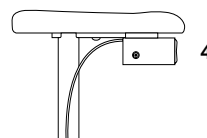


Elektrisk regulering

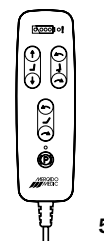

Håndkontroll

VALG AV ULIKE TILTUTSLAG - ALLVINKELKRYSS (TILBEHØR)

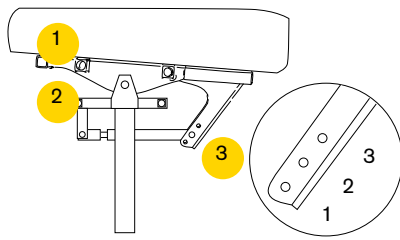

REGULERING

1. Armlener som er plassert posisjon 1, følger setet ved tilting.
2. Armlener som er plassert i posisjon 2, følger ikke setet ved tilting.
3. Man kan velge mellom tre tiltutslag:
 1. Framover 15°, bakover 8°
 2. Framover 8°, bakover 15°
 3. Framover 0°, bakover 23°

Ved valg av posisjon 3 må stolen utstyres med understellsforlenger

RYGGMEKANISME

DET FINNES FIRE TYPER RYGGMEKANISMER:


Standard, Medic, Comfort og EL.

Alle finnes i lav og høy utførelse (alle stolene på illustrasjonene har lav rygg). Alle ryggmekanismer har separat regulering for høyde, dybde og vinkel. Medic- modellen har økt dybdeinnstilling.

REGULERING

1. Høyde
2. Vinkel på ryggmekanisme
3. Vinkel på ryggplate
4. Dybde
5. Ryggvinkel Elektrisk – regulering i løs boks.

OBS! Sikre at Medic-ryggmekanismen justeres inn i festet slik at snaplåsen låser i festet under setet og ikke kan løsne.

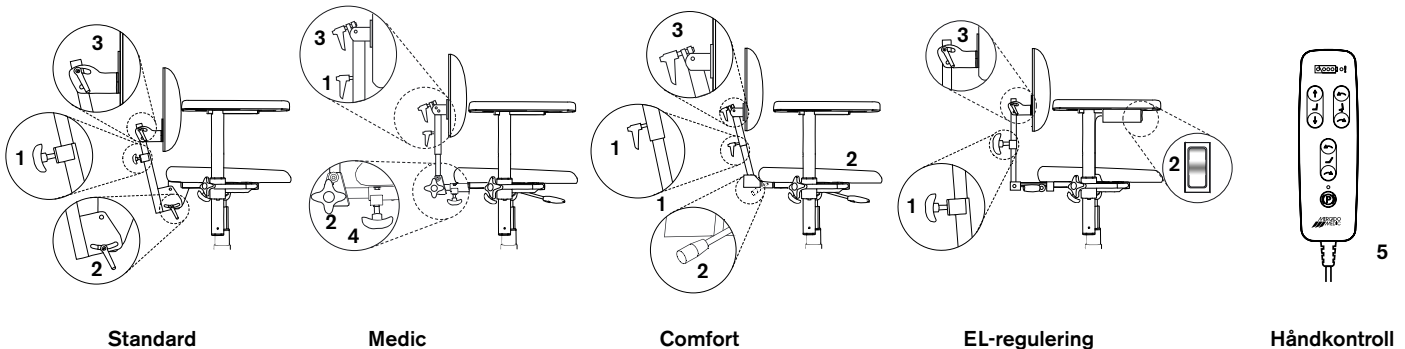

Standard

Medic

Comfort


EL-regulering

Håndkontroll

ARMLENER

REGULERING

1. Høyderegulering
2. Bredderegulering
3. Nedfelling

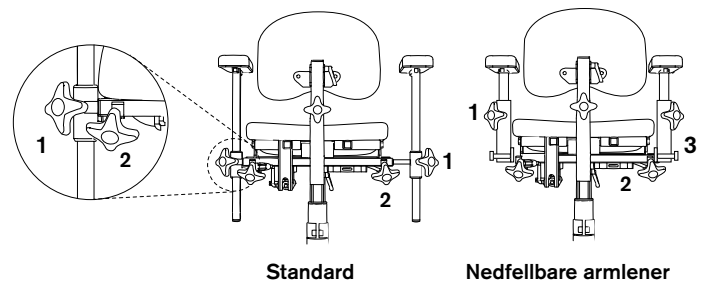


Standard

Nedfellbare armlener

INNSTILLING AV COXIT-KLAFFER

REAL PLUS COXIT / ELEKTRISK

Det er to varianter av hvordan coxit-klaffene kan reguleres. På stol uten setevinkling sitter reguleringen under setets fremkant. På stol med setevinkling sitter reguleringen under setets bakkant.

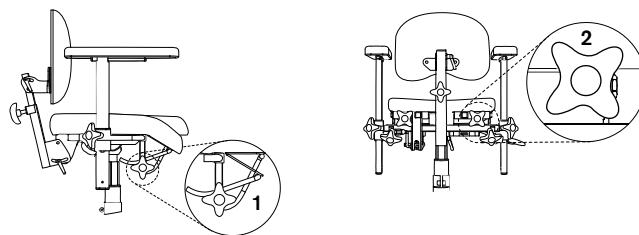

REGULERING


1. Løsne, still inn ønsket vinkel og stram.
2. Vri rattet for å senke/heve klaffen.

ROTASJONSUTLØSER (TILBEHØR)

OBS! Rotasjonen må være i låst stilling når man setter og reiser seg. Kontroller at sperren har klikket i.

REGULERING

1. Skru rattet med klokken for å løsne og mot klokken for å låse.

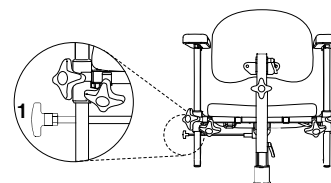

LADING

Batterilader real 9000 Type 2240–24 V med art.nr. 804428 må brukes ved lading av stolen. Ettersom stolen EMK-testes som en enhet sammen med laderen, er det behov for ekstra tester dersom man ønsker å bruke en annen lader. Ved bruk av en annen lader eller andre batterier enn de som leveres av Mercado Medic AB sammen med produktet som er CE-godkjent er Mercado Medic AB's produktansvar ikke lengre gyldig for batteri, lading og øvrig elektronikk på stolen.

Lading av batteriet bør skje regelmessig, om mulig en gang i døgnet på dagtid. Å lade batteriet fullt ved daglig lading vil ta 2-6 timer. Det er viktig for batteriets levetid at det aldri blir helt utladet. Ved lengre tids oppbevaring bør batteriet kobles helt ut. Se "Bytte av batteri" i monteringsanvisningen.

Hvis stolen er utstyrt med håndkontroll kan batterinivå avleses på indikatorlampene. (1)

På en lading kan du med høy aktuator kjøre fulle opp-ned-repetisjoner ca. 120 ganger med 80 kg last, eller ca. 90 ganger med 150 kg last.

SLIK LADER DU STOLEN

Sett kontaktpluggen (2) på laderen til ladeuttaket (3) (ladeuttaket kan være plassert under stolens sete eller armlene). Koble ladestøpset på laderen til ladekontakten. Koble deretter kontakten på laderen til et vegguttak. Lysdioden på laderen indikerer at ladingen pågår. Når lysdioden endrer farge fra oransje til grønt, er batteriet ferdig ladet. Ingen elektriske funksjoner fungerer mens stolen lades. Lading av stolen må skje på et trygt sted. Velg derfor et vegguttak som er lett tilgjengelig å koble laderen til. Ladeledningen er 1,8 meter og må ikke forlenges. I nødssituasjoner må du koble stolen fra strømmettet ved å trekke ut ledningen fra vegguttaket. Det er forbudt å sitte i stolen mens ladingen pågår.

INN OG UTKOBLING AV BATTERI

Ved lengre tids lagring kobles batteriet automatisk ut etter 7 dager. Batteriet kan også tvinges til å være koblet ut ved å koble en 9V strømforsyning (varenr. 804823) til ladekontakten og vente i minst 5 sekunder før du kobler fra strømforsyningen. Hvis du bruker håndkontroll, vil alle indikatorlysene blinke når batteriet er frakoblet og strømforsyningen kan kobles fra. Når batteriet er frakoblet, må batteriet lades hver fjerde måned for å opprettholde sin funksjon. Ved å følge disse ladeinstruksjonene vil batteriet ha tilstrekkelig kapasitet i 4 år. For å koble batteriet til systemet på nytt, kobler du batteriladeren til ladekontakten og stikkkontakten. Vent minst 5 sekunder før du kobler fra batteriladeren. Nå er batteriet koblet til, og systemet er klart til bruk. Det anbefales å la laderen være på og lade batteriet helt etter at produktet har blitt lagret med batteriet i frakoblet stilling.

LADING

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Produktet leveres av Mercado Medic AB med batteriet avkoblet. Før første bruk må batteriet være koblet til systemet. Dette gjøres ved å koble batteriladeren til laderuttaket og stikkontakten. Hold batteriladeren tilkoblet til batteriet er fulladet. Dette vises med grønt lys på laderens LED. Hvis en håndkontroll brukes, vises dette også ved at de tre grønne batteriledlysene på håndkontrollen blinker synkront. Selv når batteriet er koblet fra, kan det hende at batteriet må lades opp, da det alltid er noe selvutlading i et batteri.

OBS!

Lading av batteriet er spesielt viktig på de stolene som har elektrisk brems, el-tilt og el-rygg, da funksjonen krever høyere batterikapasitet for ikke å tape funksjonen. Sikre funksjonene ved å lade batteriet en gang i døgnet. Bytte av batteri må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB. Se "Bytte av batteri" i monteringsanvisningen.

FEILSØKING FOR ELEKTRISKE FUNKSJONER PÅ DIN STOL

Funksjonene går overhode ikke:

- Det kan hende at batteriet må lades opp. Se instruksjonene ovenfor.
- Arbeidssyklusen kan ha blitt overskredet. Hvis bruken av de elektriske funksjonene nærmer seg grenseverdien, begynner varsellampen på kontrolleren å blinke (! Symbol). Hvis bruken overskrider grenseverdien, slås de elektriske funksjonene av og kan ikke brukes igjen før systemet har kommet seg. Hvis brukeren trykker på en knapp før systemet har kommet seg, vil varsellampen blinke.
- En intern feil kan ha blitt oppdaget av systemet, som deretter slår av en eller alle funksjonskanaler og varsellampen på kontrolleren lyser. Systemet tilbakestilles automatisk etter 10 sekunder. Hvis feilen er løst, låses alle funksjoner opp igjen, og varsellampen slukker.
- Tastelåsen kan være aktivert. For å aktivere eller deaktivere knappelåsen for en funksjon, trykk og hold begge retningsknappene til gjeldende funksjon i minst 3 sekunder.

Stolens elektriske funksjoner går sakte:

- Batteriet må lades opp. Se instruksjonene ovenfor.


Hvis ingen av de ovennevnte tiltakene løser problemet, kan det være nødvendig med service. Kontakt Sunrise Medical eller Mercado Medic AB. Se kontaktinformasjon på siste side i manualen.

NØDSTOPP

Dersom systemet av en eller annen grunn ikke avbryter en bevegelse når den tilsvarende funksjonsknappen slippes, kan det avbrytes ved å trykke på en av de andre knappene på kontrolleren. Hvis det brukes en fast montert kontrollboks i stedet for manuell styring, oppnås den samme nødstoppfunksjonen ved å trykke på kontrollknappen for bevegelse i en annen retning.

Indikatorlamper

- A. Lading er nødvendig
- B. Batterinivå
- C. Varsellampe
(intern feil/knapplås)

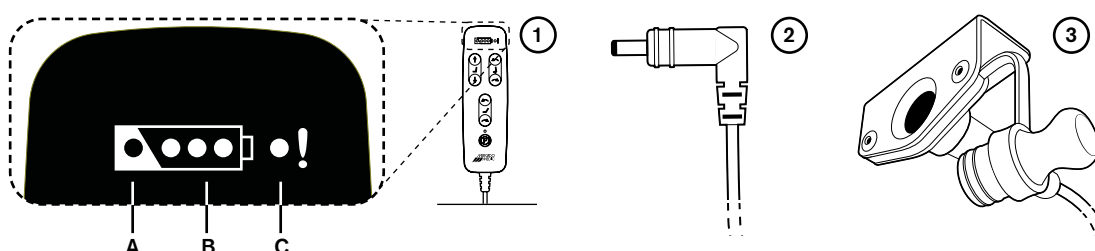

FORHANDLER I NORGE



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 VESTBY

T: 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no

[Plats för produktetikett med serienummer.]



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se