




NL

ACCU VERVANGEN REAL 9000 PLUS 24V

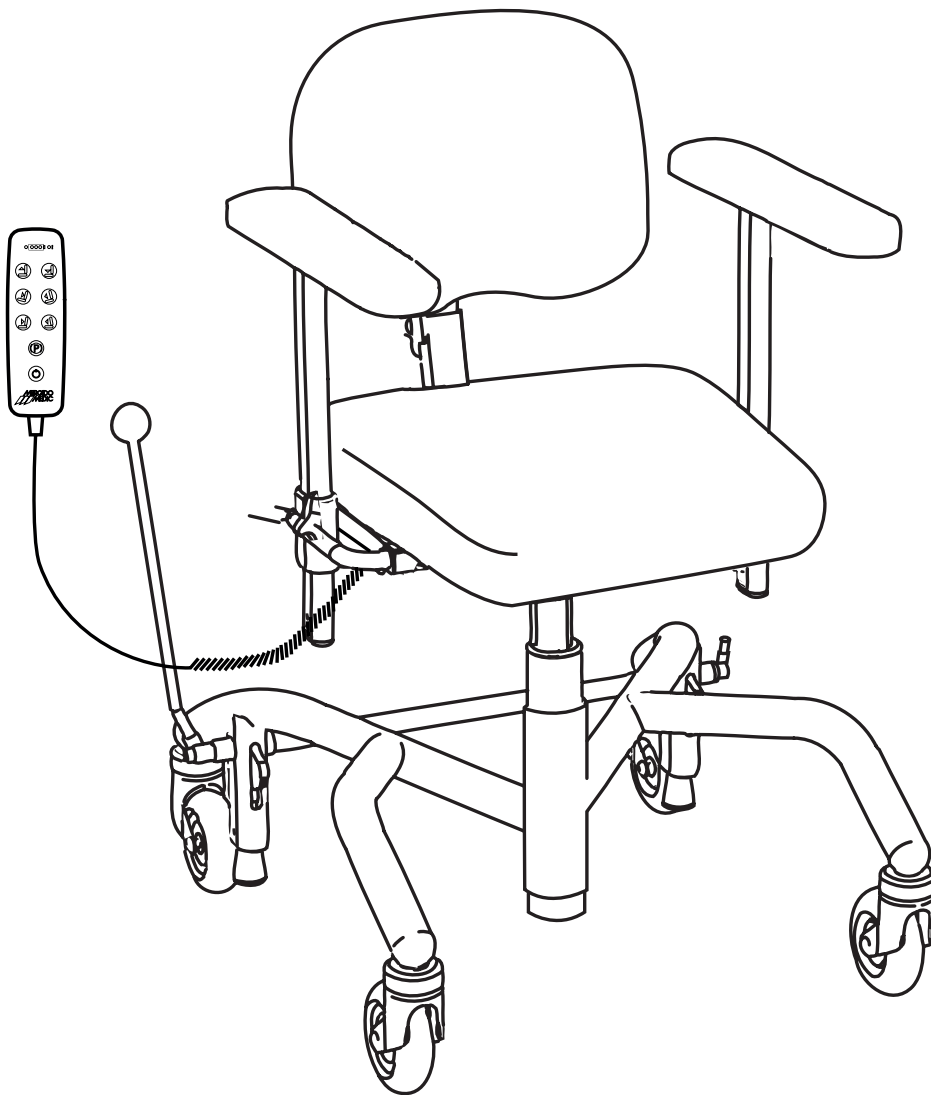

1. Belangrijke informatie

Let op het volgende bij het hanteren van accu's:

- De accu nooit kortsluiten.
- Stel de accu nooit bloot aan krachtige stoten.
- Lever oude accu's altijd in bij een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf.

EHBO

Als de accu defect is en u komt bij de hantering in contact met de inhoud van de accu, elektrolyt (zwavelzuur), geldt het volgende:

Gebeurtenis	Maatregel
Contact met de huid	Afspoelen met water. Reinig met water en zeep. Verwijder en was getroffen kleding.
Inademing van zuurdampen	Adem frisse lucht in. Neem onmiddellijk contact op met een arts!
Contact met ogen	Spoel minstens 15 minuten met stromend water. Neem onmiddellijk contact op met een arts!
Bij inslikken	Drink onmiddellijk veel water, roep geen braken op. Neem onmiddellijk contact op met een arts!

2. Artikeloverzicht

805288 Elektrisch systeem besturingskast 24V RCB10+L

805320 Accupakket 2,6Ah 24V v RCB10+L

3. Benodigd gereedschap

- Torx schroevendraaier (TX15)
- Veiligheidsbril
- Een platbektang of gelijkwaardig kan nodig zijn


4. Montage-instructies

4.1. Voorbereidingen

- Maak de rugleuning los volgens de gebruiksaanwijzing
- Draai de stoel ondersteboven zodat deze op de arMLEUNINGEN rust
- Demonteer de besturingskast volgens de installatie-instructies “Bevestiging besturingssysteem 24V”

4.2. Verwijder de oude accu's


- (A) Draai de schroeven los waarmee de besturingskast dicht zit.
- (B) Open de besturingskast en koppel de plus- en min-kabels los, hierbij kan een platte tang nodig zijn. Verwijder de oude accu's.

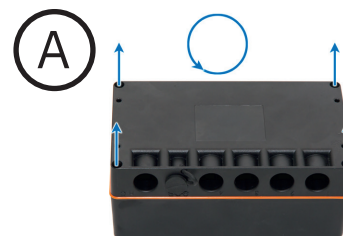

4.3. Plaats nieuwe accu's

- ! Er kunnen vonken ontstaan bij het aansluiten, draag een veiligheidsbril.

Plaats de nieuwe accu's in de besturingskast en bevestig de plus- en min-kabels. Plaats de delen van de besturingskast weer op elkaar en schroef de schroeven terug.

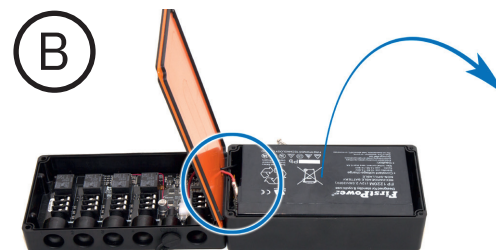

4.4. Eindmontage

- Monteer de besturingskast volgens de installatie-instructies “Bevestiging besturingssysteem 24V”
- Zet de stoel rechtop
- Monteer de rugleuning volgens de gebruiksaanwijzing