


# Bytte av batteri for styresystem 24 V

for REAL® 9000 PLUS

Dok.nr. 20-06597  
Revisjon 02  
Endret 26.05.2021  
Gyldig fra 01.01.2015

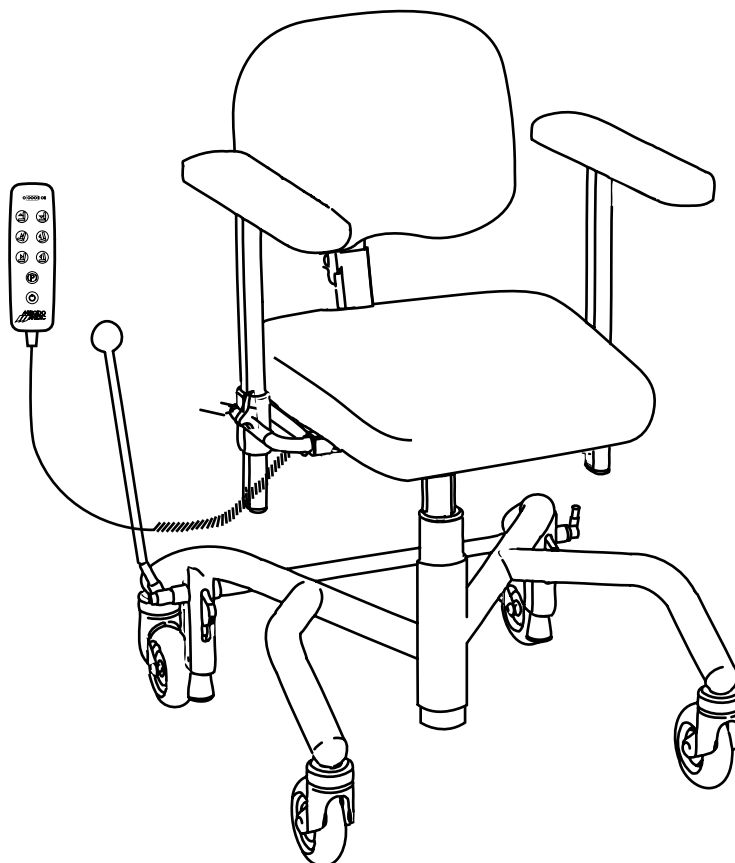

## OBS!

HUSK FØLGENDE NÅR DU HÅNDBTERER BATTERIER:

- Batteriet må ikke kortsluttes.
- Batteriet må ikke utsettes for kraftige støt eller åpen ild.
- Ved kontakt med batterisyre må du skylle med vann i cirka 30 minutter og kontakte lege.
- Brukte batterier må leveres til miljøstasjon.

## AKTUELLE ARTIKLER

805288 Elsystem styreboks 24 V RCB10+L

805320 Batteripakke 2,6 Ah 24 V f RCB10 +L

## UTSTYR/VERKTØY

UTSTYR OG VERKTØY VED BYTTE AV BATTERI:


- Skrutrekker Torx (TX15)
- Vernebriller
- Det kan være nødvendig med en tang eller lignende

## FORBEREDELSE


- Demonter ryggstøtten som beskrevet i bruksanvisningen
- Snu stolen opp ned, slik at den hviler på armleneplatene
- Demonter styreboksen som beskrevet i monteringsanvisningen «Feste for styresystem 24 V»

## BYTTE BATTERI

1. Løsne skruene som holder styreboksen sammen.

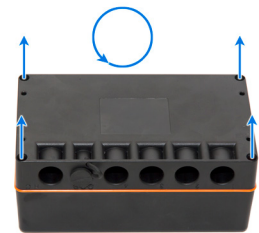

2. Åpen styreboksen og løsne pluss- og minuskablene. **OBS! Det kan hende du trenger en nebbtang til dette trinnet.** Fjern de gamle batteriene.

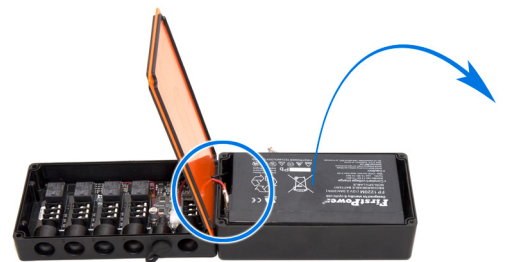

3. Plasser de nye batteriene i styreboksen, og koble fast pluss- og minuskablene. **OBS! Det kan oppstå gnister ved tilkobling, bruk vernebriller.**

4. Lukk styreboksen igjen, og skru inn skruene som holder den sammen.

## SLUTTMONTERING

- Monter styreboksen som beskrevet i monteringsanvisningen «Feste for styresystem 24 V»
- Vri stolen til oppreist posisjon
- Monter ryggstøtten som beskrevet i bruksanvisningen