




FI

AKUN VAIHTO REAL 9000 PLUS 24 V

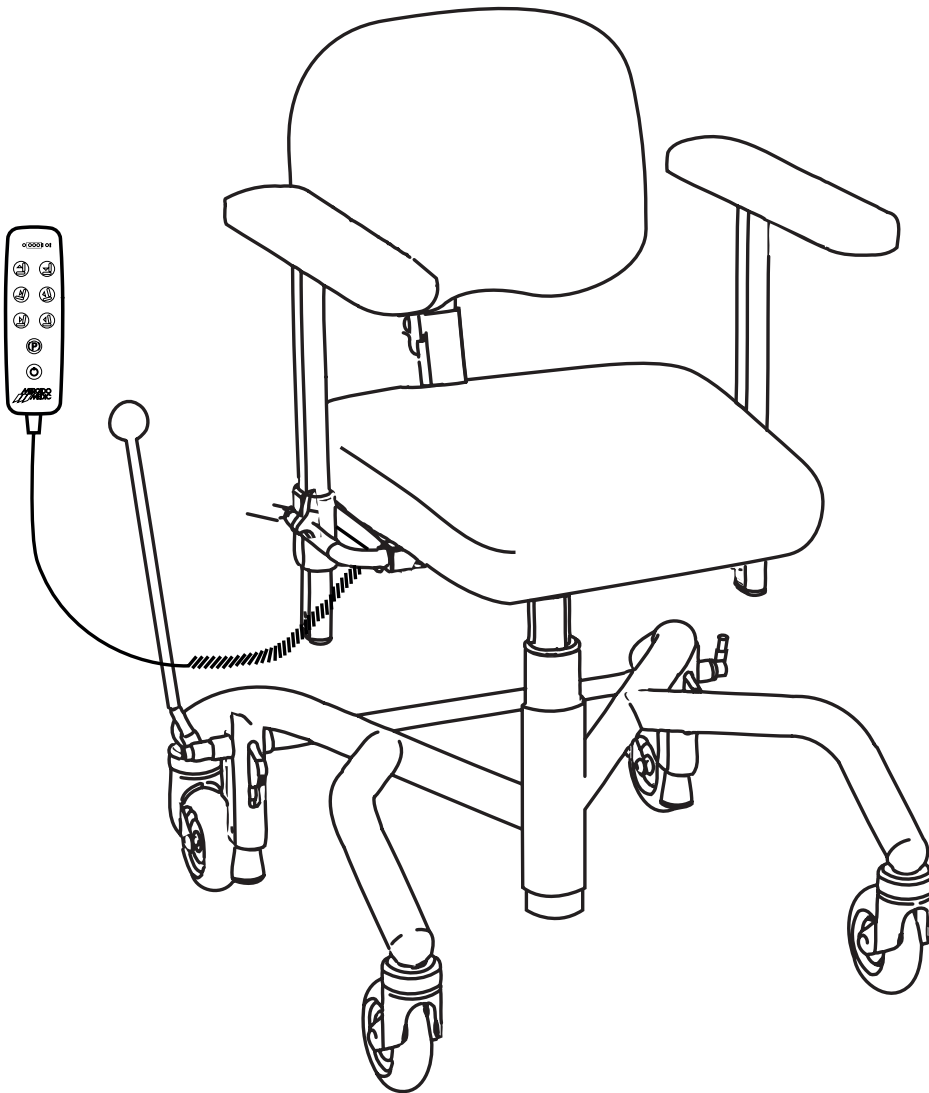

1. Tärkeää tietoa

Muista seuraavat asiat, kun käsittelet akkuja:

- Älä koskaan oikosulje akkua.
- Älä altista akkua voimakkaille iskuille.
- Käytöstä poistetut akut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteisiin.

Ensiapu

Jos akku on viallinen ja sen käsittely altistaa kosketukselle akkuhapon (rikkihapon) kanssa, noudata seuraavia ohjeita:

Tapahtuma	Toimenpide
Ihokosketus	Huuhtelee vedellä. Pese saippualla ja vedellä. Poista ja pese vaatteet.
Happosumun hengittäminen	Hengitä raitista ilmaa. Ota heti yhteys lääkäriin!
Jos ainetta joutuu silmiin	Huuhtelee juoksevalla vedellä vähintään 15 minuuttia. Ota heti yhteys lääkäriin!
Nieleminen	Juo heti runsaasti vettä äläkä yritä oksentaa. Ota heti yhteys lääkäriin!

2. Tuoteluettelo

805288 Sähköjärjestelmän ohjausrasia 24 V RCB10+L

805320 Akku 2,6 Ah 24 V RCB10+L

3. Tarvittavat työkalut

- Torx-taltta (TX15)
- Suojalasit
- Lattapihtejä tai vastaavia voidaan tarvita


4. Asennusohje

4.1. Valmistelut

- Irrota selkänöja käyttöohjeiden mukaisesti.
- Käännä tuoli ylösalaisin niin, että se lepää käsinojalevyjen päällä.
- Irrota ohjausrasia asennusohjeiden "24 V:n ohjausjärjestelmän kiinnike" mukaisesti.

4.2. Poista vanhat akut.


- (A) Löysää ruuveja, jotka pitävät ohjausrasian yhdessä.
- (B) Avaa ohjausrasia ja irrota plus- ja miinuskaapelit. Tässä vaiheessa voidaan tarvita lattapihtejä. Poista vanhat akut.

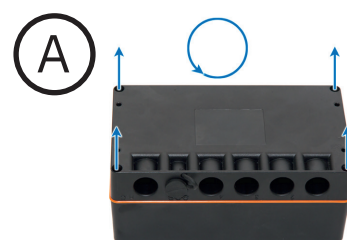

4.3. Aseta uudet akut paikalleen.

! Liittämisen yhteydessä voi syntyä kipinöitä. Käytä suojalaseja.

Aseta uudet akut ohjausrasiaan ja kytke plus- ja miinuskaapelit. Sulje ohjausrasia ja kiristä ruuvit, jotka pitävät sen yhdessä.

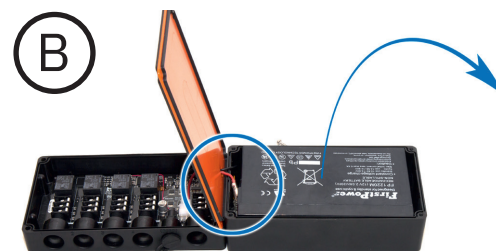

4.4. Lopullinen asennus

- Asenna ohjausrasia asennusohjeiden "24 V:n ohjausjärjestelmän kiinnike" mukaisesti.
- Käännä tuoli pystyasentoon.
- Asenna selkänöja käyttöohjeiden mukaisesti.