




IT

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI REAL 9000 PLUS 24V

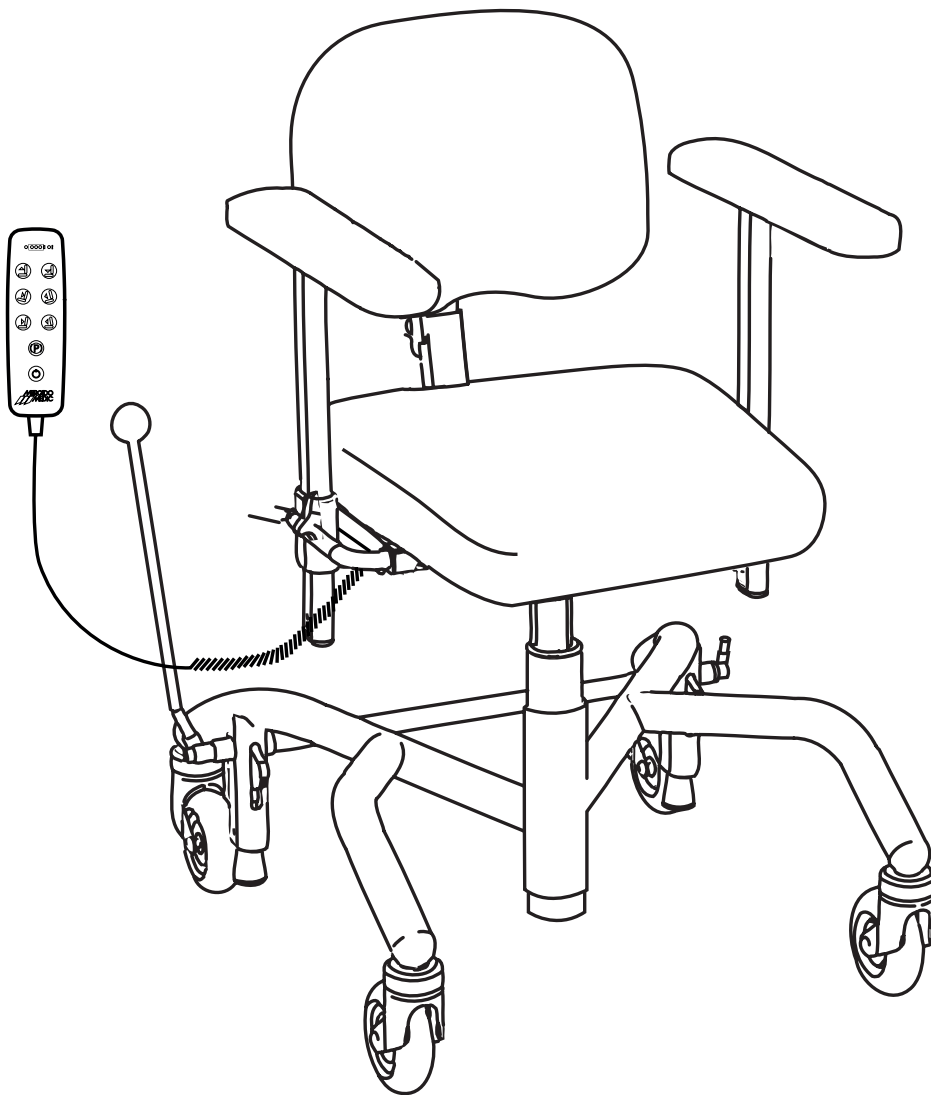

1. Informazioni importanti

Nel maneggiare le batterie, tenere presente quanto segue:

- Non cortocircuitare mai la batteria.
- Non esporre mai la batteria a urti violenti.
- Le batterie esaurite devono essere sempre smaltite presso gli appositi centri di raccolta.

Pronto soccorso

In caso di batteria difettosa e di contatto diretto con l'elettrolita (acido solforico), agire come segue:

Evento	Misura correttiva
Contatto con la pelle	Risciacquare con acqua. Pulire con acqua e sapone. Rimuovere e lavare i vestiti contaminati.
Inalazione di acido nebulizzato	Inspirare aria fresca. Contattare immediatamente il medico!
Contatto con gli occhi	Risciacquare con acqua corrente per almeno 15 minuti. Contattare immediatamente il medico!
Ingestione	Bere immediatamente abbondante acqua, non indurre il vomito. Contattare immediatamente il medico!

2. Elenco articoli

805288 Quadro elettrico impianto 24V RCB10 + L

805320 Pacco batteria 2,6 Ah 24V f RCB10+L

3. Utensili necessari

- Cacciavite Torx (TX15)
- Occhiali di sicurezza
- Potrebbero essere necessarie pinze a punta piatte o utensile equivalente


4. Istruzioni di montaggio

4.1. Preparazione

- Rimuovere lo schienale secondo le istruzioni per l'uso.
- Capovolgere la sedia e poggiarla sui braccioli.
- Smontare il quadro elettrico secondo le istruzioni di montaggio nella sezione "Staffa del quadro elettrico 24V".

4.2. Estrarre le vecchie batterie.


- (A) Allentare le viti di fissaggio del quadro elettrico.
- (B) Aprire il quadro elettrico e scollegare i cavi più e meno; per questa operazione potrebbero essere necessarie delle pinze a punte piatte. Rimuovere le vecchie batterie.

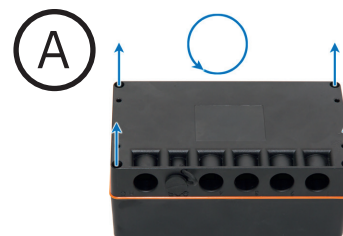

4.3. Inserire batterie nuove.

- ! Durante il collegamento possono prodursi delle scintille; indossare occhiali di sicurezza.

Inserire le nuove batterie nella scatola di controllo e collegare i cavi più e meno. Richiudere il quadro elettrico e applicare le viti di fissaggio.

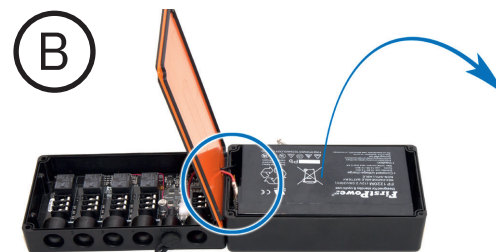

4.4. Montaggio finale

- Montare il quadro elettrico secondo le istruzioni di montaggio nella sezione "Staffa del quadro elettrico 24V".
- Riportare la sedia in posizione eretta.
- Montare lo schienale secondo le istruzioni per l'uso.