



AKUN VAIHTAMINEN REAL[®] 6100 PLUS



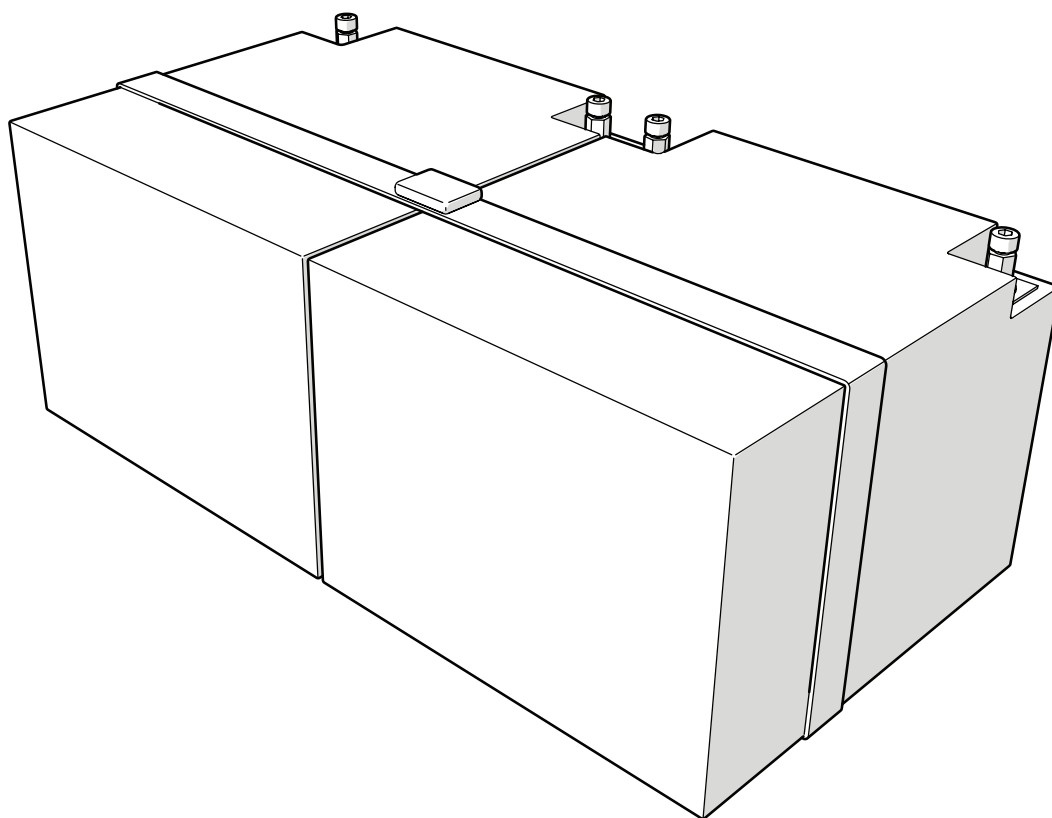

- Ⓐ BA1010 Akkupaketti 24 V / 25 Ah Sonnenschein f REAL 6100 PLUS
- BA1020 Akkupaketti 24 V / 28 Ah FGS f REAL 6100 PLUS

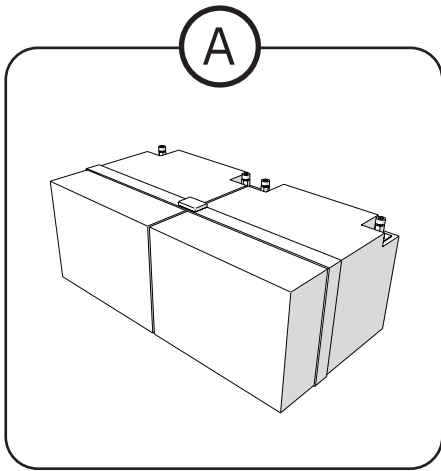

Ennen kuin aloitat akkujen vaihtamisen, varmista, että olet katkaissut virran.


Muista seuraavat asiat, kun käsittelet akkuja:


- Älä koskaan oikosulje akkua.
- Älä altista akkua voimakkailla iskuille.
- Hävitettävät akut tulee aina kierrättää ympäristösäädösten mukaisesti.
- Ole varovainen nostaessasi akkupakettia, koska se on painava ja voi pudotessaan aiheuttaa sekä henkilö- että omaisuusvahinkoja.
- Asenna aina akkunapojen suojakansi takaisin paikalleen. Suojakannen puuttuminen voi johtaa henkilövahinkoihin myöhempien huoltojen yhteydessä.


Ensiapu


Jos akku on viallinen ja sen käsittely altistaa kosketukselle akkuhapon (rikkihapon) kanssa, noudata seuraavia ohjeita:

Tapahtuma	Toimenpide
Ihokosketus	Huuhtelee vedellä. Pese saippualla ja vedellä. Poista ja pese vaatteet.
Happosumun hengittäminen	Hengitä raitista ilmaa. Ota heti yhteys lääkäriin!
Jos ainetta joutuu silmiin	Huuhtelee juoksevalla vedellä vähintään 15 minuuttia. Ota heti yhteys lääkäriin!
Nieleminen	Juo heti runsaasti vettä äläkä yritä oksentaa. Ota heti yhteys lääkäriin!

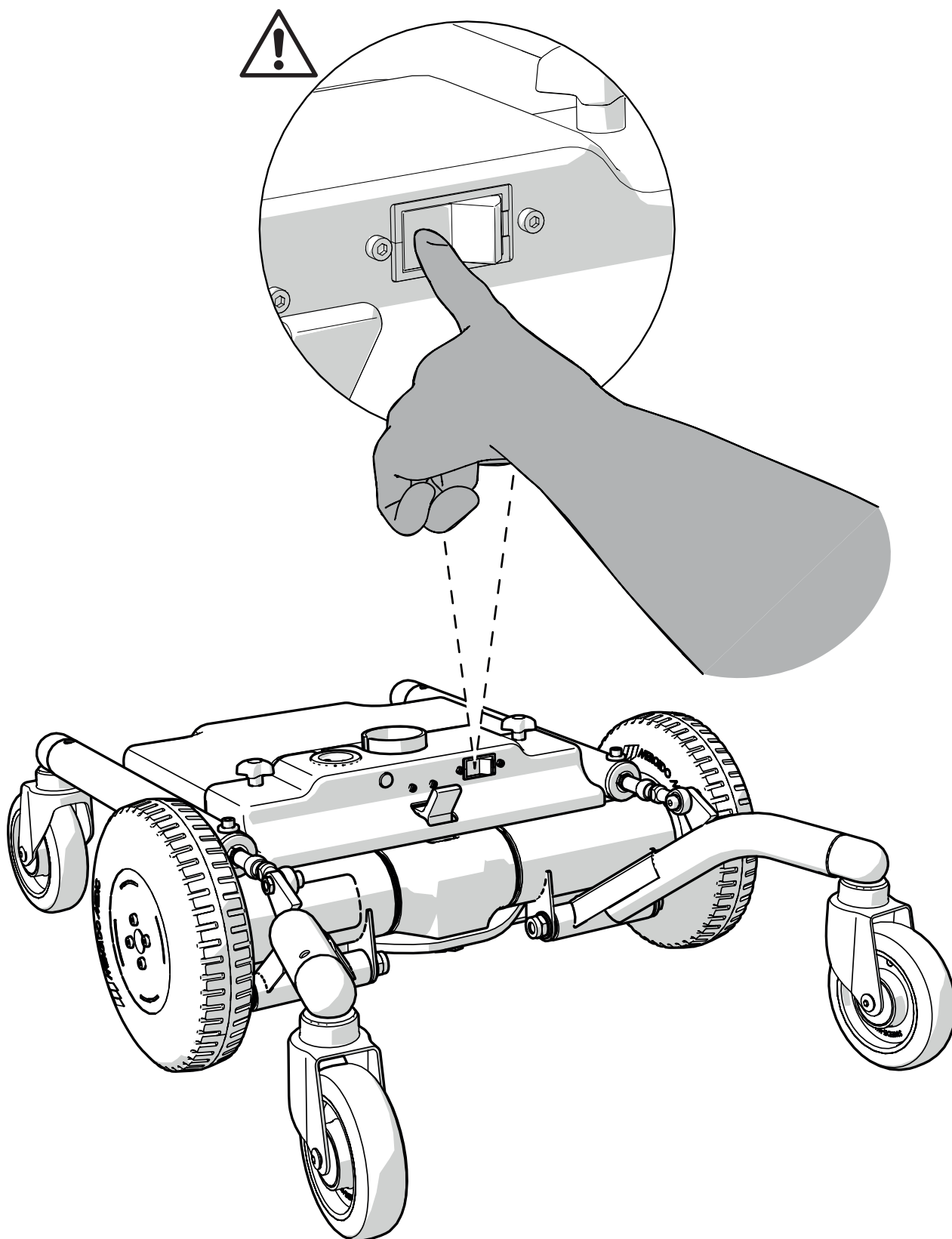


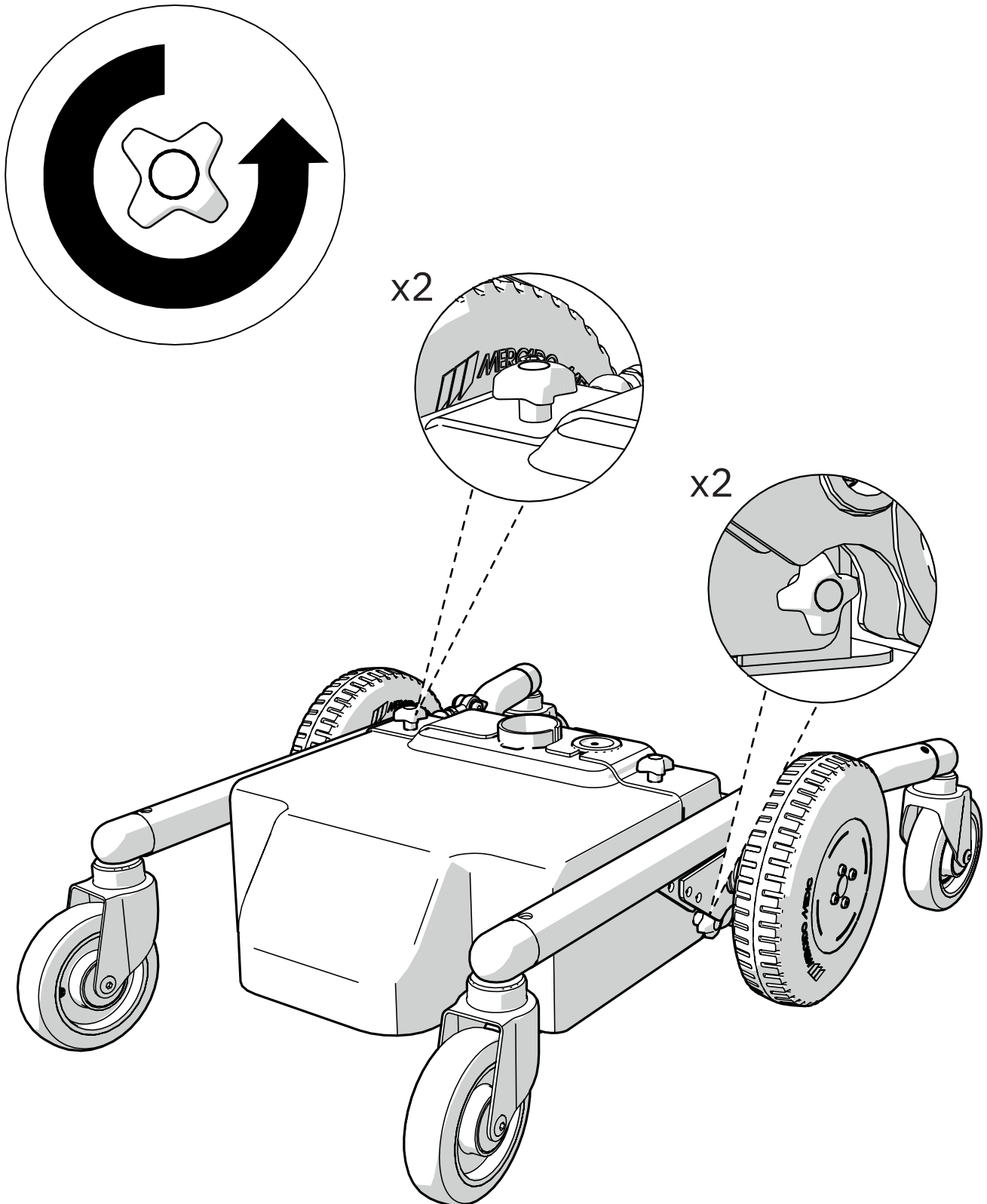


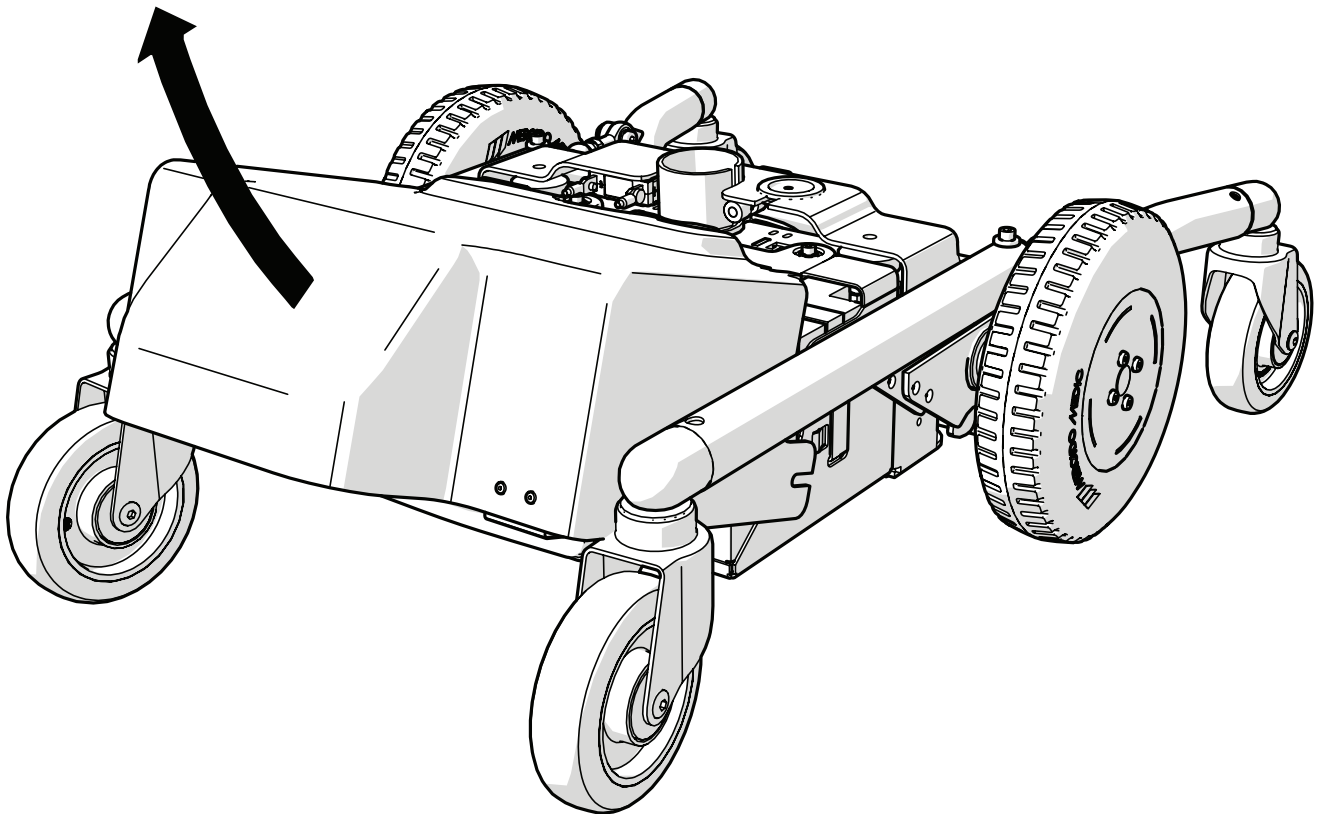


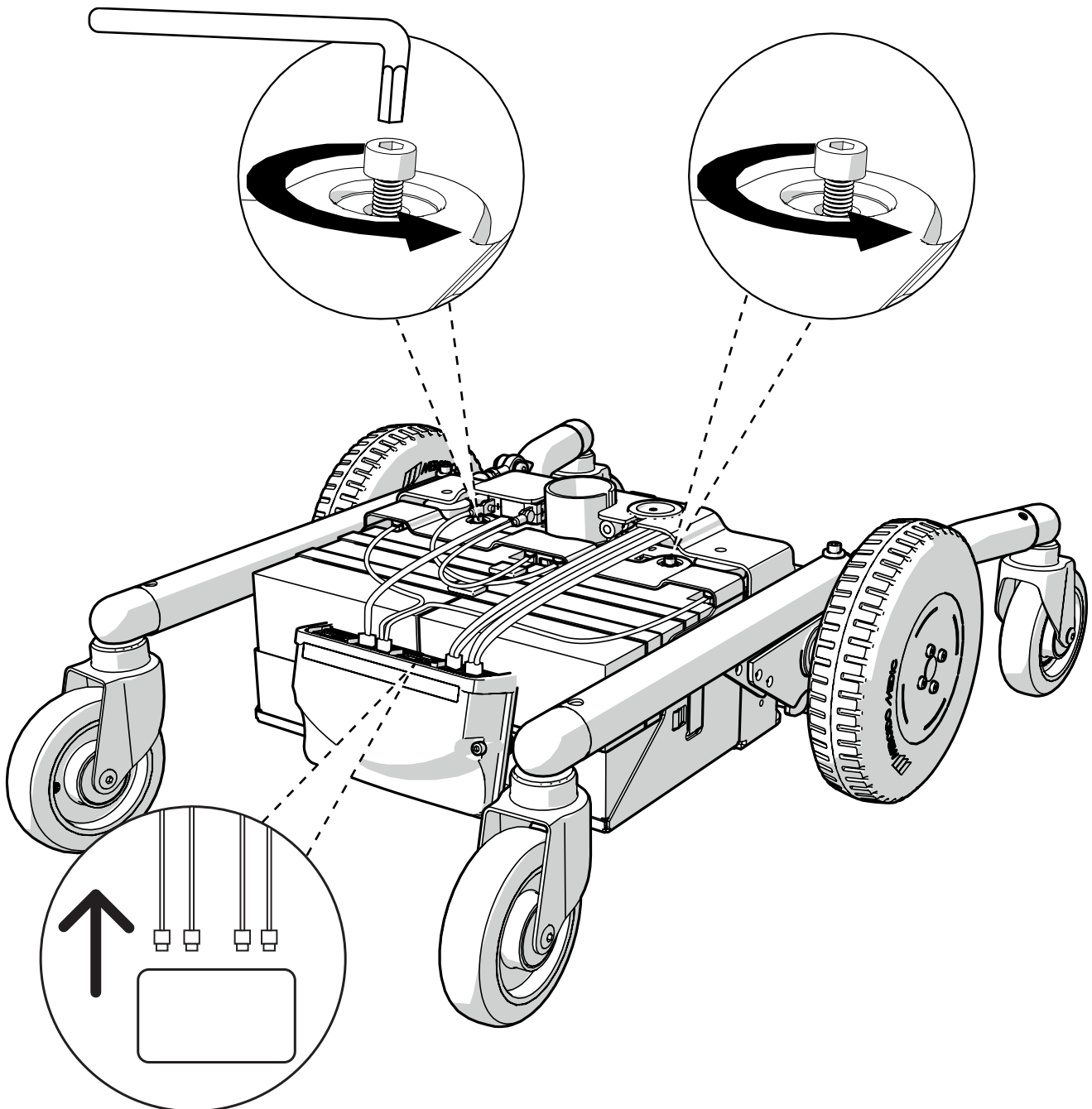



i

Jos tuolissa ei ole akkunapojen suojakantta, ei uuteen akkuun asenneta mukana toimitettuja akkunapojen välikappaleita.

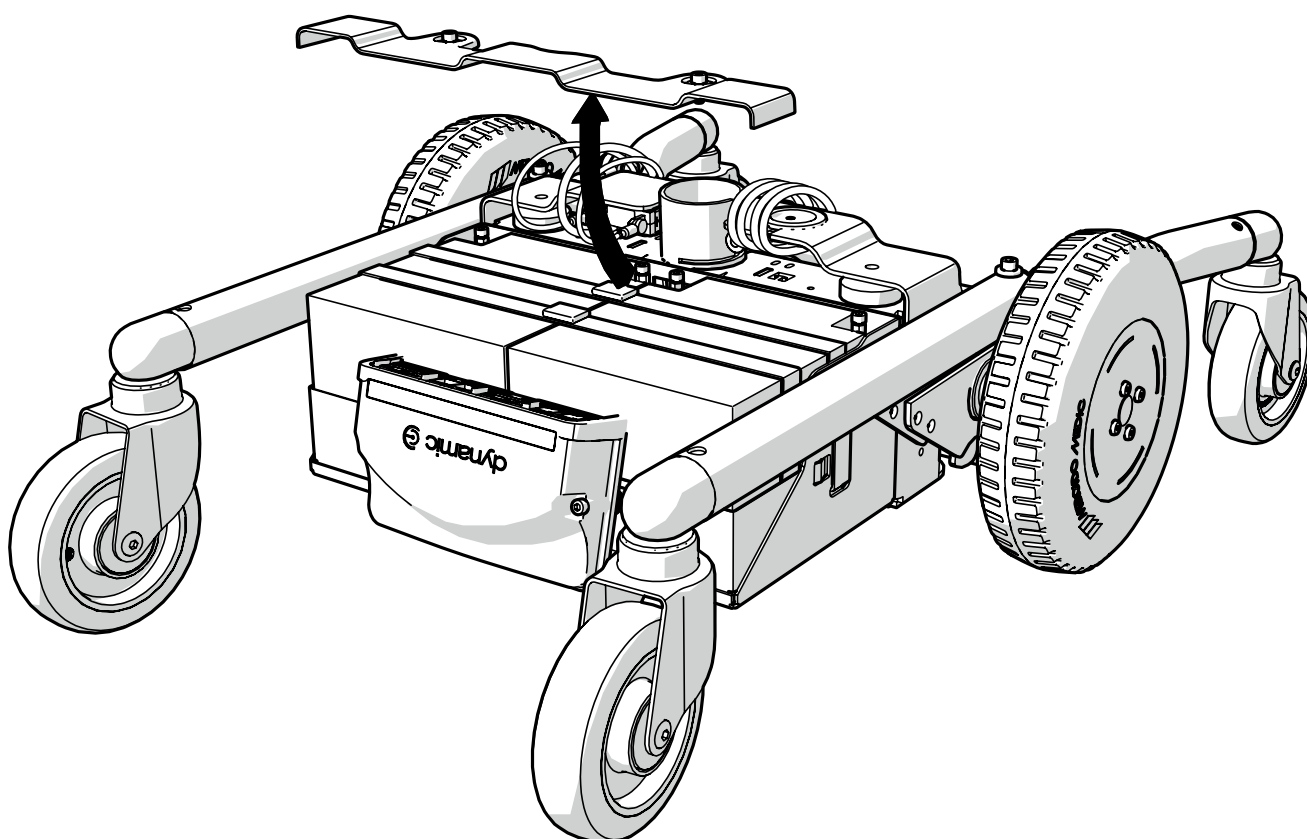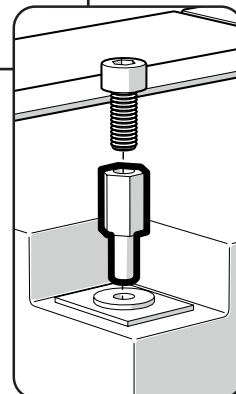

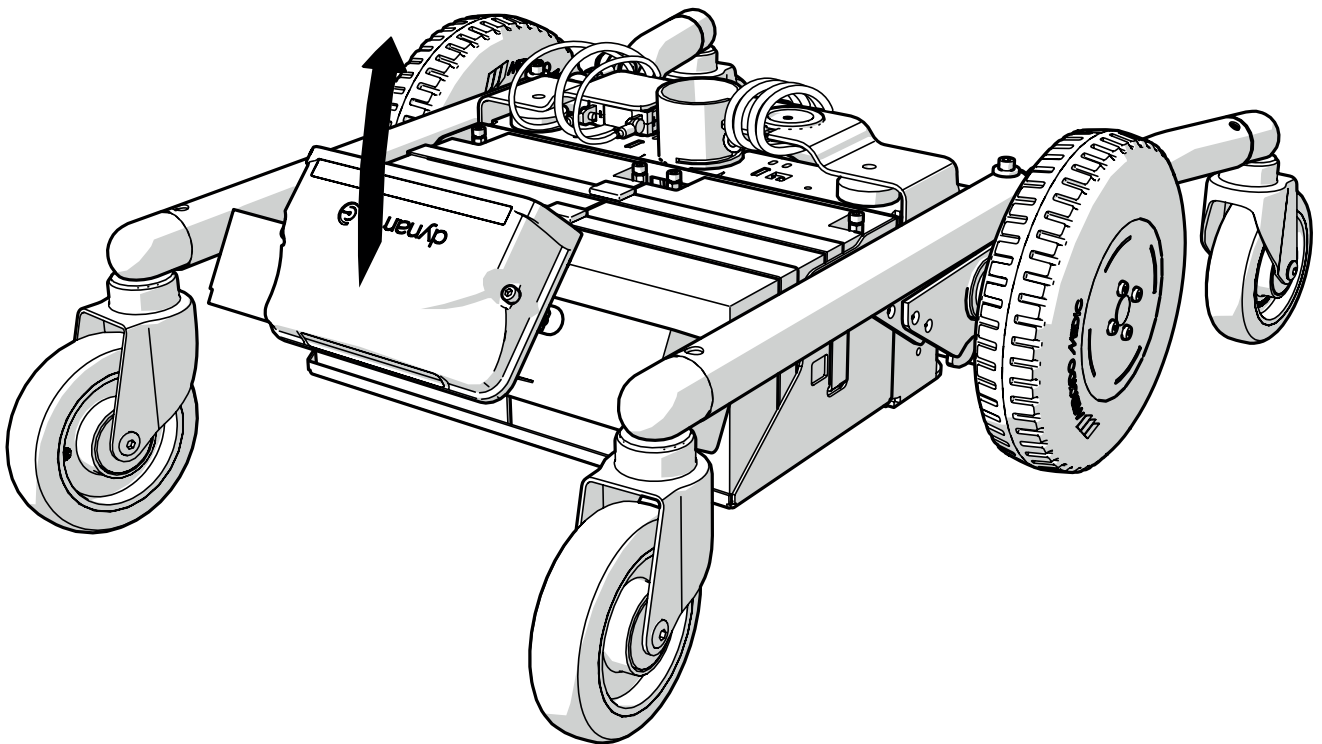

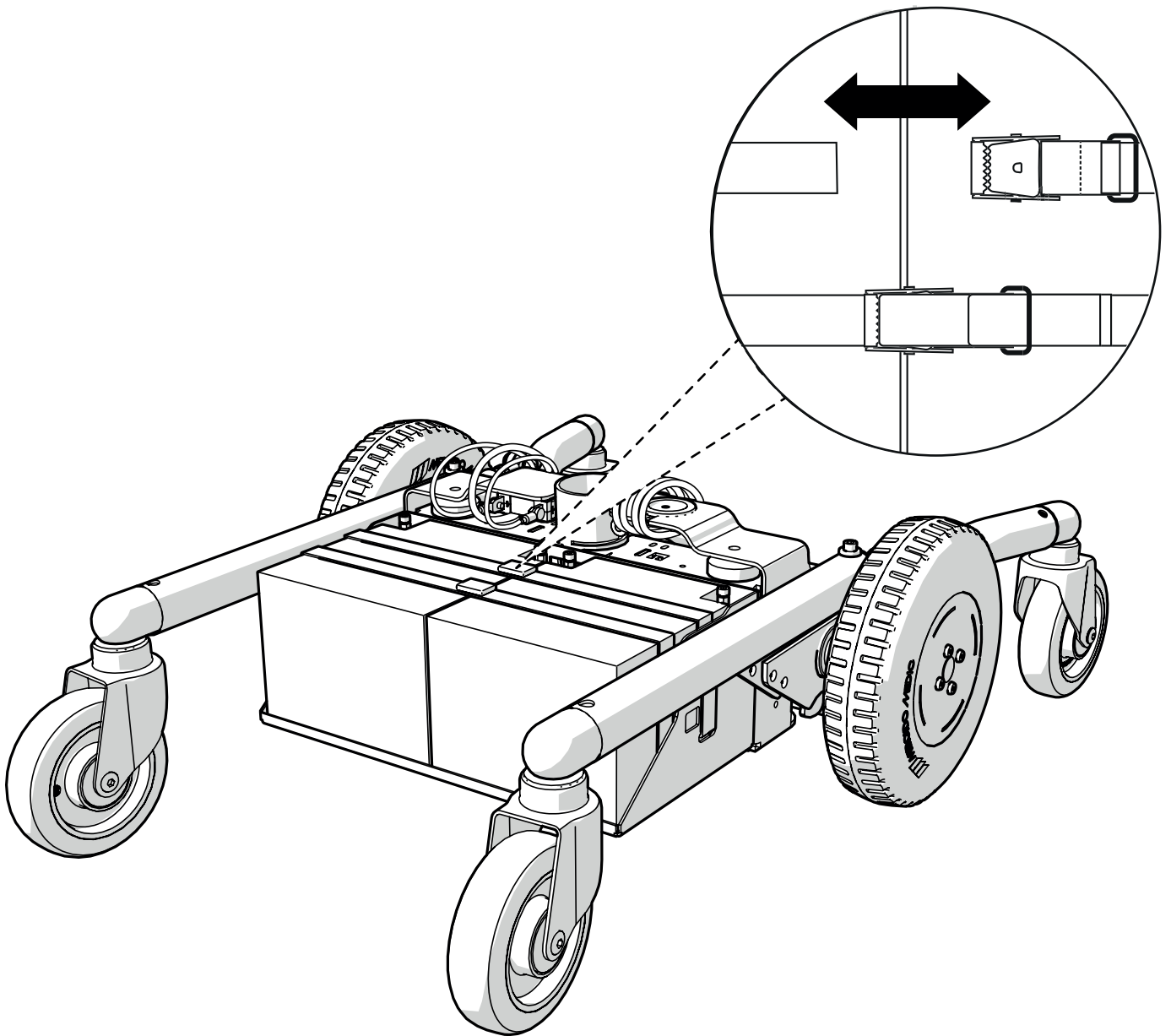


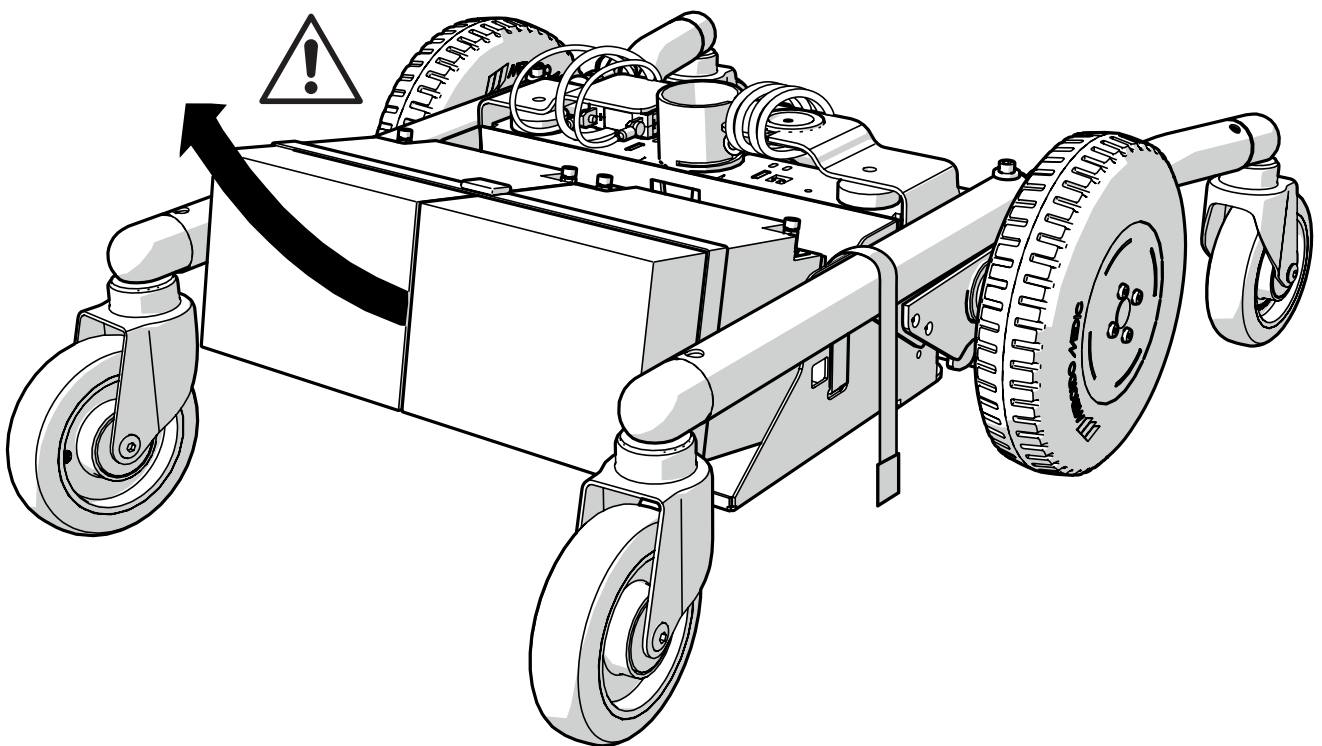


i

Viimeistele akun vaihto suorittamalla edelliset vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. Muista kytkeä virtamoduuli akkukotelon sisäpuolella olevan kytkentäkaavion mukaisesti.

! Varmista, että kaikki sähkötoiminnot toimivat, ennen kuin otat tuotteen uudelleen käyttöön.

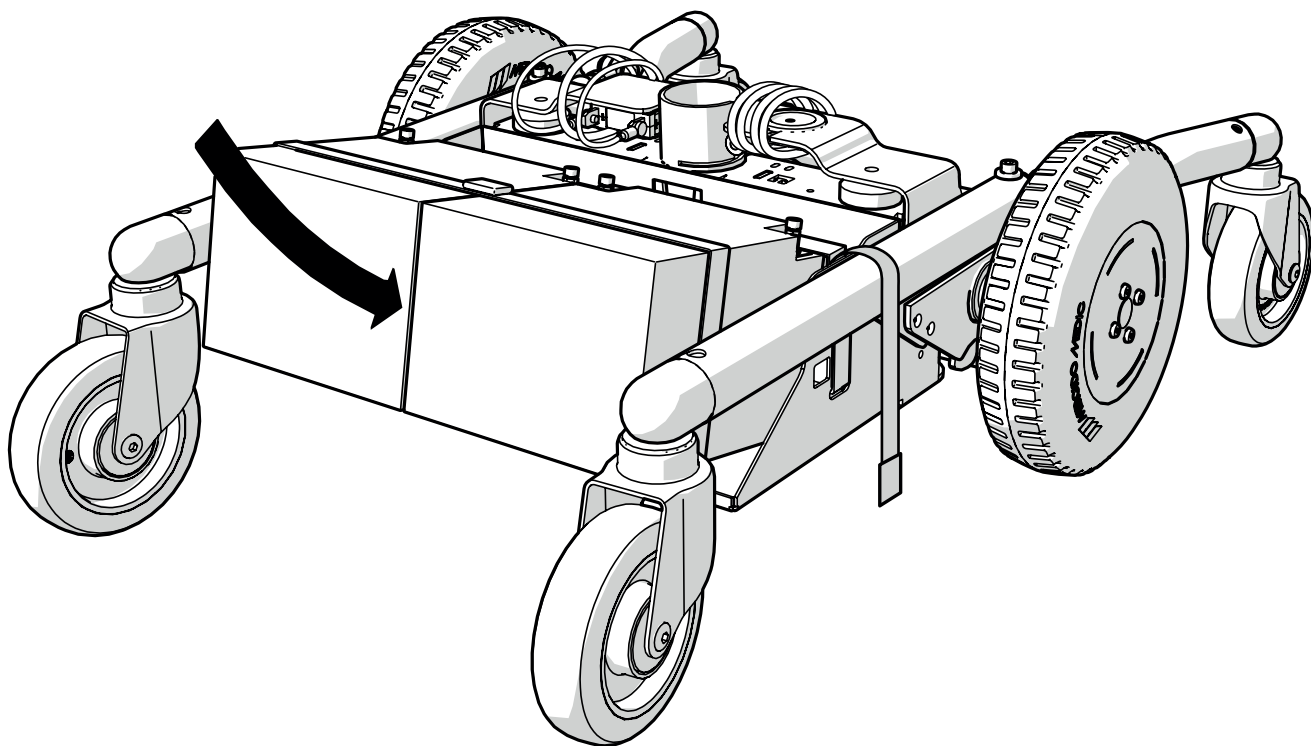

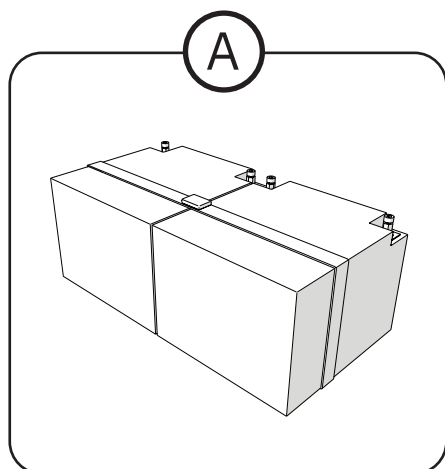

Hoito-ohjeet

Tuoli on kuivattava ja pidettävä puhtaana pölystä ja liasta. Käytä pesuaineita, joiden pH on 7–12 (tiiviste).

Hävittäminen

- Ⓐ Lajitellaan lyijyakkujen tavoin