



ACCU VERVANGEN REAL[®] 6100 PLUS



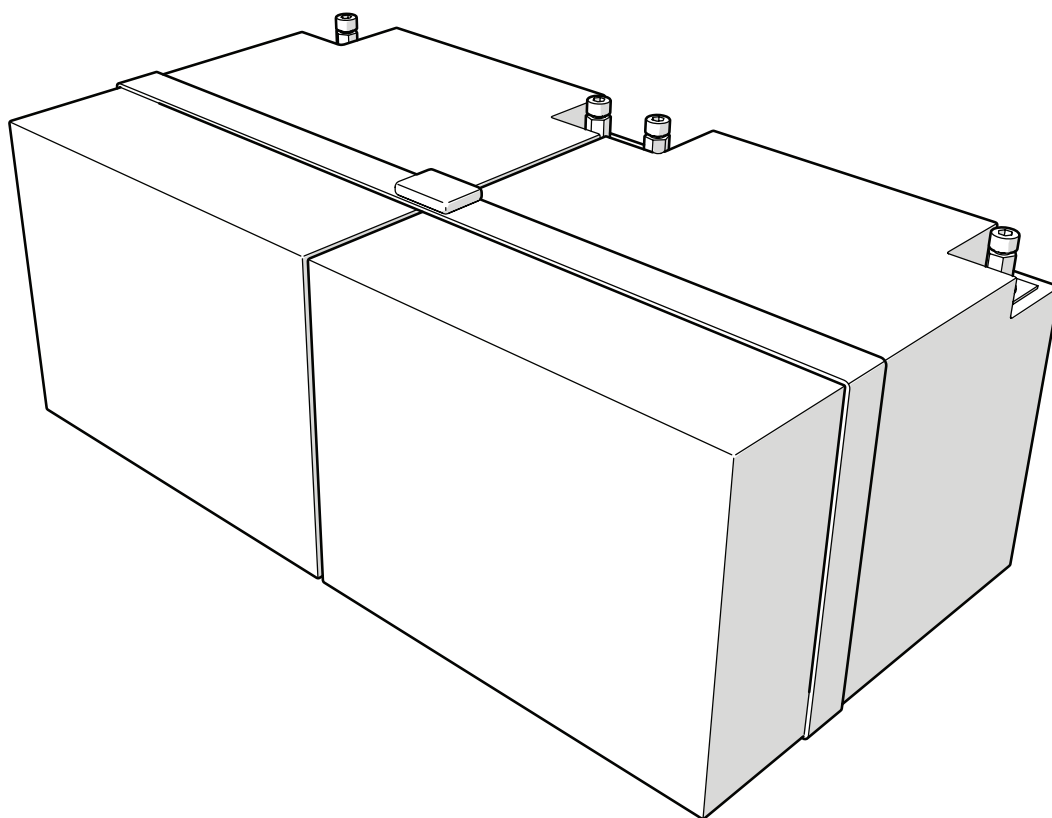

- Ⓐ BA1010 Accupakket 24V/25Ah Sonnenschein voor REAL 6100 PLUS
- BA1020 Accupakket 24V/28Ah FGS voor REAL 6100 PLUS

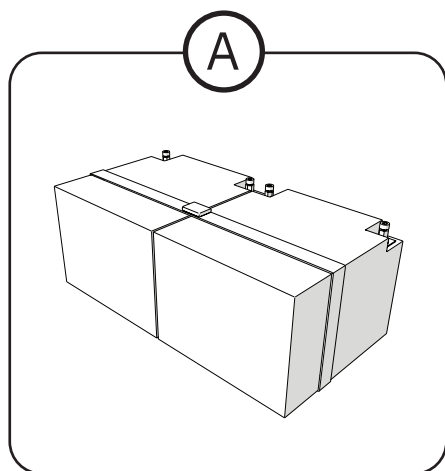

Voordat u kunt beginnen met het vervangen van de accu's, moet u controleren of de automatische zekering uit staat.


Let op het volgende bij het hanteren van accu's:



- De accu nooit kortsluiten.
- Stel de accu nooit bloot aan krachtige stoten.
- Lever oude accu's altijd in bij een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf.
- Wees voorzichtig bij het optillen van het accupakket. Dit is zwaar en kan zorgen voor beschadiging van personen en eigendommen als u het laat vallen.
- Plaats altijd de doppen van de accupolen weer terug. Het ontbreken van de beschermdoppen kan leiden tot persoonlijk letsel op een later servicetijdstip.


EHBO


Als de accu defect is en u komt bij de hantering in contact met de inhoud van de accu, elektrolyt (zwavelzuur), geldt het volgende:

Gebeurtenis	Maatregel
Contact met de huid	Afspoelen met water. Reinig met water en zeep. Verwijder en was getroffen kleding.
Inademing van zuurdampen	Adem frisse lucht in. Neem onmiddellijk contact op met een arts!
Contact met ogen	Spoel minstens 15 minuten met stromend water. Neem onmiddellijk contact op met een arts!
Bij inslikken	Drink onmiddellijk veel water, roep geen braken op. Neem onmiddellijk contact op met een arts!

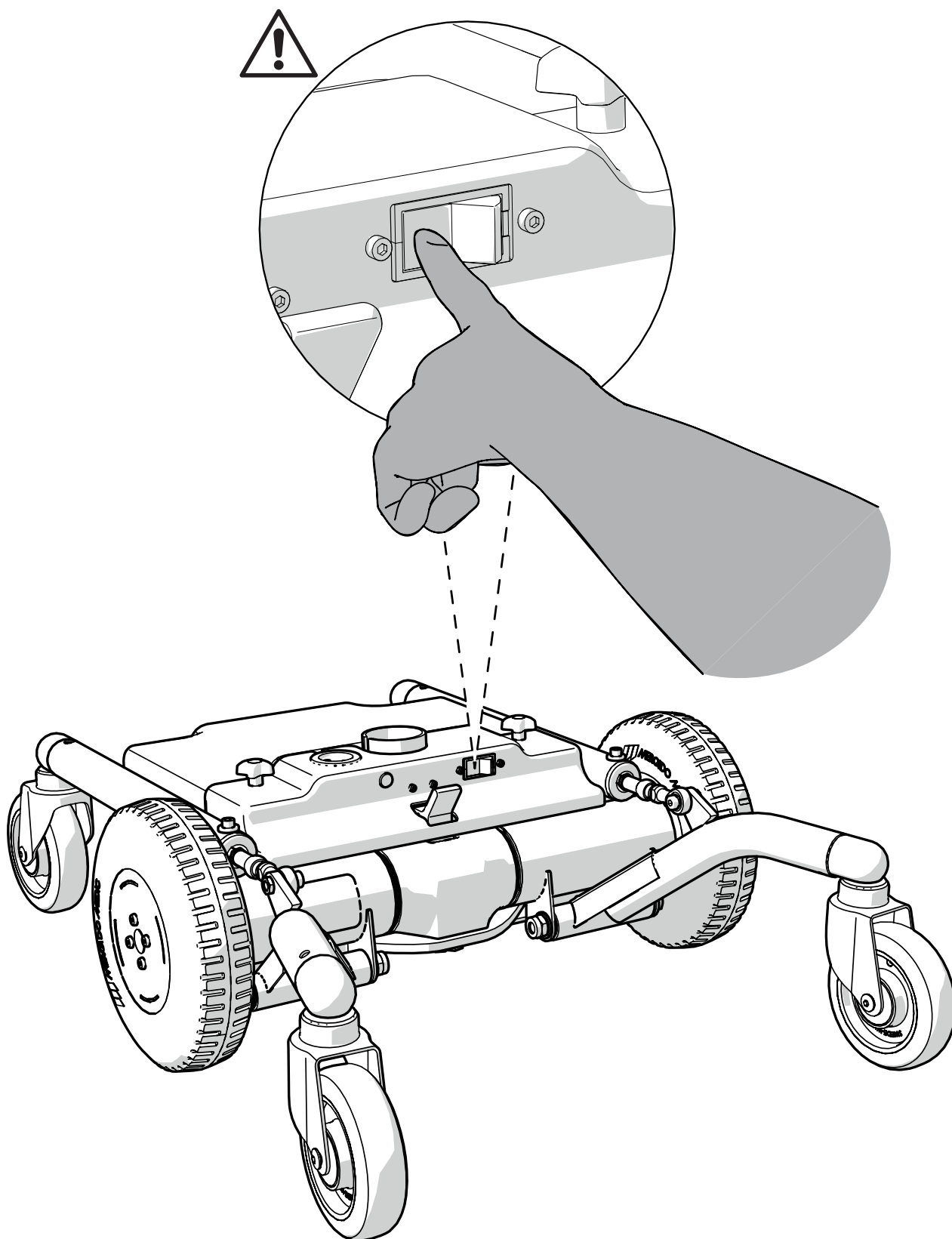

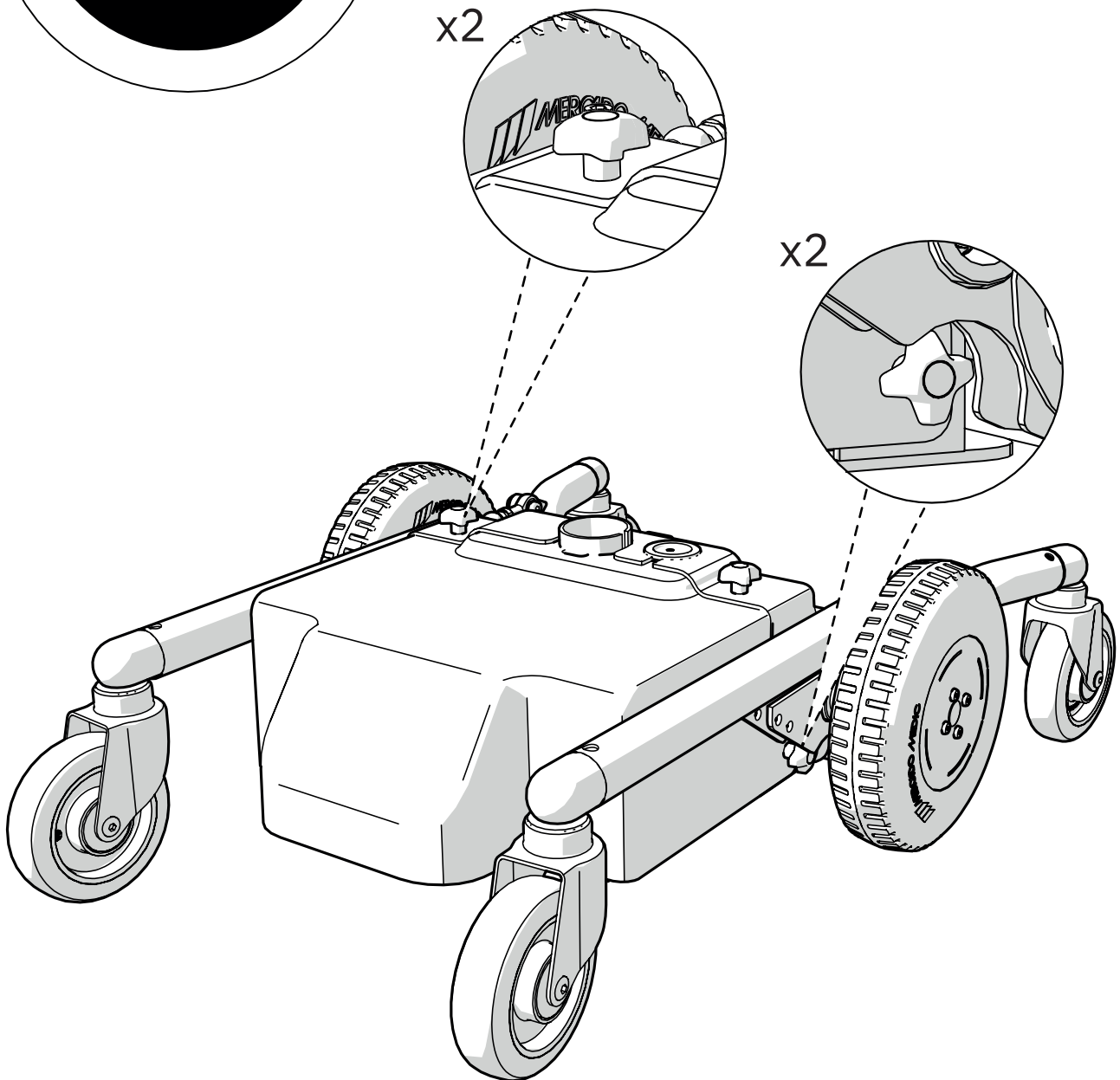
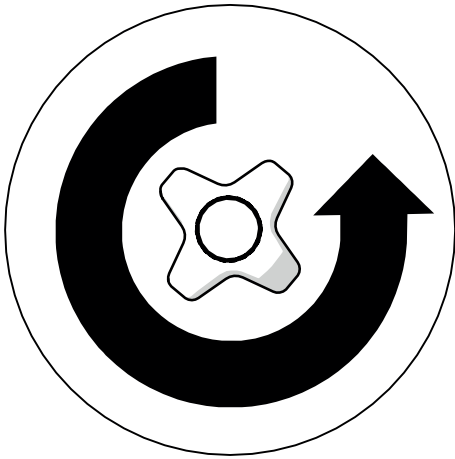


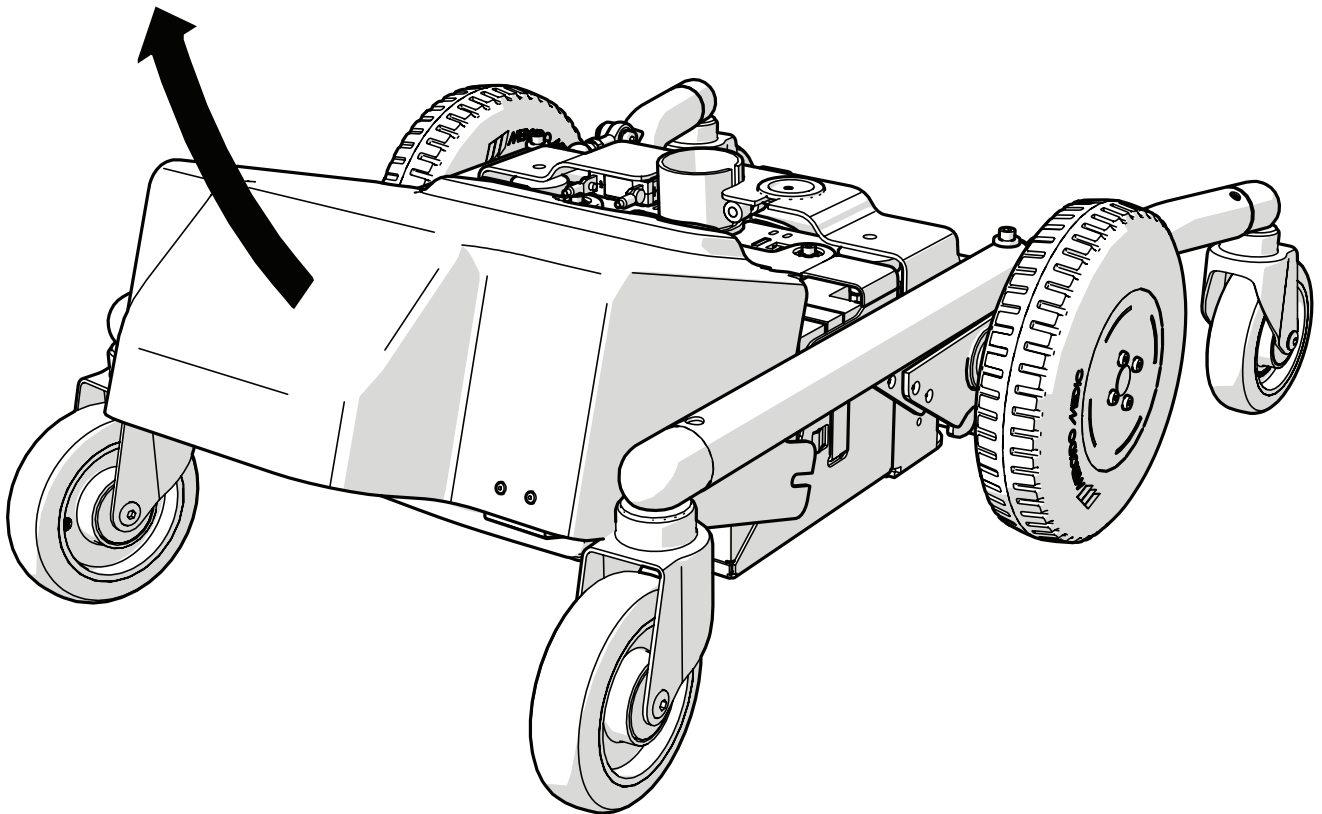


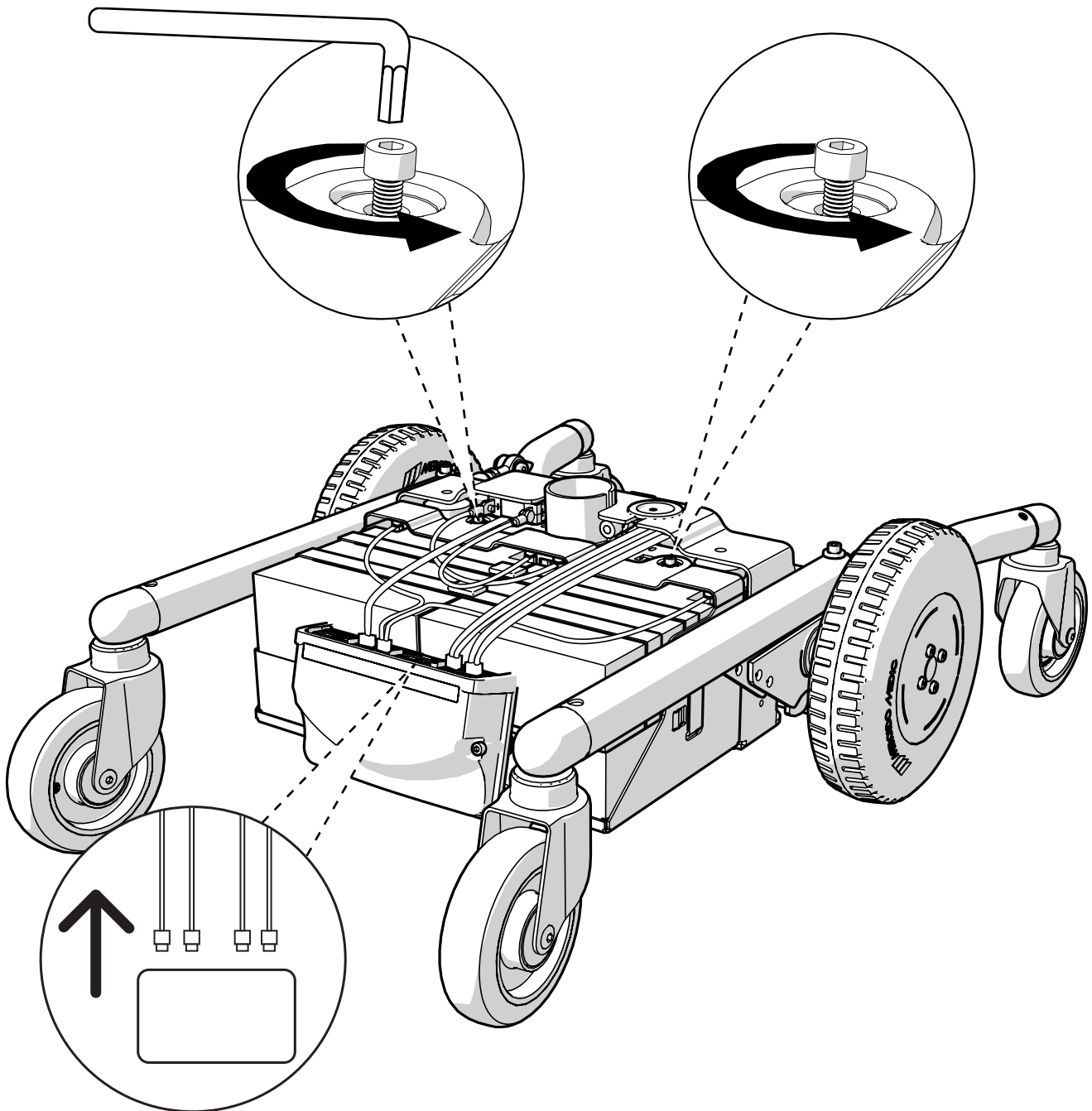



i

Als de stoel geen batterijdeksel heeft, mogen de meegeleverde afstandhouders voor de accupolen niet op de nieuwe accu's geplaatst worden.

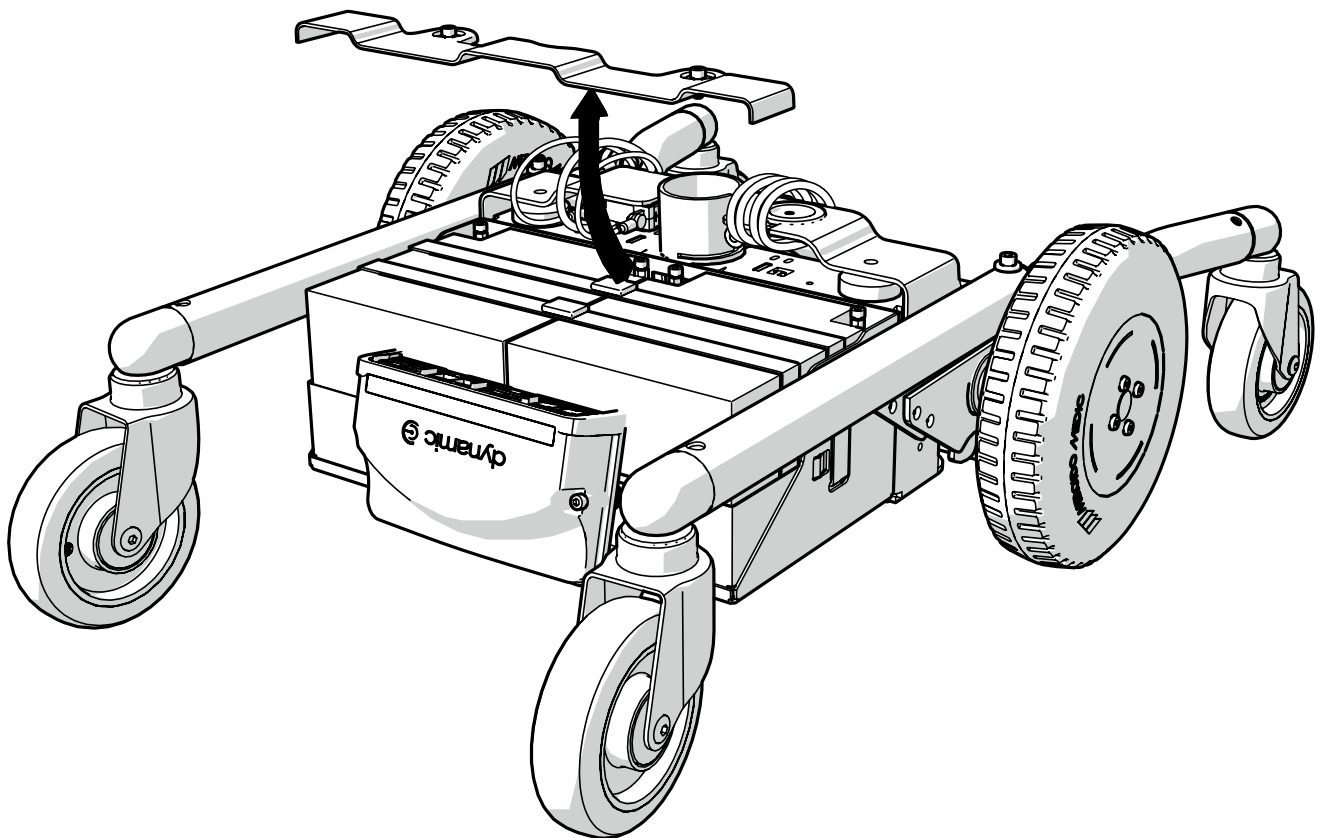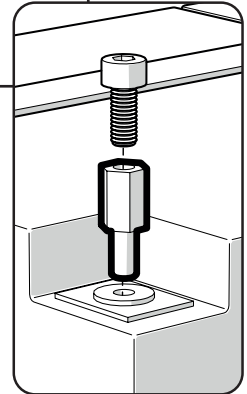

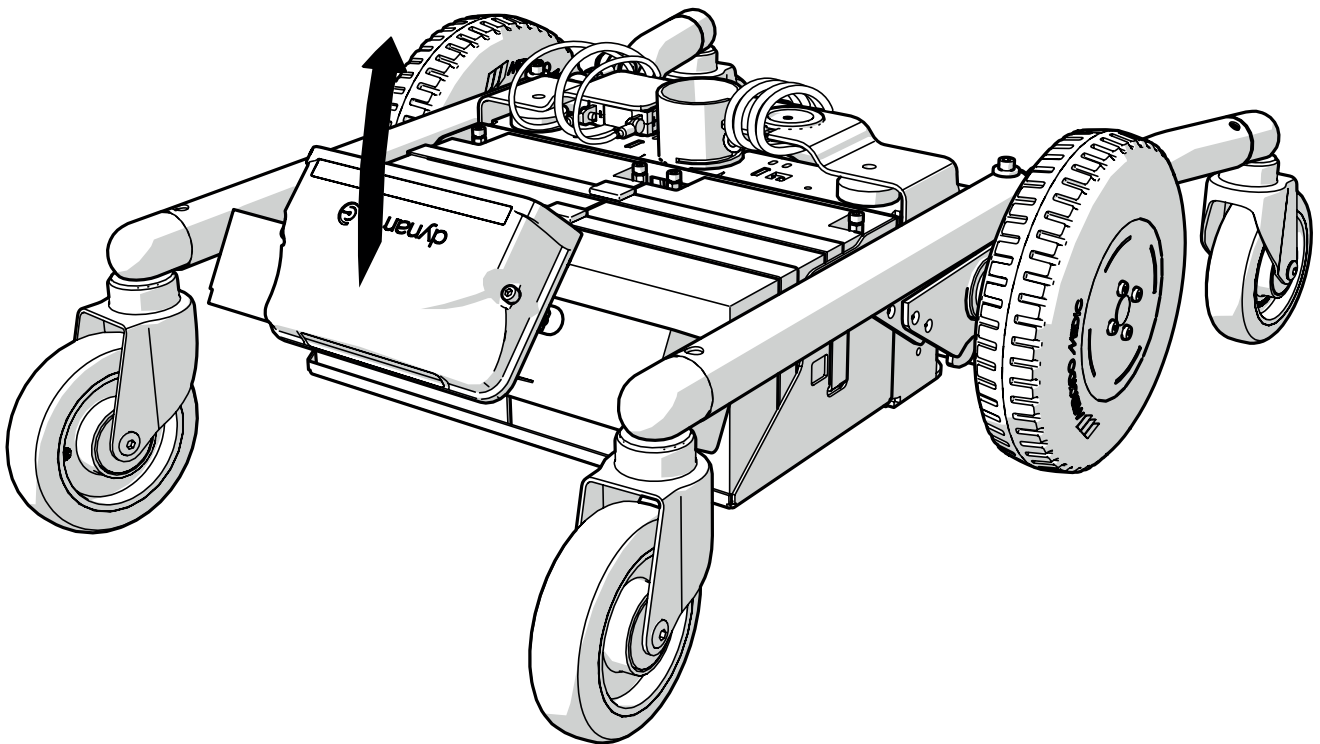

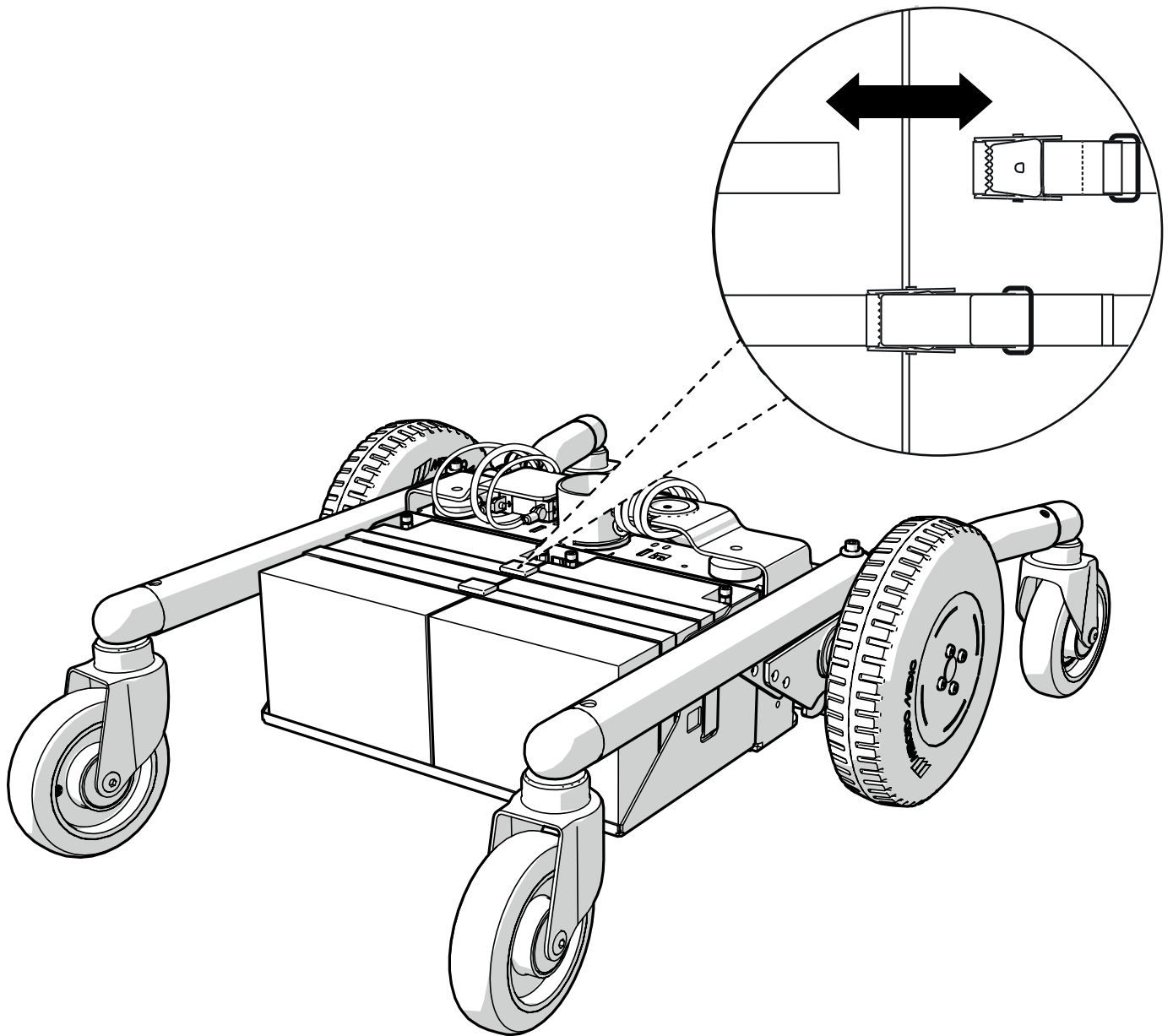


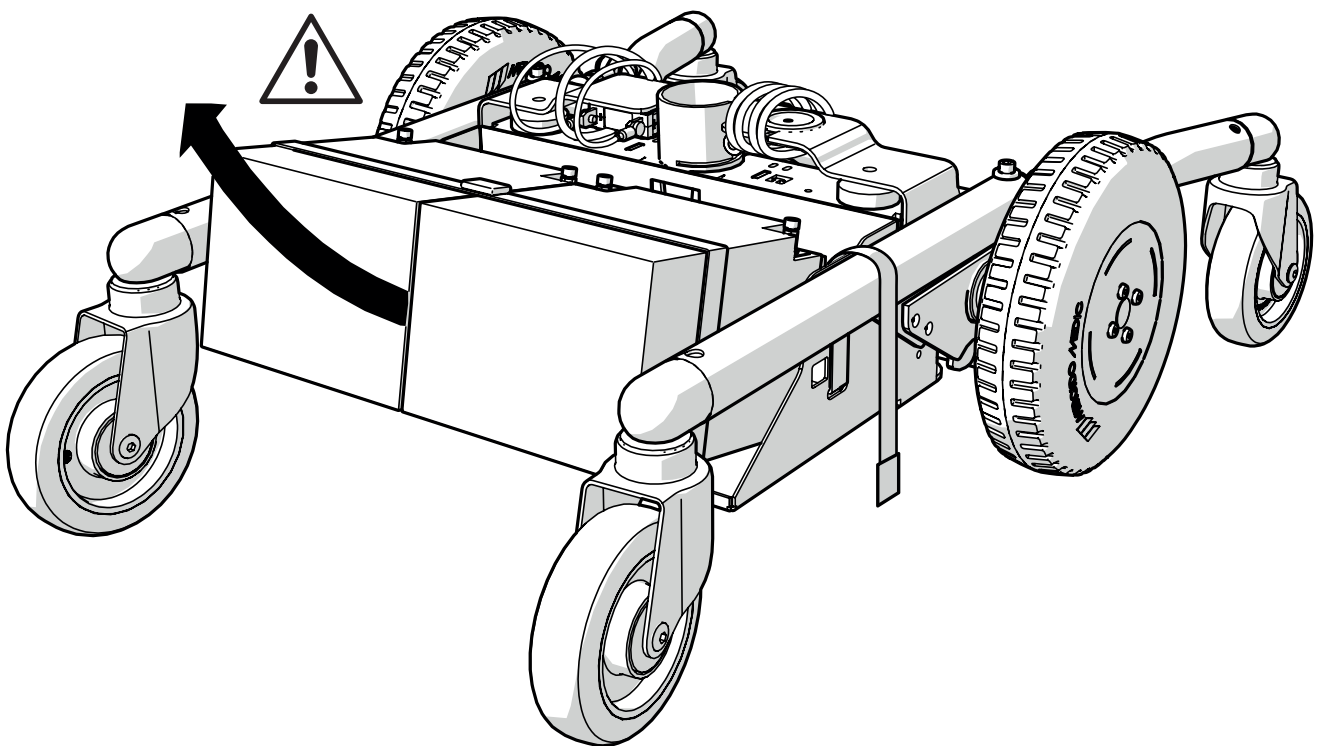


i

Voltooi het vervangen van de accu door de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren. Zorg ervoor dat u de voedingsmodule aansluit volgens het aansluitschema aan de binnenkant van het accudeksel.

! Zorg ervoor dat alle elektrische functies werken voordat u het product weer in gebruik neemt.

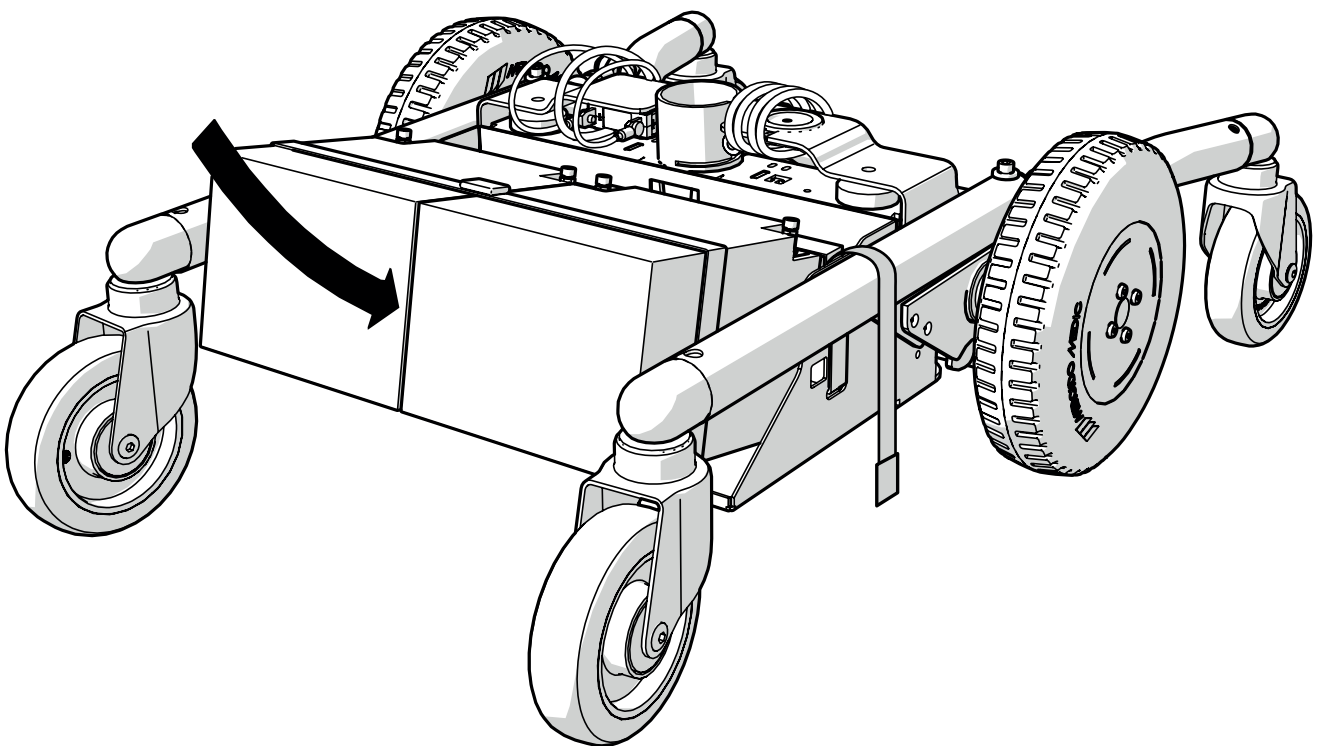

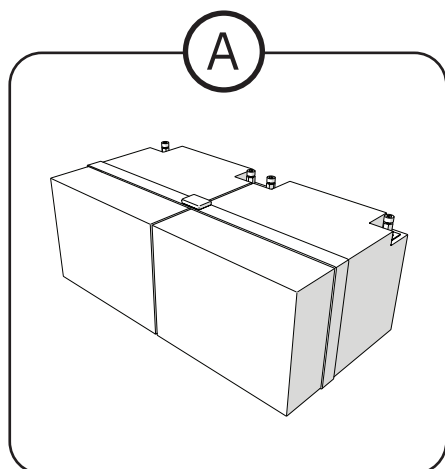

Onderhoudsinstructies

Neem het product regelmatig af om het vrij te houden van stof en vuil. Het product is goedgekeurd voor reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 7 en 12 (geconcentreerd).

Afvoeren

Ⓐ moet gesorteerd worden als loodaccu