




FR

REEMPLACEMENT DES BATTERIES REAL[®] 9200 TWIN

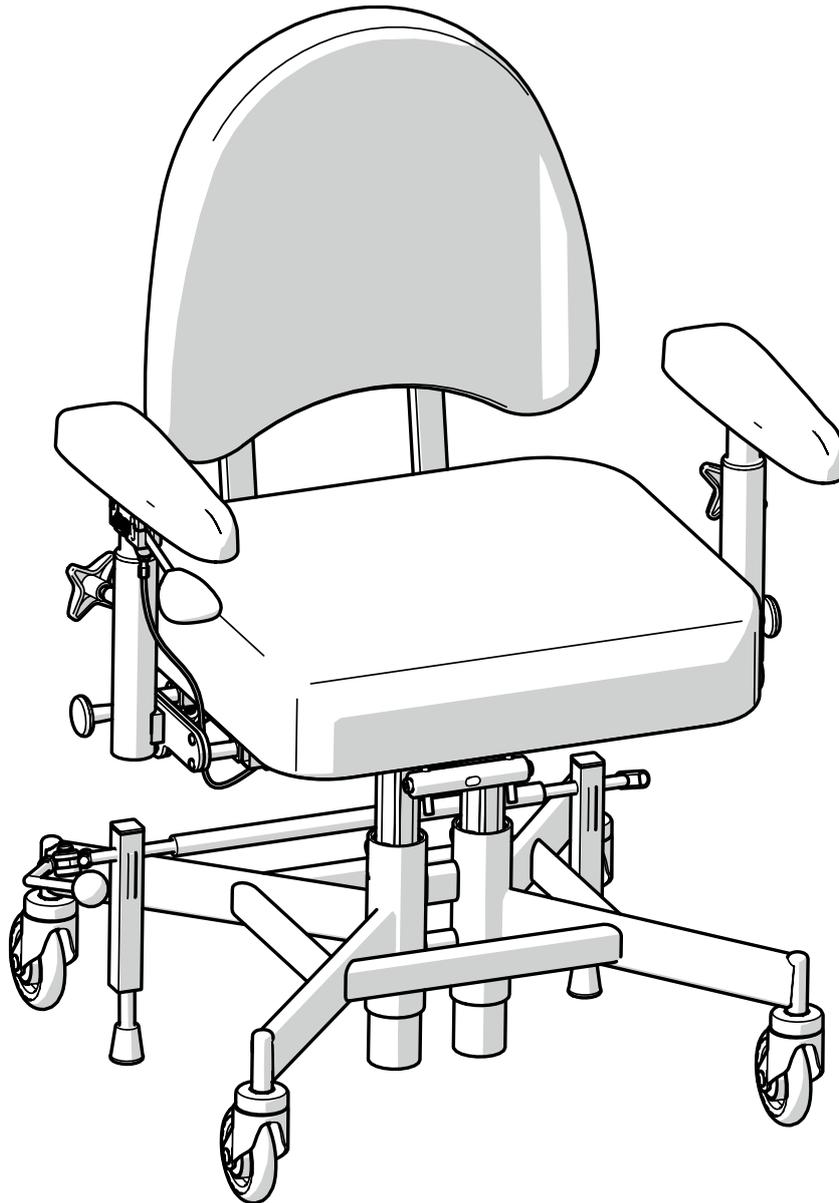

1. Informations importantes

Gardez en tête ce qui suit lorsque vous manipulez des batteries :

- Ne jamais court-circuiter la batterie.
- Ne jamais exposer la batterie à des chocs violents.
- Les batteries hors d'usage doivent toujours être déposées dans les centres de recyclage spécialisés.

Premiers secours

Si la batterie est défectueuse et que la manipulation entraîne un contact direct avec le contenu de la batterie, c'est-à-dire l'électrolyte (acide sulfurique), les dispositions suivantes s'appliquent :


Événement	Action
Contact avec la peau	Rincer avec de l'eau. Nettoyer au savon et à l'eau. Enlever et laver les vêtements tachés.
Inhalation des vapeurs acides	Respirer de l'air frais. Consultez votre médecin immédiatement !
Contact avec les yeux	Rincer à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Consultez votre médecin immédiatement !
Ingestion	Boire immédiatement beaucoup d'eau, ne pas provoquer de vomissements. Consultez votre médecin immédiatement !

2. Liste des pièces

805161 Boîtier de batterie, batteries comprises (TWIN 24V)

3. Instructions de montage

- A. Déconnecter le boîtier de batterie en débranchant le cordon.
- B. Retirer le boîtier de batterie du support en desserrant les quatre vis.
- C. Installer le boîtier de batterie neuf en suivant les points ci-dessus dans l'ordre inverse.
- D. Répéter la même procédure sur l'autre boîtier de batterie. Les boîtiers de batterie doivent toujours être remplacés en même temps.

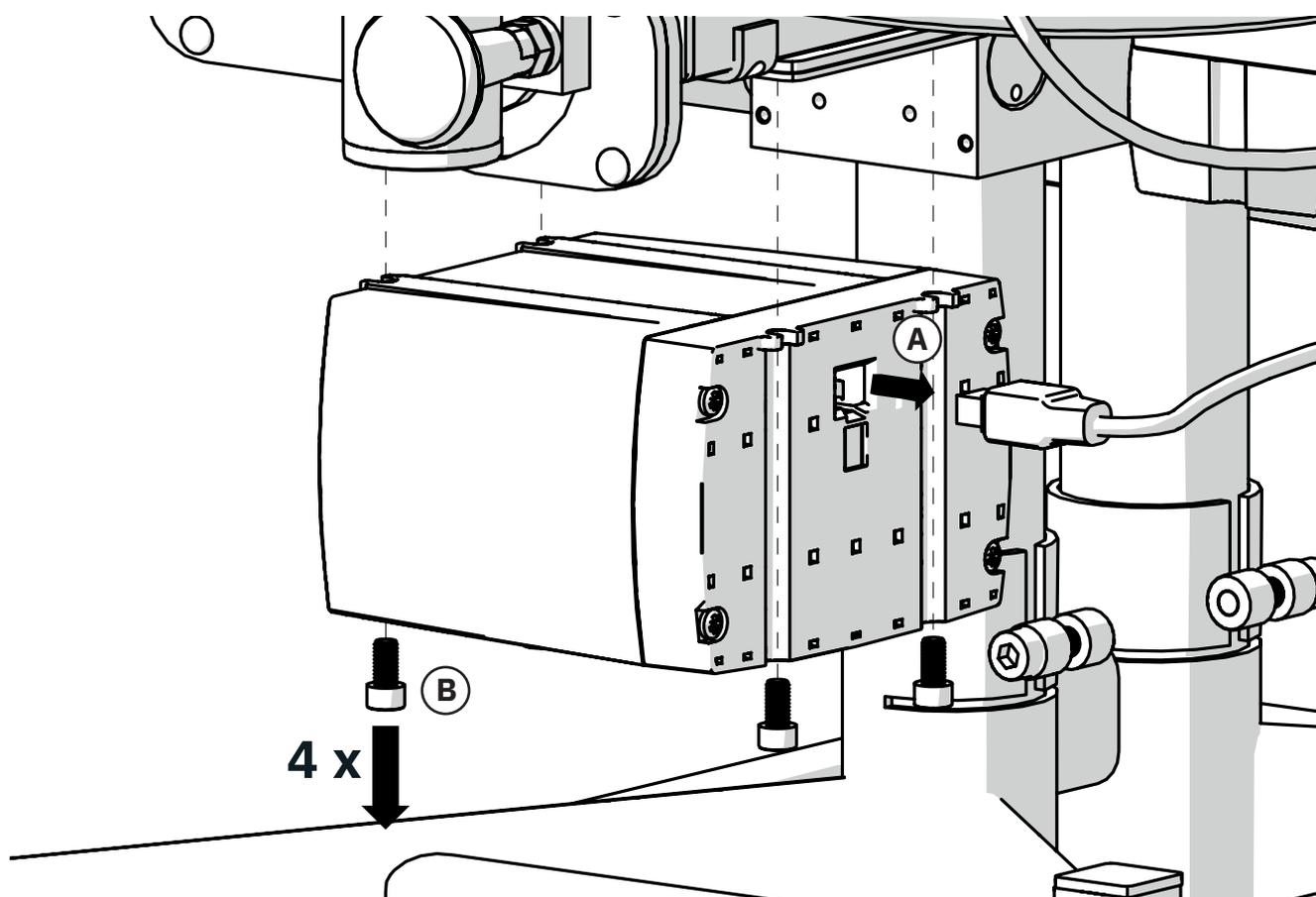

4. Destruction

Le boîtier de batterie, y compris les batteries, est à trier comme batterie.