




SWE


SITTKRYSSBYTE REAL® 9200 TWIN 24V

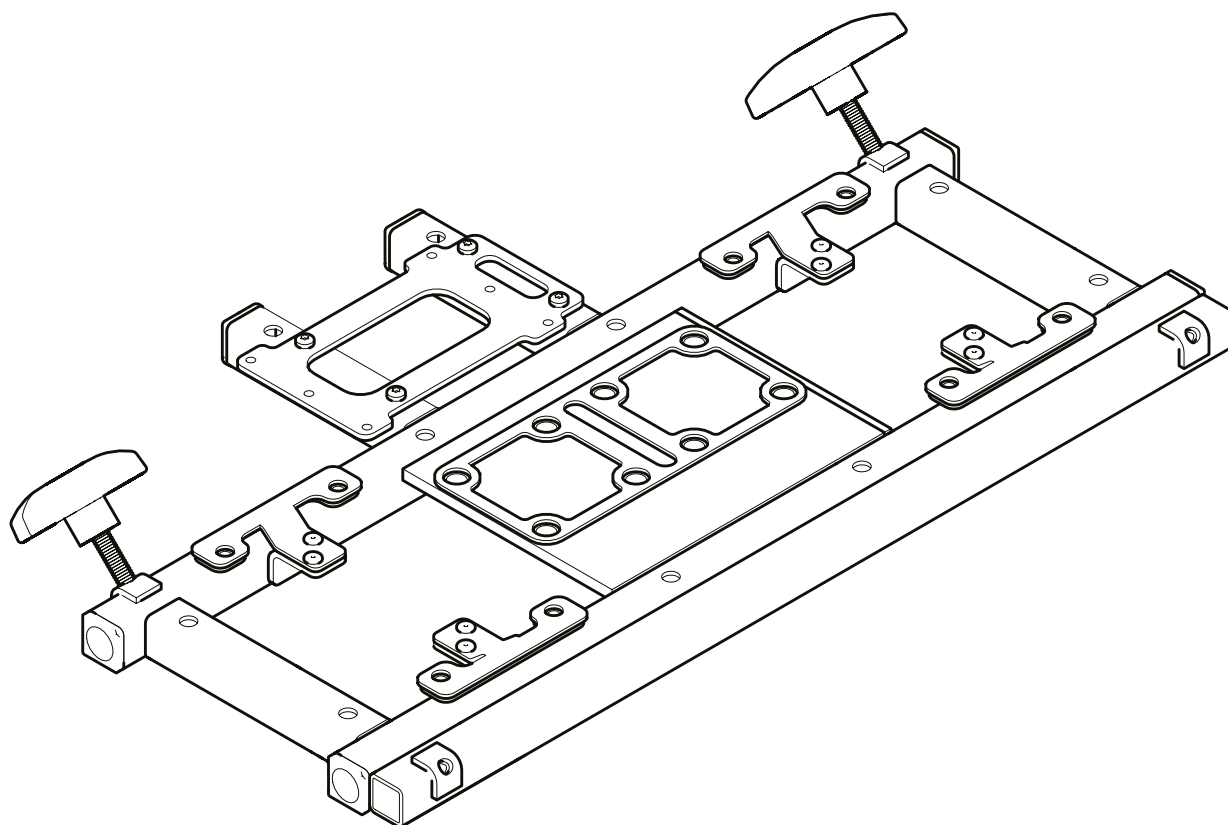

Innehållsförteckning

1. Artikellista	3
2. Monteringsinstruktion	4
2.1. Ta bort stolens överdel	4
2.2. Ta bort stativet	5
2.3. Koppla ur och ta bort elektronik	6
2.4. Ta bort sittkryss	7
2.5. Byt ut sittkryss	8
2.6. Montera sittkryss	9
2.7. Montera elektroniken	10
2.8. Montera stativet	11
2.9. Säkra ställdonen	12
2.10. Montera stolens överdel	13
3. Destruktion & återvinning	14

1. Artikellista

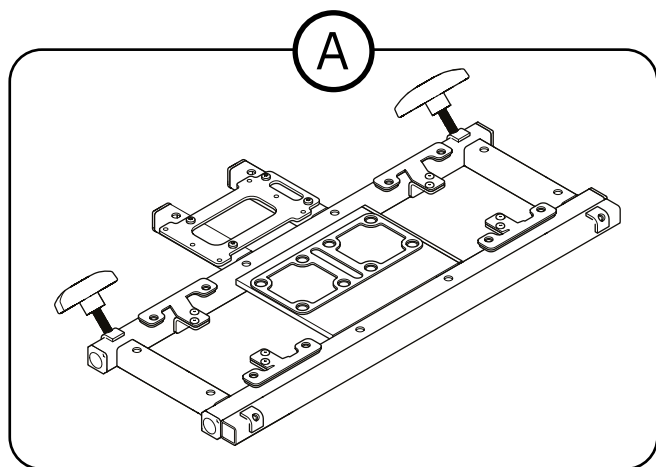


- | | | |
|---|--------|------------------------------------|
| Ⓐ | 804830 | Sittkryss 9200 Twin
Br52-61 24V |
| | 804831 | Sittkryss 9200 Twin
Br62-71 24V |
| | 804832 | Sittkryss 9200 Twin
Br72-81 24V |

2. Monteringsinstruktion


2.1. Ta bort stolens överdel

Ta bort stolens armstöd genom att lossa på rattarna i sittkrysset under sitsen. Ta bort stolens sits genom att lossa på skruvarna som går igenom sittkrysset. Notera att ryggfällning och ryggstöd är fäst i sittplattan vilket inte är illustrerat här nedan.

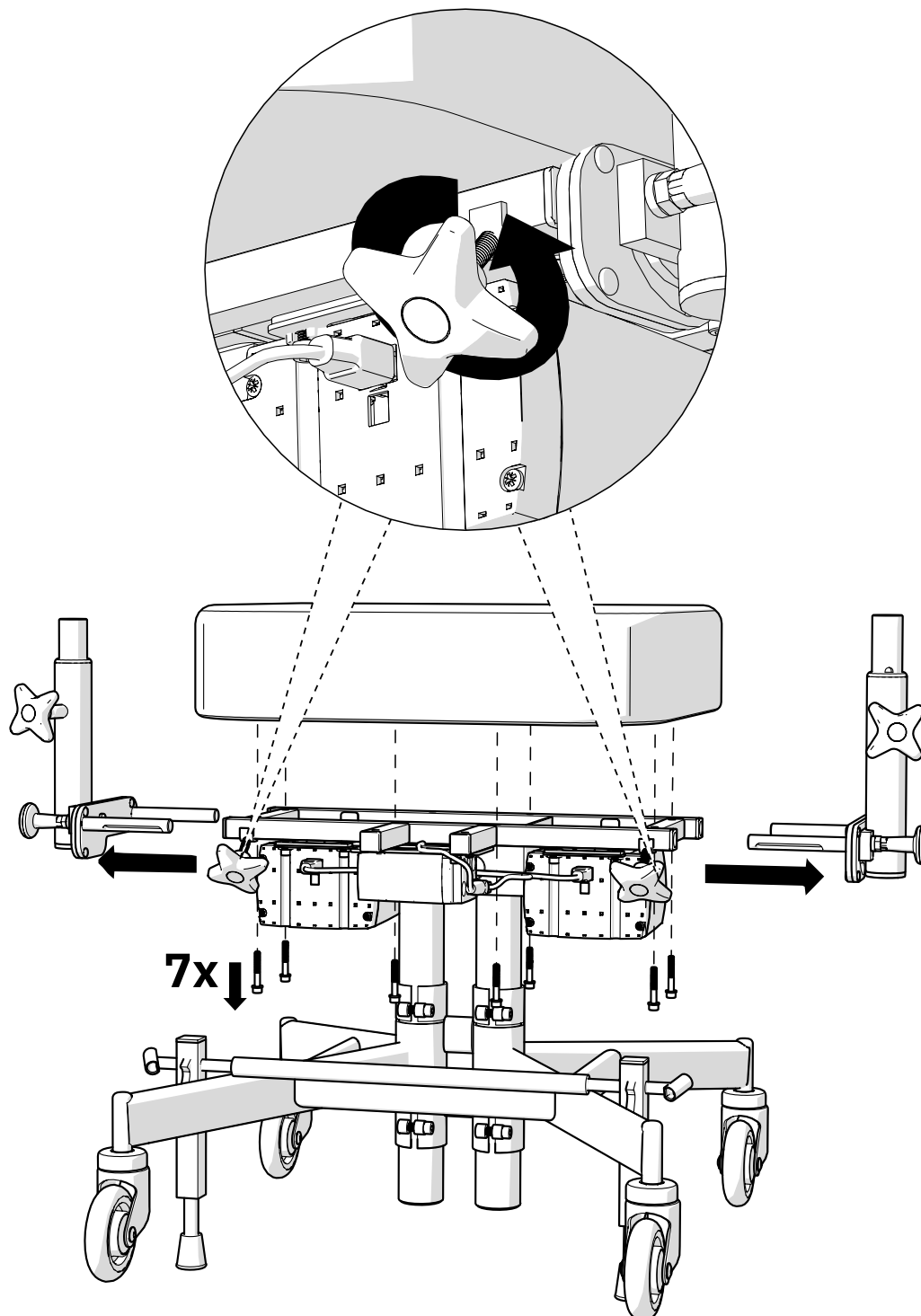


2.2. Ta bort stativet

Lossa på de fyra skruvarna som håller ihop stativets klämförband. När alla skruvarna har lossats kan ställdonen åka ner i golvet och klämrisk kan uppstå. Lyft sen upp sittkryss och ställdon och ställ undan stativet.

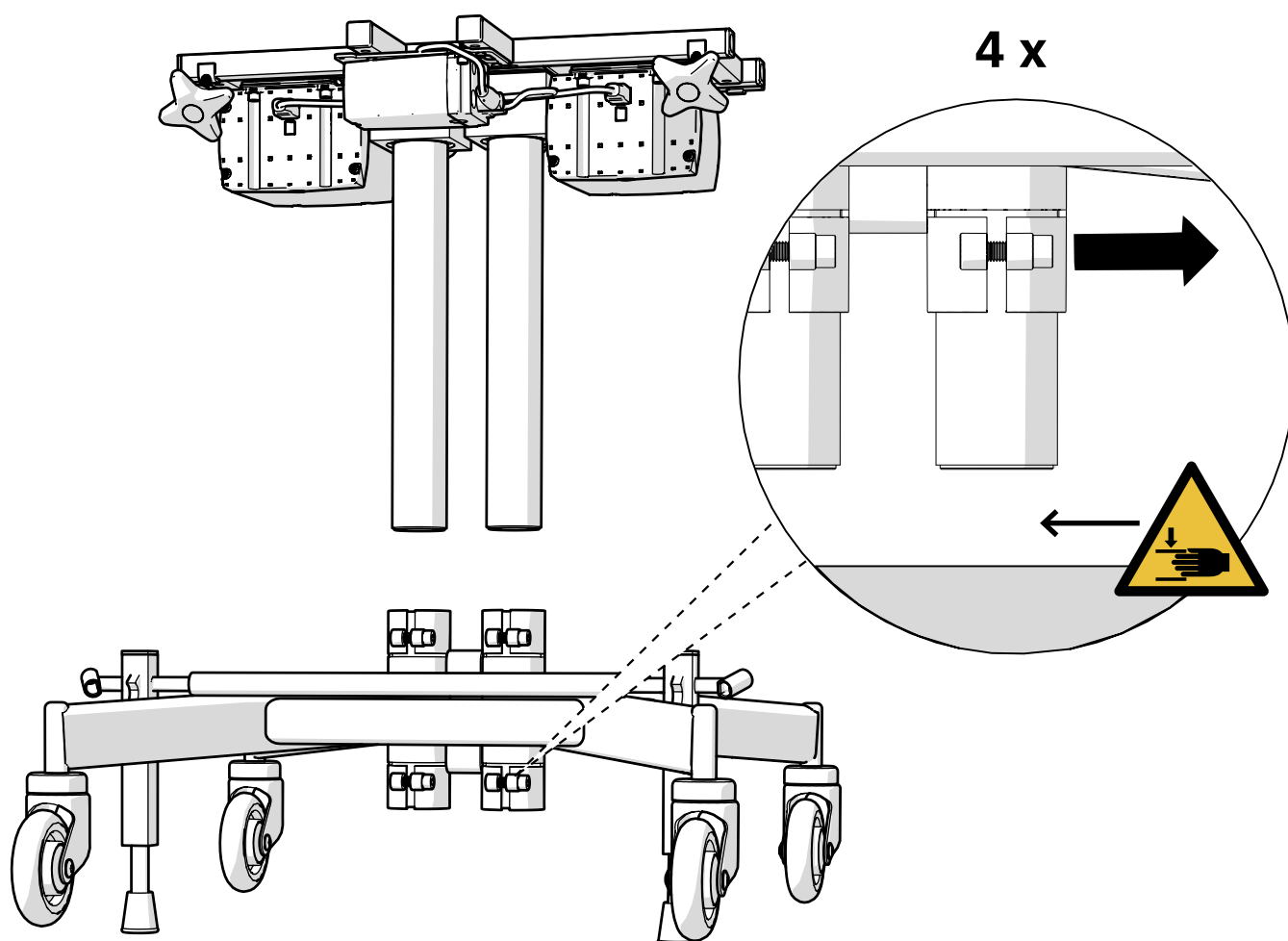


2.3. Koppla ur och ta bort elektronik

Vänd sittkryss och ställdon uppochner. Koppla ur alla sladdar från elektronikboxarna. Skruva loss alla skruvar som håller fast boxarna i sittkrysset och ta bort elektronikboxarna.

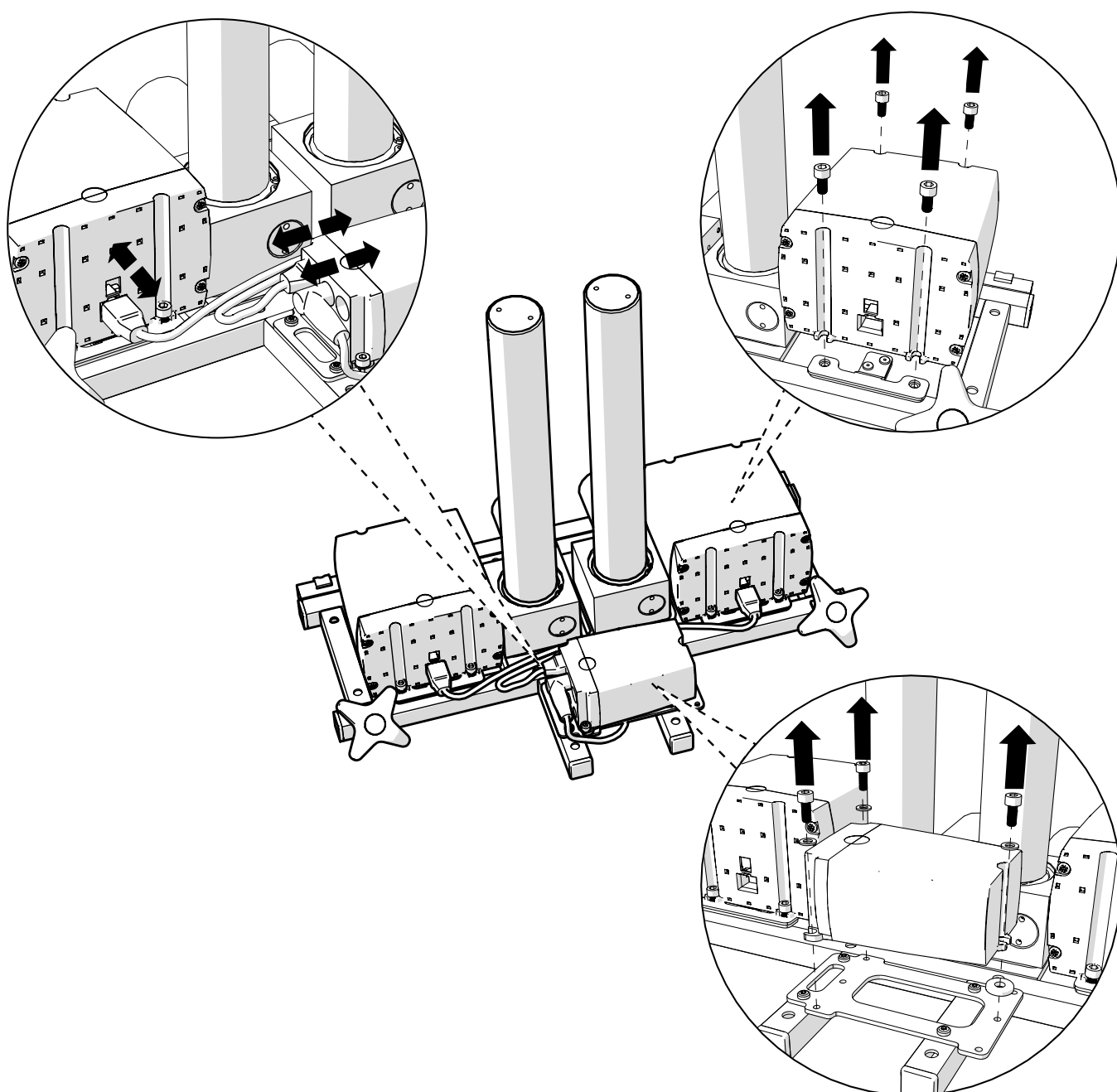


2.4. Ta bort sittkryss

Lossa på skruvarna som håller ihop ställdon och sittkryss. Skruvarna sitter fast med LocTite och kan vara svåra att lossa på.

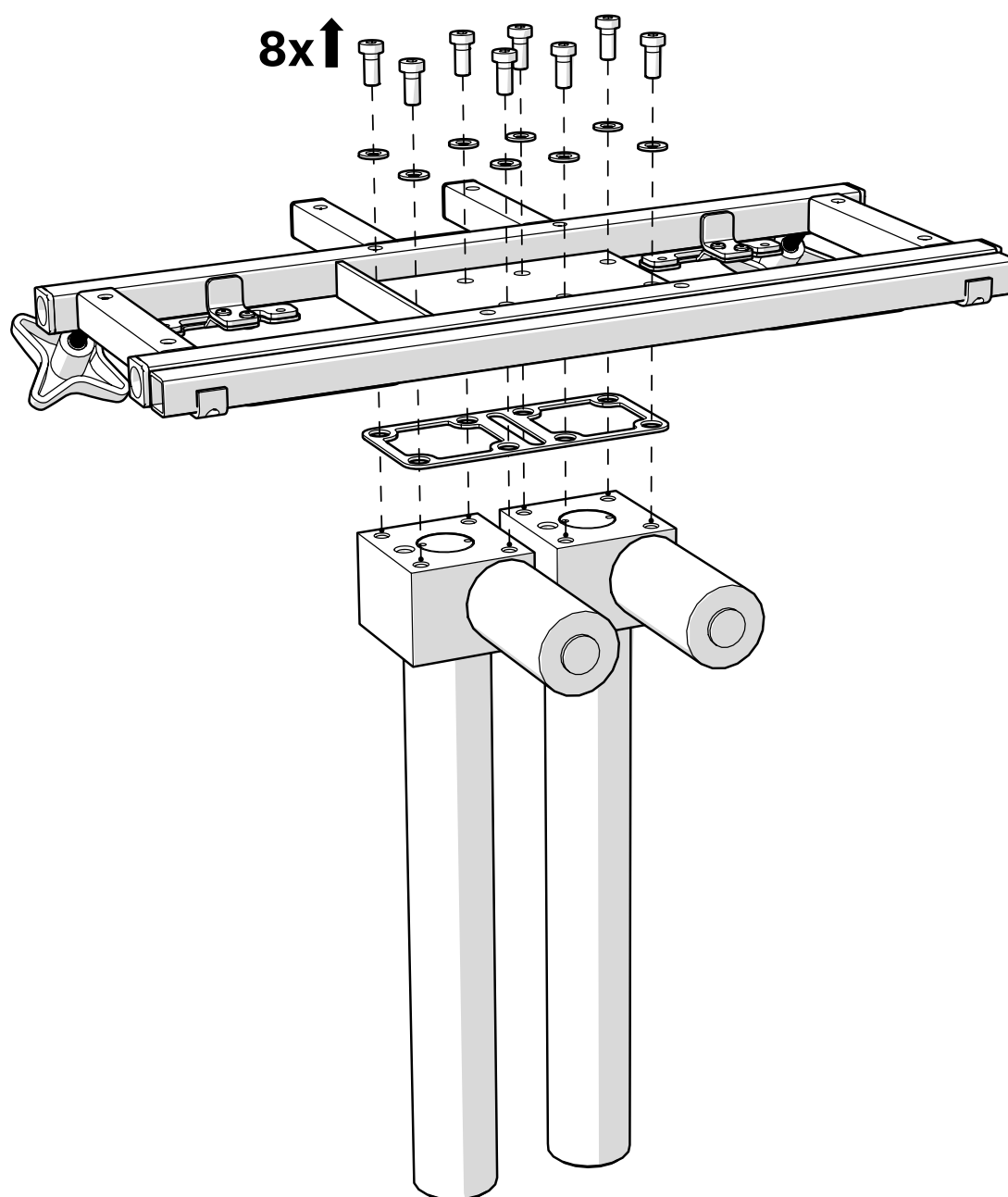


2.5. Byt ut sittkrysset

Ta fram det nya sittkrysset och kontrollera att det är komplett med samtliga fästen och rattar.

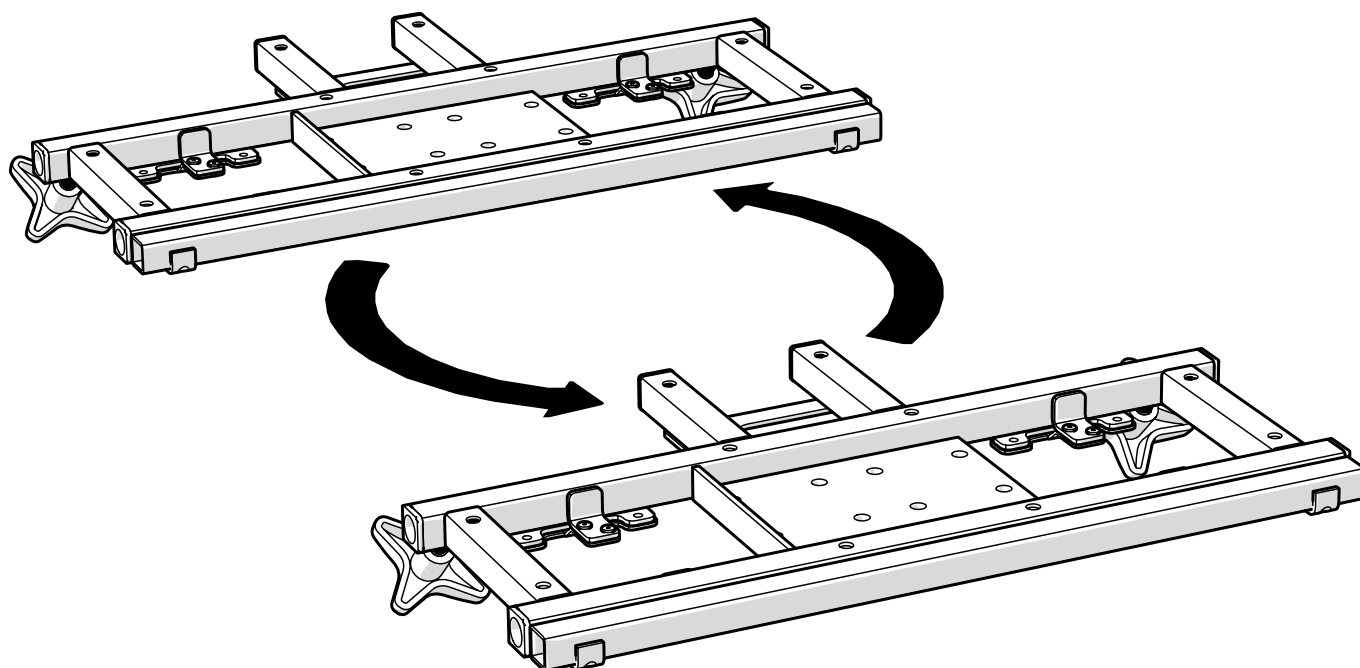


2.6. Montera sittkrysset

Dropa i LocTite i ställdonens skruvhål och skruva i alla skruvar som håller ihop sittkryss och ställdon, men dra inte åt dem än.

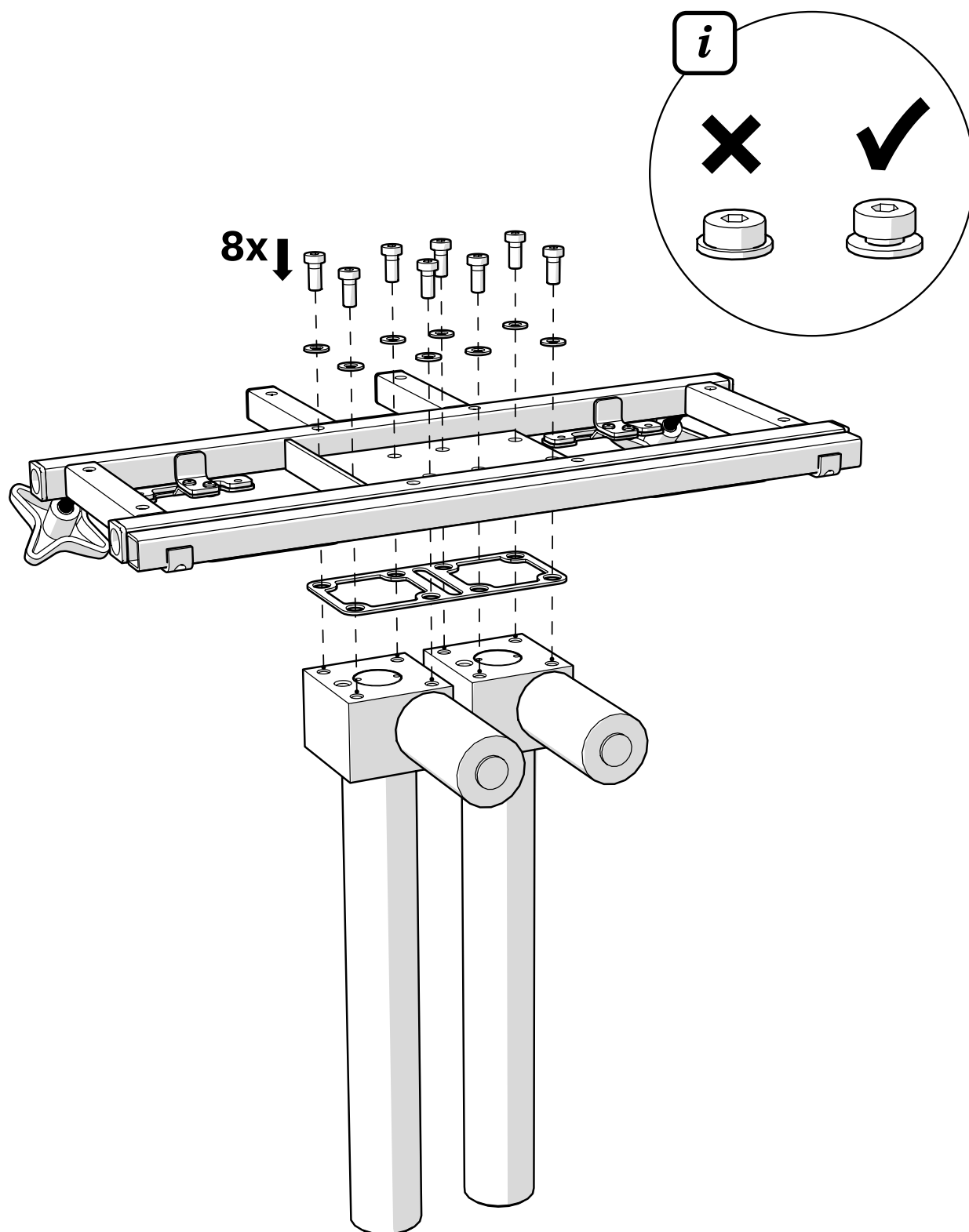


2.7. Montera elektroniken

Vänd sittkryss och ställdon uppochner. Skruva fast alla elektronikboxar i sittkrysset. Glöm inte distansbrickan under styrboxen. Koppla in alla sladdar till elektronikboxarna.

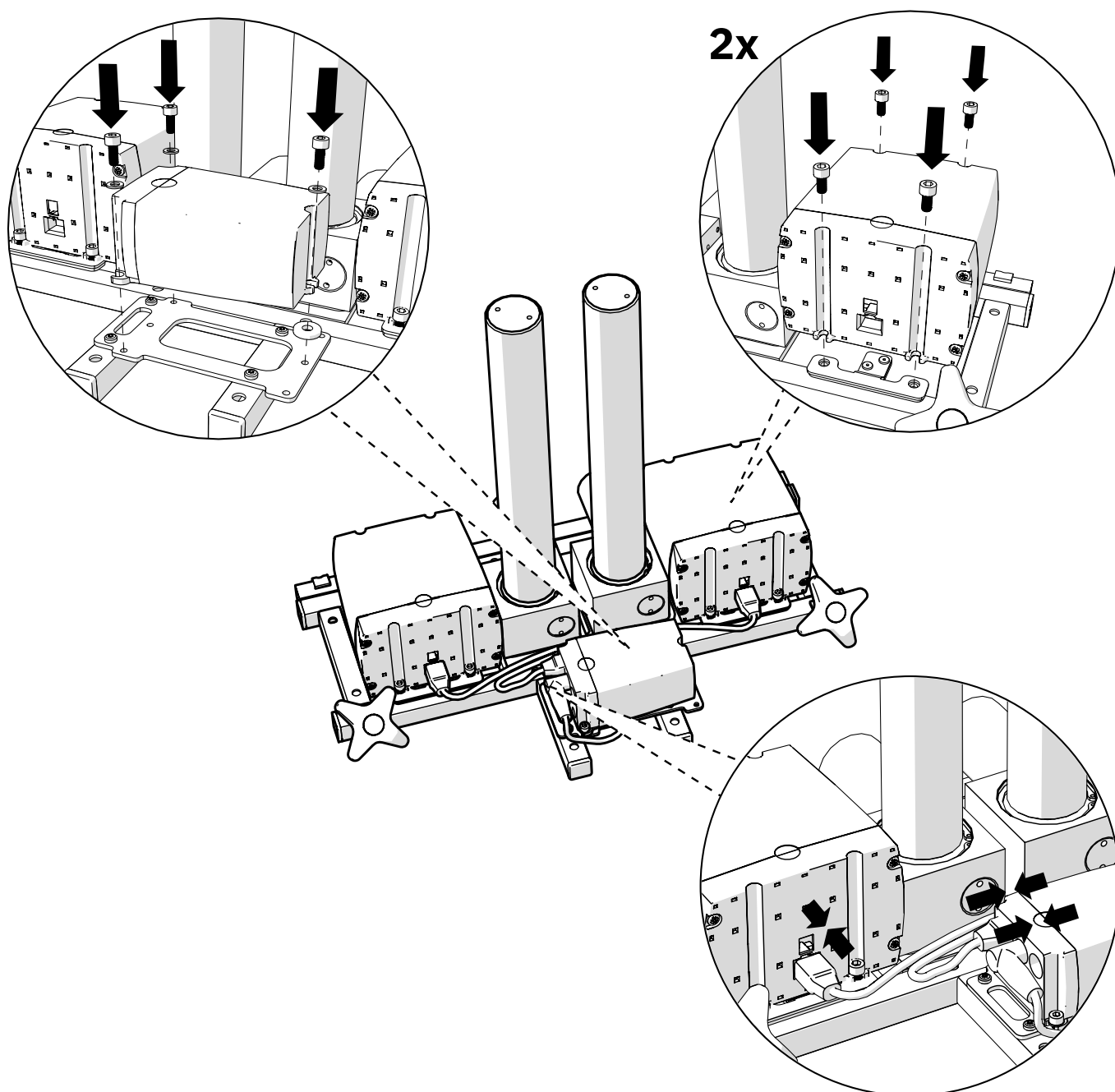


2.8. Montera stativet

Lyft sittkryss och ställdon och placera ställdonen i stativets centralrör. Ställdonen ska vara monterade med 3 cm frigång till marken. Använd gärna en kloss som ställdonen kan stå på. Dra sen åt skruvarna i stativets klämförband.

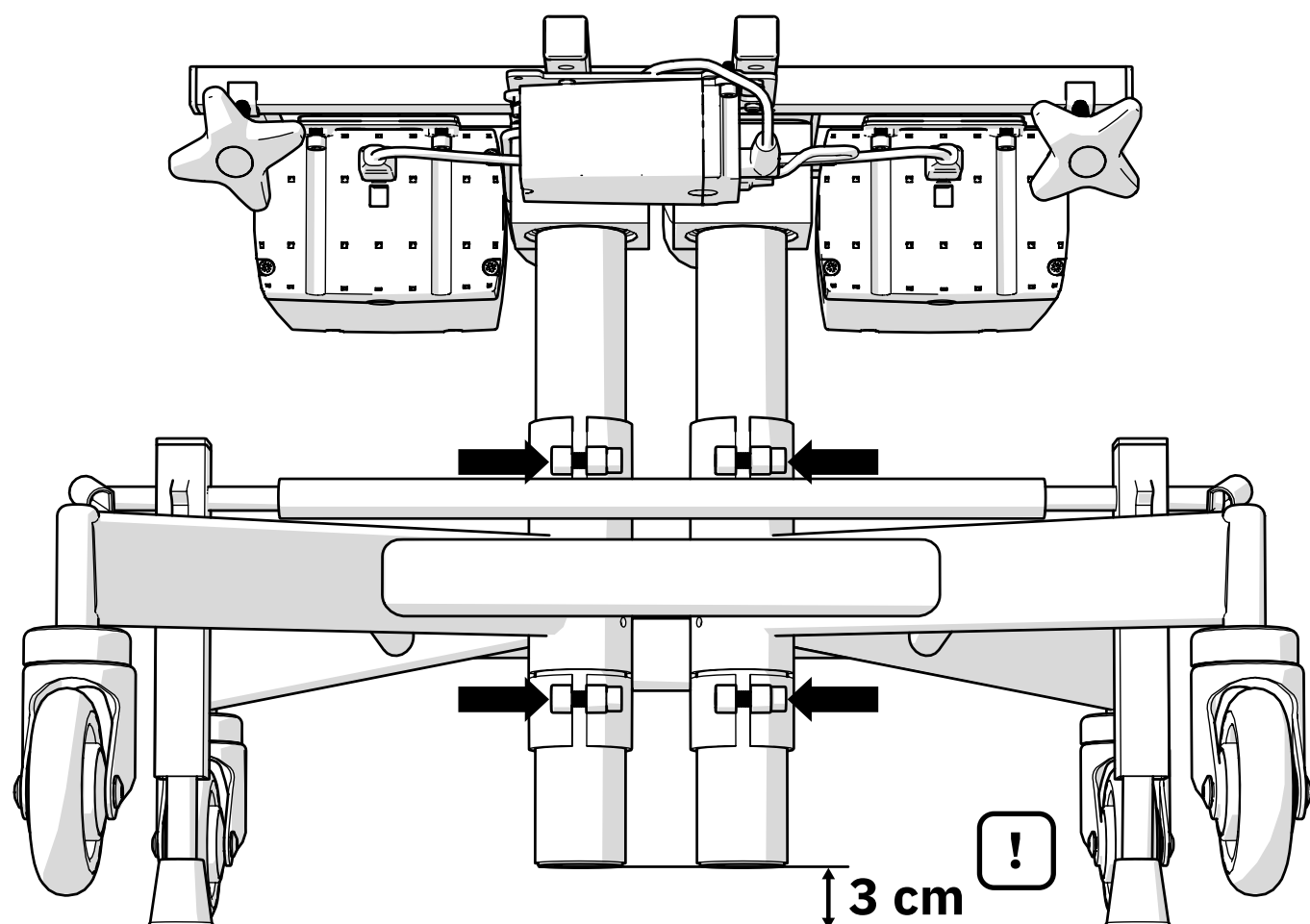


2.9. Säkra ställdonen

Dra åt alla skruvar som håller ihop sittkryss och ställdon

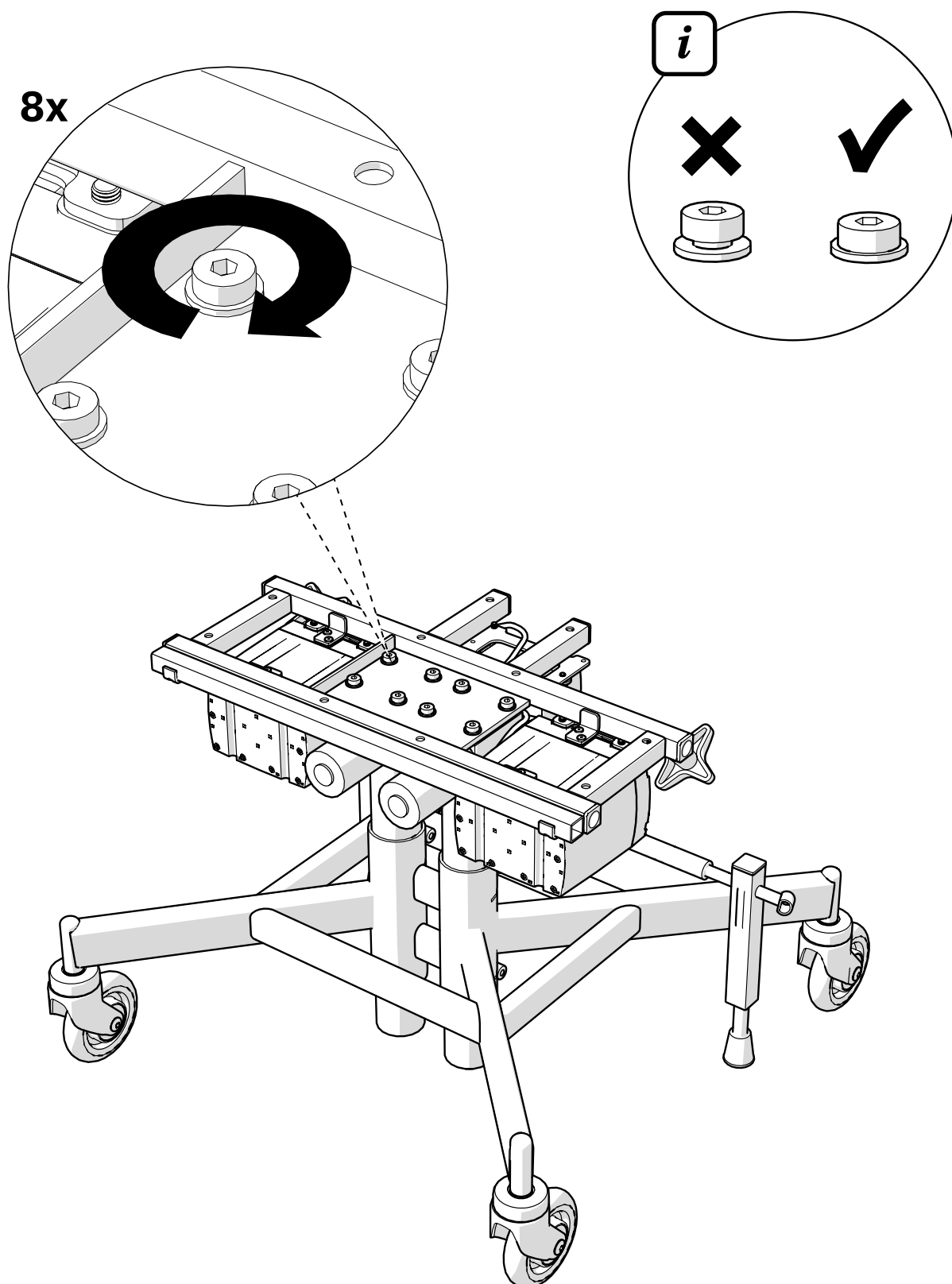


2.10. Montera stolens överdel

Skruva fast stolens sittplatta med de sju skruvarna som går igenom sittkrysset. Montera sen armstöden i sittkrysset och säkra dem med rattarna på sittkrysset.

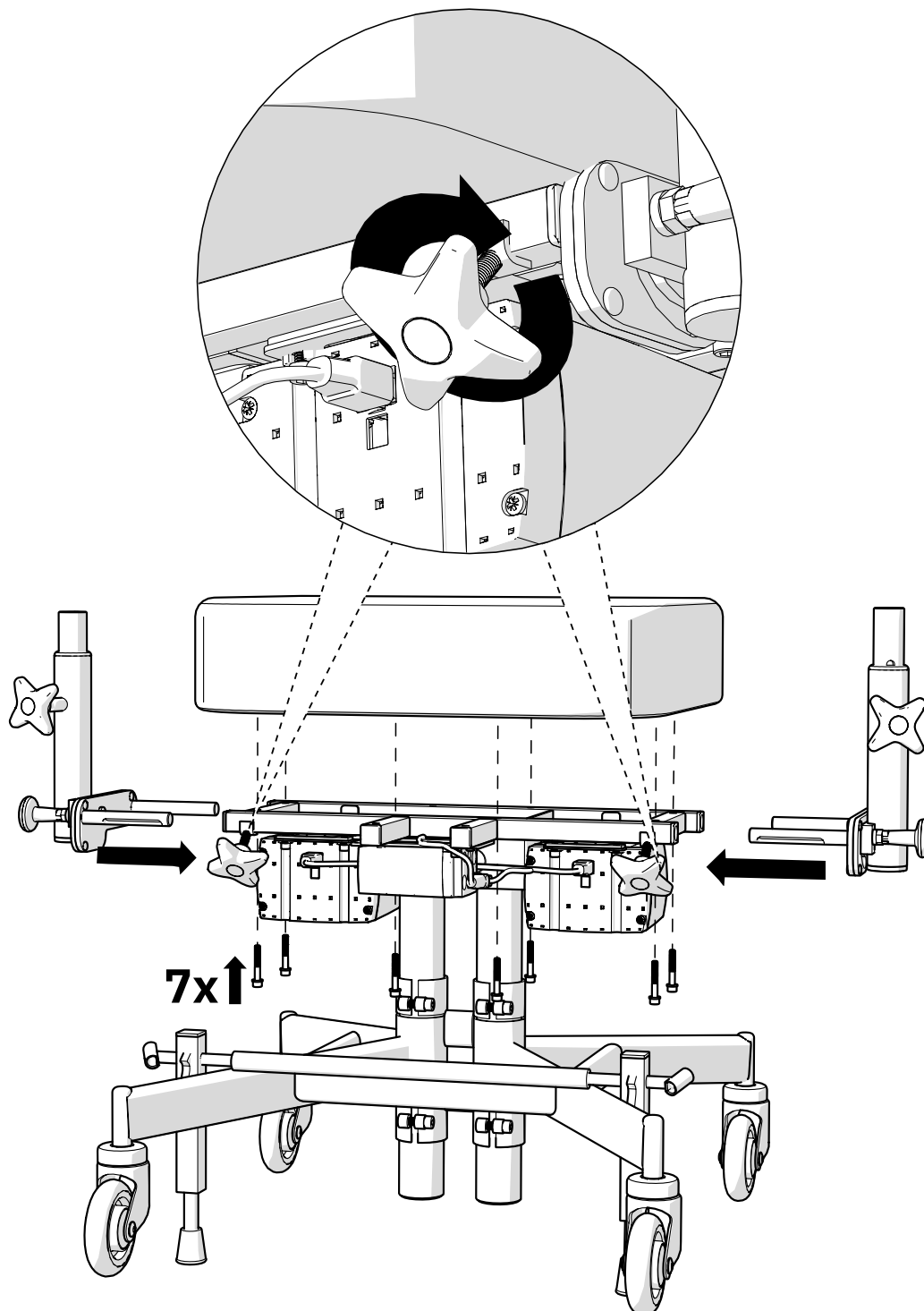

3. Destruktion & återvinning

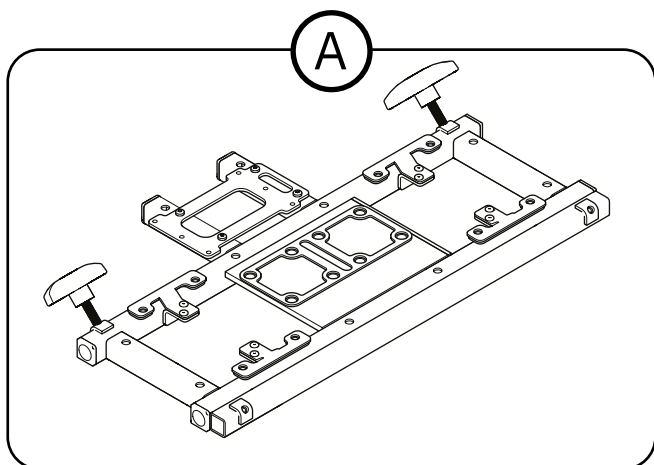

Ⓐ Sorteras som metall

Kontaktinformation

Mercado Medic AB



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö



08-555 143 00
Mån-Fre 08.00-16.30



www.mercado.se
info@mercado.se