


Begränsningar inom CE-märkning gällande Tredje parts joysticksgrepp


För att använda tredje parts joysticksgrepp med bibehållen CE-märkning på elrullstol för inomhusbruk klass A produktserie REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna begränsningar.

- **Joysticksgreppet skall sitta hårt påpressat** på joystickens axel och inte kunna lyftas av.
- **De 2 vingarna för rotationslåsning**, på REM 211, ACU200 och CR400/CR400LF får klippas bort för att applicera en tredje parts joystick. **Efter det kan manöverboxen inte återställas till original då originalgreppet roterar.**
- **Gäller joystickar i tabellerna nedan.** Vikt och höjd på tredje parts joystick lös, får ej överstiga maxlinjen, detta för att joystick skall orka tillbaka till neutralläge.
- **Montering:** Pressa joysticken **hela vägen ned** på manöverboxens axel tills den bottnar nedanför **vingarna** (för rotationslås).
- **Rotationslåsning:** Saknas passande spår i joysticken är det **tillåtet att fräsa spår** för vingarna för att uppnå rotationslås, om material och leverantörens anvisningar medger detta.
- **Kontroll:** Säkerställ noll glapp, full rörelse utan friktion och att eventuell låsning fungerar enligt specifikation. Bearbetning sker på egen risk.

Maxvikt i förhållande till höjd: REM211, REM400, CR400, ACU200

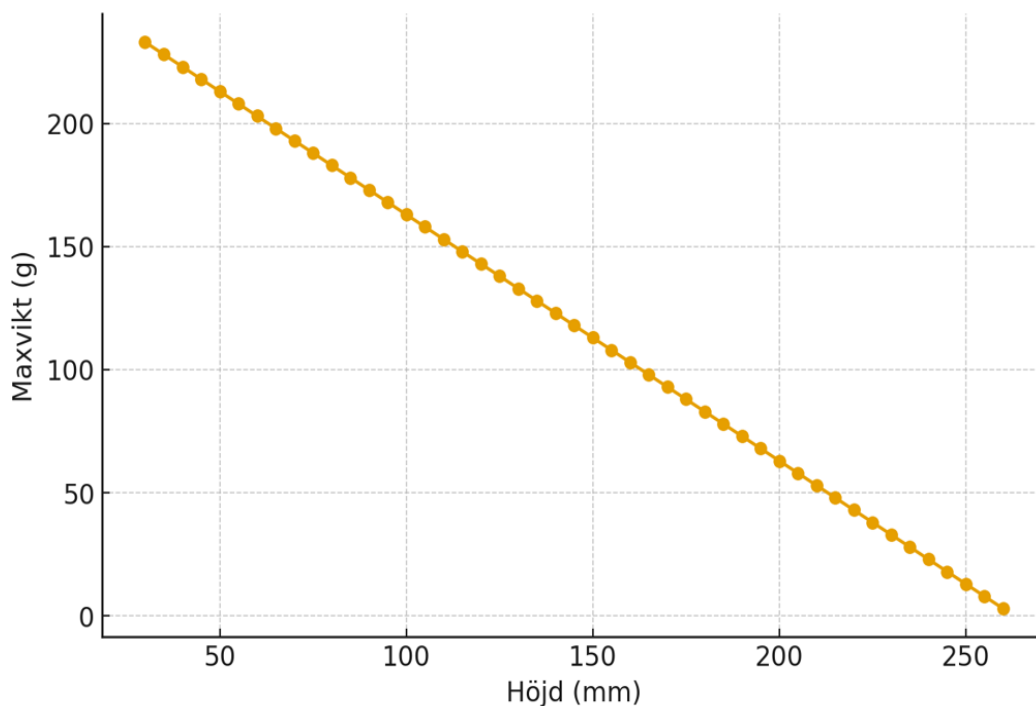

Maxvikt i förhållande till höjd: CR400LF (LF=Low Force)

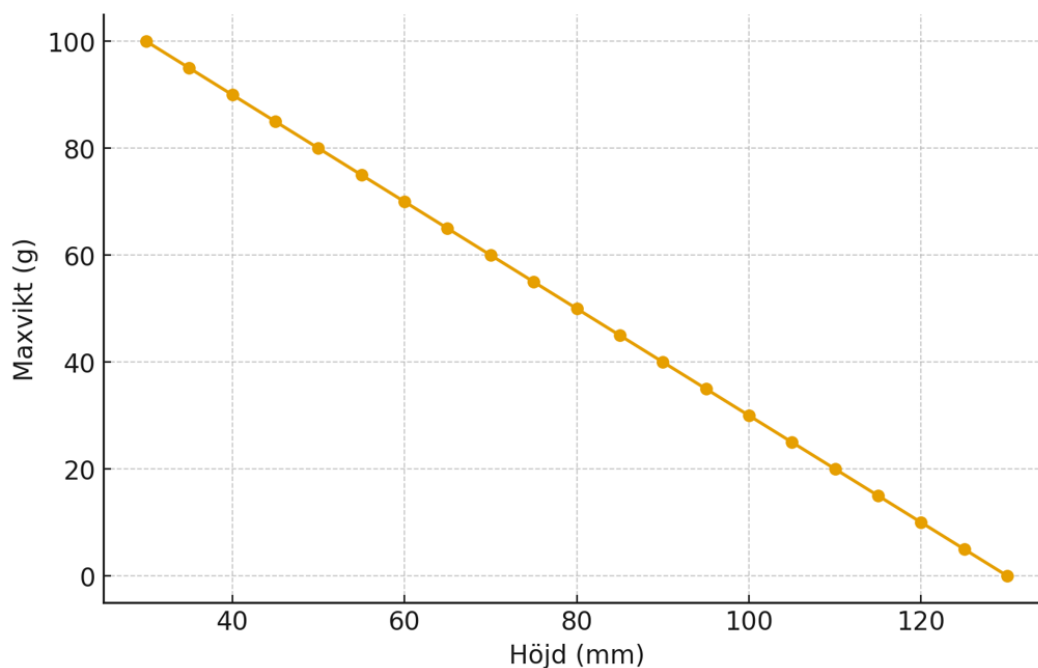

Uppfylls ovan kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten, vilket innebär att produkten kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic.

Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år, och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnda produkter.