



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA  
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET  
MED LÄKEMDELSVERKETS FÖRESKRIFTER  
2003:11.

# REAL<sup>®</sup> 2000

*magstödsstolar – avlastning för rygg och axlar*





## **Förebygger förslitningsskador**

Att under långa arbetspass sitta fel sliter på kroppen och ger inte sällan förslitningsskador. Trötthet och muskelspänningar i rygg och axlar blir ofta följden av ett långvarigt sittande i framåtlutad arbetsställning. Många arbetsuppgifter kräver ett tryggt och stadigt sittande.

En ergonomiskt korrekt sittställning på rätt höjd i förhållande till arbetsmomentet ger en naturlig avslappning för rygg, axlar och nacke. En anpassningsbar stol med sadelsits och magstöd, istället för ryggstöd, ger denna avslappning.

Mercado Medic AB har, i samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter, utvecklat stolsmodeller där man sitter ”bak och fram” med mag- i stället för ryggstöd.

### **Avlastning för rygg och axlar**

Mercados magstödstolar är avsedda för personer som är i behov av avlastning vid arbete som utförs i en framåtlutad position, eller som alternativ till traditionellt sittande. Denna sittställning möjliggör en symetrisk och gynnsam belastning av kroppen som helhet.

Stolarna är främst avsedda som arbetstekniskt hjälpmedel men fungerar även bra till smärtpatienter i rehabiliteringsprocessen.

### **Många valmöjligheter**

Tack vare att REAL 2621, 2624 och 2625 har 20 cm höjdintervall finner man snabbt en behaglig sitt-höjd. Alla dessa magstödstolar finns att erhålla med olika typer av ergonomiskt utformade sitsar och magstöd samt en mängd olika klädslar.

Den ergonomiskt utformade sits- och magplattan minskar den statiska muskelbelastningen i svanken. Sitsens sadelform, i kombination med stolens stora slaglängd, underlättar en stå-sittande arbetsställning. Med en lätt framåtlutad sits kan användaren sänka axlarna och ändå hålla ryggen rak. Detta minskar risken till förslitningsskador då produkten används

som arbetstekniskt hjälpmedel. För smärtpatienter innebär det lindrad smärta och förkortad rehabiliteringsprocess.

### **De olika modellerna**

REAL 2621 är i standardutförande utrustad med ett smidigt taburettsstativ utan hjul. Detta tillsammans med möjlighet att rotera sitsen, gör det gynnsamt att komma nära arbetsmomentet. Önskar man att stolen ska vara lätt att förflytta finns lätttrullade hjul (med eller utan bromsklaff) som tillval. Man kan även montera en fotring att placera fötterna på som stöd samtidigt som man utför sitt arbete.

REAL 2624 har ett fyrbent stativ med inbyggd broms. Den kraftiga bromsen med dubbla bromsben medför att stolen står mycket stadigt när den

är bromsad. Då stolen är bromsad fungerar även bromsaxeln utmärkt att sätta fötterna på som stöd samtidigt som man utför sitt arbete. De lätttrullade 75 mm-hjulen gör det lätt att förflytta sig sittande i stolen.

REAL 2625 är utrustad med ett fembent stativ. De lätttrullade 75 mm-hjulen gör det enkelt att förflytta sig. Detta tillsammans med möjlighet att rotera sitsen, gör det gynnsamt att komma tätt intill den arbetsyta man önskar. Sitthöjden på REAL 2625 är något lägre på än på REAL 2621 och 2624. Detta gör att den passar bra för kortare personer.

Stolarna är konstruerade med högt ställda krav vad gäller komfort, funktion och slitstyrka. De tillverkas i egna anläggningar i Halmstad och på Lidingö.




REAL 2621, 2624 och 2625 kan med fördel utrustas med olika sitsar och magstöd för att tillgodose ert behov.

#### **SITSAR**

- 1 Sadelstsits 36x36 cm
- 2 Ergomedic sits 40x36 cm
- 3 Rund sits "toppig" 35 cm

#### **MAGSTÖD**

- 4 Standard magstöd Medic 27x23 cm
- 5 Alternativt magstöd 33x16 cm

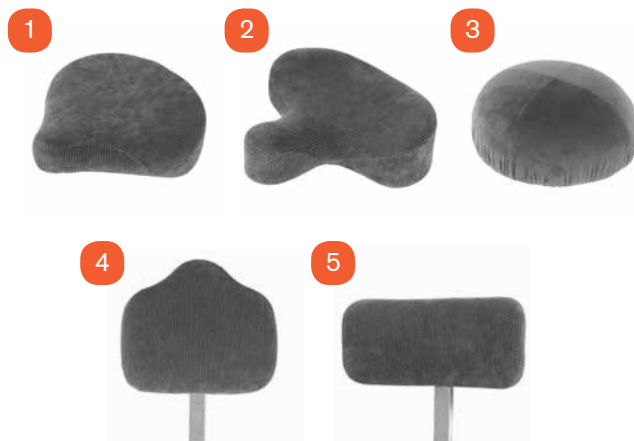

# REAL<sup>®</sup> 2000



## REAL 2621

sadelsits Medic 40x36 cm  
alternativt magstöd 33x16 cm  
Extrautrustning:  
hjul 50 mm med låsklack

## REAL 2624

sadelsits Medic 40x36 cm  
magstöd Medic 27x33 cm

## REAL 2625

sadelsits 36x36 cm  
alternativt magstöd 33x16 cm

MODELL	2621	2621-1	2624	2624-1	2625
Gaslyftomat	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Fixerad lyftomat	-	-	Ja	Ja	-
Manuellt vinkelställbar sits (+22°/-14°)	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Rotationslås	Ja*	Ja*	-	-	Ja
Magplatta Medic 27x23 cm	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja
Magplatta låg 33x16 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glidknappar	Ja*	Ja*	-	-	-
Hjul 75 mm	-	-	Ja*	Ja*	Ja
Hjulformade fötter 50 mm	Ja	Ja	-	-	-
Belastningsbromsade hjul 50 mm	Ja	Ja	-	-	-
Hjul 50 mm med låsklaff	Ja	Ja	-	-	-
Broms	-	-	Fotbroms*	Fotbroms*	-
Sitthöjd cm	50-70**	60-80**	50-70**	60-80**	40-60/50-70 60-80**
Sadelsits Medic 40x36 cm	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja
Alt. sadelsits Ergomedic 40x36 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alt. sadelsits 36x36 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja*
Alt. sadelsits 41x41 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stativ cm (br x dj)	42,5x42,5	42,5x42,5	43x48	43x48	-
Max brukarvikt	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

\*standard, \*\*sits tiltad max framåt mätt i framkant undertill - 5 cm från ovan angivna mått

