




DE REAL AANGEPASTE KINDERSTOEL



Valid from 070601

Last change 140415

Article number 803374

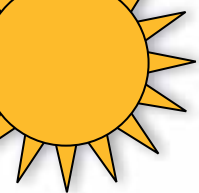

EEN STOEL MET MODULAIR SYSTEEM EN ENORME MOGELIJKHEDEN

Veel kinderen met een functiebeperking kunnen comfortabel zitten aan een tafel zonder uitgebreide ondersteuning, maar ze hebben dan wel een stoel met speciale functies nodig. Het moet mogelijk zijn om de stoel gemakkelijk te kantelen, terwijl er op hetzelfde moment een stabiele ondersteuning is van de rug en voeten. REAL EL 9000/9100 PLUS voor kinderen, is de modulaire stoel waar de behoefte van het kind het ontwerp bepaalt.

REAL 9000 PLUS voor Kinderen - gemakkelijk aan te passen

The REAL 9000/9100 EL PLUS heeft een plus-frame. Hierdoor kunnen kinderen met een functiebeperking actief zitten aan een bureau of tafel. De hoogte van de zitting kan gemakkelijk worden gecorrigeerd voor diverse tafelhoogten, en de rem is bedienbaar met de hand of de voet. Dit betekent dat de stoel veilig op de plaats blijft staan waar u dat wilt, maar hij kan ook gemakkelijk worden verplaatst indien nodig. De stoel moet ook eenvoudig aan te passen zijn voor de gebruiker, dat is waarom Mercado Medic een modulair systeem gebruikt. De Mercado Real stoelen kunnen tussentijds simpel aangepast worden naar de groei van het kind.

Hoge Kwaliteit

The REAL 9000 PLUS KIND is een modern, flexibel en duurzaam ontwerp. Hij is vervaardigd in onze eigen fabriek in Zweden

PLUS-frame voor Kinderen

Het kleine veelzijdige plus-frame is makkelijk verplaatsbaar en past aan elke tafel. Het plus-frame wordt gecombineerd met de nieuwe armsteun voor het plus-frame. De nieuwe stabiele Medic Mini beensteunen in verschillende maten zijn optioneel.

Options

De REAL 9000/9100 EL plus voor kinderen kan worden aangepast met tal van opties. (Voor meer informatie, zie onze "Accessoires" folder).

” DANKZIJ HET MODULAIRE SYSTEEM. KAN DE STOEL AANGEPAST WORDEN NAARMATE HET KIND GROEIT. ”

Ergomedic PLUS zitsysteem - uniek ergonomisch design

Voor een verbetering van het zitcomfort, heeft Mercado Medic het ergomedic plus zitsysteem ontwikkeld. Het is geschikt voor kinderen met positioneringsmoeilijkheden. Het systeem bestaat uit vier onderdelen: zitting, rugleuning, armsteunen en hoofd/neksteun.

De onderdelen hebben de juiste vorm en zachtheid om optimale stabiliteit, ondersteuning en comfort te waarborgen.

Het onderste deel van de hoge rugleuning is zo gevormd dat het kind bij gekanteld zitten goede ondersteuning bij het bekken heeft.

De hoge rugleuning is ook beschikbaar met zijdelingse steun voor ultiem comfort en positionering (voor meer informatie zie onze 'Zit-systeem' folder).

Ergonomische bediening

Om de stoel moeiteloos te kunnen bedienen, is de REAL 9000/9100 EL PLUS KIND uitgerust met ergonomische en gemakkelijk bereikbare bedieningen. Ze zijn gemarkeerd met symbolen voor elke functie. De stoel kan ook eenvoudig worden aangepast met allerlei andere bedieningen.

Nieuw mechanisme voor zithoekverstelling

Onze nieuw ontwikkelde regeling voor de zithoekverstelling heeft een verlengd interval (+15 / -23 °) en is instelbaar in drie afwisselende intervallen (zie foto nr 2 op pagina 5).

Deze optie is geschikt voor kinderen waarbij een uitgebreidere verstelling noodzakelijk is. Hierbij ook de mogelijkheid tot het kiezen of de armsteunen meebewegen met de zithoek of niet.



REAL SPIDER



REAL 9300 PLUS Mini



REAL 9300 PLUS Child



REAL 9400 PLUS EL Junior

DE REAL AANGEPASTE KINDERSTOEL

- waar kwaliteit, functionaliteit en design samenkomen!

*PLUS arMLEuning
mechanisme met zachte
bepolstering. Beschikbaar
in een reeks van lengtes
en materialen.*

*ErgoMedic PLUS
zit systeem.*


*Makkelijk bedienbare
remhendel met een
in breedte verstelbare
beugel. Gemonteerd
aan de rechterkant en
linkerkant.*

*Medic Mini gedeelde
voetenplaat (maat S-XL).*

*Kwalitatief hoog-
waardig frame 43x53 cm
(alt. Mini 43x48 cm).*

*100 mm wielen
met SKF kogellagers.
Verkrijgbaar in een reeks
van soorten aan te passen
aan verschillende
soorten oppervlak.*

*Hoogteverstelling
van 20 cm
(alt. 14 cm). El 28 cm
(alt 20 cm).*

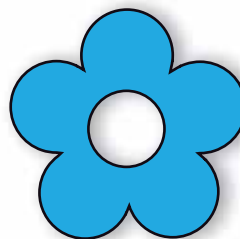


**WIJ KUNNEN DE STOEL
AANPASSEN**



**AAN DE BEHOEFTE
VAN HET KIND.**



EEN MODULAIR SYSTEEM WAARBIJ DE BEHOEFTE VAN HET KIND HET ONTWERP BEPAALT

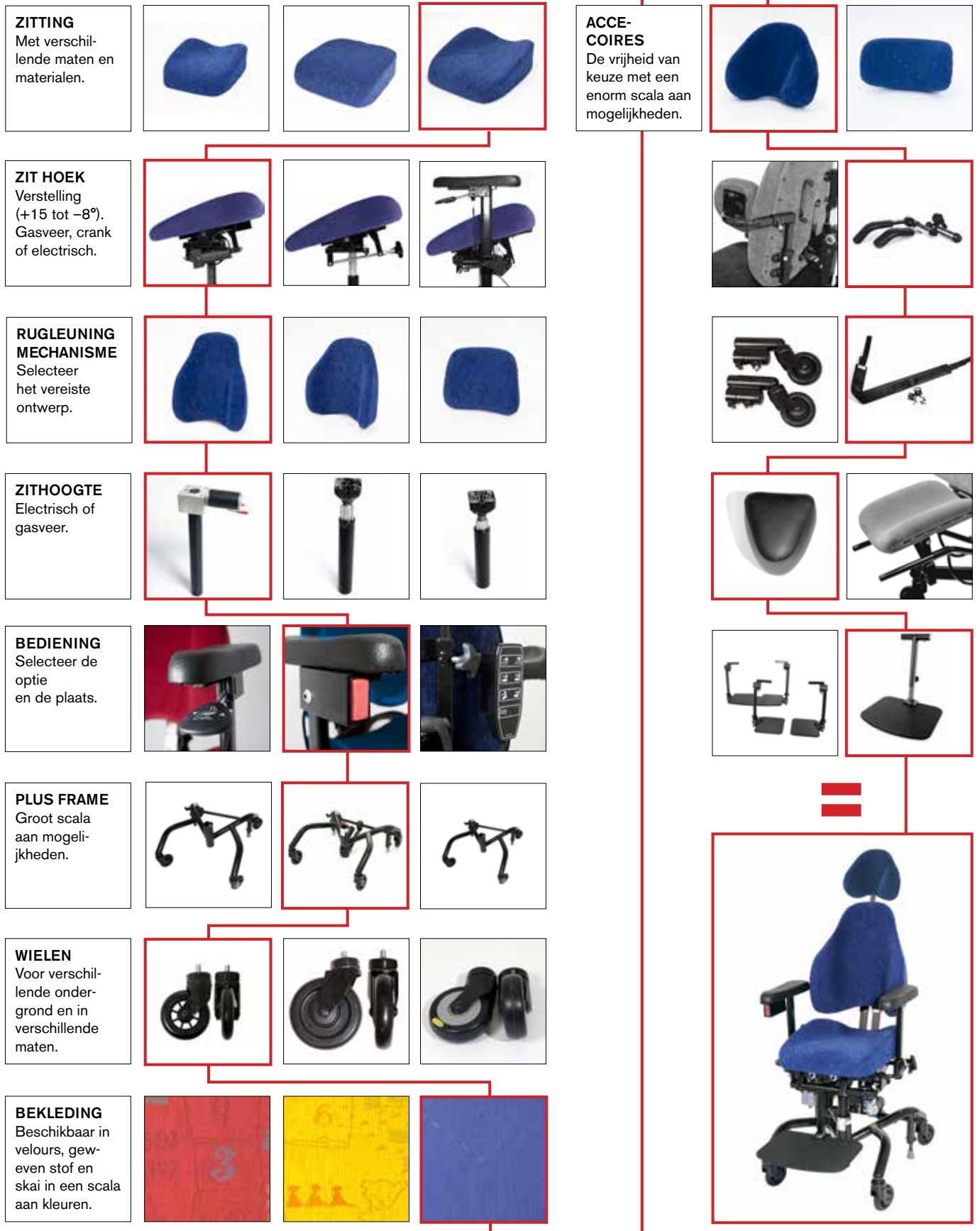

ACCESSOIRES



1

Zijkussens



2

Versterkt zitframe verstelbaar in drie intervallen;
 $+15^\circ$, -8° / $+8^\circ$, -15° / $+0^\circ$, -23° ($+15^\circ/-23^\circ$)



3

Voetondersteuning Mini Medic, gedeelde voetplaat
(alt. gehele voetplaat)



4

Zitsysteem ErgoMedic PLUS





5

Centrale voetenplank (kind, Mini)



6

Duwhandvatten voor PLUS frame



7

Duwbeugel voor PLUS frame



Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde
Nederland

Phone & Fax

Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email & Internet

Email info@mercado-medic.nl
Internet www.mercado-medic.nl