




REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA  
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET  
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER  
2003:11.

# TILLBEHÖR

*tillval / tillbehör till REAL 9000 PLUS, 6100, 6100 PLUS, Barn och Vuxen*

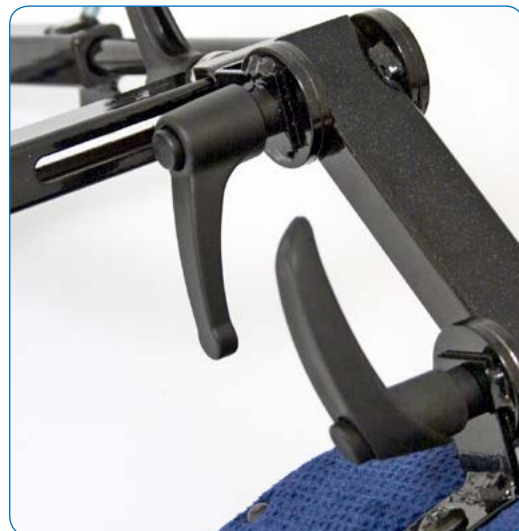

**SE MER I VÅR WEBSHOP!**  
[SHOP.MERCADO.SE](http://SHOP.MERCADO.SE)

**MERCADO  
MEDIC**

# TILLVAL / TILLBEHÖR

## STATIV

För att tillgodose olika behov så finns stativen i flera utföranden; till exempel vårt klinikstolsstativ med inbyggd fotbroms. Stolen går att bromsa utan att man behöver böja sig nedåt efter bromspaken.

PLUS-stativet är smidigt och lämnar stort utrymme för benen samt förenklar avsevärt möjligheten att förflytta sig sittandes i stolen. PLUS-stativet ger extra utrymme för fötter och benstöd. Benstöden monteras främst på PLUS-stativ och kan kompletteras med vaddstöd och knästoppar.

## BROMSSPAK

Bromsspakar finns i olika längder och kan placeras på höger eller vänster sida.

Reumatikerkruss monteras på bromsspaken.

Det förenklar bromsning av stolen för de som finner det svårt att nå bromsspaken i normala fall. Det finns även elbroms.

## STATIVFÖRLÄNGARE

En stativförlängare ger stolen ökad stabilitet och förhindrar att den tippar. Veldig bra tillval om brukaren är spastisk.


## HJUL

XL-hjulet 100 mm är standard och används främst för linoleum och mellanhårda golv. SL-hjulet är mycket lätttrullat och har dubbla kullager. Det fungerar bäst på hårda golv som till exempel parkett- och betonggolv. BSL-hjulet är ett SL-hjul med en bredare hjulbana. 125- och 150 mm-hjulen är bra vid förflyttning över trösklar och trall, med mera.

## FOTRING

Fotringen fungerar som ett stöd för fötterna då avlastning behövs. Den är enkel att fälla upp eller ned efter behov, exempelvis vid förflyttning då man behöver utrymme för fötterna. Fotringen finns i två utföranden och passar till samtliga REAL 9000-stolar med PLUS-stativ.

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	<b>Stativ 9000 PLUS 48 (vuxen)</b> 100 XL 100 SL	802659 802660	8	<b>Handbromsspak m. ögla för PLUS-stativ</b> 35 cm	BD1110
2	<b>Stativ 9000 PLUS 43 (barn)</b> 100 XL*, komplettera med bromspedal 100 SL*, komplettera med bromspedal *tillval till stativ, bromspedal för Plus-stativ	802657 802658 802865	9	<b>Körbygel PLUS till PLUS-stativ 48</b> <b>Körbygel PLUS till PLUS-stativ 43</b>	PB1011 PB2011
3	<b>Stativ 9000 PLUS Transport kpl. m. körbygel och handbroms</b>	803793	10	<b>Körhandtag PLUS</b>	PB1010
4	<b>Elbroms för montering på PLUS-stativ</b> Kit för EL stol, komplett Kit för Manuel stol, komplett	803276 803077	11	<b>Ryggmekanism fast f hög rygg</b> inklusive körhandtag djupjust. 2 lägen	803903
5	<b>Fyrbroms kit till PLUS-stativ 43/48</b> inkl. stativförlängare fram, OBS! Stativ ingår ej	803503	12	<b>Bromsspaksfäste för PLUS-stativ</b> Justerbart i bredd, 7 hål Justerbart i bredd, 2 hål	802800 802799
6	<b>Stativ 9000 PLUS 48 4-bromsat</b> 100 XL omvänd broms	804270	13	<b>Stativförlängare</b> Bak för PLUS, Par Fram för PLUS, Par	BEX20 BEX10
7	<b>Eldonssats för elbroms PLUS-stativ</b>	803037	14	<b>Hjul (komplett inklusive bygel)</b> Länkhjul XL 100 mm Extra lätttrullat länkhjul SL 100 mm Extra brett lätttrullat länkhjul BXL 100 mm Länkhjul 125 mm Länkhjul 150 mm	801213 801144 803162 800904 800905
8	<b>Stor kula 50 mm till handbromsspak</b>	LB1010	15	<b>Fotringar 1/8</b> Fotring 1/8, uppfällbar Hö, PLUS 48 Fotring 1/8, uppfällbar Vä, PLUS 48 Fotring 1/8, uppfällbar Hö, PLUS 43 Fotring 1/8, uppfällbar Vä, PLUS 43	FR1010 FR2010 FR1020 FR2020
8	<b>Liten kula Röd 35 mm</b>	LB1020	16	<b>Fotringar 1/4</b> Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 48 Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 43	FR3010 FR3020
8	<b>Liten kula gummi Svart 40 mm</b>	LB1040			
8	<b>Reumatikerkruss</b>	RC1010			
8	<b>Handbromsspak för PLUS-stativ</b> 25 cm 35 cm 45 cm 55 cm	BD1020 BD1010 BD1030 BD1040			

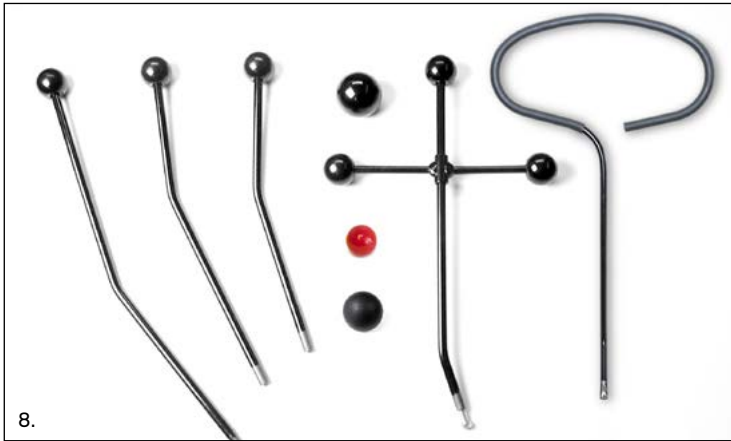

# FÖR INDIVIDUELL ANPASSNING

## BENSTÖD MEDIC

Benstöd i form av hel eller delad fotplatta finns i fyra storlekar: S, M, L och XL. De är ställbara i höjd-, vinkel- och djupled. Fotplattornas mått är desamma på S-XL. Även fotplattan kan ställas i vinkel. Även mittmonterat benstöd "Mobil" finns för vuxen och barn. Benstöden monteras främst på H-stativ och kan kompletteras med vadstöd och knästoppar. Benstöden monteras i ett benstödsfäste (fyrkantör) under sitsen.

## VADSTÖD

Vadstöden fungerar som ett extra stöd för vaderna då benstöden inte räcker till för att stabilisera benen. Vadstöden finns i olika utföranden för respektive benstöd och vadstödsmekanismen monteras enkelt med fästen på benstöden.

## KNÄSTOPPAR

Korrigerande av ben och fötter kan ske med hjälp av justerbara knästoppar, som kan regleras till brukarens benlängd.

Knästopparna hindrar brukaren från att glida framåt och monteras på benstöd Medic och är utfällbara och justerbara i höjd- och djupled. Knästoppskuddarna finns att få i olika material och färger.

## ADAPTER

Benstödsadapterar finns till rullstolsbenstöden Cross och Comfort.

Om man vill montera på egna benstöd på produkten så är det möjligt med dessa. Adaptern monteras på armstödens breddjusteringsbåge.

 TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100

 TILLBEHÖRET PASSAR ENDAST REAL 6100

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.N
1	<b>Benstöd "Comfort" EL</b>		8	<b>Benstöd Medic helt</b>	
	Hö	802437		S (18-24 cm)	LS101110
	Vä	802436		M (23-32 cm)	LS101210
Fäste för benstöd "Comfort" EL	802979	L (28-41 cm)		LS101310	
		XL (38-51 cm)		LS101410	
2	<b>Benstöd mittmonterat (32x24 cm)</b>		9	<b>Benstöd Mini Medic helt</b>	
	S (30-38 cm)	LS202110		S (18-24 cm)	LS111110
	L (37-53 cm)	LS202210		M (23-32 cm)	LS111210
				L (28-41 cm)	LS111310
	<b>Benstöd mittmonterat PLUS (29x24 cm)</b>			XL (38-51 cm)	LS111410
	S (30-38 cm)	LS262110			
L (37-53 cm)	LS262210				
3	<b>Benstöd mittmonterad Mini</b>		10	<b>Benstöd Mini Medic delat</b>	
	S (30-38 cm)	LS212110		S (18-24 cm)	LS161110
	L (37-53 cm)	LS212210		M (23-32 cm)	LS161210
4	<b>Benstöd mobil 6100 kpl. Vuxen Vinkel</b>		11	<b>Benstöd mittmonterat</b>	
	elmanövrerat med sarg	600349		Kpl 30-38 cm Fotplatta djup 100 mm	LS222110
5	<b>Benstöd mobil 6100 kpl. Barn Vinkel</b>		12	<b>Vadstödmekanism komplett</b>	
	elmanövrerat med sarg	600311		Par Medic benstöd Br37, kudde 15x13	CS101038
6	<b>Sarg till fotplatta mobil 6100</b>		13	<b>Adapter för rullstolsbenstöd Cross</b>	
		803211		Hö	AD4011
7	<b>Knästopp</b>		14	<b>Adapter för rullstolsbenstöd Comfort</b>	
	Hö 16x8, svart konstläder	KS111038		Vä	AD4012
	Vä 16x8, svart konstläder	KS121038		Par	AD4010
8	<b>Knästopp mini</b>		14	<b>Adapter för rullstolsbenstöd Comfort</b>	
	Hö 12x8, svart konstläder	KS212038		Hö	AD2011
	Vä 12x8, svart konstläder	KS222038		Vä	AD2012
8	<b>Benstöd Medic delat, Par</b>		Par	AD2010	
	S (18-24 cm)	LS151110			
	M (23-32 cm)	LS151210			
	L (28-41 cm)	LS151310			
	XL (38-51 cm)	LS151410			



# SITTPLATTOR OCH SITSTILT

## SITSTILT

Mercados gasfjäder och elreglerade tiltningar kan placeras på fler platser än under sits eller armstöd. När sitsen tiltas följer även ryggplattan med som stöd.

Kontakta Mercado för fler alternativ som passar dina eller din brukares behov.

Vevreglerad sitstilt regleras av personalen med vev som kan låsas i fasta lägen. Är ett bra alternativ då gasfjäderreglerad sitstilt inte fungerar. Passar bra till ortopedkliniker där patienten ska sitta i ett visst gradantal, eller i skolmiljö till barn som behöver sitta aktivt.

Gasfjäderreglerad sitstilt under sits gör att brukaren kan själv justera sitstilt mellan aktivt och passivt sittande.

Då den gasfjäderreglerade sitstilt sitter under armstödet kan brukaren enkelt justera sitstilt mellan passivt och aktivt sittande. Förenklar även uppresning då sitsen är i framåtvinklat läge.

Elreglerad sitstilt under armstöd är mycket lättåtkomlig för brukaren och är lätt att ställa i fasta lägen. Bra alternativ för brukare som ej själva kan justera sin tyngdpunkt.

## SITTPLATTOR

ERGOMEDIC-sitsen är framtagen för optimal sittkomfort, då den är utformad lite högre under låren än under stjärten. Sitsens form fördelar trycket väl och förhindrar att man kanar fram, även då sitsen vinklas framåt.

ERGOMEDIC PLUS-sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Även denna sits är utformad så att den är högre under låren än stjärten. Den högre rundade formen på varje sida om låren stabiliserar både bäckenet och benen.

COXIT-sitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar. Den används främst vid lindring/rehabilitering av ortopediska skador i höft och lårben.


ERGOMEDIC SLOW RECOVERY är tillverkad av två olika material. Det översta så kallade slow recovery-materialet formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad sittkomfort.

Sits träplatta ska användas vid ingjutning eller eftermontering av sittskal. Sits med antiglid rekommenderas vid användning av olika individuellt anpassade sittdynor.


Sits med hygienväv bör användas av brukare med inkontinensproblem. Komplettera med överdrag i plysch.

 TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	<b>Gasfjäderreglerad sitstilt kpl. inklusive gasfjäder</b> Reglage vid armstöd Reglage vid sits	SAR31 SAR30	6	<b>Ställbart förstärkt sittkryss 9000, +15°/-23°</b> (ställbart i tre lägen) Vuxen Br 40-54 cm Barn Br 33-39 cm	803070 803071
2	<b>Vevreglerad sitstilt under sits</b> Komplett sats för vevreglerad sitstilt	SAR20	6	<b>Ställbart förstärkt sittkryss 6100, +15°/-23°</b> (ställbart i tre lägen) Vuxen Br 40-54 cm Barn Br 33-39 cm	803072 803073
3	<b>Förberedd för sitstilt</b>	SAR10	7	<b>Sittkryssmek 9000/EL Vs-15/+15</b> Br29-39 Max brukarvikt 75kg	803527
4	<b>Elreglerad sitstilt</b> Med manöverbox Med fjärrkontroll Med joystick Med lös dosa		8	<b>Sits träplatta</b>	ST10xx90
5	<b>Eldonssats för sitstilt kpl.</b>	803275	9	<b>Sitsplatta med antiglid</b>	ST10xx61
			10	<b>Sits ErgoMedic med hygienväv</b>	STxxx60

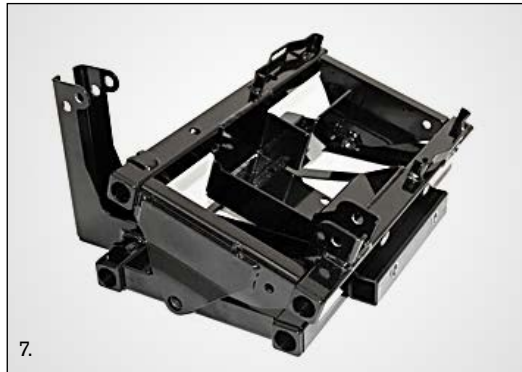

Kontakta Mercado eller se broschyren  
"Ergonomiska sittsystem" för mer information om sittplattor.

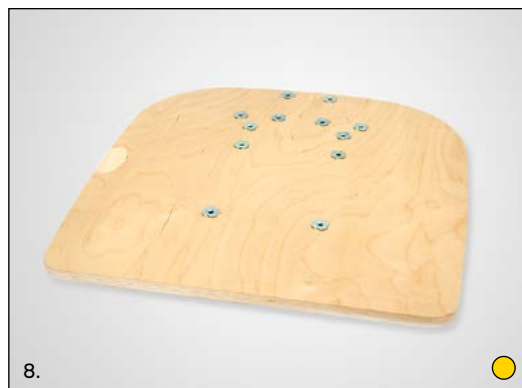

# RYGGAR OCH RYGGMEKANISMER

## RYGGMEKANISM

MEDIC RYGGMEKANISM ger möjlighet att utöka sitsdjupet på ett mer effektivt sätt än med standard ryggmekanism. Det behövs till exempel om brukaren är kraftigt kufotisk. För att få upp huvudet justeras ryggen bakåt och ryggplattan vinklas för att ge bästa möjliga stöd och på så sätt förhindra att överkroppen vill falla framåt. Fördelen med MEDIC RYGGMEKANISM är att vinkeljusteringen är i nedkant på ryggplattan. Det medför att vinkeljusteringen av ryggplattan inte inskränker på sitsdjupet och dessutom ger ett stöd i ryggen. Det centrerar automatiskt brukaren i sidled på grund av att stödet i ryggen fördelas på hela ryggens bredd i underkant.

COMFORT RYGGMEKANISM kan justeras i höjd, djup och vinkel med hjälp av gasfjäderreglage. Ryggen blir fjädrande mjuk och brukaren kan själv förändra sitt sittedjup sittandes i stolen.

Låg rygg är en ergonomiskt rätt formad ryggplatta som ger ett bra stöd åt svanken och tar upp rundningen i korsryggen. De låga ryggarna lämnar god rörelsefrihet för överkroppen.

Hög rygg ger ännu mer stöd och stadga speciellt uppåt utan att vara för hög och hindra överkroppens samt skuldrornas rörelser. Våra höga ryggar kan även fås med utbyggt svankstöd.

Extra hög rygg ger utöver ett bra svankstöd även ryggplattan stöd högre upp i bröstryggen. Ryggen smalnar upp till för att inte låsa skulderbladen i arbetsituation.

## RYGGPLATTOR

ERGOMEDIC-ryggens höga formgivning och vinkling har förändrats för att ge mer plats åt bäckenet och dess mjukdelar. Ryggplattans nedkant är lätt U-formad och mjukare än tidigare.

ERGOMEDIC PLUS-ryggen finns i ett antal varianter. Ett högre ryggstöd som har mer form runt bäckenet och bröstryggen. Högt upp i mitten, mellan skulderbladen, finns ett extra mjukt stöd inbyggt för att man skall kunna sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet samtidigt som man har skuldrorna fria. Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar.


 TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Standard ryggmekanism, Låg rygg	BRM1000	6	Comfort ryggmekanism, Hög rygg	
2	Standard ryggmekanism, Hög rygg	BRM4000		Grund (för barn och coxitsits)	801742
3	Medic ryggmekanism, Låg rygg 112			Djup	801744
	S 200 mm	BRM1800	7	Elreglerad ryggmekanism monterad med Låg rygg	
	L 240 mm	BRM1900		Eldon+Reläsats f ryggvinkel	803277
	XL 340 mm	BRM2000		Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg	801265
	Medic ryggmekanism, Låg rygg 155		8	Elreglerad ryggmekanism monterad med Hög rygg	
	S 200 mm	BRM1500		Eldon+Reläsats f ryggvinkel	803277
	L 240 mm	BRM1600		Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Hög rygg	800841
	XL 340 mm	BRM1700	9	Eldonssats för ryggvinkel	803277
4	Medic ryggmekanism, Hög rygg 112		10	Dubbel Medic ryggmekanism	
	S 200 mm	BRM4800		Ryggfällning fäste Medic	802859
	L 240 mm	BRM4900		Ryggfällning Medic, L 155mm (2 st)	801082
	XL 340 mm	BRM5000		Ryggfällning Medic, L 112mm (2 st)	801083
	Medic ryggmekanism, Hög rygg 155			Ryggfällning Medic, XL 155mm (2 st)	801084
	S 200 mm	BRM4500		Ryggfällning Medic, XL 112mm (2 st)	801085
	L 240 mm	BRM4600		Ryggstolpe Medic Dubbel	802860
	XL 340 mm	BRM4700		Ryggmekanism Dubbel Medic kpl	
5	Comfort ryggmekanism, Låg rygg			L 155 mm, H 240 Hög rygg	BRM5600
	Grund (för barn och coxitsits)	801743		L 155 mm, H 340 Hög rygg	BRM5700
	Djup	801745			





Se Mercado's broschyr "Styrka och Funktion" för mer information om den elreglerade ryggmekanismen.

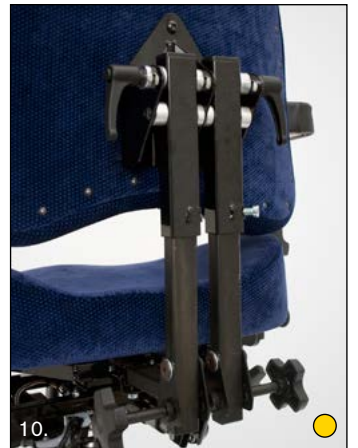

Kontakta Mercado eller se broschyren "Ergonomiska sittsystem" för mer information om sittplattor.

# ARMSTÖDSPLATTOR OCH ARMSTÖD

## ARMSTÖDSPLATTOR

Armstöden är en mycket viktig del i ERGOMEDIC-systemet, de bidrar till den höga komforten. Dessa har därför utvecklats mer ergonomiskt. Kanterna har fasats av, både på in- och utsidan. Detta för att trycket mot underarmarna ska minimeras vid långvarig kontakt. Armstödsplattan är skålad baktill för att armbågen ska ligga stabilt. Framtill är den formad för att ge ett bra grepp vid uppresning och överflyttning.

COMFORTARMSTÖD är ett något bredare armstöd med mjukare stoppning. Det gör det lättare att vila armarna på armstöden.

HEMIPLEGIARMSTÖD passar brukare med delsidesförlamning. Skålningen i armstödsplattan gör det lättare att hålla den förlamade armen på armstödet. Armstödsplattan är roterbar för bästa möjliga positionering.

ERGOMEDIC PLUS-armstöden är formade så att armarna får stöd från sidorna vilket medför att över-

kroppen blir mer avspänd. De är även uppbyggda under handleden för att ge extra avlastning.

## ARMSTÖDSMEKANISM

ARMSTÖDSMEKANISM 9000 PLUS går att justera i höjddled. Det kan sänkas ner helt, så att förflyttning i sidled möjliggörs för brukaren.

ARMSTÖD HEMIPLEGI 9000 PLUS är justerbart i höjddled. Dessa armstöd är dessutom, utan att höjden ändras, svängbara i sidled.

ARMSTÖDSMEKANISM 6100 finns i både vinkelställbart och ej vinkelställbart utförande. Brukaren kan själv justera armstöden i höjd och bredd. De fällbara armstöden kan även fällas bakåt, vilket möjliggör sidoförflyttning på ett enkelt sätt.

ARMSTÖDSMEKANISM 6100 HEMIPLEGI uppstår vid komplettering av armstödsmekanism 6100 med hemiplegimekanismen för fällbara armstöd. Även i detta fall så ger denna funktion svängrum i sidled.



TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100

NR	BENÄMNING	ART.NR		NR	BENÄMNING	ART.NR			
		För fällbart	För ej fällbart						
1	Armstödsplatta ErgoMedic 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm	armstöd	armstöd	6	Armstödsplatta Hemiplegi	AR406038			
		AR151038	AR101038						
		AR152038	AR102038						
		AR153038	AR103038						
2	Armstödsplatta Mobil 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm			7	Armstöd Armstöd 9000 PLUS Hö, 32 cm Armstöd 9000 PLUS Hö, 38 cm Armstöd 9000 PLUS Vä, 32 cm Armstöd 9000 PLUS Vä, 38 cm	802700 802701 802702 802703			
		För fällbart	För ej fällbart						
		armstöd	armstöd						
		AR301038	AR311038						
3	Armstödsplatta Comfort 30 cm 35 cm 40 cm			8	Armstöd breddbåge PLUS Hö	802698			
							9	Armstöd breddbåge PLUS Vä	802699
4	Armstödsplatta ErgoMedic PLUS 42 cm Hö 42 cm Vä 30 cm Hö 30 cm Vä			10	Armstöd 6100 för stol utan sitsstilt Vä Hö	ARM3012 ARM3011			
5	Armstödsplatta Mini 25 cm 30 cm			11	Armstöd 6100 för stol med sitsstilt Vä Hö	ARM3112 ARM3111			
6	Armstödsplatta ErgoMedic PLUS 42 cm Hö 42 cm Vä 30 cm Hö 30 cm Vä			12	Hemiplegi mekanism för fällbara armstöd Par Hö Vä	802991 802989 802990			
7	Armstödsplatta ErgoMedic PLUS 42 cm Hö 42 cm Vä 30 cm Hö 30 cm Vä			13	Armstöd hemiplegi 9000 PLUS 32 cm Hö Vä	802992 802993			



Kontakta Mercado eller se broschyren "Ergonomiska sittsystem" för mer information om armstödsplattor.



För info om armstöd för vajerreglage, kontakta Mercado eller se vår hemsida [www.mercado.se](http://www.mercado.se)



# MÅNGA TILLBEHÖR GER ÖKAD FLEXIBILITET

## BÅLSTÖD

Bålstöd används för att få ett mer upprätt och aktivt sittande. Mercado har tre typer: sväng- och ställbara, raka och svängda bålstöd.

## BORD

En rökfärgad genomskinlig makrolonskiva med sidokanter. Bordet är uppfällbart och kompatibelt med hela REAL 9000-programmet. Det är 60x45 cm i måtten och fästs på höger armstöd.

## BRICKA

Brickan för avlastning är av trä och har måtten 45x30 cm. Den vrids i sidled och kan fästas på valfri sida av stolens armstöd. Även denna är kompatibel med REAL 9000-programmet.

## HÖFTBÄLTE

Ett bälte som förhindrar brukaren från risken att falla ur stolen framåt. Finns i storlek S 51-71 cm, M 68-83 cm och L som har en inställbar längd på 83-103 cm.

## AMPUTATIONSSTÖD

Ett amputationsstöd hjälper till att hålla benet i en korrekt position och är utformat för att på det mest bekväma sätt vila det amputerade benet i. Amputationsstöd finns för både höger och vänster ben och monteras med ett fäste under sitsen.

## GRENKIL

Grenkil/knädelare används när man vill förhindra att knäna går emot varandra, den ger ökad stabilitet och förbättrad sittställning. Grenkilarna finns i två storlekar 11 cm och 15 cm. Grenkilmekanismen finns tillgänglig i tre längder; "Barn" 57 mm, "Vuxen" 115 mm och 175 mm.



## ÖVERDRAG

Överdragen skyddar klädseln från smuts och damm, samtidigt som det förlänger livslängden på stolens klädsel. Inkontinensöverdrag är en snabb och enkel lösning om man vill skydda sisten mot väta. Överdrag i olika färger finns till alla stoppdetaljer.

 TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	<b>Sväng och ställbart bålstöd</b>		8	<b>Grenkilsfäste</b>	
	Bålstödsmekanism sväng och ställbar Hö	TS31		57 mm komplett	LD15
	Bålstödsmekanism sväng och ställbar Vä	TS32		115 mm komplett	LD16
	Tillhörande kudde st (sväng och ställbar)	TS2038		175 mm komplett	LD17
2	<b>Rakt bålstöd</b>		9	<b>Höftbälte inkl. fästen och skruvar</b>	
	Bålstödsmekanism rak båge Hö	TS11		S (51-71 cm)	HB1010
	Bålstödsmekanism rak båge Vä	TS12		M (68-83 cm)	HB1020
	Kudde st (grå plysch)	TS1046		L (83-103 cm)	HB1030
3	<b>Svängt bålstöd</b>			<b>Höftbälte utan fäste</b>	
	Bålstödsmekanism svängd båge Hö	TS21		S (51-71 cm)	800952
	Bålstödsmekanism svängd båge Vä	TS22		M (68-83 cm)	800953
	Kudde st (grå plysch)	TS1046		L (83-103 cm)	800954
4	<b>Bord rökfärgat 60x45 cm*</b>	TA1010		Fäste till höftbälte Par	800878
	f ej fällbart 9000 Armstöd PLUS		10	<b>Amputationsstöd</b>	
<b>Bord rökfärgat 60x45 cm*</b>	TA1030	Amputationstödsmekanism		800827	
	f fällbart armstöd		Fäste	800786	
5	<b>Bord rökfärgat 45x37 cm*</b>	TA1015		Amputationsstöds kudde (grå plysch)	AS1046
	f ej fällbart 9000 Armstöd PLUS		11	<b>Överdrag finns till alla stoppdetaljer</b>	
<b>Bord rökfärgat 45x37 cm*</b>	TA1035				
	f fällbart armstöd		12	<b>Fäste övre för H-sele</b>	804184
6	<b>Bricka 45x30 cm med fäste</b>	TA1020			OBS! säljes styckvis.
7	<b>Grenkilskudde (svart konstläder)</b>				
	11 cm	LD1038			
	15 cm	LD2038			

\*På REAL 6100 kombineras med ej fällbara PLUS-armstöd.

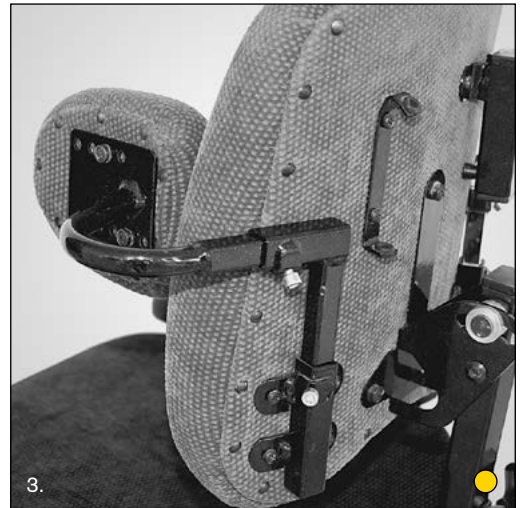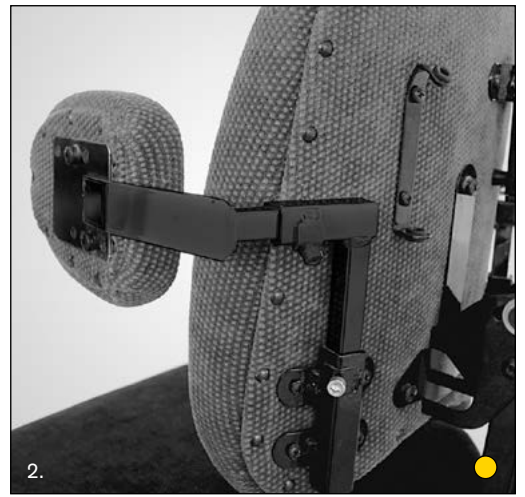

Se [www.mercado.se](http://www.mercado.se) eller kontakta Mercado för mer info om överdrag till stoppdetaljer, där kan ni även få mer information om våra stoppdetaljer och färger.

# STOPPDETALJER OCH ELEKTRISKA REGLAGE

## NACKSTÖD

Nackstöd ger stöd åt huvudet för att få rätt sittställning samt ger avlastning för nacke/rygg vid dålig bålkontroll. Det kan enkelt justeras för optimal inställning. Finns med plan-, skålad- och ERGOMEDIC PLUS-kudde.

## SIDOSTÖD

Sidostöd ger brukaren hjälp att bibehålla stabilitet och position. Används även som lårstöd varvid fötterna får bättre stöd på fotplattor alternativt golv och man undviker att benen glider isär.

Kan ställas i höjd och bredd alternativt vändas bak och fram. Finns i fyra storlekar; XS, S, M och L.

## ELEKTRISK REGL. SITTHÖJNING/SITSTILT

Kan placeras under armstöd, på ryggen i reglage med lös dosa eller regleras via en joystick. Fjärrkontroll passar utmärkt för klinikbruk.

## ELEKTRISK BROMS

Denna broms förenklar bromsning för de som har problem med den manuella bromsspaken.






Den är utformad som en röd knapp och sitter på utsidan av den elektriska höj-/sänkfunktionen under ena armstödet. Ett enda knapptryck sköter om hela bromsningsproceduren.


## KLÄDSEL

Stolen levereras klädd i plysch, konstläder eller vävt mönstrat tyg som finns i olika färger. Det finns även praktiska, maskintvättbara överdrag till alla stoppdetaljer.

 TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Nackstöds kudde plan, 29x16 cm	NS1046	9	Laddbox	
2	Nackstöds kudde skålad, 31x18 cm	NS3046		1-funktion	803029
3	Nackstöds kudde ErgoMedic PLUS 30x23	NS2046		4-funktion	803030
4	Nackstöds kudde ErgoMedic PLUS 30x8	NS4046	10	Joystick för EI-stol m bromsknapp	
5	Nackstöds mekanism universal			2-funktion	802742
	S (h 28 cm)	NS30		3-funktion	802743
	M (h 38 cm)	NS20	11	Fjärrkontroller	
	L (h 48 cm)	NS10		Multi (2-4 funktion)	801808
6	Nackstöds mekanism PLUS sidojusterbar			Upp/ner (1 funktion)	801806
	S (h 28 cm)	NS31	12	Elreglage i lös dosa (1 funktion)	802739
	M (h 38 cm)	NS21	13	Elreglage i lös dosa (2-4 funktion)	802740
	L (h 48 cm)	NS11	14	Fotkontakt för EI höjning/sänkning	802688
7	Sidstödsfäste PLUS		15	Batteriladdare till EI-stol 12V	802289
	Hö	SS11	16	Slät manöverbox PLUS för upp/ner	803893
	Vä	SS12	17	Manbox Plus f upp/ner tunga +ladd kpl m kablage f reläkort	803034
	Par	802874			
8	Sidstöds kudde				
	XS (15x8 cm)	SS10XX			
	S (28x8 cm)	SS20XX			
	M (25x14 cm)	SS30XX			
	L (30x16 cm)	SS40XX			

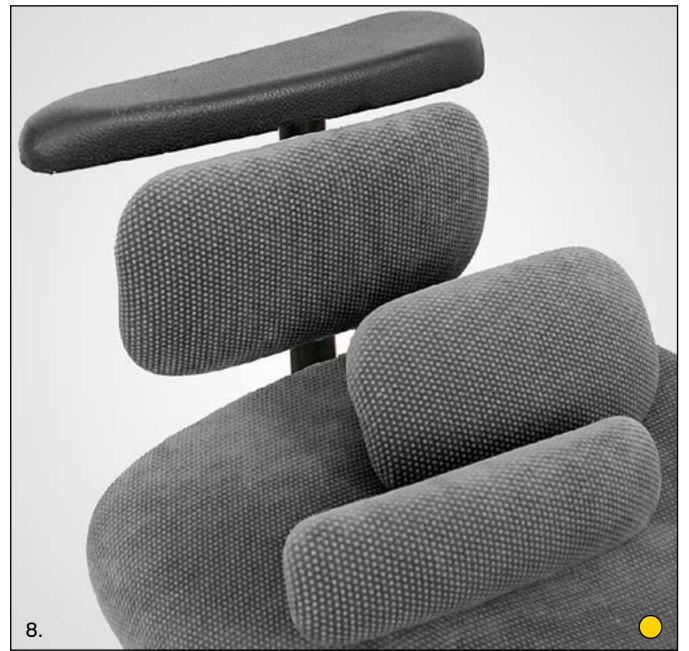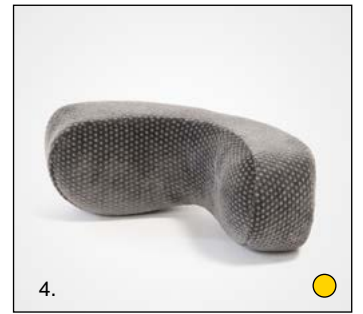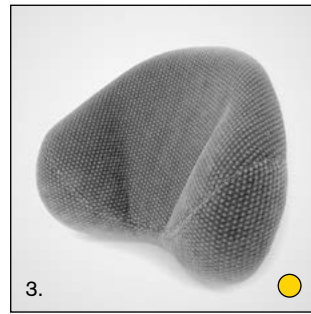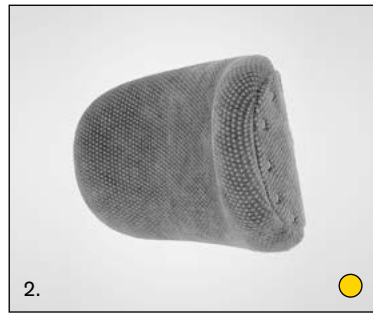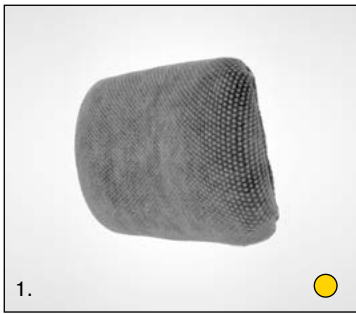

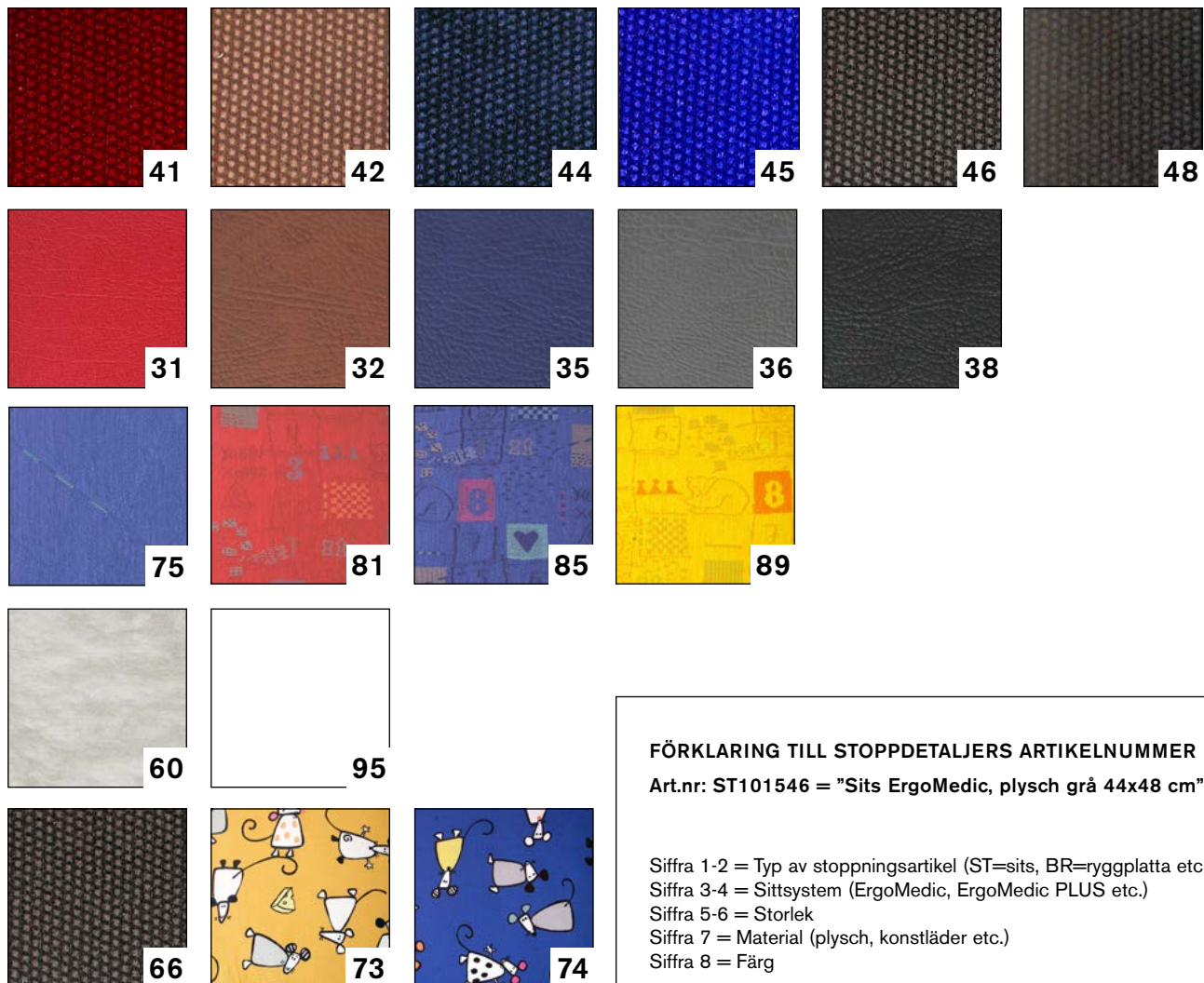

#### FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER

Art.nr: ST101546 = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

Siffrorna 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Siffrorna 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffrorna 5-6 = Storlek

Siffrorna 7 = Material (plysch, konstläder etc.)

Siffrorna 8 = Färg

#### KLÄDSLAR

##### Plysch

41 Vinröd      42 Brun      44 Marin      45 REAL-blå      46 Grå      48 Svart

##### Konstläder

31 Röd      32 Brun      35 Blå      36 Grå      38 Svart

##### Väv mönstrad Vuxen

75 Blå

##### Väv mönstrad Barn

81 Röd      85 Blå      89 Gul

##### Alternativ klädsel

60 Hygienväv      95 Utan klädsel

##### Överdragsklädsel

66 Inkontinensöverdrag grå plastad plysch      73 Barn/Gul bomull      74 Barn/Blå bomull

Överdrag går att få till samtliga av Mercado Medics stoppdetaljer, gå in på [www.mercado.se](http://www.mercado.se) eller kontakta oss för mer information.



Mercado Medic AB  
Tryffelslingan 14  
181 57 Lidingö

Telefon & Fax  
Tel 08 555 143 00  
Fax 08 555 143 99

Email & Internet  
Email [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)  
Internet [www.mercado.se](http://www.mercado.se)