



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED EU-FÖRORDNING 2017/745 - MDR

STOLT MEDLEM I

SWEDISH
Medtech

SORTIMENTSÖVERSIKT

ett urval av våra REAL-stolsmodeller



NYHET!!

PROPELLER

Se sida 4 för mer info

21-09599-02 / 190101 / 231013

**MERCADO
MEDIC**



REAL 9000 PLUS / REAL 9000 PLUS EL 24V/ REAL 9000 PLUS COXIT/EL

5

Vad kännetecknar en medicinteknisk arbetsstol REAL 9000 PLUS?

6

REAL 9000 PLUS BARN/EL / REAL PLUS MINI EL

8

REAL 6100 PLUS / REAL 2015 / REAL 2624

10

REAL 9200 TWIN / REAL 9000 PLUS EL extra låg / REAL 9500/9600 PLUS EL

13

REAL 9000 PLUS rehabstol / REAL 9000 PLUS klinikstol / REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN

14

MERCADO WEBGUIDE/-SHOP

15

En kort beskrivning av företaget

Mercado Medic AB arbetar sedan 1971 med utveckling, tillverkning, försäljning och service av medicintekniska arbetsstolar för personer med funktionsnedsättning. Vi säljer även stolar speciellt anpassade för olika kliniker och industrier. Mercado Medic AB har försäljning och service över hela Sverige samt en omfattande exportverksamhet.

REAL-stolarna är individuellt anpassningsbara medicintekniska produkter för varierande inomhusmiljöer. REAL-systemet är moduluppbyggt för enkel, individuell anpassning. Med olika sitsar, ryggar, hjul, lyftpelare och tillbehör komponerar man enkelt en funktionell och bekväm stol som passar brukarens behov.

Samtliga REAL-stolsmodeller fungerar utmärkt i hemmet, skolan eller på arbetet.

Mercado är cetrifierade enligt ISO 13845:2016, ett kvalitetsledningssystem för Medicintekniska produkter samt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 (Miljö)



Mercado Medic

PROPELLER



Propeller el-förflyttningsassistans är ett tillbehör till arbetsstolarna i REAL 9000 PLUS-serien för vuxna, både manuella och elektriska. Propeller används vid horisontella förflyttningar inomhus där brukarens egna muskelstyrka inte räcker till.

+ Bibehåller aktivitet då förflyttning sker både med egen kraft, och assistans av Propeller.

+ Starthjälp vid förflyttning i kök, t.ex. från matbord till diskbänk.

+ Förenklar även längre förflyttningar, t. ex. mellan olika rum, samt på mjukt underlag.

+ Behov av byte från arbetsstol till annat förflyttningshjälp-medel minskar.

NYHET!!

ARTIKELNUMMER : PA1010
PROPELLER EL-FÖRFLYTTNINGSASSISTANS FÖR
STATIV 9000 PLUS 48

Sitt i en **REAL 9000 PLUS** hemma eller på arbetet. Det är lätt att finna en funktionell sittställning efter sysselsättning.

REAL 9000 PLUS har gasfjäderreglerad fixlyftomat med 20 cm intervall för steglös höjdinställning. I bromsat läge står stolen stadigt vid uppresning och överflyttning.

De stora lätttrullande hjulen tillsammans med det smidiga PLUS-stativet som ger stor plats för ben och fötter gör förflyttning enkel. Den klarar max brukarvikt 150 kg.



REAL 9000 PLUS Manuell

REAL 9000 PLUS EL 24V



Sitt i en **REAL 9000 PLUS EL 24V** hemma eller på arbetet. Det är lätt att anpassa sittställning efter sysselsättning. Elektrisk höjdinställning med hela 28 cm intervall gör REAL 9000 PLUS EL till en utmärkt uppresningshjälp. De stora lätttrullande hjulen tillsammans med det smidiga PLUS-stativet som ger stor plats för ben och fötter gör förflyttning enkel. Den klarar max brukarvikt 150 kg.

REAL 9000 PLUS EL går även att utrusta med fler elektriska funktioner som elreglerad sitstilt, elektrisk ryggvinkling och broms.

REAL 9000 PLUS COXIT/EL

REAL 9000 PLUS COXIT och **REAL 9000 PLUS COXIT EL** med PLUS-stativ är moduluppbyggda medicintekniska stolar som är enkla att anpassa för varje användare.

Dessa modeller passar främst brukare med till exempel höftleds-problem. Coxitsitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar. Det medför möjlighet att sitta med öppen höftvinkel.

REAL 9000 PLUS COXIT EL går även att utrusta med fler elektriska funktioner som elreglerad sitstilt, elektrisk ryggvinkling och broms.





Vad kännetecknar en medicinteknisk arbetsstol REAL 9000 PLUS?

- Bromsfunktion på valfri sida av stolen medför ökad säkerhet till brukaren.
- Separata bromsben med fot av gummi för maximal friktion och minimal tipprisk.
- Förskrivs som ett förflyttningshjälpmedel för säker självständig förflyttning i alla riktningar.
- Smidigt 4-bent stativ med stora hjul – anpassningsbara för olika underlag.
- Sitsen är ej roterbar i standardläge vilket förenklar förflyttning.
- 20 cm slaglängd i gaskolven på manuell stol för bra sittande vid olika arbetsytor.
- Möjliggör aktivitet i en funktionell sittställning.
- Finns i både manuellt och elektriskt utförande.
- Stora möjligheter till unik individanpassning.
- Max brukarvikt 150 kg.

REAL[®] 9000 PLUS EL 24


REAL-stolen 9000 PLUS är en individuellt anpassningsbar medicinteknisk produkt för varierande inomhusmiljöer. Den är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 - MDR.



"Plug-and-Play"-system, förberett för upp till fyra elfunktioner.



Tydligare design på handkontroll. Alternativt reglage under armstöd finns.

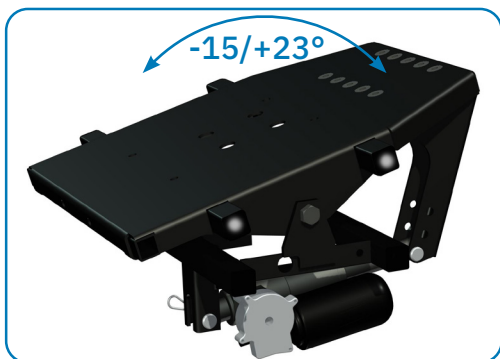

Extraförstärkt allvinkelsittkryss, justerbart från -15°(framåt) till +23°(bakåt). Valfritt om armstödet ska följa sitsens vinkel eller ej, beroende av typ av sitstiltsfunktion t.ex vev-tilt, gas-tilt eller El-tilt. Höfbältsfästen ingår i sittkrysset





REAL 9000 PLUS BARN Manuell

I en REAL 9000 PLUS BARN eller REAL 9000 PLUS BARN EL med PLUS-stativ får barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att sitta aktivt vid till exempel en skolbänk eller ett bord. Sitthöjden kan enkelt ställas in för olika bordshöjder och bromsen kan skötas med hand, fot eller via elbroms.

Man väljer mellan olika typer av sitstilsalternativ, ryggvinklingar, alternativa sitsstorlekar och material/form samt en mängd funktionella tillbehör.

REAL 9000 PLUS BARN EL 24V

REAL 9000 PLUS BARN EL 24V avancerad med PLUS-stativ får barn och ungdomar med grövre funktionsnedsättningar möjlighet till ett komfortabelt och funktionellt sittande. Sitthöjden kan enkelt ställas in för olika höjder. Som tillval finns elektrisk sitstilt med möjlighet till stort vinkelintervall. Bromsen kan skötas med hand, fot eller via elbroms.

Man väljer mellan ett stort urval av avancerade tillval för bästa individanpassning samt en mängd funktionella tillbehör.


Dessa barnstolsmodeller går att anpassa/extraförstärka för barn/ungdomar med spasticitet genom att addera tillval som t.ex. dubbel medic ryggmekanism, extraförstärkt sittkryss, 4-punktsbromastativ samt stativförlängare. Kontakta Mercado vid frågor!



Urval av tillval till REAL-barnstolar



NYHET!

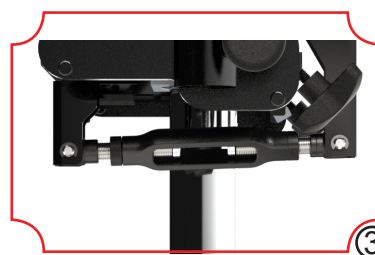

1. Körhandtag Optimal
2. Dubbel medic ryggmekanism
3. Vantskravsreglerat sitttiltsreglage
4. Stativförlängare fram/bak



Elrullstol REAL 6100 PLUS har ett mycket litet chassi – endast 570 mm brett. Detta gör den otroligt smidig på små ytor. Som standard har 6100 PLUS hela 28 cm elektrisk sitthöjdjusteringsintervall. Med vår nya extra låga 15 cm ellyftomat går det att komma ned så pass lågt som till 33 cm (utan sitstilt) med sittenhetsen, för kortväxta vuxna brukare och små barn som har behov av den lösningen.

REAL 6100 PLUS passar brukare i alla åldrar och erbjuder stora möjligheter till individuell anpassning inklusive mer avancerade tillval som huvud-/nackstyrning, längdkompenserande elbenstöd, möjlighet att styra Iphone, Ipad via Iportal samt omgivningskontroll.

Elrullstolen på bilden till höger är utrustad med det längdkompenserande elbenstödet och vadvstöd
Art nr LS311110+CS501458



REAL 6100 PLUS VUXEN & BARN



REAL 2015

REAL 2015 ingår i en serie ståstödolar för ståsittande arbetsställning. Med det menas att du i ditt arbete har möjlighet att stå med stöd. Genom att kroppsvikten fördelas över ben, sitttyta och ryggstöd kan arbetsskador beroende på hög statisk belastning undvikas. REAL 2015 är som standard utrustad med 75 mm hjul och handbroms. Det finns även en modell REAL 2011 utan hjul.

Dessa stolar kan beställas med olika typer av armstöd, sadelsitsar, ryggstöd och sitthöjd.

REAL 2624

Trötthet och muskelspänningar blir ofta följderna av ett långvarigt sittande i framåtlutad ställning utan rätt stöd. REAL 2624 är användbar i situationer och miljöer där man måste sitta framåtlutad med magstöd när man arbetar. Modell REAL 2624 är utrustad med ett 4-bent stativ med broms.

REAL 2624 passar utmärkt både som arbetstekniskt hjälpmedel för personalen och till smärtpatienter. Som matningsstol är REAL 2624 mycket funktionell och flexibel. Man kan få denna modell i flera olika sitthöjder, sadelsitsar, magstöd och klädslar för att passa olika användare. Hög kvalitet borgar att stolarna fungerar underhållsfritt i många år.



(för personal vid t.ex matningssituationer)

(förskrivningsbar för t.ex smärtpatienter)



REAL 6100 PLUS



REAL 9200 TWIN EL



REAL 9200 TWIN EL

REAL 9200 TWIN EL är en elektrisk arbetsstol avsedd som ett komfortabelt förflyttningshjälpmedel för något tyngre användare.

REAL 9200 TWIN EL fungerar även utmärkt som uppresningshjälp och har kapacitet att klara en brukarvikt upp till max 275 kg. Man kan välja mellan olika sitt- och ryggstorlekar, olika sitthöjd och ett antal tillbehör.

Denna stolsmodell finns även i manuellt utförande med gasfjäder-fixlyftomat, REAL 9200 TWIN Manuell, och klarar då max brukarvikt 180 kg. *(Nackstöd är tillval, stolen på bilden är extrautrustad.)*

REAL 9000 PLUS EL extra låg

REAL 9000 PLUS EL extra låg – då efterfrågan har ökat att finna bra lösningar även för kortväxta vuxna brukare finns nu REAL 9000 PLUS EL extra låg med en ellyftomat med endast 15 cm slaglängd. Detta för att lösa behovet att komma ned ännu lägre än det tidigare har varit möjligt.

Med REAL 9000 PLUS EL extra låg kan man komma ned så lågt som till 32 cm (utan sitstilt).



REAL 9500/9600 PLUS EL



REAL 9500/9600 PLUS EL är klassade som arbetsstolar (inte ståstödsstolar). De är speciellt anpassade för muskelsvaga personer som behöver avlasta höft, knä eller fotled vid stående arbete i hemmet eller på arbetet. Det är enklare att förflytta sig sittande i en REAL 9500/9600 PLUS EL än i en "normal" arbetsstol då brukaren kan använda hela benets muskelmassa vid förflyttning.

Stolarna är som standard utrustade med det smalare PLUS-stativet 43x53 cm (alt. 48x53 cm). Detta gör bland annat arbete i trångt utrymme, till exempel ett litet kök enklare. Nu finns "arbetsstolssitsar" med kort sittdjup (se bild) - alt. olika sadelsitsar, samt förhöjd sitthöjd.

REAL 9500/9600 kan utrustas med gastilt med reglaget under armstöd. REAL 9600 PLUS 24V EL kan dessutom utrustas med elektrisk sitstilt. Elbroms är ett funktionellt tillval för de som har svårt att bromsa stolen med bromsspaken när stolen är ett högt läge.

REAL 9000 PLUS rehabstol är en säker, smidig och lättanvänd medicinteknisk arbetsstol. Den underlättar rehabprocessen för patienten, till exempel på en arbetsterapi/rehabklinik och är samtidigt arbetsmiljövänlig för personalen. ErgoMedic sittsystem med extra hög ryggplatta medför en säker och bra sittställning.

Körbygel underlättar för personalen att transportera patienten sittande i stolen. REAL 9000 PLUS Rehabstol har både hand- och fotbroms samt armstöden är bredd- och nedjusterbara för enkel förflyttning. REAL 9000 PLUS Rehabstol är utrustad med hygienisk klädsel som är enkel att hålla ren. Stolen klarar max brukarvikt 150 kg. *(På bilden intill är stolen extrautrustad med 1/4 uppfällbar fotring.)*



REAL 9000 PLUS REHABSTOL

REAL 9000 PLUS EL ÖGONKLINIKSTOL



Vi har vidareutvecklat vår välrenommerade ögonpatient-/klinikstol. REAL 9000 PLUS EL ögonpatient-/klinikstol är en elektrisk undersökningsstol, konstruerad med fokus på patientsäkerhet, ergonomi, funktion och flexibilitet. För att öka flexibiliteten har vi utformat en undersökningsstol där du som kund kan välja mellan två moderna PLUS-stativ i olika storlekar, beroende på behov.

REAL 9000 PLUS EL ögonpatient-/klinikstol finns i "easy-" och "advanced-" utförande. Stolen är utrustad med hygienisk klädsel som är enkel att hålla ren. Det finns ett antal olika tillval och tillbehör för att passa varje kliniks/mottagnings unika behov.

REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN

REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN är en elektrisk stol anpassad för röntgenbruk. Den fungerar väl med alla olika leverantörers röntgenlab.

REAL Röntgenstol 8100 EL är konstruerad med tanke på ergonomi, funktion och flexibilitet. Stolen är bekväm, stabil och lättskött.

Med hjälp av en fjärrkontroll regleras den hela 28 cm elektriska höjdställningen. Det ger personalen frihet att manövrera stolen även på avstånd. Som tillval finns till exempel en extra hög transparent ryggplatta (se bild intill) vilken underlättar såväl länd-, bröst och halsryggs-röntgen och man behöver inte skifta mellan olika ryggstöd vid olika typ av screening.



Besök vår WEBGUIDE/-SHOP!

Välkommen till Mercados webguide/-shop!

Här kan du göra allt från att söka artiklar till att konfigurera en komplett stol. Du kan även leta efter artiklar i våra sprängskisser.

Använd Mercado webguide/-shop antingen som artikelsök eller lägg din order online.

Välkommen! shop.mercado.se



Kontakta Mercado

HUVUDKONTORET

Växeln är öppen mån-fre 08.00-16.30

Fredag 08.00 - 16.00

Tel: 08-555 143 00

E-post: kundtjanst@mercado.se

Besöksadress:

Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postadress:

Box 1074, 181 22 Lidingö


SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT

Service har telefontid mån-fre

08.00-12.00 samt 13.00-16.00

Tel: 08-555 143 08

E-post: service@mercado.se

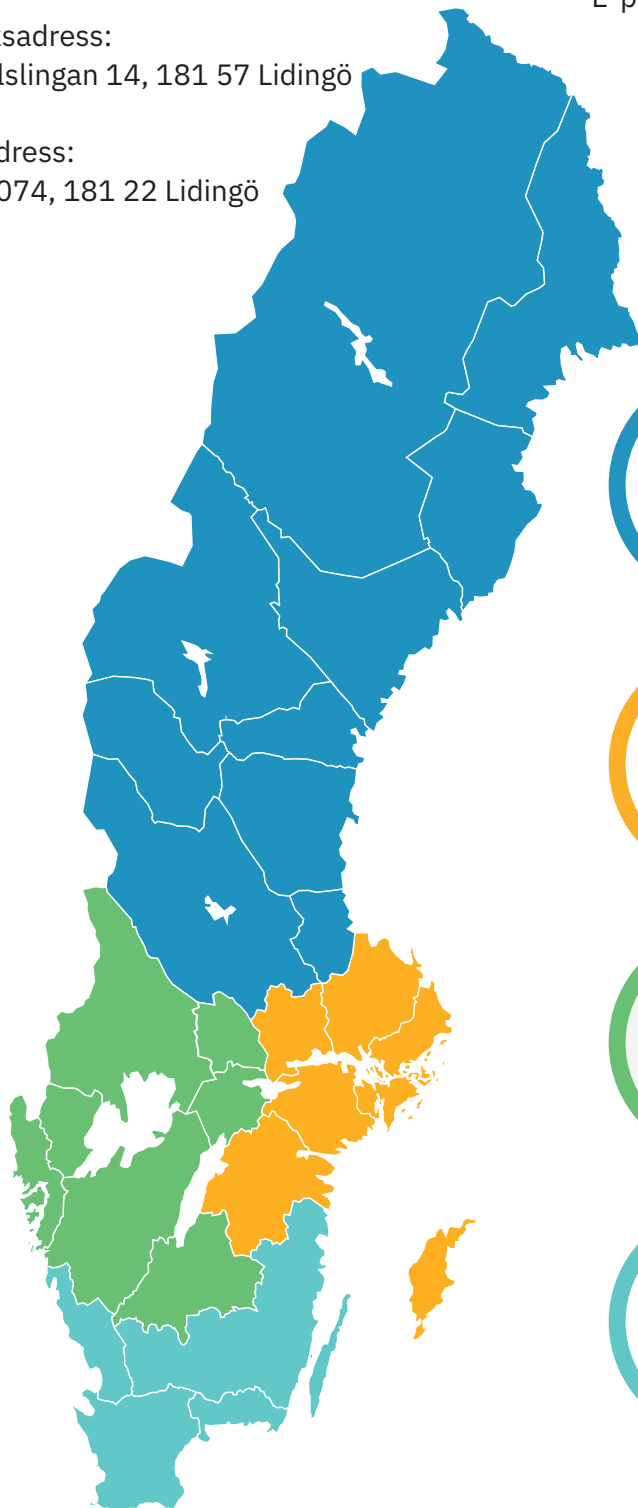

Region Norr

Fredrik Lindberg
Lindögatan 2, 931 65 Skellefteå
fredrik.lindberg@mercado.se
070 579 25 62



Region Öst

Daniel Lundgren
Idrottsvägen 10, 611 62 Nyköping
daniel.lundgren@mercado.se
070 082 20 58



Region Väst

Kenneth Linnerhag
Radhusvägen 5, 428 35 Kålleröd
kenneth.linnerhag@mercado.se
070 810 78 74



Region Syd

Håkan Hammarstedt
Hjortvägen 8, 352 45 Växjö
hakan.hammarstedt@mercado.se
070 827 96 16