



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKET'S FÖRESKRIFTER
2003:11.

⊕ REAL® 6100 PLUS

smidig elrullstol med smalt chassi för barn och vuxna



Rörelsefrihet och valfrihet med REAL 6100 PLUS

När benen är svaga behöver man en stol att både sitta i och förflytta sig med. Detta ställer höga krav på funktion och kvalitet. Stolen ska vara bekväm, ge en ergonomiskt riktig sittställning och ta sig fram där man vill.

Rörelsefrihet

REAL 6100 PLUS är en eldriven rullstol för inomhusbruk. Den är konstruerad för att ge användaren maximal rörelsefrihet i hemmet, på arbetet eller i skolan.

Chassit är endast 570 mm brett vilket gör den mycket smidig på små ytor. Den elektriska höjdregeringens intervall är på hela 280 mm, vilket gör det möjligt för brukaren att nå höjder som i vanliga fall inte är möjligt för en sittande person.

Drivning på mitthjulen innebär att REAL 6100 PLUS kan vända runt sin egen axel och tack vare den individuella hjulupphängningen klarar den hinder upp till 40 mm.

Valfrihet

REAL 6100 PLUS har stora möjligheter att anpassas efter användarens behov och önskemål. I standardutförande har elrullstolen ett ergonomiskt sittsystem och ned-

justerbara armstöd för att möjliggöra enkel sidoförflyttning i och ur stolen. Benstödet har en stabil fotplatta och är justerbart i höjd och vinkel.

Stort utbud av tillval och tillbehör

REAL 6100 PLUS erbjuder valfrihet med ett stort utbud av olika tillval och tillbehör. Du kan välja mellan flera typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sittstorlekar, ERGOMEDIC PLUS sittsystem samt en stor mängd tillbehör som nackstöd, sidostöd, bälstöd, med mera. Se vår tillbehörsbroschyr för mer information.

Vi är också stolta över att kunna erbjuda Dynamic Controls breda utbud av elektroniska tillbehör för en ännu bättre individuell anpassning.

För mer information, gå till:

<http://www.dynamiccontrols.com/designers-and-manufacturers/products>



Ett system där just dina behov bestämmer utförandet

SITTPLATTA

I olika storlekar och material.



SITSTILT

(+15° till -8°)
Gas, vev eller elektrisk.




RYGGPLATTA OCH MEKANISM

Välj önskad utformning.



SITTHÖJD ELEKTRISK

Hög eller låg.

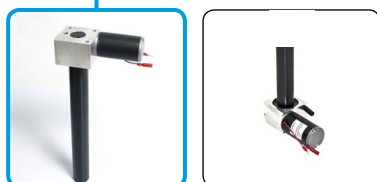

MANÖVER-BOXAR

Olika typer av elektronik.




CHASSI

570x795 mm.



KLÄDSEL

Finns i plysch, väv eller konstläder.

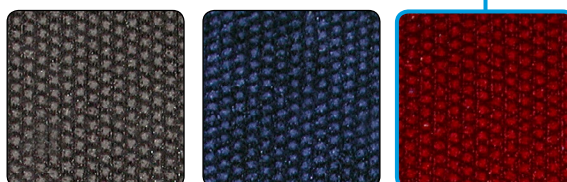

TILLBEHÖR

Valfrihet i ett stort utbud.



=





⊕ REAL® 6100 PLUS

TEKNISKA DATA

Max brukarvikt	135 kg
Maxhastighet	4,5 km/h
Vändutrymme 180°	870 mm
Drivhjul	båda mitthjulen
Körsträcka per laddning	ca 15 km
Hindertagningsförmåga	40 mm
Vikt	76 kg inkl. batteri
Laddningstid	ca 6-8 tim.
Laddare utprovad och godkänd av	Mentzer 2,5A, ECB-801
Mercado Medic AB	Easy buddy 4A
Batteri utprovad och godkänt av	
Mercado Medic AB	Sonnenschein 2st 12V 25 Ah

PROGRAMMERINGSALTERNATIV

Val av olika programmeringsfunktioner:

- Hastighet framåt
- Acceleration framåt
- Bromssträcka framåt
- Hastighet bakåt
- Acceleration bakåt
- Bromssträcka bakåt
- Svänghastighet
- Svängacceleration
- Svänginbromsning
- Känslighet i joystick
- Användning av extern joystick
- Omvänd funktion för joystick

STANDARDMÅTT

Totalbredd	570 mm
Längd	795 mm
Hjul fram/bak	Ø 125 mm
Drivhjul	Ø 210 mm
Sitthöjd	460-740 mm*, 380-580 mm*, 330-480 mm
Benstödslängd	370-530 mm
Sittbredd	290-480 mm
Sittdjup	320-530 mm
Sitslutning	-15° +8°, -8° +15°, 0° +23°
Ryggstödhöjd	330-430 mm
Ryggstödslutning	-15° +45°

* Möjlighet att justera ned steglöst max 3 cm. Mätt utan sitstilt från golv till underkant sits med sits i planläge.
Med sitstilt +1 cm. Med sitstilt "allvinkelsittkryss" + 2 cm.

**HOS MERCADO SKRÄDDARSYS
STOLEN EFTER JUST DINA UNIKA
BEHOV. GÅ TILL VÅR WEBGUIDE**
OCH BYGG DIN EGEN STOL!**

**shop.mercado.se



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel + 46 8 555 143 00
Fax + 46 8 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se