




REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

REAL[®] 2000

magstödsstolar – avlastning för rygg och axlar



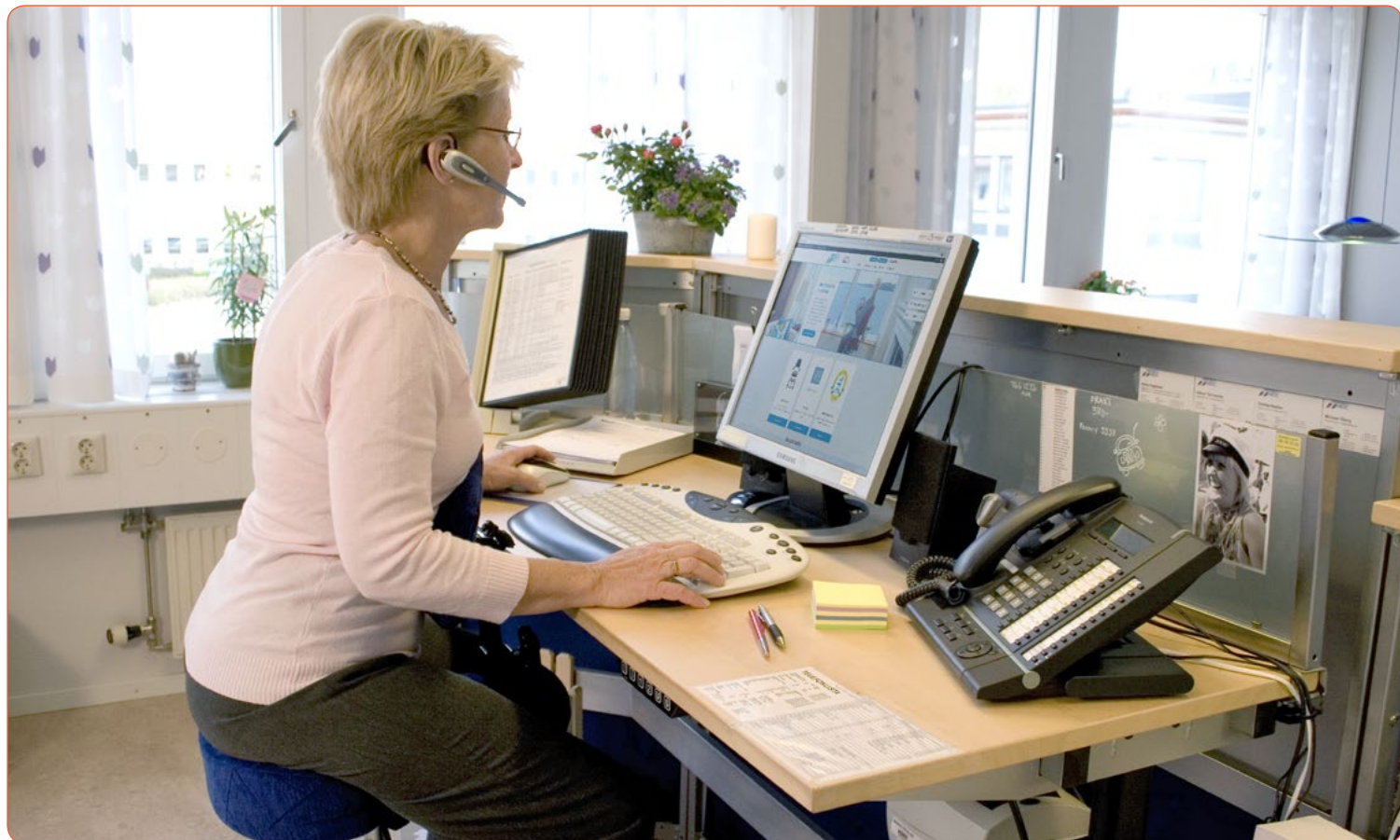

Förebygger förslitningsskador

Att under långa arbetspass sitta fel sliter på kroppen och ger inte sällan förslitningsskador. Trötthet och muskelspänningar i rygg och axlar blir ofta följden av ett långvarigt sittande i framåtlutad arbetsställning. Många arbetsuppgifter kräver ett tryggt och stadigt sittande.

En ergonomiskt korrekt sittställning på rätt höjd i förhållande till arbetsmomentet ger en naturlig avslappning för rygg, axlar och nacke. En anpassningsbar stol med sadelsits och magstöd, istället för ryggstöd, ger denna avslappning.

Mercado Medic AB har, i samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter, utvecklat stolsmodeller där man sitter ”bak och fram” med mag i stället för ryggstöd.

Avlastning för rygg och axlar

Mercados magstödstolar är avsedda för personer som är i behov av avlastning vid arbete som utförs i en framåtlutad position, eller som alternativ till traditionellt sittande. Denna sittställning möjliggör en symetrisk och gynnsam belastning av kroppen som helhet.

Stolarna är främst avsedda som arbetstekniskt hjälpmedel men fungerar även bra till smärtpatienter i rehabiliteringsprocessen.

Många valmöjligheter

Tack vare att REAL 2624 har 20 cm höjdintervall finner man snabbt en behaglig sitthöjd. Alla dessa magstödstolar finns att erhålla med olika typer av ergonomiskt utformade sitsar och magstöd samt en mängd olika klädslar.

Den ergonomiskt utformade sits- och magplattan minskar den statiska muskelbelastningen i svanken. Sitsens sadelform, i kombination med stolens stora slaglängd, underlättar en stå-sittande arbetsställning. Med en lätt framåtlutad sits kan användaren sänka axlarna och ändå hålla ryggen rak. Detta minskar risken till förslitningsskador då produkten används

som arbetstekniskt hjälpmedel. För smärtpatienter innebär det lindrad smärta och förkortad rehabiliteringsprocess.

De olika modellerna

REAL 2624 har ett fyrbent stativ med inbyggd broms. Den kraftiga bromsen med dubbla bromsben medför att stolen står mycket stadigt när den är bromsad. Då stolen är bromsad fungerar även bromsaxeln utmärkt att sätta fötterna på som stöd samtidigt som man utför sitt arbete. De lättrullade 75 mm-hjulen gör det lätt att förflytta sig sittande i stolen.

Detta tillsammans med möjlighet att rotera sitsen, gör det gynnsamt att komma tätt intill den arbetsyta man önskar.

Stolarna är konstruerade med högt ställda krav vad gäller komfort, funktion och slitstyrka. De tillverkas i egna anläggningar i Halmstad och på Lidingö.




REAL 2624 kan med fördel utrustas med olika sitsar och magstöd för att tillgodose ert behov.

SITSAR

- 1 Sadelstsits 36x36 cm
- 2 Ergomedic sits 40x36 cm
- 3 Rund sits "toppig" 35 cm

MAGSTÖD

- 4 Standard magstöd Medic 27x23 cm
- 5 Alternativt magstöd 33x16 cm

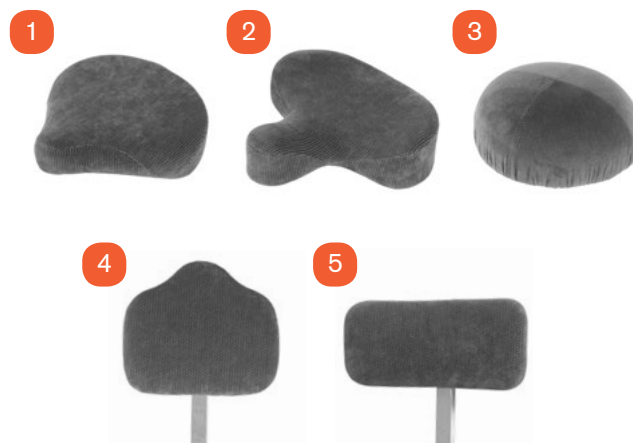

REAL[®] 2000



REAL 2624

sadelsits Medic 40x36 cm
magstöd Medic 27x33 cm

MODELL	2624	2624-1
Gaslyftomat	Ja*	Ja*
Fixerad lyftomat	Ja	Ja
Manuellt vinkelställbar sits (+22°/-14°)	Ja*	Ja*
Rotationslås	-	-
Magplatta Medic 27x23 cm	Ja*	Ja*
Magplatta låg 33x16 cm	Ja	Ja
Hjul 75 mm	Ja*	Ja*
Broms	Fotbroms*	Fotbroms*
Sitthöjd cm	50-70**	60-80**
Sadelsits Medic 40x36 cm	Ja*	Ja*
Alt. sadelsits Ergomedic 40x36 cm	Ja	Ja
Alt. sadelsits 36x36 cm	Ja	Ja
Alt. sadelsits 41x41 cm	Ja	Ja
Stativ cm (br x dj)	43x48	43x48
Max brukarvikt	130 kg	130 kg

*standard, **sits tilt max framåt mätt i framkant undertill – 5 cm från ovan angivna mått

