



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

Art. nr: 803344
Valid from: 170101
Changed: 201007

TILLBEHÖR

tillval / tillbehör till REAL 9000 PLUS, 6100, 6100 PLUS, Barn och Vuxen



SE MER I VÅR WEBSHOP!
shop.mercado.se



TILLVAL / TILLBEHÖR

STATIV

För att tillgodose olika behov så finns stativen i flera utföranden; till exempel vårt klinikstolsstativ med inbyggd fotbroms. Stolen går att bromsa utan att man behöver böja sig nedåt efter bromspaken.

PLUS-stativet är smidigt och lämnar stort utrymme för benen samt förenklar avsevärt möjligheten att förflytta sig sittandes i stolen. PLUS-stativet ger extra utrymme för fötter och benstöd. Benstöden monteras främst på plus-stativ och kan kompletteras med vaddstöd och knästoppar.

Hjul

XL-hjulet 100 mm är standard och används främst för linoleum och mellanhårda golv. SL-hjulet är mycket lätttrullat och har dubbla kullager. Det fungerar bäst på hårda golv som till exempel parkett- och betonggolv. BSL-hjulet är ett SL-hjul med en bredare hjulbana. 125- och 150 mm-hjulen är bra vid förflyttning över trösklar och trall, med mera.

BROMSSPAK

Bromsspakar finns i olika längder och kan placeras på höger eller vänster sida.

Reumatikerkryss monteras på bromsspaken. Det förenklar bromsning av stolen för de som finner det svårt att nå bromsspaken i normala fall. Det finns även elbroms.

STATIVFÖRLÄNGARE

En stativförlängare ger stolen ökad stabilitet och förhindrar att den tippar. Väldigt bra tillval om brukaren är spastisk.

FOTRING

Fotringen fungerar som ett stöd för fötterna då avlastning behövs. Den är enkel att fälla upp eller ned efter behov, exempelvis vid förflyttning då man behöver utrymme för fötterna. Fotringen finns i två utföranden och passar till samtliga REAL 9000-stolar med PLUS-stativ.



TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Stativ 9000 PLUS 48 (vuxen) 100 XL 100 SL	802659 802660	9	Körhandtag Optimal Körhandtag PLUS	PB1020 PB1010
2	Stativ 9000 PLUS 43 (barn) 100 XL*, komplettera med bromspedal 100 SL*, komplettera med bromspedal *tillval till stativ, bromspedal för Plus-stativ	802657 802658 802865	10	Ryggmekanism fast f hög rygg inklusive körhandtag djupjust. 2 lägen	803903
3	Fyrbroms kit till PLUS-stativ 43/48 inkl. stativförlängare fram, OBS! Stativ ingår ej	803503	11	Bromsspaksfäste för PLUS-stativ Justerbart i bredd, 7 hål Justerbart i bredd, 2 hål	802800 802799
4	Elbroms för montering på PLUS-stativ Kit för EL stol, komplett Kit för Manuel stol, komplett	803276 803077	12	Stativförlängare Bak för PLUS, Par Fram för PLUS, Par	BEX20 BEX10
5	Stativ 9000 PLUS 48 4-bromsat 100 XL omvänd broms	804270	13	Hjul (komplett inklusive bygel) Länkhjul XL 100 mm Extra lätttrullat länkhjul SL 100 mm Extra brett lätttrullat länkhjul BXL 100 mm Länkhjul 125 mm Länkhjul 150 mm	801213 801144 803162 800904 800905
6	Eldonssats för elbroms PLUS-stativ	803037	14	Påkörningsskydd Påkörningsskydd 9000 PLUS kpl, 4 st, kit Påkörningsskydd 9000 PLUS Påkörningsskydd 6100 PLUS kpl, 4 st, kit Påkörningsskydd 6100 PLUS	IP1010 803154 IP1020 804418
7	Stor kula 50 mm till handbromsspak	LB1010	15	Fotringar 1/8 Fotring 1/8, uppfällbar Hö, PLUS 48 Fotring 1/8, uppfällbar Vä, PLUS 48 Fotring 1/8, uppfällbar Hö, PLUS 43 Fotring 1/8, uppfällbar Vä, PLUS 43	FR1010 FR2010 FR1020 FR2020
7	Liten kula Röd 35 mm	LB1020			
7	Liten kula gummi Svart 40 mm	LB1040			
7	Reumatikerkryss	RC1010			
7	Handbromsspak för PLUS-stativ 25 cm 35 cm 45 cm 55 cm	BD1020 BD1010 BD1030 BD1040	16	Fotringar 1/4 Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 48 Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 43	FR3010 FR3020
7	Handbromsspak m. ögla för PLUS-stativ 35 cm	BD1110			
8	Körbygel PLUS till PLUS-stativ 48 Körbygel PLUS till PLUS-stativ 43	PB1011 PB2011			



FÖR INDIVIDUELL ANPASSNING

BENSTÖD MEDIC

Benstöd i form av hel eller delad fotplatta finns i fyra storlekar: S, M, L och XL. De är ställbara i höjd-, vinkel- och djupled. Fotplattornas mått är desamma på S-XL. Även fotplattan kan ställas i vinkel. Även mittmonterat benstöd "Mobil" finns för vuxen och barn. Benstöden kan kompletteras med vadstöd och knästoppar. Benstöden monteras i ett benstödsfäste (fyrkantströr) under sitsen.

VADSTÖD

Vadstöden fungerar som ett extra stöd för vaderna då benstöden inte räcker till för att stabilisera benen. Vadstöden finns i olika utföranden för respektive benstöd och vadstödsmekanismen monteras enkelt med fästen på benstöden.

KNÄSTOPPAR

Korrigerig av ben och fötter kan ske med hjälp av justerbara knästoppar, som kan regleras till brukarens benlängd.

Knästopparna hindrar brukaren från att glida framåt och monteras på benstöd Medic och är utfällbara och justerbara i höjd- och djupled. Knästoppskuddarna finns att få i olika material och färger.

ADAPTER

Benstödsadapterar finns till rullstolsbenstöden Cross och Comfort. Om man vill montera på egna benstöd på produkten så är det möjligt med dessa. Adaptern monteras på armstödens breddjusteringsbåge.



TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Benstöd "Comfort" EL		10	Benstöd Medic delat, Par	
	Hö	802437		S (18-24 cm)	LS151110
	Vä	802436		M (23-32 cm)	LS151210
	Fäste för benstöd "Comfort" EL	802979		L (28-41 cm)	LS151310
				XL (38-51 cm)	LS151410
2	Benstöd mittmonterat (32x24 cm)		10	Benstöd Medic helt	
	S (30-38 cm)	LS202110		S (18-24 cm)	LS101110
	L (37-53 cm)	LS202210		M (23-32 cm)	LS101210
				L (28-41 cm)	LS101310
	Benstöd mittmonterat PLUS (29x24 cm)			XL (38-51 cm)	LS101410
	S (30-38 cm)	LS262110	11	Benstöd Mini Medic helt	
	L (37-53 cm)	LS262210		S (18-24 cm)	LS111110
				M (23-32 cm)	LS111210
	Benstöd mittmonterad Mini			L (28-41 cm)	LS111310
	S (30-38 cm)	LS212110		XL (38-51 cm)	LS111410
	L (37-53 cm)	LS212210			
3	Benstöd mobil 6100 PLUS kpl. Vuxen Vinkel		12	Benstöd Mini Medic delat	
	elmanövrerat med sarg	LS312210		S (18-24 cm)	LS161110
4	Benstöd mobil 6100 PLUS kpl. Barn Vinkel			M (23-32 cm)	LS161210
	elmanövrerat med sarg	LS312110		L (28-41 cm)	LS161310
				XL (38-51 cm)	LS161410
5	Sarg för fotplatta		13	Benstöd mittmonterat	
	B32xD24	HS2010		Kpl 30-38 cm Fotplatta djup 100 mm	LS222110
	B29xD24	HS2020		Kpl 37-53 cm Fotplatta djup 100 mm	LS222210
6	Benstöd El Längdkompenserande exkl. vadstöd		14	Vadstödmekanism komplett	
	Lång fotplatta (20-48 cm)	LS311110		Par Medic benstöd Br37, kudde 15x13	CS101038
	Kort fotplatta (20-48 cm)	LS311111		Par Medic benstöd Br25, kudde 10x10	CS201138
7	Vadstöd f Benstöd El Längdkomp.		15	Adapter för rullstolsbenstöd Cross	
	Hö+Vä kpl, svart	CS501438		Hö	AD4011
8	Knästopp			Vä	AD4012
	Hö 16x8, svart konstläder	KS111038		Par	AD4010
	Vä 16x8, svart konstläder	KS121038	16	Adapter för rullstolsbenstöd Comfort	
9	Knästopp mini			Hö	AD2011
	Hö 12x8, svart konstläder	KS212038		Vä	AD2012
	Vä 12x8, svart konstläder	KS222038		Par	AD2010



● TILLBEHÖRET PASSAR ENDAST TILL REAL 6100 PLUS

● TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

SITTPLATTOR OCH SITSTILT

SITSTILT

Mercados gasfjäder och elreglerade tiltningar kan placeras på fler platser än under sits eller armstöd. När sitsen tillas följer även ryggplattan med som stöd.

Kontakta Mercado för fler alternativ som passar dina eller din brukares behov.

Vevreglerad sitstilt regleras av personalen med vev som kan låsas i fasta lägen. Är ett bra alternativ då gasfjäderreglerad sitstilt inte fungerar. Passar bra till ortopedkliniker där patienten ska sitta i ett visst gradantal, eller i skolmiljö till barn som behöver sitta aktivt.

Gasfjäderreglerad sitstilt under sits gör att brukaren själv kan justera sitstilt mellan aktivt och passivt sittande.

Då den gasfjäderreglerade sitstilten sitter under armstödet kan brukaren enkelt justera sitstilten mellan passivt och aktivt sittande. Förenklar även uppresning då sitsen är i framåtvinklat läge.

Elreglerad sitstilt under armstöd är mycket lättåtkomlig för brukaren och är lätt att ställa i fasta lägen. Bra alternativ för brukare som ej själva kan justera sin tyngdpunkt.

SITTPLATTOR

ERGOMEDIC-sitsen är framtagen för optimal sittkomfort, då den är utfomad lite högre under låren än under stjärten. Sitsens form fördelar trycket väl och förhindrar att man kanar fram, även då sitsen vinklas framåt.

ERGOMEDIC PLUS-sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Även denna sits är utformad så att den är högre under låren än stjärten. Den högre rundade formen på varje sida om låren stabiliserar både bäckenet och benen.

COXIT-sitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar. Den används främst vid lindring/rehabilitering av ortopediska skador i höft och lårben.

ERGOMEDIC SLOW RECOVERY är tillverkad av två olika material. Det översta så kallade slow recovery-materialet formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad sittkomfort.

Sits träplatta ska användas vid ingjutning eller eftermontering av sittskal. Sits med antiglid rekommenderas vid användning av olika individuellt anpassade sittdynor.


Sits med hygienväv bör användas av brukare med inkontinensproblem. Komplettera med överdrag i plysch.



TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Gasfjäderreglerad sitstilt kpl. inklusive gasfjäder Reglage vid armstöd Reglage vid sits	SAR31 SAR30
2	Vevreglerad sitstilt under sits Komplett sats för vevreglerad sitstilt	SAR20
3	Förberedd för sitstilt	SAR10
4	Elreglerad sitstilt Med manöverbox Med fjärrkontroll Med joystick Med lös dosa	
5	Eldonssats för sitstilt kpl.	803275

NR	BENÄMNING	ART.NR
6	Ställbart förstärkt sittkryss 9000, +15°/-23° (ställbart i tre lägen) Vuxen Br 40-54 cm Barn Br 33-39 cm	803070 803071
6	Ställbart förstärkt sittkryss 6100, +15°/-23° (ställbart i tre lägen) Vuxen Br 40-54 cm Barn Br 33-39 cm	803072 803073
7	Sittkryssmek 9000 Vs -15/+15 Br29-33 Mini/Barn 12V	803527
8	Sits träplatta	ST10xx90
9	Sitsplatta med antiglid	ST10xx61
10	Sits ErgoMedic med hygienväv	STxxx60

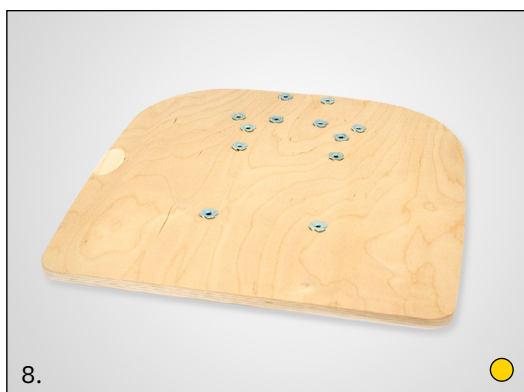

Kontakta Mercado eller se broschyren
"Ergonomiska sittsystem" för mer information om
sittplattor.

RYGGAR OCH RYGGMEKANISMER

RYGGMEKANISM

MEDIC RYGGMEKANISM ger möjlighet att utöka sitsdjupet på ett mer effektivt sätt än med standard ryggmekanism. Det behövs till exempel om brukaren är kraftigt kufotisk. För att få upp huvudet justeras ryggen bakåt och ryggplattan vinklas för att ge bästa möjliga stöd och på så sätt förhindra att överkroppen vill falla framåt. Fördelen med MEDIC RYGGMEKANISM är att vinkeljusteringen är i nedkant på ryggplattan. Det medför att vinkeljusteringen av ryggplattan inte inskränker på sitsdjupet och dessutom ger ett stöd i ryggen. Det centrerar automatiskt brukaren i sidled på grund av att stödet i ryggen fördelas på hela ryggens bredd i underkant.

COMFORT RYGGMEKANISM kan justeras i höjd, djup och vinkel med hjälp av gasfjäderreglage. Ryggen blir fjädrande mjuk och brukaren kan själv förändra sitt sitsdjup sittandes i stolen.

Låg rygg är en ergonomiskt rätt formad ryggplatta som ger ett bra stöd åt svanken och tar upp rundningen i korsryggen. De låga ryggarna lämnar god rörelsefrihet för överkroppen.

Hög rygg ger ännu mer stöd och stadga speciellt uppåt utan att vara för hög och hindra överkroppens samt skuldrornas rörelser. Våra höga ryggar kan även fås med utbyggt svankstöd.

Extra hög rygg ger utöver ett bra svankstöd även ryggplattan stöd högre upp i bröstryggen. Ryggen smalnar upptill för att inte låsa skulderbladen i arbetssituation.

RYGGPLATTOR


ERGOMEDIC-ryggens höga formgivning och vinkling har förändrats för att ge mer plats åt bäckenet och dess mjukdelar. Ryggplattans nedkant är lätt U-formad och mjukare än tidigare.

ERGOMEDIC PLUS-ryggen finns i ett antal varianter. Ett högre ryggstöd som har mer form runt bäckenet och bröstryggen. Högt upp i mitten, mellan skulderbladen, finns ett extra mjukt stöd inbyggt för att man skall kunna sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet samtidigt som man har skuldrorna fria. Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar.



TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Standard ryggmekanism, Låg rygg	BRM1000	6	Comfort ryggmekanism, Hög rygg	
2	Standard ryggmekanism, Hög rygg	BRM4000		Grund (för barn och coxitsits)	801742
3	Medic ryggmekanism, Låg rygg 112			Djup	801744
	S 200 mm	BRM1800	7	Elreglerad ryggmekanism monterad med Låg rygg	
	L 240 mm	BRM1900		Eldon+Reläsats f ryggvinkel 9000 PLUS	803277
	XL 340 mm	BRM2000		Eldon+Reläsats f ryggvinkel 6100(PLUS)	600266
				Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg	801265
	Medic ryggmekanism, Låg rygg 155		8	Elreglerad ryggmekanism monterad med Hög rygg	
	S 200 mm	BRM1500		Eldon+Reläsats f ryggvinkel 9000 PLUS	803277
	L 240 mm	BRM1600		Eldon+Reläsats f ryggvinkel 6100(PLUS)	600266
	XL 340 mm	BRM1700		Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Hög rygg	800841
4	Medic ryggmekanism, Hög rygg 112		9	Eldonssats för ryggvinkel	
	S 200 mm	BRM4800		Eldon+Reläsats f ryggvinkel 9000 PLUS	803277
	L 240 mm	BRM4900		Eldon+Reläsats f ryggvinkel 6100(PLUS)	600266
	XL 340 mm	BRM5000	10	Dubbel Medic ryggmekanism (komplett)	
				L 155 mm, H 240 Hög rygg	BRM5600
	Medic ryggmekanism, Hög rygg 155			L 155 mm, H 340 Hög rygg	BRM5700
	S 200 mm	BRM4500	11	Slingback ryggmekanism	
	L 240 mm	BRM4600		Ryggmekanism Slingback B39xH30	BRM8000
	XL 340 mm	BRM4700		Ryggmekanism Slingback B45xH30	BRM8010
5	Comfort ryggmekanism, Låg rygg			Ryggmekanism Slingback B39xH40	BRM8100
	Grund (för barn och coxitsits)	801743		Ryggmekanism Slingback B45xH40	BRM8110
	Djup	801745			

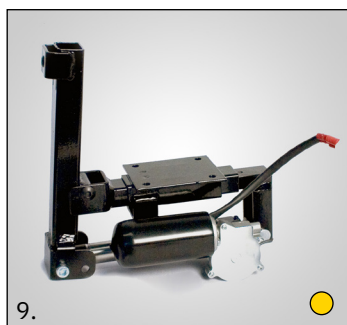

Se Mercados broschyr
"Styrka och Funktion" för mer
information om den el-
reglerade ryggmekanismen.



Kontakta Mercado eller se broschyren "Ergonomiska sittsystem" för mer information om sitt- & ryggplattor.

ARMSTÖDSPLATTOR OCH ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTOR

Armstöden är en mycket viktig del i ERGOMEDIC-systemet, de bidrar till den höga komforten. Dessa har därför utvecklats mer ergonomiskt. Kanterna har fasats av, både på in- och utsidan. Detta för att trycket mot underarmarna ska minimeras vid långvarig kontakt. Armstödsplattan är skålad baktill för att armbågen ska ligga stabilt. Framtill är den formad för att ge ett bra grepp vid uppresning och överflyttning.

COMFORTARMSTÖD är ett något bredare armstöd med mjukare stoppning. Det gör det lättare att vila armarna på armstöden.

HEMIPLEGIARMSTÖD passar brukare med delsidesförslamning. Skålningen i armstödsplattan gör det lättare att hålla den förslamade armen på armstödet. Armstödsplattan är roterbar för bästa möjliga positionering.

ERGOMEDIC PLUS-armstöden är formade så att armarna får stöd från sidorna vilket medför att överkroppen blir mer avspänd. De är även uppbyggda under handleden för att ge extra avlastning.

ARMSTÖDSMEKANISM

ARMSTÖDSMEKANISM 9000 PLUS går att justera i höjddled. Det kan sänkas ner helt, så att förflyttning i sidled möjliggörs för brukaren.

ARMSTÖD HEMIPLEGI 9000 PLUS är justerbart i höjddled. Dessa armstöd är dessutom, utan att höjden ändras, svängbara i sidled.

ARMSTÖDSMEKANISM 6100 finns i både vinkelställbart och ej vinkelställbart utförande. Brukaren kan själv justera armstöden i höjd och bredd. De fällbara armstöden kan även fällas bakåt, vilket möjliggör sidoförflyttning på ett enkelt sätt.

ARMSTÖDSMEKANISM 6100 HEMIPLEGI uppstår vid komplettering av armstödsmechanism 6100 med hemiplegimekanismen för fällbara armstöd. Även i detta fall så ger denna funktion svängtrum i sidled.

 TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Armstödsplatta ErgoMedic 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm	För fällbart armstöd AR151038 AR152038 AR153038	6	Armstödsplatta Hemiplegi	AR406038
		För ej fällbart armstöd AR101038 AR102038 AR103038 AR104038	7	Armstöd Armstöd 9000 PLUS Hö, 32 cm Armstöd 9000 PLUS Hö, 38 cm Armstöd 9000 PLUS Vä, 32 cm Armstöd 9000 PLUS Vä, 38 cm	802700 802701 802702 802703
		För fällbart armstöd AR301038 AR302038 AR303038 AR304038	8	Armstöd breddbåge PLUS Hö	802698
		För ej fällbart armstöd AR502038 AR503038 AR504038	9	Armstöd breddbåge PLUS Vä	802699
2	Armstödsplatta Mobil 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm		10	Armstöd 6100 för stol utan sitstilt Vä Hö	ARM3012 ARM3011
3	Armstödsplatta Comfort 30 cm 35 cm 40 cm		11	Armstöd 6100 för stol med sitstilt Vä Hö	ARM3112 ARM3111
4	Armstödsplatta ErgoMedic PLUS 42 cm Hö 42 cm Vä 30 cm Hö 30 cm Vä	AR205138 AR205238 AR202138 AR202238	12	Hemiplegi mekanism för fällbara armstöd Par Hö Vä	802991 802989 802990
5	Armstödsplatta Mini 25 cm 30 cm	För ej fällbart armstöd AR111038 AR112038	13	Armstöd hemiplegi 9000 PLUS 32 cm Hö Vä	802992 802993
			13	Armstöd hemiplegi 9000 PLUS 38 cm Hö Vä	804164 804165



Kontakta Mercado eller se broschyren "Ergonomiska sittsystem" för mer information om armstödsplattor.



För info om armstöd för vajerreglage, kontakta Mercado eller se vår hemsida www.mercado.se



TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

MÅNGA TILLBEHÖR GER ÖKAD FLEXIBILITET

BÅLSTÖD

Bålstöd används för att få ett mer upprätt och aktivt sittande. Mercado har tre typer: sväng- och ställbara, raka och svängda bålstöd.

BORD

En rökfärgad genomskinlig makrolonskiva med sidokanter. Bordet är uppfällbart och kompatibelt med hela REAL 9000-programmet.

BRICKA

Brickan för avlastning är av trä och har måtten 45x30 cm. Den vrids i sidled och kan fästas på valfri sida av stolens armstöd. Även denna är kompatibel med REAL 9000-programmet.

HÖFTBÄLTE

Ett bälte som förhindrar brukaren från risken att falla ur stolen framåt. Finns i storlek S som har en inställbar längd på 51-71 cm, M har 68-83 cm och L har 83-103 cm.

AMPUTATIONSSTÖD

Ett amputationsstöd hjälper till att hålla benet i en korrekt position och är utformat för att på det mest bekväma sätt vila det amputerade benet i. Amputationsstöd finns för både höger och vänster ben och monteras med ett fäste under sitsen.

GRENKIL

Grenkil/knädelare används när man vill förhindra att knäna går emot varandra, den ger ökad stabilitet och förbättrad sittställning. Grenkilen finns med bredden 11 cm. Grenkilmekanismen finns tillgänglig i tre längder; "Barn" 57 mm, "Vuxen" 115 mm och 175 mm.

ÖVERDRAG

Överdragen skyddar klädseln från smuts och damm, samtidigt som det förlänger livslängden på stolens klädsel. Inkontinensöverdrag är en snabb och enkel lösning om man vill skydda sisten mot väta. Överdrag i olika färger finns till alla stoppdetaljer.





TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Sväng och ställbart bålstöd Bålstödsmekanism sväng och ställbar Hö Bålstödsmekanism sväng och ställbar Vä Tillhörande kudde st (sväng och ställbar)	TS31 TS32 TS2038	8	Grenkilmekanism** 57 mm komplett 115 mm komplett 175 mm komplett	LD18 LD19 LD20
2	Rakt bålstöd Bålstödsmekanism rak båge Hö Bålstödsmekanism rak båge Vä Kudde st (grå plysch)	TS11 TS12 TS1046	9	Höftbälte inkl. fästen och skruvar S (51-71 cm) M (68-83 cm) L (83-103 cm)	HB1010 HB1020 HB1030
3	Svängt bålstöd Bålstödsmekanism svängd båge Hö Bålstödsmekanism svängd båge Vä Kudde st (grå plysch)	TS21 TS22 TS1046		Höftbälte utan fäste S (51-71 cm) M (68-83 cm) L (83-103 cm) Fäste till höftbälte Par	800952 800953 800954 800878
4	Bord rökfärgat 60x45 cm* f ej fällbart 9000 Armstöd PLUS Bord rökfärgat 60x45 cm f fällbart armstöd	TA1010 TA1030	10	Amputationsstöd Amputationstödsmekanism Fäste Amputationstöds kudde (grå plysch)	800827 800786 AS1046
5	Bord rökfärgat 45x37 cm* f ej fällbart 9000 Armstöd PLUS Bord rökfärgat 45x37 cm f fällbart armstöd	TA1015 TA1035	11	Överdrag finns till alla stoppdetaljer	
6	Bricka 45x30 cm med fäste	TA1020	12	H-selefasten inkl. nedre fasten och skruvar (par) Fäste övre för H-sele** **OBS! säljs styckvis.	HB2540 804184
7	Grenkilskudde (svart konstläder)** 11 cm	LD1038			

*På REAL 6100 kombineras med ej fällbara PLUS-armstöd.

**Går ej att kombinera med mittmonterat benstöd.

Nya art.nr.
Gäller fr.o.m
2019-11-01

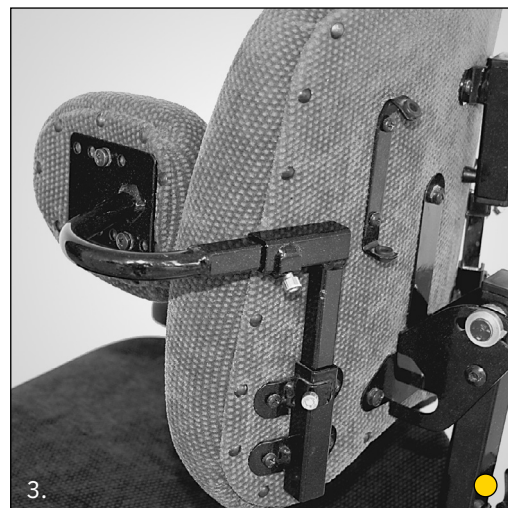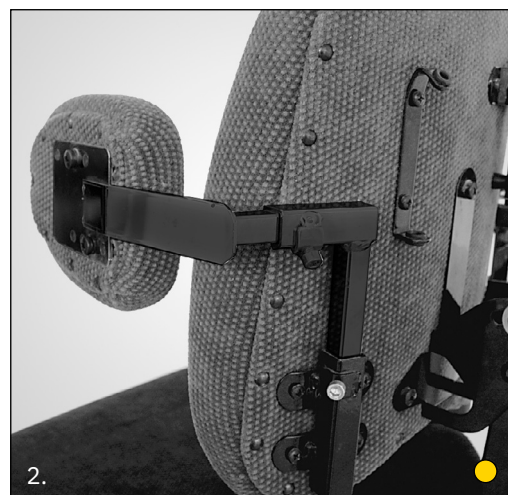

Se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer info om överdrag till stoppdetaljer, där kan ni även få mer information om våra stoppdetaljer och färger.



STOPPDETALJER OCH ELEKTRISKA REGLAGE

NACKSTÖD

Nackstöd ger stöd åt huvudet för att få rätt sittställning samt ger avlastning för nacke/rygg vid dålig bålkontroll. Det kan enkelt justeras för optimal inställning. Finns med plan-, skålad- och ERGOMEDIC PLUS-kudde.

SIDOSTÖD

Sidostöd ger brukaren hjälp att bibehålla stabilitet och position. Används även som lårstöd varvid fötterna får bättre stöd på fotplattor alternativt golv och man undviker att benen glider isär.

Kan ställas i höjd och bredd alternativt vändas bak och fram. Finns i fyra storlekar; XS, S, M och L.

ELEKTRISK REGL.

SITTHÖJNING/SITSTILT

Kan placeras under armstöd, på ryggen i reglage med lös dosa eller regleras via en joystick. Fjärrkontroll passar utmärkt för klinikbruk.

ELEKTRISK BROMS

Denna broms förenklar bromsning för de som har problem med den manuella bromsspaken.





Den är utformad som en röd knapp och sitter på utsidan av den elektriska höj-/sänkfunktionen under ena armstödet. Ett enda knapptryck sköter om hela bromsningsproceduren.


KLÄDSEL

Stolen levereras klädd i plysch, konstläder eller vävt mönstrat tyg som finns i olika färger. Det finns även praktiska, maskintvättbara överdrag till alla stoppdetaljer.

 TILLBEHÖRET PASSAR ÄVEN TILL REAL 6100 PLUS

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Nackstöds kudde plan, 29x16 cm	NS1046	10	Joystick för El-stol m bromsknapp 2-funktion	802742
2	Nackstöds kudde skålad, 31x18 cm	NS3046		3-funktion	802743
3	Nackstöds kudde ErgoMedic PLUS 30x23	NS2046	11	Fjärrkontroller Multi (2-4 funktion)	801808
4	Nackstöds kudde ErgoMedic PLUS 30x8	NS4046		Upp/ner (1 funktion)	801806
5	Nackstöds mekanism universal S (h 28 cm)	NS30	12	Elreglage i lös dosa (1 funktion)	802739
	M (h 38 cm)	NS20	13	Elreglage i lös dosa (2-4 funktion)	802740
	L (h 48 cm)	NS10	14	Fotkontakt för El höjning/sänkning	802688
6	Nackstöds mekanism PLUS sidjusterbar S (h 28 cm)	NS31	15	Batteriladdare till El-stol 12V	802289
	M (h 38 cm)	NS21	16	Batteri REAL Elstol Vuxen 12 V 7.2Ah (sittbredd 29-39)	801134
	L (h 48 cm)	NS11	17	Batteri REAL Elstol Barn 12 V 3.4 Ah	801135
7	Sidstödsfäste PLUS Hö	SS11	18	Batteriladdare 6100 Plus 4 amp (17V start)	BAC1010
	Vä	SS12	19	Batteripaket 6100 Plus 24V Sonnenschein A512/25G5	BA1010
	Par	802874	20	Slät manöverbox PLUS för upp/ned	803893
8	Sidstöds kudde XS (15x8 cm)	SS10XX	21	Manbox Plus f upp/ner tunga +ladd kpl m kablage f reläkort	803034
	S (28x8 cm)	SS20XX			
	M (25x14 cm)	SS30XX			
	L (30x16 cm)	SS40XX			
9	Laddbox 1-funktion	803029			
	4-funktion	803030			

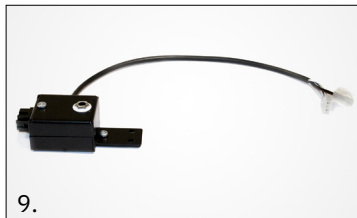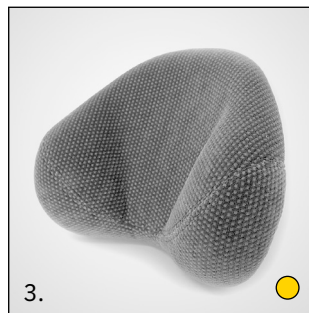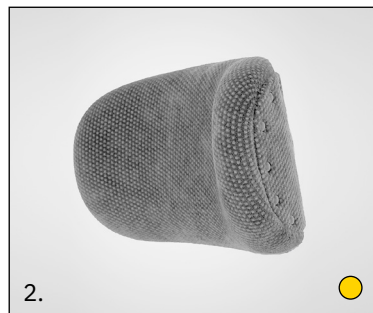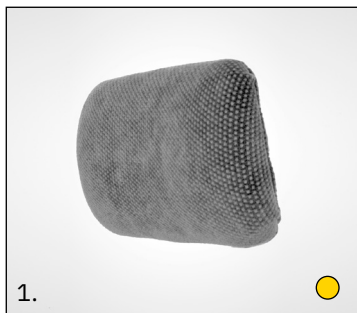

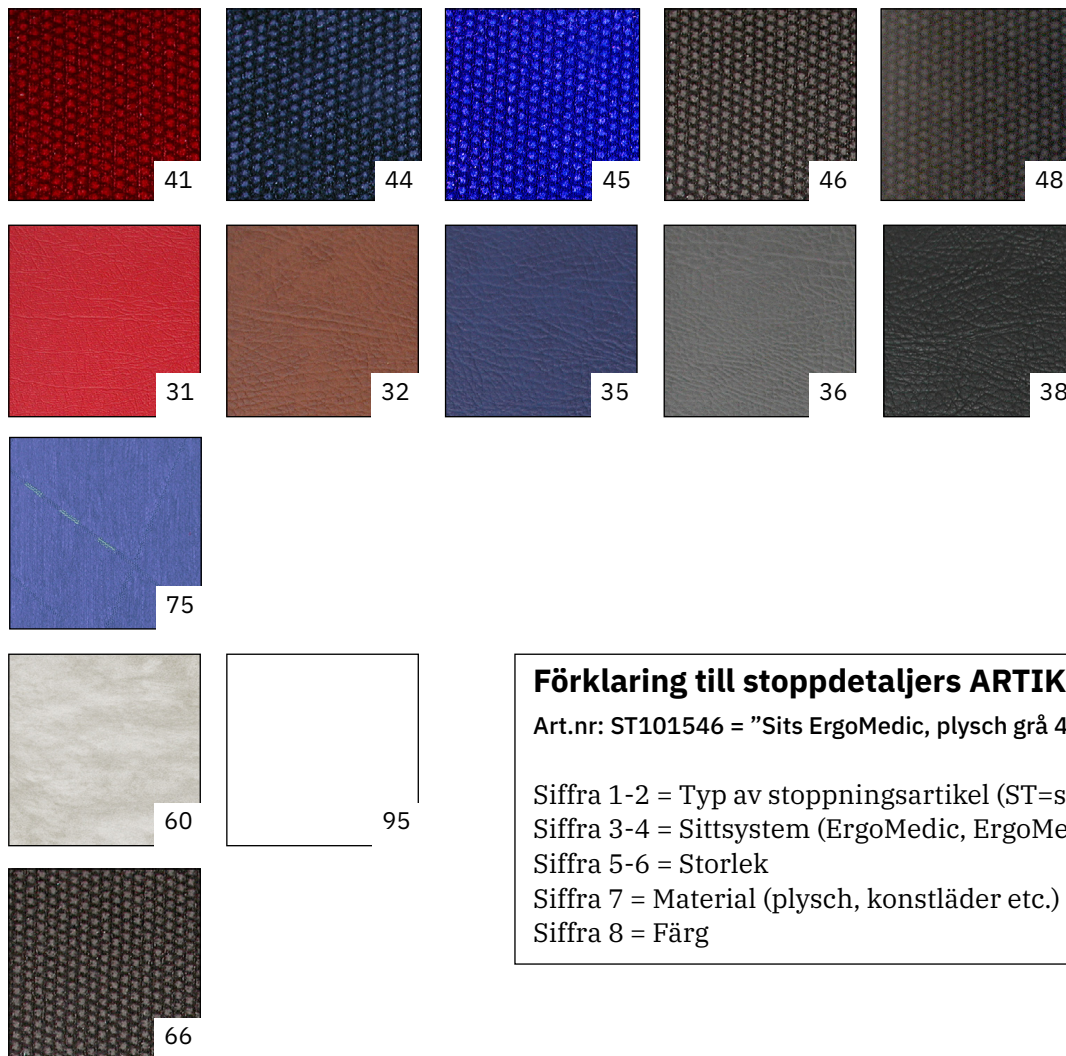

Förklaring till stoppdetaljers ARTIKELNUMMER

Art.nr: ST101546 = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffror 5-6 = Storlek

Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)

Siffror 8 = Färg

Klädselar

Plysch

41 Vinröd 44 Marin 45 REAL-blå 46 Grå 48 Svart

Konstläder

31 Röd 32 Brun 35 Blå 36 Grå 38 Svart

Väv mönstrad Vuxen

75 Blå

Alternativ klädsel

60 Hygienväv 95 Utan klädsel

Överdragsklädsel

66 Inkontinensöverdrag Grå plastad plysch

Överdrag går att få till samtliga av Mercado Medics stoppdetaljer, gå in på www.mercado.se eller kontakta oss för mer information.



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se