



DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

REAL 9000 PLUS KIND
HMV-Nr. 26.11.05.0040

REAL[®] 9000 PLUS KIND

Unser Therapiestuhl macht Inklusion KINDERleicht



[Der abgebildete Stuhl ist mit Zusatzoptionen versehen.]

EIN Modulsystem - UNZÄHLBARE Möglichkeiten



Der Therapiestuhl REAL 9000 PLUS KIND bietet dem Kind Selbständigkeit in allen Bereichen. Unser Modulsystem umfasst:

Ergonomisches ERGOMEDIC (PLUS) Sitzsystem

Wir bieten eine große Auswahl an Sitzpolstern, Rückenlehnen, Rollen und Zubehör, so dass unser Therapiestuhl optimal an das Kind angepasst werden kann. Dank der Form, Verstellbarkeit und Austauschbarkeit von Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen lässt sich die ergonomische Sitzhaltung ganz nach Bedarf variieren. Hierdurch kann eine unterstützte aktive Arbeitshaltung geschaffen werden und unser System mit dem Kind **MITWACHSEN**.

Vollverschweißter und nach hinten verlängerter Rahmen

Trotz seiner geringen Maße von 43 x 53 (B x T) ist der Rahmen extrem stabil.

Einstellbare Sitzhöhe

Die Sitzhöhe kann elektrisch oder mit einer Gasfeder eingestellt werden. So wird eine ergonomische Sitzhaltung im Verhältnis zur Arbeitsfläche erreicht, vor allem in Kombination mit unserem REAL TISCH, aber auch mit vorhandenem Schulmobiliar.

Zuverlässiges Bremssystem

Für einen sicheren Stand sorgt unser Bremssystem mit separaten Bremsstützen und kräftigen Bremsbelägen. Dank der computerberechneten Hubkurve lässt sich die Bremse per Hand (oder Fuß der Begleit-

person) mit nur wenig Kraftaufwand betätigen. Die Bremshebelhalterung ist stufenverstellbar. Damit lässt der Bremshebel sich auch gut bedienen, wenn die Armlehnen seitlich verstellt sind. Als zusätzliche Option bieten wir eine elektrische Feststellbremse.

Eine wichtige Ergänzung: Sitzwinkleinstellung

Mit einer Sitzwinkleinstellung (optional lieferbar) kann die Druckbelastung auf den Körper verändert und damit Sitzbelastungsschmerzen oder Dekubitus vorgebeugt werden. Unser neuester Sitzwinkelmechanismus hat 3 einstellbare Bereiche: + 8°/-15°, +15°/-8° und 0°/-23° und ist damit an jeden Wunsch anzupassen. Dieser Mechanismus ist mit all unseren Sitzelementen kompatibel.

Hohe Qualitätsanforderungen gewährleisten jahrelangen sicheren Gebrauch

Der REAL 9000 PLUS KIND wurde vom Schwedischen Technischen Forschungsinstitut SP getestet und gemäß DIN-EN 1335, 1-3 zugelassen. Zudem besitzt der Stuhl die CE-Kennzeichnung und erfüllt die schwedischen Anforderungen an medizintechnische Produkte sowie die des schwedischen Staatlichen Amtes für Arzneimittelwesen. Die hohen Qualitätsanforderungen gewährleisten zudem jahrelange Sicherheit im Gebrauch.



Die Ausführung wird an den individuellen Bedarf **ANGEPASST**

SITZFLÄCHE

In verschiedenen Größen und Materialien.



SITZWINKEL-EINSTELLUNG

Mit Gasfeder, Kurbel oder elektrisch.




RÜCKEN-LEHNE

Wählen Sie die gewünschte Ausführung.



SITZHÖHEN-VERSTELLUNG

Elektrisch oder manuell.

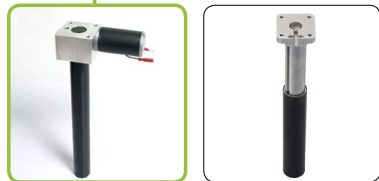

BEDIENUNG

Sie wählen die Ausführung und Anbringung.



PLUS-RAHMEN

In verschiedenen Ausführungen.



ROLLEN

Für verschiedene Böden, in unterschiedlichen Größen.




BEZUG

Aus Velours, Stoff oder Kunstleder.



OPTIONEN

Eine Vielzahl an Optionen.

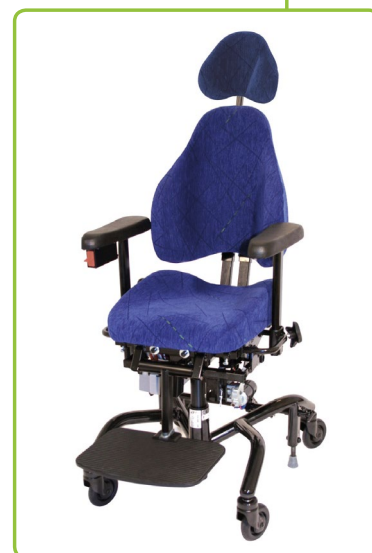

⊕ REAL® 9000 PLUS KIND

EIN Modulsystem - UNZÄHLBARE Möglichkeiten

Armlehnenmechanismus PLUS mit weichen Armlehnen. In verschiedenen Längen und Materialien erhältlich.

Leicht zu bedienende Bremse mit breitenverstellbarer Bremshebelhalterung. Zur Montage rechts oder links.

Flexibler PLUS-Rahmen
43 x 53 cm (B x T)
(oder MINI 43 x 48 cm)

Hubbereich:
• 20 cm oder 14 cm
per Gasfeder
• 28 cm oder 20 cm
elektrisch



Sitzsystem ErgoMedic oder ErgoMedic PLUS.

Ergonomisch geformter PLUS-Drehknauf. Einfach festzuhalten und zu verstellen.

Rollen, 100 mm, mit Qualitätskugellagern von SKF. In verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Unterlagen erhältlich.

[Der abgebildete Stuhl ist mit Zusatzoptionen versehen.]



Leichter Transport von A nach B

Optional ist eine TRANSPORT-Version lieferbar, dabei wird ein Schiebebügel am Rahmen montiert, zusammen mit großen Hinterrädern von 125 mm für leichtes Schieben durch die Begleitperson.

Der Schiebebügel ist in der Tiefe einstellbar auf 2 Positionen.

Die Bremse ist über einen Handgriff am Bügel zu bedienen.

DANK DES
MODULSYSTEMS
KANN UNSER
SITZSYSTEM
MITWACHSEN

REAL 9000 PLUS KIND
HMV-Nr. 26.11.05.0040