



REAL 2000

maagsteunstoelen – ontspanning voor rug en schouders





VOORKOMEN SLIJTAGE

Een verkeerde zithouding tijdens lange werkdagen leidt in veel gevallen tot slijtage. Vermoeidheid en spierspanningen in de rug en schouders zijn vaak het gevolg van langdurig zitten in een voorovergebogen werkhouding. Voor veel arbeidstaken is het noodzakelijk voortdurend te zitten.

Een ergonomisch correcte zithouding op de juiste hoogte afhankelijk van de werksituatie, geven een natuurlijke ontspanning voor rug, schouders en nek. Een verstelbare stoel met zadelsit en maagsteun, in plaats van rugsteun, biedt deze ontspanning.

Mercado Medic AB heeft in samenwerking met fysiotherapeuten en arbeidsdeskundigen, stoelmodellen ontwikkeld waarbij men “achterstevoren” zit met een maag- in plaats van rugsteun.

ONTSPANNING VOOR RUG EN SCHOULDERS

De maagsteunstoelen van Mercado zijn bedoeld voor personen die ontspanning nodig hebben bij werk dat in voorovergebogen houding wordt verricht, of dienen als alternatief voor het traditionele zitten. Deze zithouding maakt een symmetrische en gunstige belasting van het lichaam in zijn geheel, mogelijk.

De stoelen zijn vooral bedoeld als arbeidstechnisch hulpmiddel, maar werken tevens goed bij pijnpatiënten in het reïntegratieproces.

VELE KEUZEMOGELIJKHEDEN

Omdat REAL 2621, 2624 en 2625 een hoogteinterval van 20 cm heeft, is een comfortabele zithoogte snel gevonden. Al deze maagsteunstoelen zijn te verkrijgen met verschillende soorten ergonomisch gevormde zittingen en maagsteunen, met keuze uit veel verschillende soorten bekleding. De ergonomisch gevormde zit- en maagplaat verminderen de statische spierbelasting in de rug. De zadelvorm van de zitting, in combinatie met de grote reikwijdte van de stoel, vereenvoudigen een staande-zittende werkhouding. Met een licht voorovergebogen zitting kan de gebruiker de schouders laten zakken en toch de rug recht houden. Dit vermindert het

risico op slijtage aangezien het product als arbeidstechnisch hulpmiddel wordt gebruikt. Voor pijnpatiënten betekent dat verzachting van de pijn en een verkorting van het reïntegratieproces.

DE VERSCHILLENDE MODELLEN

REAL 262I is in de standaarduitvoering uitgerust met een soepel taboeretframe zonder wielen. Dit samen met de mogelijkheid de zitting te draaien, zorgt ervoor dat in een zo gunstig mogelijke houding kan worden gewerkt. Indien men graag wil dat de stoel eenvoudig kan worden verplaatst zijn optioneel gemakkelijk rollende wielen (met of zonder remhendel) verkrijgbaar. Er kan tevens een voetring op worden gemonteerd als steun voor de voeten tijdens het werken.

De REAL 2624 heeft een vierpotig frame met een ingebouwde rem. De krachtige rem die met beide benen kan worden bediend zorgt ervoor dat de stoel

zeer stevig staat na het remmen. Nadat de stoel is stilgezet kan de remas uitstekend worden gebruikt om de voeten op te plaatsen tijdens het werken. Door de gemakkelijk rollende wielen van 75 mm kan men zich eenvoudig zittend in de stoel verplaatsen.

REAL 2625 is uitgerust met een vijfpotig frame. De gemakkelijk rollende wielen van 75 mm maken verplaatsen eenvoudig. Dit samen met de mogelijkheid de zitting te kunnen draaien, kan op gunstige wijze de gewenste werkplek worden bereikt. De zithoogte van de REAL 2625 is iets lager dan bij de REAL 262I en 2624. Daardoor is deze geschikt voor kleinere mensen. De stoelen zijn ontworpen aan de hand van hoge eisen die worden gesteld aan comfort, functionaliteit en slijtagevastheid.

De stoelen worden gemaakt in onze eigen fabrieken in Halmstad, Tranås en op Lindingö.




REAL 2621, 2624 en 2625 kunnen, al naar gelang uw wensen, eenvoudig met verschillende zittingen en maagsteunen worden uitgerust.

ZITTINGEN

- 1 Zadelzit 36x36 cm
- 2 Ergomedic zitting 40x36 cm
- 3 Ronde zitting "toppig" 35 cm

MAAGSTEUN

- 4 Standaard maagsteun Medic 27x23 cm
- 5 Alternatieve maagsteun 33x16 cm

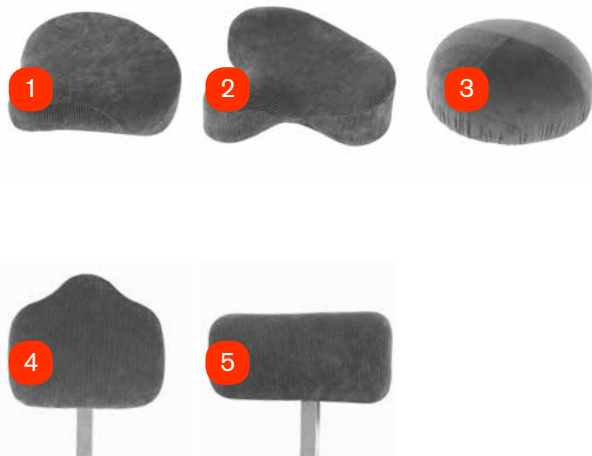

REAL[®] 2000



REAL 2621

Uitgerust met:
Zadelzitting Medic 40x36 cm.
Alternatieve maagsteun 33x16 cm.
Extra uitrusting:
Wielen 50 mm met rem.



REAL 2624

Uitgerust met:
Zadelzitting Medic 40x36 cm.
Maagsteun Medic 27x33 cm.



REAL 2625

Uitgerust met:
Zadelzit 36x36 cm.
Alternatieve maagsteun
33x16 cm.

MODELL

Gaslyftomat
Lyftomat
Handmatig kantelbare zitting (+22o/-14o)
Rotatievergrendeling
Maagplaat Medic 27x23 cm
Maagplaat laag 33x16
Glijbuttons
Wiel 75 mm
Wielvormige poten 50 mm
Door gewicht remmende wielen 50 mm
Wielen 50 mm met rem
Rem
Zithoogte cm
Zadelzitting Medic 40x36 cm
Alternatieve zadelzitting Ergomedic 40x36
Alternatieve zadelzitting 36x36 cm
Alternatieve zadelzitting 41x41 cm
Frame cm (breedte x diepte)
Maximaal gebruikersgewicht

	2621	2621-1	2624	2624-1	2625
	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Bevestigde
	-	-	Ja	Ja	-
	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
	Ja*	Ja*	-	-	Ja
	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ja*	Ja*	-	-	-
	-	-	Ja*	Ja*	Ja
	Ja	Ja	-	-	-
	Ja	Ja	-	-	-
	-	-	Voetrem*	Voetrem*	-
	60-80	70-90	60-80	70-90	50-70
	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja*
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	42,5x42,5	42,5x42,5	43x48	43x48	-
	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

*standaard

