

# GEPOLSTERTER AKTIV-RÜCKEN

Der Aktiv-Rücken ist eine von Mercado Medic entwickelte und gefertigte Rückenlehne mit der S2 Polsterung von Panthera. Die Kombination einer individuell einstellbaren Rückenbespannung und der in Höhe ①, Tiefe ② und Lehnenwinkel ③ einstellbaren Rückenlehnenverstellung, macht eine optimale Unterstützung und Entlastung möglich.

Der Aktiv-Rücken ist unter anderem gedacht für:


- Menschen mit einer Kyphose;
- Menschen die eine ausgeprägte Lordose-Unterstützung brauchen;
- Menschen die im Mercado-Stuhl einen vergleichbaren Rücken wie im Aktivrollstuhl haben möchten.

Der Aktiv-Rücken ist in 4 Größen erhältlich (Breite x Höhe):


- 39x30 cm
- 45x30 cm
- 39x40 cm
- 45x40 cm

Der Aktiv-Rücken ist für unsere REAL 9000 PLUS (EL) Modelle und unseren REAL 6100 PLUS (EL) verfügbar. Die Aktiv-Rücken-Verstellung verfügt über ein Doppelbefestigungsrohr unter dem Sitz, das eine stabile Unterstützung bietet. Bei der Sitzwinkelverstellung, einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°, kann der Aktiv-Rücken direkt montiert werden, ansonsten wird ein Adapter (Art.- Nr. 805017) benötigt.



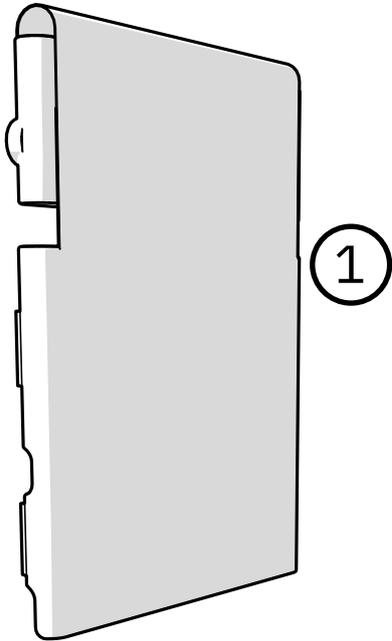

- 1** BR605193 Aktiv-Rücken 45x40
- BR605293 Aktiv-Rücken 45x30
- BR605393 Aktiv-Rücken 39x40
- BR605493 Aktiv-Rücken 39x30

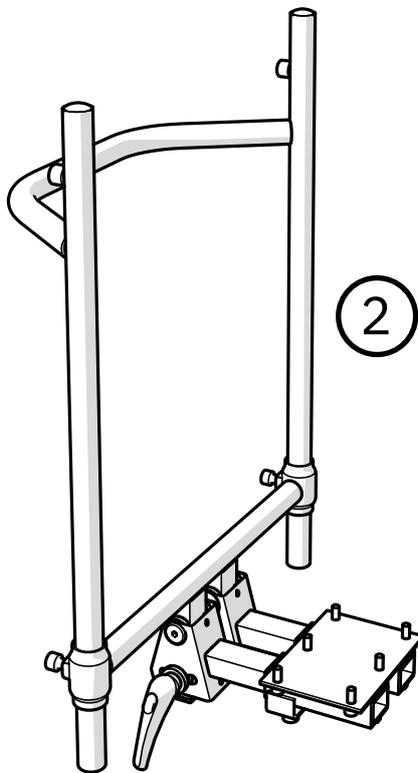

- 2** BRM8000 Rückenlehnenverstellung für Aktiv-Rücken 45x40
- BRM8010 Rückenlehnenverstellung für Aktiv-Rücken 45x30
- BRM8100 Rückenlehnenverstellung für Aktiv-Rücken 39x40
- BRM8110 Rückenlehnenverstellung für Aktiv-Rücken 39x30