

RYGGMEKANISM SLINGBACK MED KLÄDSEL


Ryggmekanism Slingback är en egentillverkad ryggmekanism med klädsel S2 från Panthera. Ryggmekanismen är justerbar i höjd (1), djup (2) och vinkel (3) och kan därmed anpassas till optimal avlastning och stöd för att bibehålla balans och avlastning i sittandet även vid avancerad sittproblematik som till exempel kyfos och scolios.

Ryggmekanism Slingback har dubbla infästningsrör under sits, detta för att ge ett stabilt stöd och även motverka torsionskraften vid snedbelastning även vid bakåttillat sittande och kan direkt monteras på Sittkryss -15°/+23° (Allvinkelkryss). För övriga sittkryss finns en adapter för Ryggmekanism Slingback (Art.nr. 805017).

Ryggklädseln S2 från Panthera är ställbar med justeringsband och överdrag som lätt kan justeras i rätt form efter olika behov av support.

Ryggmekanism Slingback finns i 4 storlekar:
39x30 cm, 45x30 cm, 39x40 cm, 45x40 cm (bredd x höjd)



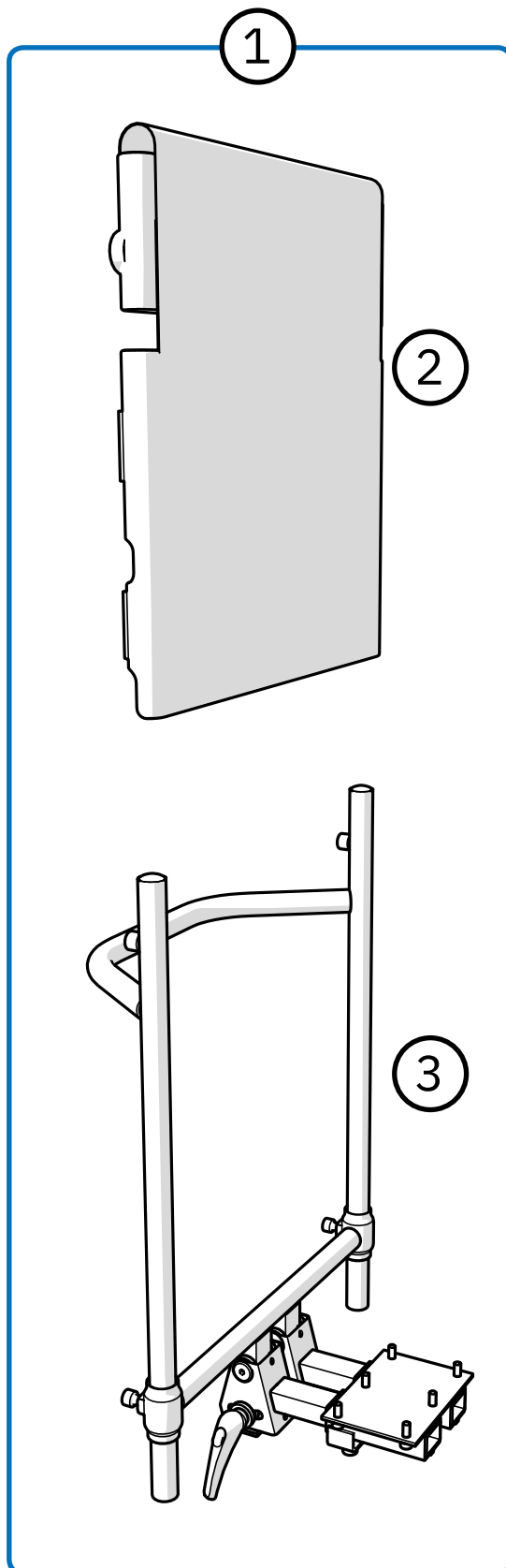

- 1** 804856 Ryggmek + Rygg Slingback kpl. 45x40
Backrest mech + Backrest Slingback 45x40
- 804857 Ryggmek + Rygg Slingback kpl. 45x30
Backrest mech + Backrest Slingback 45x30
- 804858 Ryggmek + Rygg Slingback kpl. 39x40
Backrest mech + Backrest Slingback 39x40
- 804859 Ryggmek + Rygg Slingback kpl. 39x30
Backrest mech + Backrest Slingback 39x30

- 2** BR605193 Rygg Slingback 45x40 S2-Klädsel Svart
Backrest Slingback 45x40
- BR605293 Rygg Slingback 45x30 S2-Klädsel Svart
Backrest Slingback 45x30
- BR605393 Rygg Slingback 39x40 S2-Klädsel Svart
Backrest Slingback 39x40
- BR605493 Rygg Slingback 39x30 S2-Klädsel Svart
Backrest Slingback 45x40

- 3** BRM8000 Ryggmekanism Slingback 45x40
Backrest mech Slingback 45x40
- BRM8010 Ryggmekanism Slingback 45x30
Backrest mech Slingback 45x30
- BRM8100 Ryggmekanism Slingback 39x40
Backrest mech Slingback 39x40
- BRM8110 Ryggmekanism Slingback 39x30
Backrest mech Slingback 39x30