




REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKET'S FÖRESKRIFTER
2003:11.

⊕ REAL[®] 6100 PLUS med LiNX

LiNX elektroniksystem förbättrar din rörelsefrihet ytterligare

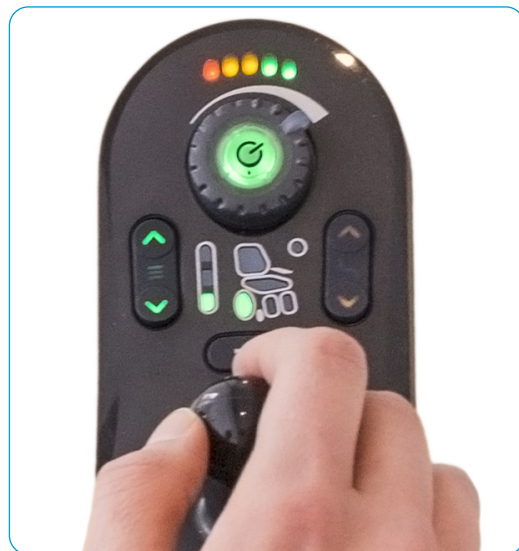

Rörelse- & valfrihet med REAL 6100 PLUS LiNX

När benen är svaga behöver man en stol att både sitta i och förflytta sig med. Stolen ska vara bekväm att ta sig fram där man vill. Nya LiNX styrsystem ger förbättrade personligt anpassade köregenskaper.

Smidig elrullstol ger maximal rörelsefrihet

REAL 6100 PLUS LiNX är en 6-hjulig elrullstol för inomhusbruk. Stolen är individuellt anpassningsbar för personer i alla åldrar. Det mycket smala chassiet tillsammans med styrning på mitthjulen gör den mycket smidig på små ytor. Det elektriskt justerbara sitthöjdsintervall är hela 28 cm vilket gör det möjligt för brukaren att nå höjder som i vanliga fall inte är möjligt för en sittande person. Med vår extra låga ellyftomat kan man komma ner i sitthöjd till 33 cm. Detta tillsammans med nya LiNX styrsystem från Dynamic Controls ger användaren maximal rörelsefrihet, både horisontellt och vertikalt, hemma på arbetet eller i skolan.

LiNX styrsystem ger en tryggare körupplevelse

REAL 6100 PLUS LiNX erbjuder en mängd olika anpassningsmöjligheter. Manöverboxen är mycket lättöverskådlig och användarvänlig. Köregenskaperna, som via bluetooth enkelt kan individanpassas i realtid, ger användaren en ännu bättre och tryggare körupplevelse. LiNX styrsystem förenklar både användning, anpassning och service.

Valfrihet

REAL 6100 PLUS LiNX har stora möjligheter att anpassas efter användarens unika behov och önskemål. I standardutförande har elrullstolen ett ergonomiskt sittsystem och nedjusterbara armstöd för att möjliggöra enkel sidoförflyttning i och ur stolen. Benstödet har en stabil fotplatta och är justerbart i höjd och vinkel. LiNX styrsystem är kompatibelt med andra leverantörers manöverenheter och kan programmeras för upp till 20 olika elfunktioner.

Brett utbud av tillval och tillbehör

REAL 6100 PLUS LiNX erbjuder ett brett utbud av olika tillval och tillbehör. Du kan välja mellan olika varianter av sitstilt och ryggvinkel, stort urval av sitsar och ryggar samt många tillbehör för att optimera individanpassningen. Mer information finner du i vår WEB-guide/shop där du kan bygga din egen stol shop.mercado.se eller kontakta oss.

Vi är stolta över att kunna erbjuda Dynamic Controls breda utbud av elektroniska tillbehör till LiNX styrsystem för en ännu bättre individuell anpassning. Mer information finns på dynamiccontrols.com



SITTPLATTA
Olika storlekar
& material.




SITSTILT
(-15° till +23°)
Gas, vev eller
elektrisk.



**RYGGPLATTA
& MEKANISM**
Välj önskad
utförning.



**SITTHÖJD
ELEKTRISK**
Hög, låg eller
Extra låg.

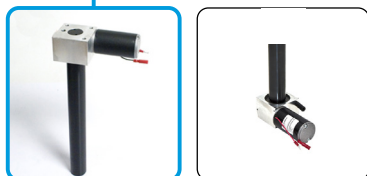


**MANÖVER-
BOXAR**
Olika typer av
elektronik.





CHASSI
570x795 mm.



KLÄDSEL
Välj plysch, väv,
eller konstläder.

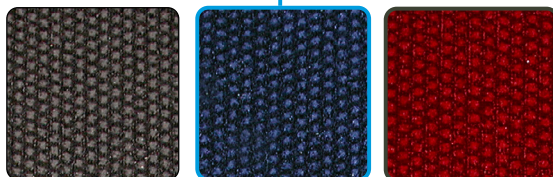

TILLBEHÖR
Valfrihet i ett
stort utbud.

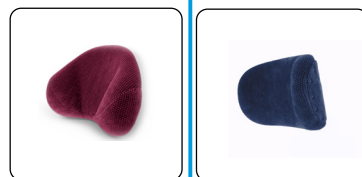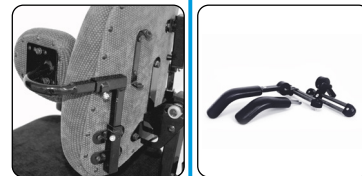

=



*Ett system där dina **behov**
bestämmer utförandet*

Fördelar med LiNX styrsystem

- LiNX manöverbox är lättöverskådlig och användarvänlig
- LiNX ett utbyggbart modulsystem
- LiNX är kompatibelt med externa leverantörers manöverenheter
- LiNX har ett inbyggt gyro i systemet för ökad säkerhet och en bättre körupplevelse
- LiNX interna loggsystem sparar historiken i kronologisk ordning
- Köregenskaperna kan trådlöst anpassas i realtid under körning – förenklar även service
- Samma powermodul oavsett konfiguration och komplexitet
- Automatisk avläsning och kompensering av drivmotorer för bättre körupplevelse



TEKNISKA DATA

Max brukarvikt	135 kg
Maxhastighet	4,5 km/h
Vändutrymme 180°	870 mm
Drivhjul	båda mitthjulen
Körsträcka per laddning	ca 15 km
Hindertagningsförmåga	40 mm
Vikt	76 kg inkl. batteri
Laddningstid	ca 6-8 tim.
Laddare provade och godkända av Mercado Medic AB	ECB-401 Easy Buddy 4A
Batterier provade och godkända av Mercado Medic AB	FGS, FGG22805, 2 st 12V 28 Ah

PROGRAMMERINGSALTERNATIV

Val av olika programmeringsfunktioner:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| • Hastighet framåt | • Svänghastighet |
| • Acceleration framåt | • Svängacceleration |
| • Bromssträcka framåt | • Svänginbromsning |
| • Hastighet bakåt | • Känslighet i joystick |
| • Acceleration bakåt | • Användning av extern joystick |
| • Bromssträcka bakåt | • Omvänd funktion för joystick |

STANDARDMÅTT

Totalbredd	570 mm
Längd	795 mm
Hjul fram/bak	Ø 125 mm
Drivhjul	Ø 210 mm
Sitthöjd	460-740 mm*, 380-580 mm*, 330-480 mm
Benstödslängd	370-530 mm
Sittbredd	290-480 mm
Sittdjup	320-530 mm
Sitslutning	-15° +8°, -8° +15°, 0° +23°
Ryggstödhöjd	330-430 mm
Ryggstödslutning	-15° +45°

* Möjlighet att justera ned steglöst max 3 cm. Mätt utan sitstilt från golv till underkant sits med sits i planläge.
Med sitstilt +1 cm. Med sitstilt "allvinkelsittkryss" + 2 cm.



**HOS MERCADO SKRÄDDARSYS
STOLEN EFTER JUST DINA UNIKA
BEHOV. GÅ TILL VÅR WEBGUIDE**
OCH BYGG DIN EGEN STOL!**

****shop.mercado.se**



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel + 46 8 555 143 00
Fax + 46 8 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se