



ECN - Tekniskt ändringsmeddelande

ECN-S10047

Datum: 2025-01-13


Utfärdare: Ronny fogelqvist

Sida 1 av 2

NYTT REGLAGE FÖR FÄLLBARA ARMSTÖD

Information om ändringar i Mercado Medics produkter eller tjänster.

ECR(s): S10047

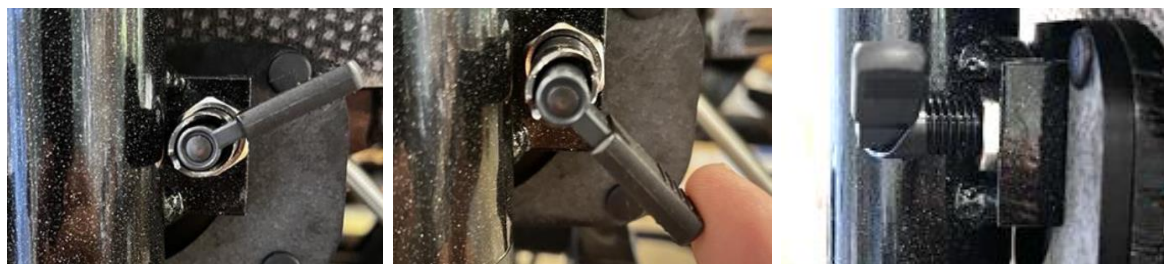

Sammanfattning

Vridknoppen på de fällbara armstöden kommer att bytas ut till en ny variant av Låsmekanism med vred.

Artikelnummer som påverkas

Utgående artiklar

ARM3011	ArmstödsmeK Fällbara 32 cm Höger
ARM3012	ArmstödsmeK Fällbara 32 cm Vänster
ARM3111	ArmstödsmeK Fällbara 38 cm Höger
ARM3112	ArmstödsmeK Fällbara 38 cm Vänster
ARM4011	ArmstödsmeK Fällbara Hemiplegi 32 cm Höger
ARM4012	ArmstödsmeK Fällbara Hemiplegi 32 cm Vänster
ARM4111	ArmstödsmeK Fällbara Hemiplegi 40 cm Höger
ARM4112	ArmstödsmeK Fällbara Hemiplegi 40 cm Vänster
600134	Vridknopp armst.fälln.6100 kpl

Nya artiklar

805667 Inställningsbult med vred kpl

Bakgrund

Den nuvarande vridknoppen kräver mycket kraft av brukaren att frikoppla för att kunna fälla armstödmekanismen, Den sticker utanför armstödsmechanismen och riskerar att stöta emot eller dra med sig detaljer i sin omgivning vid körning,

Detaljer kring ändringen

Den nya inställningsbulten 805667 kräver mindre kraft, då den trycks nedåt vid fällning av armstödet. Den riskerar inte heller att slå i eller dra med sig detaljer i sin omgivning vid körning, då den har lägre inbyggnadsmått,

Planerad tidpunkt för införande

Den nya inställningsbulten 805667 kommer att införas senast i februari 2025. Den utgående Vridknoppen (600134) kommer att kunna beställas som reservdel så länge lagret räcker.

Kompatibilitet

Kompatibiliteten påverkas inte på något vis i och med ändringen. Den nya inställningsbulten 805667 passar på alla tidigare och nuvarande fällbara armstöd. Artikelnummer på Armstödsmechanismerna kommer att inte att ändras.

Påverkan på kända risker

Minskad risk att slå i eller dra med sig detaljer i sin omgivning, levereras som standard utan upplåst läge, men går att justera i gången för att erhålla denna funktion.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter:

+46 708 27 96 14

ronny.fogelqvist@mercado.se





ECN - Engineering Change Notice

ECN-S10047

Date: 2025-01-21

Issued by: Ronny Fogelqvist

Page 1 of 2

NEW LATCH FOR FOLDABLE ARMRESTS

Information about changes in Mercado Medic's products or services.

ECR(s): S10047



Summary

The knob on the foldable armrests will be replaced with a new type of locking mechanism with a handle.

Affected article numbers

Discontinued Articles

ARM3011	Foldable Armrest Mechanism, 32 cm, Right
ARM3012	Foldable Armrest Mechanism, 32 cm, Left
ARM3111	Foldable Armrest Mechanism, 38 cm, Right
ARM3112	Foldable Armrest Mechanism, 38 cm, Left
ARM4011	Foldable Hemiplegic Armrest Mechanism, 32 cm, Right
ARM4012	Foldable Hemiplegic Armrest Mechanism, 32 cm, Left
ARM4111	Foldable Hemiplegic Armrest Mechanism, 40 cm, Right
ARM4112	Foldable Hemiplegic Armrest Mechanism, 40 cm, Left
600134	Adjustment Knob for Foldable Armrest 6100 (complete)

New Article

805667 Adjustment Bolt with Handle (complete)

Background

The current knob requires significant effort from the user to fold the armrest mechanism. In addition, it protrudes from the mechanism, increasing the risk of hitting or dragging objects in the surrounding environment while driving.

Description of the change

The new adjustment bolt (805667) requires less effort as it is pressed downward to fold the armrest. Its lower profile minimizes the risk of hitting or dragging objects while driving.

Estimated time for implementation

The new adjustment bolt (805667) will be introduced in February 2025 at the latest. The discontinued knob (600134) will remain available as a spare part while supplies last.

Compatibility

The change does not affect compatibility. The new adjustment bolt (805667) fits all previous and current foldable armrest mechanisms. The article numbers for the armrest mechanisms will remain unchanged.

Safety information

Reduced risk of hitting or dragging surrounding objects.

Supplied as standard without an unlocked position but can be adjusted in the thread to enable this function if desired

Questions

If you have any questions, please contact our Product Manager Ronny Fogelqvist.

Contact Information:

+46 708 27 96 14

ronny.fogelqvist@mercado.se

