



ECN - Tekniskt ändringsmeddelande

ECN-S11063

Datum: 2025-09-24


Utfärdare: Fredrik Nyblom

Sida 1 av 2

UPPDATERADE BROMSBEN FÖR REAL 9200 TWIN

Information om ändringar i Mercado Medics produkter eller tjänster.

ECR(s): S11063

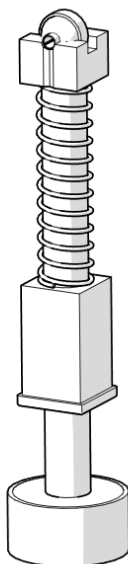

Sammanfattning

Samtliga nylevererade REAL 9200 TWIN kommer levereras med uppdaterade bromsben. Uppdateringen innefattar att själva bromsfoten uppdaterats med en vibrationdämpare för förbättrad bromsförmåga.

Artikelnummer som påverkas

805713	Bromsben REAL9200 komplett för 100 mm hjul m bromsfot 40x20mm
805714	Bromsben REAL9200 komplett för 125 mm hjul m bromsfot 40x20mm
805715	Bromsben REAL9200 komplett för 150 mm hjul m bromsfot 40x20mm
805719	Bromsfot Diam 40x20mm

Utöver dessa påverkas samtliga konfigurationer av REAL 9200 TWIN stolar vi säljer. Önskas det gamla bromsbenet, 801017, går det fortfarande att köpa.

Bakgrund

Bromsfoten som används historiskt har vid ett fåtal tillfällen inte fungerat helt tillfredställande på REAL 9200 TWIN, då främst vid väldigt höga brukarvikter. Vid dessa tillfällen har en speciallösning producerats.

Detaljer kring ändringen

Denna speciallösning har vi nu valt att implementerat som standard. I praktiken har vi bytt standard bromsfoten mot en vibrationsdämpare. För att lösa detta har bromsbenet ändrats till att ha en gänga i änden istället för en platt yta.

Planerad tidpunkt för införande

2025-11-01

Kompatibilitet

Så länge hela bromsinsatsen byts så är allt kompatibelt. Dock går det inte att montera vibrationsdämparen på ett gammalt bromsben.

Påverkan på kända risker

Nya lösningen säkrar bromsverkan över längre tid än den tidigare lösningen.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter:

+46 708 27 96 14

ronny.fogelqvist@mercado.se



ECN - Engineering Change Notice

ECN-S11063

Date: 2025-09-24


Issued by: Fredrik Nyblom

Page 1 of 2

UPDATED BRAKE LEGS FOR REAL 9200 TWIN

Information about changes in Mercado Medic's products or services.

ECR(s): S11063

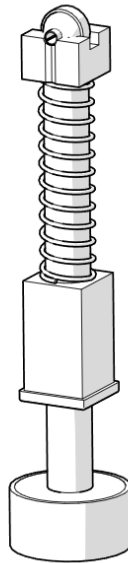

Summary

All newly delivered REAL 9200 TWIN models now will come equipped with upgraded brake legs. The upgrade features a redesigned brake foot with a vibration damper, providing improved braking performance.

Affected article numbers

805713	Brake leg REAL 9200 CPL For 100 mm wheels w. rubber foot 40x20m
805714	Brake leg REAL 9200 CPL For 125 mm wheels w. rubber foot 40x20m
805715	Brake leg REAL 9200 CPL For 150 mm wheels w. rubber foot 40x20m
805719	Brake rubber 40x20mm

In addition, all configurations of the REAL 9200 TWIN we sell is also effected. The old brake leg, 801017, can still be purchased.

Background

The brake foot that has historically been used has, on a few occasions, not functioned entirely satisfactorily on the REAL 9200 TWIN, primarily under very high user weights. In such cases, a custom made has been produced.

Description of the change

We have now chosen to implement this custom-made solution as standard. In practice, we have replaced the standard brake foot with a vibration damper. To achieve this, the brake legs has been modified to feature a threaded end instead of a flat surface.

Estimated time for implementation

2025-11-01

Compatibility

As long as you change the whole brake kit it is compatible. Although you can 't fit old brake legs with the new vibration damper

Safety information

The new solution improves the brake performance over a longer period of time compared to the current solution.

Questions

If you have any questions, please contact our Product Manager Ronny Fogelqvist.

Contact Information:

+46 708 27 96 14

ronny.fogelqvist@mercado.se

